

# neno<sup>®</sup> beauty

## ALGO

ZAAWANSOWANE URZĄDZENIE  
WSPOMAGAJĄCE STYMULACJĘ MIĘŚNI  
DLA NATURALNEGO EFEKTU UJĘDRNIANIA  
I KONTUROWANIA TWARZY  
Z TECHNOLOGIĄ EMS I RF

*Exclusive Series*



technologia EMS & RF

*Exclusive Series*



# *Poznaj serię Neno Beauty*

Odkryj serię do twarzy od Neno Beauty – stworzoną, by wspierać Twoją codzienną pielęgnację. Bez wychodzenia z domu możesz cieszyć się profesjonalną troską o skórę, która każdego dnia odzyskuje blask i świeżość. Z Neno Beauty odkrywasz piękno, które od zawsze jest w Tobie.



*Exclusive Series*





2 głowice masujące



Funkcja pamięci



Tryb EMS




2 długości fal światła



Tryb EMS+RF



3 programy

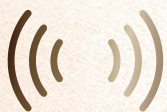

Tryb RF



Timer



Exclusive Series



# Poznaj Neno Beauty Algo

Neno Beauty Algo to zaawansowane urządzenie do domowej pielęgnacji, które łączy w sobie nowoczesne technologie EMS i RF, wibracje soniczne, światło LED oraz precyzyjnie zaprojektowane końcówki masujące. Jego celem jest naturalne ujędrnianie i modelowanie konturów twarzy, a także wspieranie procesów regeneracyjnych skóry.



Diaamentowe głowice  
masujące

Automatyczny 6-minutowy timer  
oraz powiadomienie o zmianie  
obszaru masażu co 3 minuty

3 tryby: EMS, RF oraz  
EMS+RF, dodatkowo każdy  
tryb posiada dwa poziomy  
intensywności

Technologia RF (Radio Frequen-  
cy) – pobudza produkcję  
kolagenu, ujędrniając  
i zagęszczając strukturę skóry.

Funkcja pamięci

Elektryczna Stymulacja Mięśni:  
stymuluje mięśnie twarzy,  
poprawiając ich napięcie  
i sprężystość skóry

Płaska głowica z ośmioma  
punktami masującymi

Wibracje soniczne –  
stymulują mikrokrążenie  
i poprawiają jędrność skóry

Dwie precyzyjne długości  
fal świetlnych:  
Światło czerwone (630 nm),  
Światło żółte (590 nm)

Magnetyczna  
pokrywka

Exclusive Series





## *Twoja pielęgnacja, twój rytuał*

Do wyboru masz trzy tryby pracy – EMS, RF z żółtym światłem LED oraz EMS+RF z czerwonym światłem LED – dzięki którym z łatwością dopasujesz pielęgnację do potrzeb swojej skóry i oczekiwanych efektów. Ponadto każdy tryb oferuje dwa poziomy intensywności. Urządzenie wyposażono w dwie końcówki: diamentowe główce masujące oraz główkę z ośmioma punktami masującymi, dzięki czemu pielęgnacja pozostaje w pełni dopasowana do potrzeb skóry.

*Exclusive Series*





## ***Technologia EMS***

Neno Beauty Algo wykorzystuje technologię EMS (Elektrostymulacja mięśni), która za pomocą delikatnych impulsów elektrycznych pobudza mięśnie twarzy do krótkich, kontrolowanych skurczów. Taka stymulacja działa jak subtelny trening dla mięśni – pomaga utrzymać ich naturalne napięcie i wspiera sprężysty, młodszy wygląd skóry. Podczas zabiegu można odczuwać lekkie mrowienie, a dwa poziomy intensywności umożliwiają dopasowanie działania urządzenia do indywidualnych potrzeb i odczuć. Regularne, krótkie sesje zapewniają najlepsze rezultaty – ich efekt zależy od systematyczności oraz indywidualnych predyspozycji.


*Exclusive Series*



A woman with dark hair and a white lab coat is holding a white and gold RF device against her cheek. The device has a gold-colored tip and a silver base.

## *Technologia RF*

Technologia RF w Neno Beauty Algo wykorzystuje fale radiowe o częstotliwości 4 MHz, które przenikając w głąb skóry, generując delikatne ciepło. Dzięki temu pobudzane są naturalne procesy regeneracji oraz produkcja kolagenu i elastyny – białek kluczowych dla jędrności i elastyczności skóry. Zabieg nie narusza powierzchni naskórka i jest odczuwalny jako przyjemne, równomierne ogrzanie, zapewniające komfort podczas całej sesji.

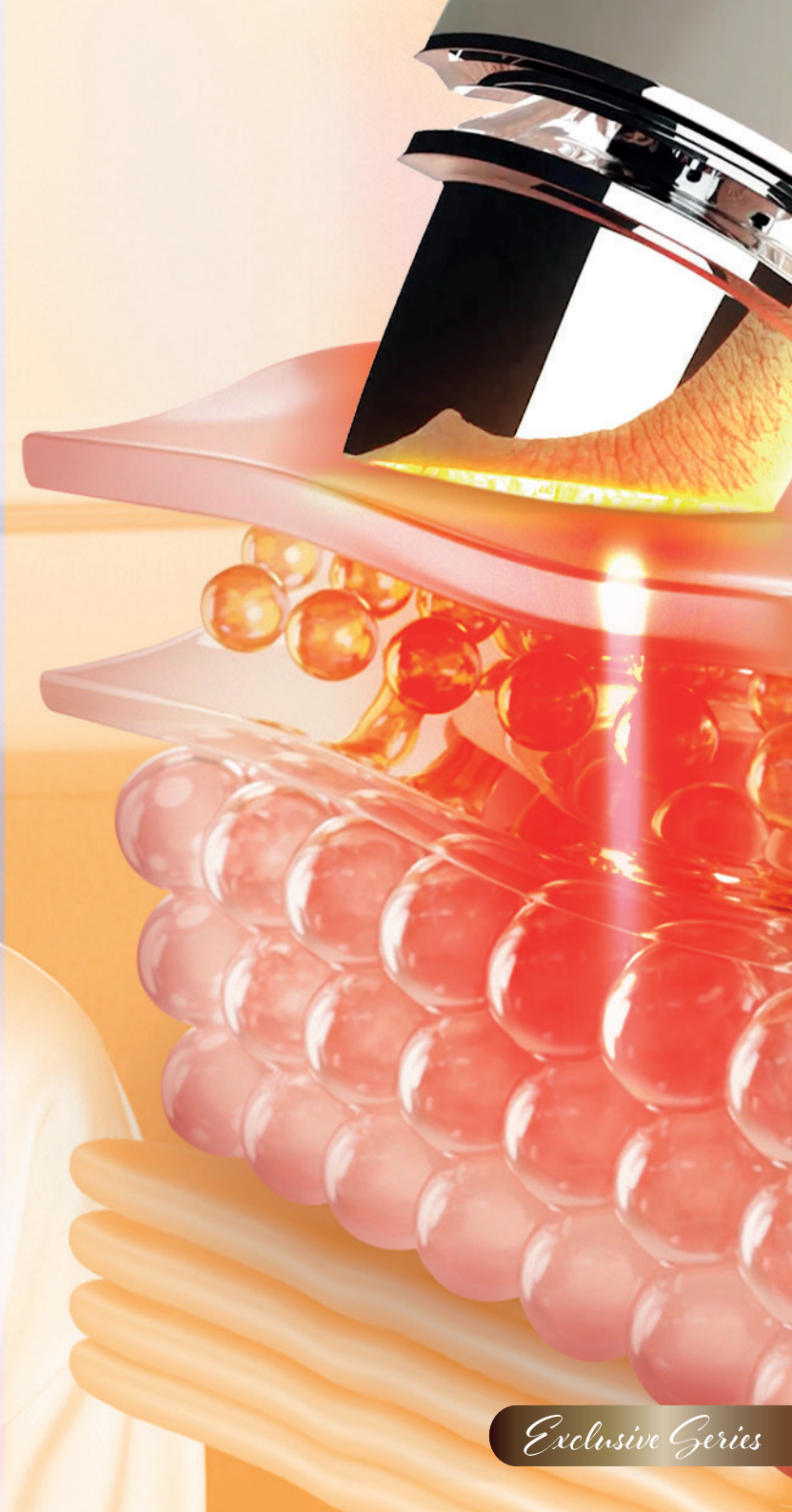


*Exclusive Series*



# Terapia światłem LED

Neno Beauty Algo wykorzystuje precyzyjnie dobrane długości fal światła LED. Czerwone światło LED (630 nm) wspiera naturalną regenerację skóry, sprawiając, że staje się bardziej jędrna i elastyczna, natomiast żółte światło LED (590 nm) działa kojąco, pomaga wyrównać koloryt i nadaje jej świeży, promienny wygląd.

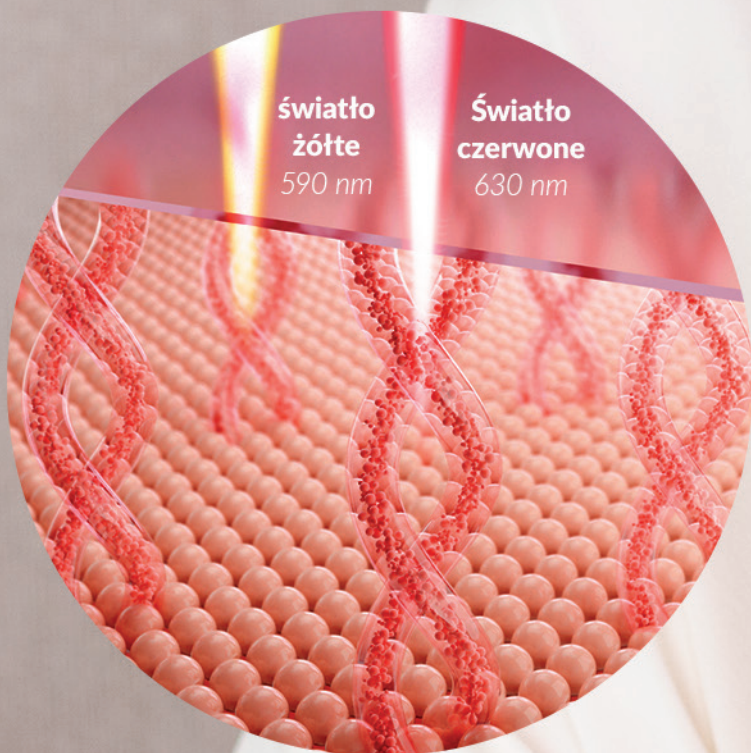

*Exclusive Series*



# *Dwie długości fal światła*

**590 nm**

ŚWIATŁO ŻÓŁTE

**Światło żółte o długości fali 590 nm** działa kojąco, pomaga wyrównać koloryt i nadaje skórze świeży, promienny wygląd.

**630 nm**

ŚWIATŁO CZERWONE

**Światło czerwone o długości fali 630 nm** pobudza mikrokrążenie, wspiera wyrównanie kolorytu skóry i redukcję przebarwień, a także działa kojąco oraz wyciszająco na cerę.





## *Dwie głowice masujące*

Urządzenie zostało wyposażone w dwie różne końcówki, które pozwalają dopasować sposób pielęgnacji do potrzeb skóry. Z jednej strony Neno Beauty Algo posiada diamentowe głowice masujące, a z drugiej – płaską końcówkę z ośmioma punktami masującymi.

Diamentowe głowice masujące płynnie pracują wzdłuż linii żuchwy i policzków. W połączeniu z działaniem trybu EMS delikatnie stymulują mięśnie twarzy, pomagając podkreślić owal i zarys V-konturu – dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Płaska głowica z ośmioma punktami masującymi emituje czerwone i żółte światło LED oraz wykorzystuje vibracje soniczne stymulujące mikrokrążenie i poprawiające jędrność skóry.

Dla wygodnej, zróżnicowanej rutyny pielęgnacyjnej stosuj końcówki naprzemiennie. Dzięki temu pielęgnacja z Neno Beauty Algo pozostaje elastyczna i dopasowana do Twoich preferencji.



*Exclusive Series*




# ***Tryb z technologią EMS i diamentowymi głowicami***

Pierwszy tryb łączy technologię EMS z masażem diamentowych głowic, oferując skuteczny sposób na jędrniejszą i lepiej wymodelowaną twarz. Subtelne impulsy w połączeniu z masażem mechanicznym wzmacniają napięcie mięśni, podkreślają naturalny kontur i dodają skórze sprężystości.



*Exclusive Series*



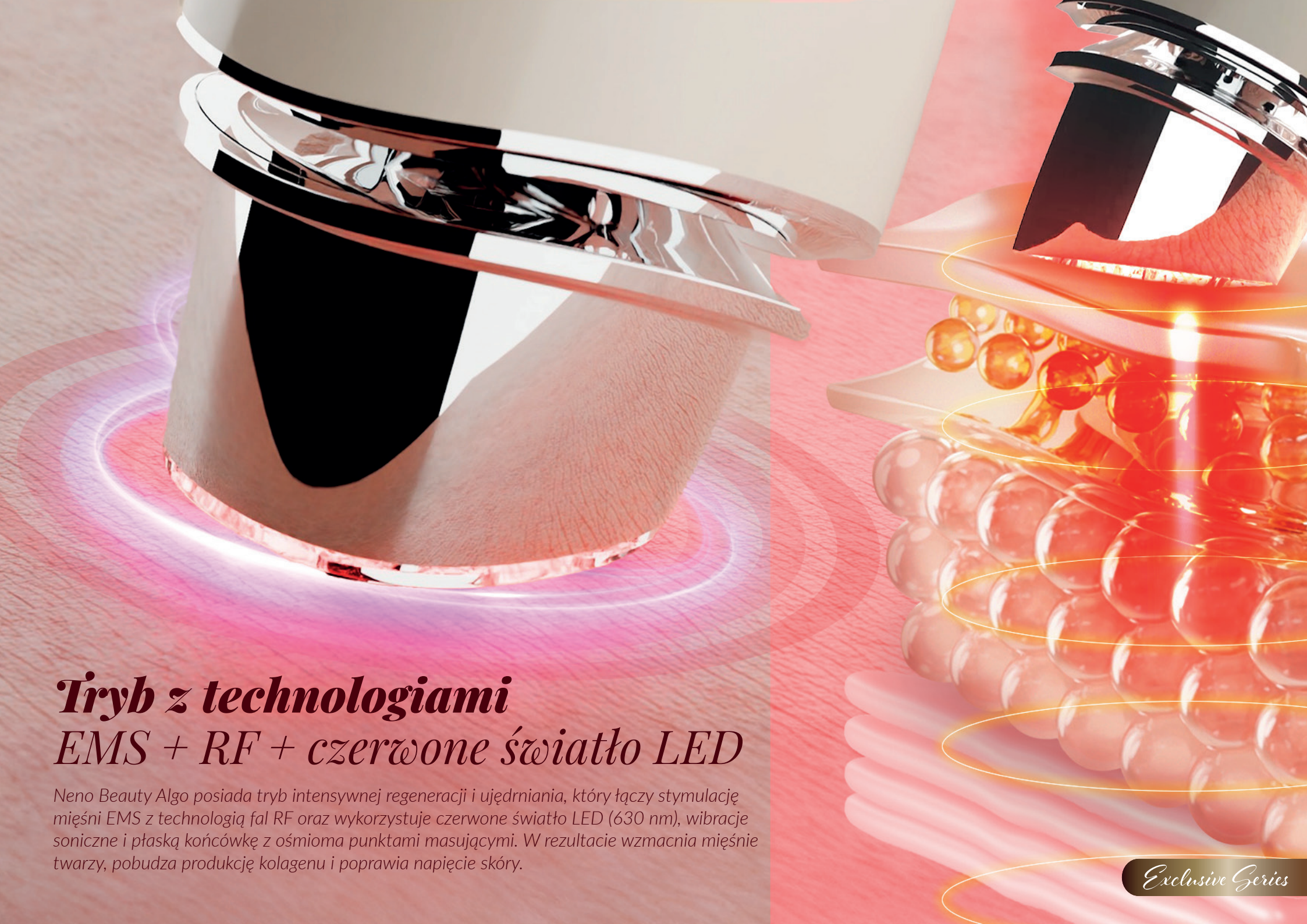

## ***Tryb z technologiami EMS + RF + czerwone światło LED***

Neno Beauty Algo posiada tryb intensywnej regeneracji i ujędrniania, który łączy stymulację mięśni EMS z technologią fal RF oraz wykorzystuje czerwone światło LED (630 nm), wibracje soniczne i płaską końcówkę z ośmioma punktami masującymi. W rezultacie wzmacnia mięśnie twarzy, pobudza produkcję kolagenu i poprawia napięcie skóry.

*Exclusive Series*





## *Tryb z technologią RF + żółte światło LED*

W ostatnim trybie fale radiowe (RF) współdziałają z żółtym światłem LED (590 nm), wibracjami sonicznymi i płaską końcówką z ośmioma punktami masującymi. Efektem jest rozświetlenie i rewitalizacja, przy jednoczesnym pobudzeniu produkcji kolagenu; ciepło sprzyja regeneracji komórek, co pomaga ujędrnić skórę i zagęścić jej strukturę.

*Exclusive Series*



# Kierunek masażu

Korzystając z Neno Beauty Algo, prowadź głowicę od środka twarzy na zewnątrz i delikatnie ku górze według zaznaczonych na grafice linii. Dla uzyskania optymalnych efektów oraz zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa zalecamy stosowanie urządzenia wyłącznie z żelem przewodzącym odpowiednim do technologii RF i EMS lub z lekkim, beztłuszczowym kosmetykiem do pielęgnacji twarzy. Pamiętaj, aby nigdy nie używać urządzenia na suchej skórze – może to prowadzić do nieprzyjemnych doznań, podrażnień oraz zmniejszyć skuteczność zabiegu.



Exclusive Series



## ***Funkcja pamięci***

Nie musisz za każdym razem wybierać ustawień od nowa. Neno Beauty Algo posiada funkcję pamięci, dzięki której urządzenie automatycznie uruchamia się z Twoimi ulubionymi parametrami. Wystarczy jedno włączenie, aby od razu cieszyć się komfortową pielęgnacją dopasowaną do Ciebie.



*Exclusive Series*



# Timer

Lubisz całkowicie się zrelaksować podczas pielęgnacji? Wbudowany w Neno Beauty Algo timer prowadzi zabieg za Ciebie: po trzech minutach delikatny sygnał przypomina o zmianie strony twarzy, a po sześciu minutach informuje o zakończeniu sesji. Dzięki temu z Neno Beauty Algo pielęgnacja jest równomierna i bez wysiłku.

6 min



Exclusive Series



# Wskazówki bezpieczeństwa i higieny

- **Stosuj głowice naprzemiennie** – zaleca się, aby jednego dnia korzystać z masażu z diamentowymi głowicami, a innego dnia z zabiegu z płaską końcówką. Choć wykonanie tego samego trybu po sobie nie jest szkodliwe, regularne powtarzanie takiej praktyki kilka razy w tygodniu może prowadzić do podrażnień.
- **Zachowaj higienę** – po każdym użyciu oczyścić urządzenie, przecierając je suchą lub delikatnie zwilżoną ciepłą wodą z odrobiną łagodnego mydła ściereczką. W celu dezynfekcji przetrzyj głowice chusteczką nasączoną płynem na bazie alkoholu izopropylowego (do 70% stężenia). Unikaj agresywnych detergentów, wybielaczy i zanurzania urządzenia w wodzie.
- **Bezwzględnie unikaj stosowania na implantach** – unikaj stosowania urządzenia, jeśli posiadasz jakiegokolwiek implanty elektroniczne (np. rozrusznik serca, pompa insulinowa) lub metalowe implanty w obrębie głowy i szyi (w tym implanty stomatologiczne, mosty, korony, aparaty ortodontyczne, metalowe implanty słuchowe).
- **Omijaj wrażliwe obszary** – unikaj stosowania głowic masujących bezpośrednio pod oczami, na powiekach oraz na szyi w rejonie tarczycy. W okolicy oczu, nosa oraz ust używaj zawsze najniższego poziomu intensywności



- **Regularność z umiarem** – najlepsze efekty przynosi systematyczna pielęgnacja 2-4 razy w tygodniu (przez 6 minut), z zachowaniem przerw i różnorodności trybów.
- **Urządzenie jest bezwzględnie przeciwwskazane w okresie ciąży i laktacji.**
- **Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi.**



*Exclusive Series*



## *Akcesoria w zestawie*

W eleganckim komplecie znajdziesz: ochronne osłonki na obie głowice masujące, woreczek do przechowywania oraz ściereczkę z mikrofibry. Dzięki nim pielęgnacja z Neno Beauty Algo jest nie tylko skuteczna, ale też higieniczna i bezpieczna.

**neno**<sup>®</sup>  
beauty

*Exclusive Series*



# нено<sup>®</sup> beauty

## ALGO

### DANE TECHNICZNE

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:             | Neno Beauty Algo                                                                               |
| Zasilanie:         | 5V 0.75A                                                                                       |
| Moc:               | 12W                                                                                            |
| Bateria:           | 1200 mAh                                                                                       |
| Timer:             | 6 min                                                                                          |
| Materiał:          | ABS+PC+PP+stop cynkowy                                                                         |
| Wymiary:           | 54.5×45.3×190 mm                                                                               |
| Kod EAN:           | 5902479677187                                                                                  |
| Wymiary pudełka:   | 148×245×60 mm                                                                                  |
| Waga pudełka:      | 0.605 kg                                                                                       |
| PN:                | NEN-DOM-PI004                                                                                  |
| Zawartość zestawu: | masażer, woreczek do przechowywania, ściereczka z mikrofibry, kabel typu-C, instrukcja obsługi |
| Kontakt:           | Tel.: 731 594 301; mail: <a href="mailto:info@nenopl">info@nenopl</a>                          |
| Producent:         | KGK Trend sp. z o.o.<br>ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków                                          |



NAGRODY DLA  
FIRMY KGK TREND  
Właściciela marki Neno:



Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy, wsparcia albo masz pytania do ekspertów, zadzwoń lub napisz bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta Neno. Infolinia: 731 594 301, mail: [info@nenopl](mailto:info@nenopl)