

neno[®]
beauty

AURI
MASAŻER LIFTINGUJĄCY
DO TWARZY I SZYI
5W1

Exclusive Series



Exclusive Series

Odkryj serię do twarzy Neno Beauty

Linia do twarzy Neno Beauty została zaprojektowana z myślą o regularnej, domowej pielęgnacji, dzięki której Twoja skóra zyskuje świeży, wypoczęty wygląd, podkreślając Twoje naturalne piękno.




Exclusive Series




EMS



Masasaż wibracyjny

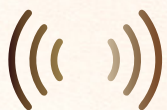

RF

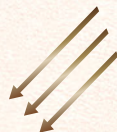

Czerwone światło LED
620 nm



Tryb rozświetlający



Tryb przeciwstarzeniowy



Gua sha



Timer



Exclusive Series

5w1

Postaw na Neno Beauty Auri – elegancki masażer łączący wibracje soniczne, czerwone światło LED oraz technologie EMS i RF. Ergonomiczna głowica w kształcie Gua Sha dopasowuje się do konturów twarzy i szyi, a połączenie wielu technologii wspiera komfortową, codzienną pielęgnację. Intuicyjna obsługa i poręczna forma sprawiają, że to prosty sposób na chwilę relaksu dla skóry w domu.

Ergonomiczna głowica masująca w kształcie Gua Sha

Kształt głowicy jest dopasowany do konturów twarzy i szyi



EMS (Electrical Muscle Stimulation)

Stymuluje mięśnie twarzy, poprawiając ich napięcie i sprężystość skóry

Technologia RF (Radio Frequency)

Pobudza produkcję kolagenu, ujędrniając i zagęszczając strukturę skóry

Czerwone światło LED

Wspomaga odbudowę struktury skóry, poprawia jej elastyczność oraz pomaga zmniejszyć widoczność drobnych przebarwień


Wibracje soniczne

Stymulują mikrokrążenie i poprawiają jędrność skóry

Exclusive Series

2 tryby:

1. Anti-aging (przeciwstarzeniowy) - połączenie technologii RF i wibracji sonicznych.
2. Brighten (rozświetlający) - połączenie technologii RF, EMS, czerwonego światła LED i wibracji sonicznych.

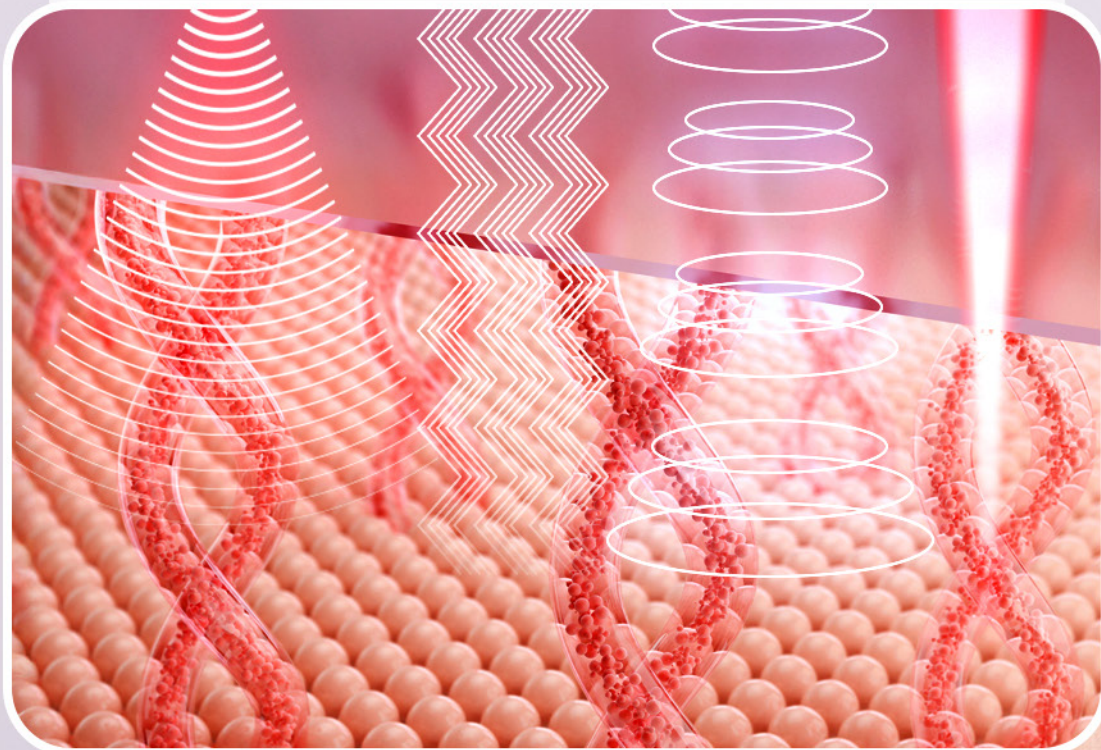

Każdy tryb oferuje dwa poziomy intensywności, co pozwala dopasować działanie do wrażliwości skóry i aktualnych potrzeb. Wyższy poziom oznacza silniejsze doznania – jeśli okażą się zbyt intensywne, wystarczy przesuwać głowicę szybciej, dodać odrobinę żelu lub zrobić krótką przerwę. Ergonomiczna głowica w kształcie Gua Sha idealnie dopasowuje się do konturów twarzy i szyi, zapewniając precyzyjny i komfortowy masaż.



Exclusive Series

A close-up photograph of a woman's face, her eyes closed in a relaxed state. She is holding a light-colored, handheld EMS device against her right cheek. The device has a curved shape and a small 'neno beauty' logo. Overlaid on her cheek are several concentric, glowing pink circles, suggesting the area of treatment or the effect of the technology. The background is softly blurred, showing a hint of a window with blinds.

Technologia EMS

Neno Beauty Auri wykorzystuje technologię EMS (elektrostymulację mięśni), która działa niczym subtelny trening twarzy. Delikatne mikroimpulsy pobudzają mięśnie do pracy, przywracając im sprężystość i poprawiając jędrność skóry. Efektem jest świeższy, bardziej promienny wygląd cery. W trakcie zabiegu możesz poczuć lekkie mrowienie – to naturalna reakcja skóry na impulsy EMS. Dzięki dwóm poziomom mocy łatwo dopasujesz intensywność do własnych potrzeb. Regularne, krótkie sesje zapewniają najlepsze rezultaty – ich efekt zależy od systematyczności oraz indywidualnych predyspozycji.

Exclusive Series



Technologia RF

W Neno Beauty Auri zastosowano radiofrekwencję o częstotliwości 1 MHz. Fale przenoszą energię w głąb skóry, gdzie powstaje subtelny efekt termiczny. Dzięki temu aktywują się procesy regeneracyjne oraz struktury odpowiedzialne za jędrność i elastyczność skóry, przy zachowaniu nienaruszonej powierzchni. Zabieg odczuwany jest jako równomierne, przyjemne ciepło.

Exclusive Series



Wibracje soniczne

Wibracje soniczne w Neno Beauty Auri to delikatne pulsacje wywołujące subtelne drgania, które poprawiają mikrokrążenie i rozluźniają napięte obszary. Masaż soniczny wspiera naturalną regenerację skóry, nadając cerze wypoczęty wygląd i zdrowy blask, a także zapewnia uczucie natychmiastowej ulgi.



Exclusive Series

Czerwone światło LED

Czerwone światło LED (620 nm) wspiera naturalne procesy regeneracyjne skóry. Regularnie stosowane może pomóc zmniejszyć widoczność drobnych przebarwień i przywrócić skórze zdrowszy, bardziej promienny wygląd – subtelnie podkreślając świeżość i jednolity kolor.



Exclusive Series

Ergonomiczna głowica w kształcie Gua Sha


Neno Beauty Auri inspirowane jest tradycyjnym narzędziem Gua Sha, od wieków obecnym w rytuałach pielęgnacyjnych Dalekiego Wschodu. Ergonomiczna głowica idealnie dopasowuje się do naturalnych konturów twarzy i szyi, umożliwiając precyzyjny, a jednocześnie niezwykle komfortowy masaż. Starannie zaprojektowany kształt ułatwia utrzymanie stabilnego docisku, poprawia krążenie, wspiera drenaż limfatyczny i rozluźnia napięte mięśnie, sprawiając, że codzienna pielęgnacja staje się jeszcze skuteczniejsza i bardziej relaksująca.



Exclusive Series

Tryb przeciwstarzeniowy Anti-aging

Pierwszy tryb wykorzystuje RF, czyli radiofrekwencję w połączeniu z wibracjami sonicznymi. Masaż wywołuje subtelne i komfortowe uczucie ciepła na skórze – to naturalny efekt fal radiowych, wspierających jej odnowę, poprawiających elastyczność i przywracających jędrność. Regularne stosowanie pomaga wygładzić drobne linie i poprawić ogólną kondycję cery.

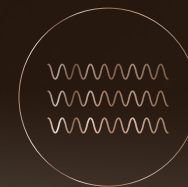

Wibracje soniczne



RF



Exclusive Series

Tryb rozświetlający Brighten

Drugi tryb łączy EMS, RF, czerwone światło LED 620 nm oraz wibracje soniczne. Impulsy EMS aktywują mięśnie mimiczne, poprawiając napięcie, czemu towarzyszy lekkie mrowienie. Czerwone światło LED wspiera naturalne procesy regeneracyjne, a fale radiowe wraz z wibracjami pobudzają produkcję kolagenu oraz ujędrniają skórę.



EMS



RF



Wibracje soniczne




Red LED



Exclusive Series

Kierunek masażu

Korzystając z Neno Beauty Auri, prowadź głowicę od środka twarzy na zewnątrz i delikatnie ku górze według zaznaczonych na grafice linii. Dla uzyskania optymalnych efektów oraz zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa zalecamy stosowanie urządzenia wyłącznie z żelę przewodzącym odpowiednim do technologii RF i EMS lub z lekkim, beztłuszczowym kosmetykiem do pielęgnacji twarzy. Pamiętaj, aby nigdy nie używać urządzenia na suchej skórze – może to prowadzić do nieprzyjemnych doznań, podrażnień oraz zmniejszyć skuteczność zabiegu.

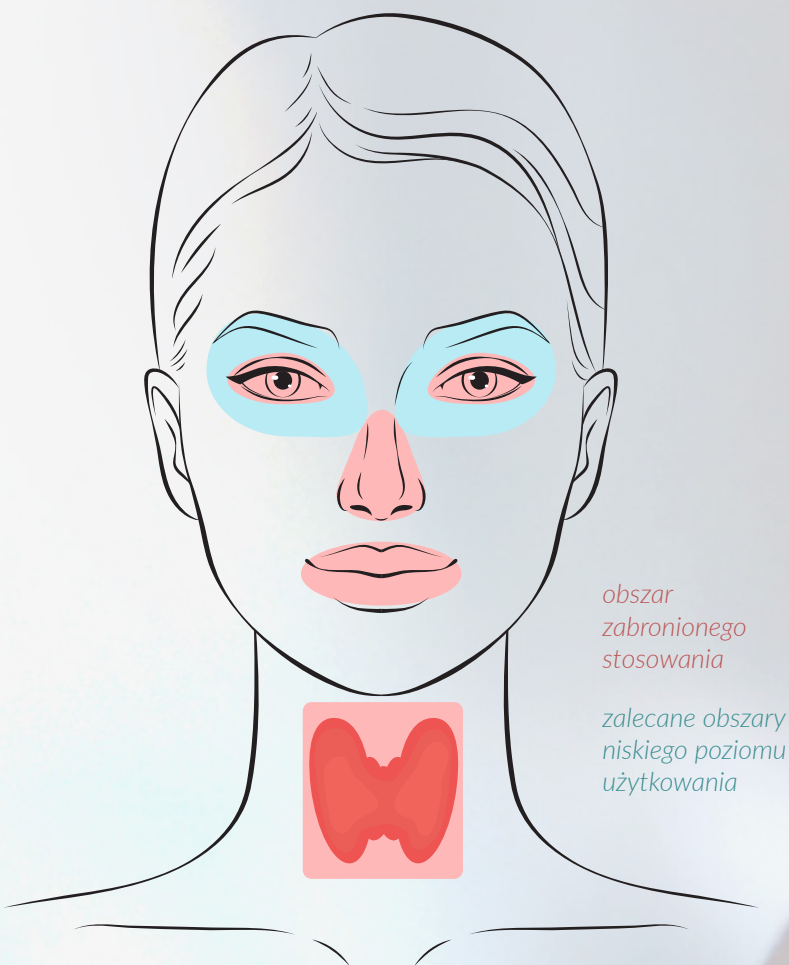

Exclusive Series



Wskazówki bezpieczeństwa i higieny

Zachowaj higienę:

Po każdym użyciu oczyść urządzenie, przecierając je suchą lub delikatnie zwilżoną ciepłą wodą z odrobiną łagodnego mydła ściereczką. W celu dezynfekcji przetrzyj głowice chusteczką nasączoną płynem na bazie alkoholu izopropylowego (do 70% stężenia). Unikaj agresywnych detergentów, wybielaczy i zanurzania urządzenia w wodzie.

Bezwzględnie unikaj:

Stosowania urządzenia jeśli posiadasz jakiegokolwiek implanty elektroniczne (np. rozrusznik serca, pompa insulinowa) lub metalowe implanty w obrębie głowy i szyi (w tym implanty stomatologiczne, mosty, korony, aparaty ortodontyczne, metalowe implanty słuchowe).

Omijaj wrażliwe obszary:

Unikaj stosowania głowic masujących bezpośrednio pod oczami, na powiekach oraz na szyi w rejonie tarczycy. W okolicy oczu, nosa oraz ust używaj zawsze najniższego poziomu intensywności.

Regularność z umiarem:

Najlepsze efekty przynosi systematyczna pielęgnacja 2–4 razy w tygodniu przez 6 minut, z zachowaniem przerw i różnorodności trybów.

Urządzenie jest bezwzględnie przeciwwskazane:

W okresie ciąży i laktacji.

Przed rozpoczęciem użytkowania:

Należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi.

Funkcja pamięci

Twoje ulubione ustawienia zawsze pod ręką
– Neno Beauty Auri zapamiętuje ostatnio
wybrane parametry, dlatego przy kolejnym
użyciu urządzenie od razu działa tak, jak
lubisz. Bez zbędnej konfiguracji, szybciej
i wygodniej.



Exclusive Series



Timer

Pozwól, aby pielęgnacja prowadziła się sama. Wbudowany timer dba o idealny rytm zabiegu: co minutę sygnał przypomina o zmianie obszaru masażu, a po sześciu minutach – informuje o zakończeniu sesji. Dzięki temu każda pielęgnacja jest równomierna, skuteczna i w pełni komfortowa.



Exclusive Series



Akcesoria w zestawie

Do Neno Beauty Auri dołączono magnetyczną pokrywę chroniącą głowicę przed kurzem i zabrudzeniami, elegancki woreczek do bezpiecznego przechowywania urządzenia między sesjami oraz miękką ściereczkę z mikrofibry, która ułatwia jego delikatne czyszczenie.

Exclusive Series

nenob[®] beauty

AURI

DANE TECHNICZNE

Model:	Neno Beauty Auri
Zasilanie:	5V 0.29A
Moc:	5W
Bateria:	500mAh
Timer:	6 min
Materiał:	ABS+TPU+PC
Wymiary:	90,4x86,4x26,4mm
Waga:	104g
Kod EAN:	5902479677200
Wymiary pudełka:	149x245x59 mm
Waga pudełka:	0,525 kg
PN:	NEN-DOM-PI006
Zawartość zestawu:	Masażer, woreczek do przechowywania, ściereczka z mikrofibry, kabel typ-C, szpilka do otwierania zaśleпки, instrukcja obsługi
Kontakt:	tel: 731 594 301; mail: info@neno.pl
Producent:	KGK Trend sp. z o.o. ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków



NAGRODY DLA
FIRMY KGK TREND

Właściciela marki Neno:



Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy, wsparcia albo masz pytania do ekspertów, zadzwoń lub napisz bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta Neno.
Infolinia: 731 594 301, [mail:info@neno.pl](mailto:info@neno.pl)