

neno[®] beauty

LUVE

WIELOZADANIOWE URZĄDZENIE
DO PIELĘGNACJI TWARZY
Z MIKROPRĄDAMI I TECHNOLOGIĄ
ODMŁADZANIA SKÓRY

Exclusive Series




Exclusive Series

Poznaj serię Neno Beauty

Neno Beauty łączy nowoczesną technologię z wygodą codziennej pielęgnacji. Urządzenia tej serii sprawiają, że dbanie o skórę staje się proste, skuteczne i dopasowane do Twojego stylu życia. Bez wizyty w salonie możesz cieszyć się efektami wyszukanych zabiegów i odkrywać naturalny blask swojej cery.




Exclusive Series

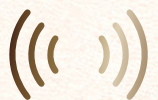

Tryb AIR SHOT



Czujnik kontaktu
ze skórą

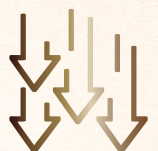

Tryb BOOSTER



5 poziomów
intensywności



Tryb MC



4 tryby



Tryb DERMA SHOT



Timer



Exclusive Series

Profesjonalna pielęgnacja w Twoim domu

AIR SHOT

Tryb z niebieskim światłem LED (460 nm), mikroimpulsami elektrycznymi i krótkofalowymi wibracjami poprawia strukturę skóry, nadaje jej świeży wygląd i wspomaga lepsze wchłanianie składników aktywnych w kolejnych etapach pielęgnacji.

BOOSTER

Tryb z żółtym światłem LED (590 nm), delikatnymi wibracjami i elektroporacją wspomaga głębokie wchłanianie składników aktywnych, zwiększając skuteczność preparatów pielęgnacyjnych, poprawia mikrokrążenie oraz zapewnia skórze intensywne nawilżenie i naturalny, promienny wygląd.

MC

Tryb z zielonym światłem LED (521 nm), wibracjami i mikroprądami stymuluje produkcję kolagenu, poprawia jędrność skóry i wygładza drobne linie oraz zmarszczki, przywracając cerze młodzieńczy wygląd.

DERMA SHOT

Tryb z czerwonym światłem LED (630 nm), wibracjami i technologią EMS intensywnie ujędrnia mięśnie twarzy, modeluje kontur i poprawia napięcie skóry – dla bardziej jędrnej i naturalnie wymodelowanej twarzy.

Neno Beauty Luve to zaawansowane urządzenie do pielęgnacji twarzy, które łączy 4 tryby pracy i 5 poziomów intensywności, dając Ci pełną kontrolę nad każdym zabiegiem. Poznaj możliwości jakie daje Ci Neno Beauty Luve:

Exclusive Series

Mikroimpulsy elektryczne

Neno Beauty Luvę wykorzystuje technologię mikroimpulsów elektrycznych, które oddziałują na skórę na poziomie komórkowym. Delikatne impulsy pobudzają mikrokrążenie, poprawiają dotlenienie tkanek i wspierają procesy regeneracyjne. Dzięki temu skóra staje się lepiej odżywiona, odzyskuje blask i zdrowy wygląd.



Exclusive Series




Elektroporacja

Elektroporacja to zaawansowana i nieinwazyjna technologia, która za pomocą krótkich impulsów elektrycznych zwiększa przepuszczalność błon komórkowych skóry. Umożliwia to wnikanie składników aktywnych z kosmetyków w głębsze warstwy, co znacząco podnosi skuteczność pielęgnacji. Dzięki Neno Beauty Luve elektroporacja może być stosowana nie tylko w gabinetach, ale także w domowej rutynie pielęgnacyjnej.

Exclusive Series

Mikroprądy

Mikroprądy w Neno Beauty Luve delikatnie stymulują skórę, wspierając mikrokrążenie i dotlenienie tkanek. Skóra odzyskuje jędrność, naturalny blask i promienny, zdrowy wygląd. Dodatkowo wspomagają produkcję kolagenu i elastyny, co pomaga wygładzić drobne zmarszczki oraz poprawić napięcie i kondycję cery.

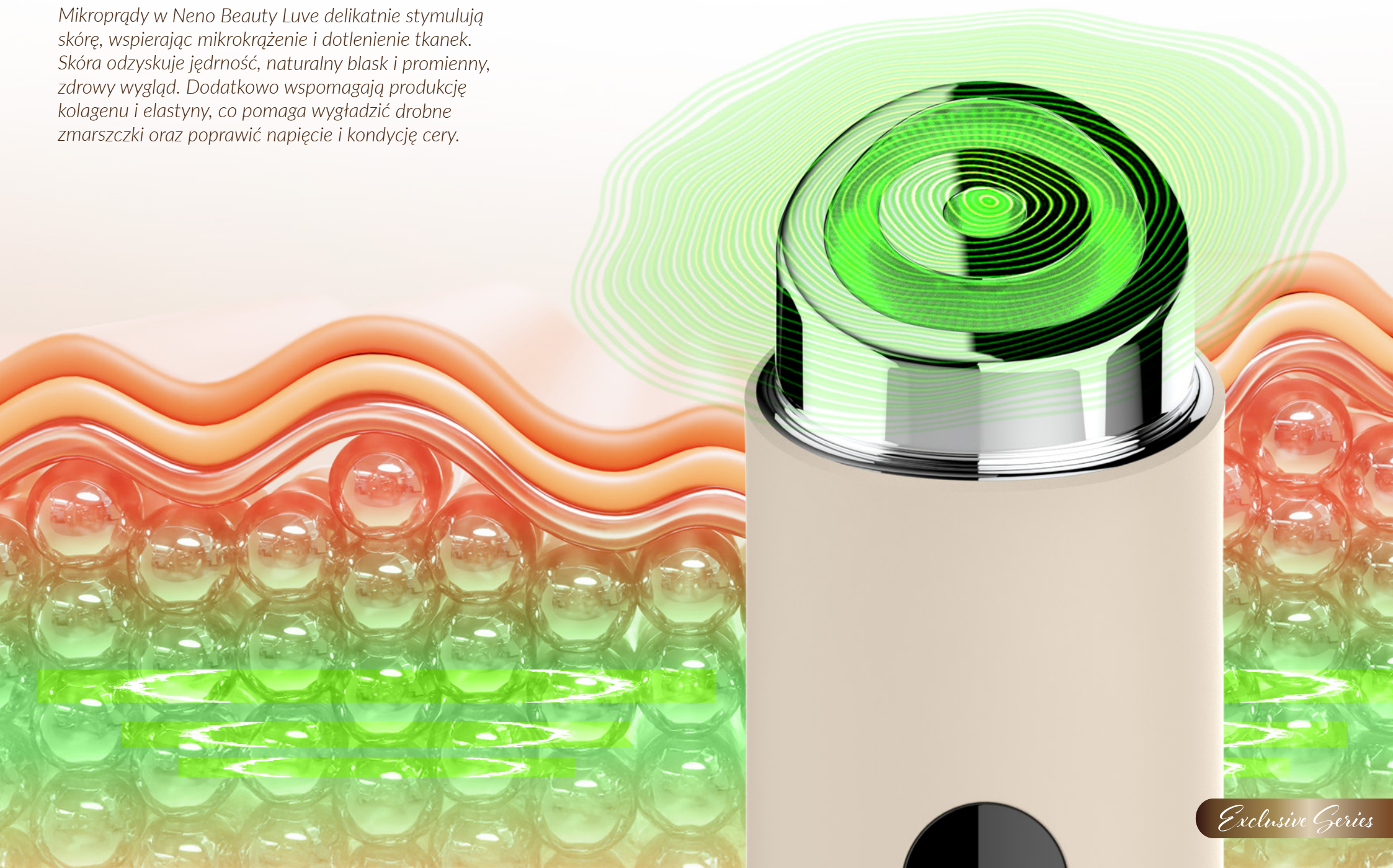

Exclusive Series

Technologia EMS

EMS to najbardziej intensywna forma stymulacji mikroprądowej zastosowana w Neno Beauty Luvé. Działa jak trening mięśni twarzy, pomagając zachować ich naturalne napięcie i wspierając sprężystość skóry. Najlepsze rezultaty przynosi systematyczne stosowanie, przy czym skuteczność zależy również od indywidualnych predyspozycji skóry. Regularne stosowanie EMS wspiera jędrność i elastyczność skóry, poprawiając kontury twarzy i ogólny wygląd cery.

Exclusive Series

Cztery długości fal światła

460 nm

ŚWIATŁO NIEBIESKIE

Światło niebieskie o długości fali 460 nm pobudza naturalne procesy naprawcze skóry, wspierając jej regenerację. Ma właściwości antybakteryjne, dzięki czemu zmniejsza stany zapalne, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia, a dodatkowo pomaga w regulacji produkcji sebum.

521 nm

ŚWIATŁO ZIELONE

Światło zielone o długości fali 521 nm wspiera redukcję widoczności zaczerwienień, działa kojąco na cerę i poprawia jej ogólną kondycję.

590 nm

ŚWIATŁO ŻÓŁTE

Światło żółte o długości fali 590 nm działa kojąco, pomaga wyrównać koloryt i nadaje skórze świeży, promienny wygląd.

630 nm

ŚWIATŁO CZERWONE

Światło czerwone o długości fali 630 nm pobudza mikrokrążenie, wspiera wyrównanie kolorytu skóry i redukcję przebarwień, a także działa kojąco oraz wyciszająco na cerę.

Exclusive Series

Wibracje soniczne

Neno Beauty Luve wykorzystuje wibracje soniczne, które są dostosowane do różnych trybów pielęgnacji skóry, zapewniając skuteczne i kompleksowe wsparcie codziennej rutyny. Specjalnie opracowane wzorce wibracji wspomagają głębokie wchłanianie składników aktywnych, wspierają modelowanie konturów twarzy oraz poprawiają jędrność i elastyczność skóry. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu wibracji do funkcji poszczególnych trybów urządzenie pozwala na profesjonalną pielęgnację w domowym zaciszu, jednocześnie zwiększając komfort użytkowania i efektywność zabiegów.




Exclusive Series

Air Shot

Tryb Air Shot łączy działanie niebieskiego światła LED, mikroimpulsów elektrycznych i krótkofalowych wibracji.

Wspiera redukcję niedoskonałości i poprawia strukturę skóry. Regularne stosowanie nadaje cerze świeży, promienny wygląd. W trakcie korzystania można odczuwać delikatne, punktowe mrowienie przypominające drobne ułtucia, a także wyczuć delikatny zapach przypominający spalanie drobnych włosków – jest to zjawisko całkowicie normalne i bezpieczne.

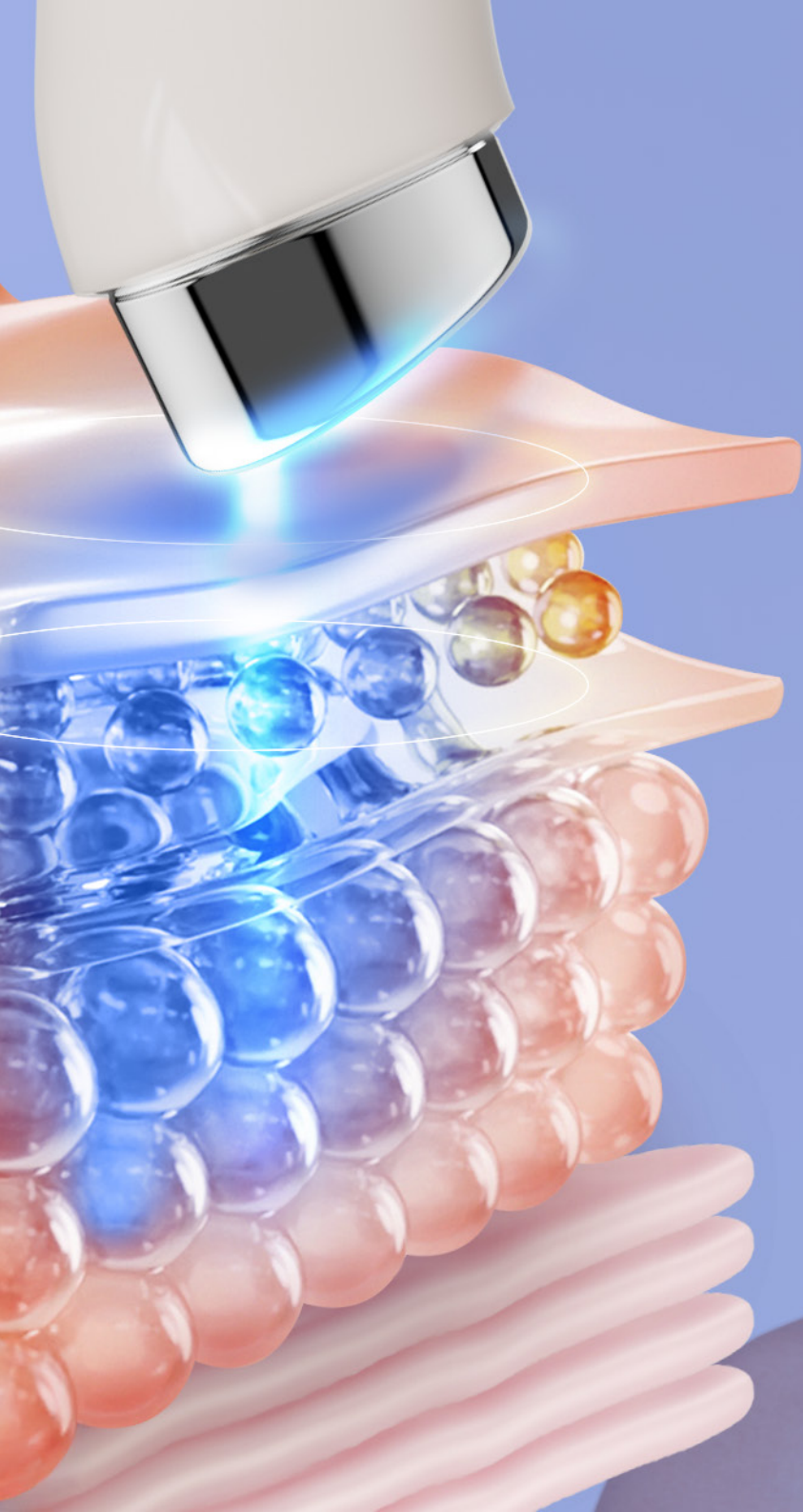

Exclusive Series



Booster

Tryb Booster łączy żółte światło LED z delikatnymi wibracjami i technologią elektroporacji, aby wspierać głębsze wchłanianie składników aktywnych i zwiększać skuteczność stosowanych kosmetyków. Dodatkowo tryb ten poprawia mikrokrążenie i subtelnie wyrównuje koloryt skóry, przywracając jej świeży, naturalny wygląd. Stosując ten zabieg z kosmetykiem bogatym w składniki aktywne, takie jak kwas hialuronowy, peptydy, niacynamid czy ceramidy, zapewnisz ich głębsze wnikanie i wzmocnione działanie. Efekt ten osiągany jest dzięki technologii elektroporacji, dotychczas stosowanej głównie w profesjonalnych gabinetach, a dziś dostępnej także w domowej pielęgnacji. Podczas użytkowania może pojawić się uczucie mrowienia – jest to naturalne zjawisko.

Exclusive Series

MC

Tryb MC łączy działanie zielonego światła LED, wibracji i mikroprądów, stymulując produkcję kolagenu i poprawiając jędrność skóry. Regularne stosowanie pomaga redukować drobne linie i zmarszczki, a cera stopniowo odzyskuje młodzieńczy, bardziej wypoczęty wygląd. W trakcie korzystania można odczuwać lekkie mrowienie, które stanowi normalną reakcję na stymulację.

Exclusive Series

Derma Shot

Tryb Derma Shot łączy czerwone światło LED, wibracje i technologię EMS, aby stymulować mięśnie twarzy i poprawiać napięcie skóry.

Regularne stosowanie wspiera naturalne ujędrnianie, podkreśla kontur twarzy i sprawia, że cera wygląda młodziej i bardziej sprężyste. W trakcie użytkowania mogą wystąpić delikatne drgania lub mimowolne skurcze mięśni a także uczucie mrowienia - jest to naturalny efekt stymulacji impulsami.

Exclusive Series



Pięć poziomów intensywności

Każdy z trybów w Neno Beauty Luve oferuje pięć poziomów intensywności, dzięki czemu możesz w pełni spersonalizować zabieg. Przy pierwszym użyciu warto rozpocząć od najniższego poziomu i po kilku tygodniach regularnego stosowania stopniowo zwiększać moc, dopasowując ją do potrzeb skóry oraz własnych odczuć. W delikatnych partiach twarzy – takich jak okolice oczu, nosa czy ust – zawsze rekomendowany jest najniższy poziom.

Exclusive Series

Kierunek masażu

AIR SHOT – Delikatnie przykładaj krawędź lub czubek głowicy masującej do skóry, nie używając jej całej powierzchni. Wykonuj powolne, płynne ruchy wzdłuż wybranego obszaru skóry lub przykładaj głowicę punktowo w miejscach wymagających szczególnej uwagi. Używaj trybu na umytej i osuszonej skórze, bez żadnych kosmetyków pielęgnacyjnych.

BOOSTER – Przyłóż całą powierzchnię głowicy masującej do skóry i wykonuj okrężne ruchy (od środka twarzy ku górze i na zewnątrz), aby ułatwić wchłanianie produktu. Stosuj tryb z produktami pielęgnacyjnymi o lekkiej, żelowej lub wodno-żelowej konsystencji, bogatymi w składniki aktywne, takie jak kwas hialuronowy, witamina C, peptydy, niacynamid czy ceramidy. Jeśli w trakcie sesji poczujesz, że produkt całkowicie się wchłonął, nałóż dodatkową warstwę, aby zachować odpowiedni poślizg głowicy i komfort użytkowania.


MC – Przyłóż całą powierzchnię głowicy do skóry i powoli przesuwaj urządzenie po twarzy, kierując ruchy ku górze i na zewnątrz – zgodnie z naturalnym kierunkiem drenażu limfatycznego. Stosuj ten tryb razem z beztłuszczowym żelem przewodzącym przeznaczonym do technologii EMS lub z lekkim kosmetykiem pielęgnacyjnym o nietłustej formule do pielęgnacji twarzy. Jeśli w trakcie zabiegu żel/kosmetyk zacznie wysychać, nałóż kolejną warstwę, aby utrzymać pełną skuteczność i komfort.

DERMA SHOT – Przyłóż całą powierzchnię głowicy do skóry i przesuwaj urządzenie powoli po twarzy, wykonując ruchy ku górze i na zewnątrz – zgodnie z naturalnym kierunkiem drenażu limfatycznego. W wybranych miejscach możesz zatrzymać głowicę na 1–2 sekundy, aby skoncentrować działanie impulsów. Dla najlepszych efektów używaj tego trybu razem z beztłuszczowym żelem przewodzącym przeznaczonym do technologii EMS lub z lekkim kosmetykiem pielęgnacyjnym o nietłustej formule do pielęgnacji twarzy. W razie potrzeby dołóż kolejną porcję żelu / kosmetyku, aby zabieg przebiegał komfortowo i skutecznie. Przed zastosowaniem trybu Derma shot zaleca się najpierw użyć trybu MC.



obszar
zabronionego
stosowania

zalecane obszary
niskiego poziomu
użytkowania

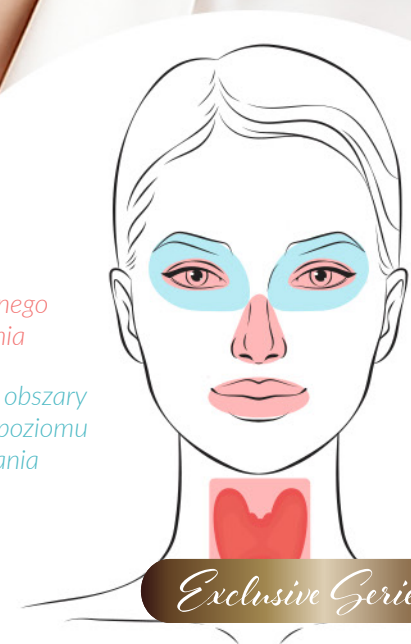

Exclusive Series

Kolejność zabiegów

Urządzenie pozwala korzystać ze wszystkich czterech trybów w ramach jednego cyklu zabiegowego. Aby osiągnąć najlepsze efekty i pełne bezpieczeństwo, należy zachować kolejność: AIR SHOT → BOOSTER → MC → DERMA SHOT. Przy zmianie trybów nie musisz za każdym razem myć i osuszać twarzy – wystarczy nałożyć odpowiedni kosmetyk pielęgnacyjny lub żel przewodzący. Pamiętaj, że jedynie tryb AIR SHOT stosuje się zawsze na czystą, suchą skórę, bez dodatkowych produktów pielęgnacyjnych.



Exclusive Series

Wskazówki bezpieczeństwa i higieny

- **Zachowaj higienę** – po każdym użyciu oczyść urządzenie, przecierając je suchą lub delikatnie zwilżoną ciepłą wodą z odrobiną łagodnego mydła ściereczką. W celu dezynfekcji przetrzyj głowicę chusteczką nasączoną płynem na bazie alkoholu izopropylowego (do 70% stężenia). Unikaj agresywnych detergentów, wybielaczy i zanurzania urządzenia w wodzie.
- **Bezwzględnie unikaj stosowania na implantach** – unikaj stosowania urządzenia, jeśli posiadasz jakiegokolwiek implanty elektroniczne (np. rozrusznik serca, pompa insulinowa) lub metalowe implanty w obrębie głowy i szyi (w tym implanty stomatologiczne, mosty, korony, aparaty ortodontyczne, metalowe implanty słuchowe).
- **Omijaj wrażliwe obszary** – Unikaj stosowania głowic masujących bezpośrednio pod oczami, na powiekach oraz na szyi w rejonie tarczycy. W okolicy oczu, nosa oraz ust używaj zawsze najniższego poziomu intensywności
- **Regularność** – najlepsze efekty uzyskasz przy systematycznym stosowaniu: Tryb Airshot: 2-3 razy w tygodniu (sesja maksymalnie 5 minut); Tryb Booster: 1-3 razy dziennie (sesja 5-10 minut); Tryb MC: 1-3 razy dziennie (sesja 5-10 minut); Tryb Derma Shot: 1-3 razy dziennie (sesja 5-10 minut)
- Używanie urządzenia jest bezwzględnie przeciwwskazane w okresie ciąży i laktacji.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi.



Exclusive Series

Czujnik kontaktu ze skórą + timer

Neno Beauty Luve ma wbudowany 5-minutowy timer i czujnik kontaktu ze skórą, które dbają o bezpieczeństwo i komfort. Odliczanie uruchamia się tylko wtedy, gdy głowica dotyka skóry. Dodatkowo światło LED włącza się tylko w momencie kontaktu ze skórą, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, ponieważ eliminuje ryzyko przypadkowej emisji światła w kierunku oczu.

5 min



Exclusive Series

Akcesoria w zestawie

Neno Beauty Luve wyposażono w praktyczną pokrywkę, która chroni głowicę masującą przed kurzem i zabrudzeniami, a także w elegancki woreczek do przechowywania. Pokrywka dba o to, aby urządzenie zawsze pozostawało czyste i gotowe do użycia, a miękki woreczek idealnie sprawdza się zarówno w domu, jak i w podróży. W ten sposób Neno Beauty Luve zachowuje estetyczny wygląd i jest zawsze pod ręką.



Exclusive Series

neno[®] beauty LUVÉ

DANE TECHNICZNE

Model:	Neno Beauty Luve
Zasilanie:	5V 0.7A
Moc:	5W
Bateria:	2200 mAh
Timer:	5 min
Materiał:	ABS+PP+304 stal nierdzewna
Wymiary:	38.2×182.7×38.6 mm
Waga:	304g
Kod EAN:	5902479677170
Wymiary pudełka:	148×245×60 mm
Waga pudełka:	0,64 kg
PN:	NEN-DOM-PI003
Zawartość zestawu:	masażer, woreczek do przechowywania, ściereczka z mikrofibry, kabel typu-C, instrukcja obsługi
Kontakt:	Tel.: 731 594 301; mail: info@neno.pl
Producent:	KGK Trend sp. z o.o. ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków



NAGRODY DLA
FIRMY KGK TREND
Właściciela marki Neno:



Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy, wsparcia albo masz pytania do ekspertów, zadzwoń lub napisz bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta Neno. Infolinia: 731 594 301, mail: info@neno.pl