

neno[®] beauty

NAYA

MASAŻER DO TWARZY
Z TECHNOLOGIA
EMS I FUNKCJĄ TERMOTERAPII

Exclusive Series



EMS technology

Exclusive Series

Poznaj serię Neno Beauty

Seria do twarzy Neno Beauty powstała, by towarzyszyć Ci w codziennych rytuałach.

Bez wychodzenia z domu zyskujesz profesjonalną pielęgnację, a skóra z każdym dniem staje się bardziej promienna. Z Neno Beauty odkrywasz swoje naturalne piękno.



Exclusive Series

Poznaj Neno Beauty Naya

Neno Beauty Naya łączy trzy nowoczesne technologie – EMS, termoterapię i masaż wibracyjny – które wspierają naturalne ujędrnianie i rozświetlanie skóry. Dzięki podwójnej głowicy masującej oraz pięciu poziomom intensywności łatwo dopasujesz działanie do swoich potrzeb i stworzysz własny rytuał pielęgnacyjny.

EMS

Elektryczna Stymulacja Mięśni: stymuluje mięśnie twarzy, poprawiając ich napięcie i sprężystość skóry

Podwójna głowica masująca

Zaprojektowana z myślą o precyzyjnej stymulacji mięśni twarzy

Termoterapia

Delikatnie podgrzewa skórę do temperatury 42°C, wspomagając mikrokrążenie i zwiększając jej elastyczność

Masaż wibracyjny

Redukuje obrzęki i przynosi uczucie relaksu

Timer

Automatyczny 6-minutowy timer oraz powiadomienie o zmianie obszaru masażu co 15 sekund



Pamięć

Funkcja pamięci

Łatwy w obsłudze

Jeden przycisk funkcyjny

5 poziomów

5 poziomów intensywności

Bezprzewodowy

Urządzenie bezprzewodowe, kompaktowy design

Podstawka

Zapewnia stabilne i higieniczne przechowywanie masażera

Exclusive Series



Termoterapia



Masaż wibracyjny



EMS



Podwójna głowica



Funkcja pamięci



5 poziomów




Bezprzewodowy



Timer



Exclusive Series

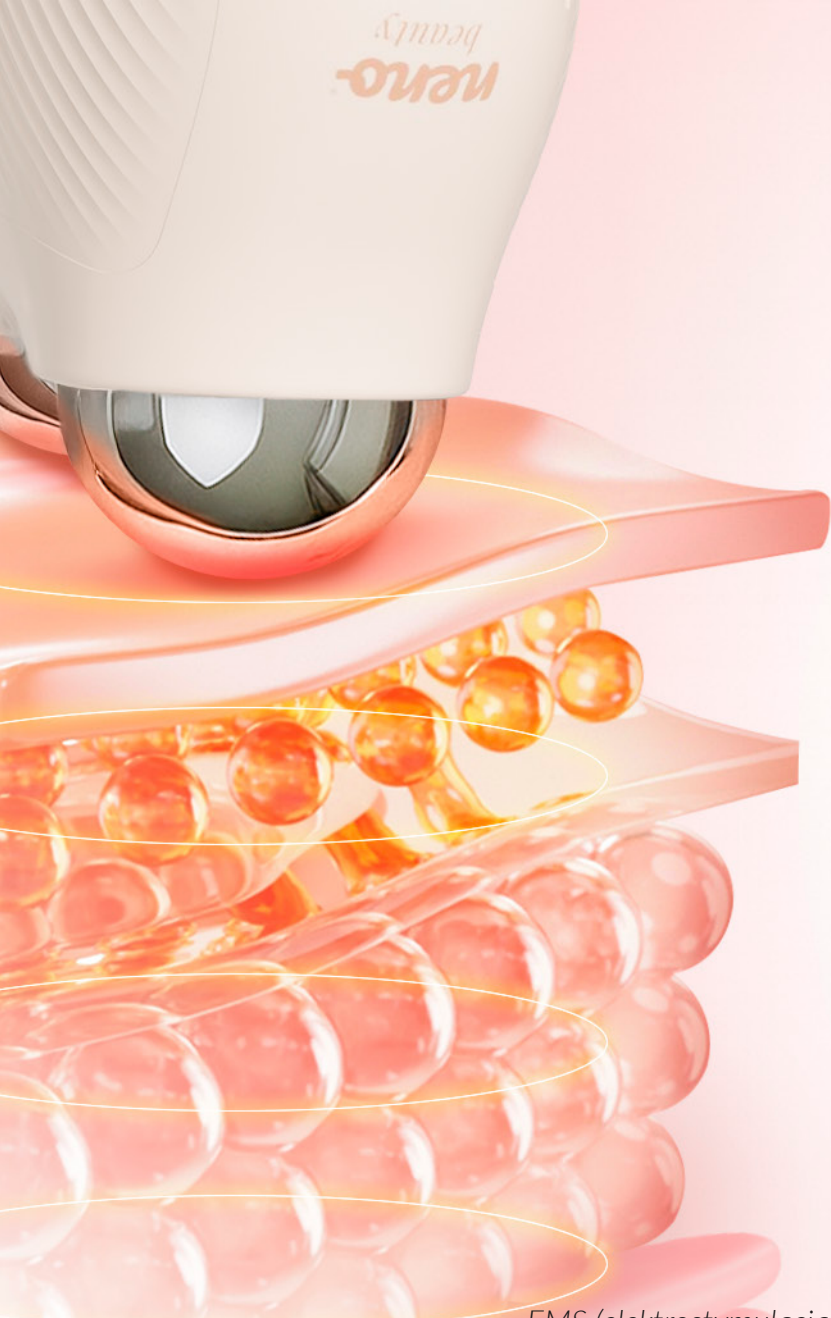


Technologia **EMS**

EMS (elektrostymulacja mięśni) wykorzystuje delikatne impulsy elektryczne, które pobudzają włókna mięśniowe do krótkiej, kontrolowanej pracy. Dzięki temu skóra zyskuje lepsze napięcie i sprężystość, a rysy twarzy stają się bardziej wyraziste. Podczas zabiegu możesz odczuwać lekkie mrowienie – to naturalna reakcja skóry na impulsy EMS. Regularne, krótkie sesje przynoszą najlepsze rezultaty, a ich efekt zależy od systematyczności i indywidualnych predyspozycji.



Exclusive Series

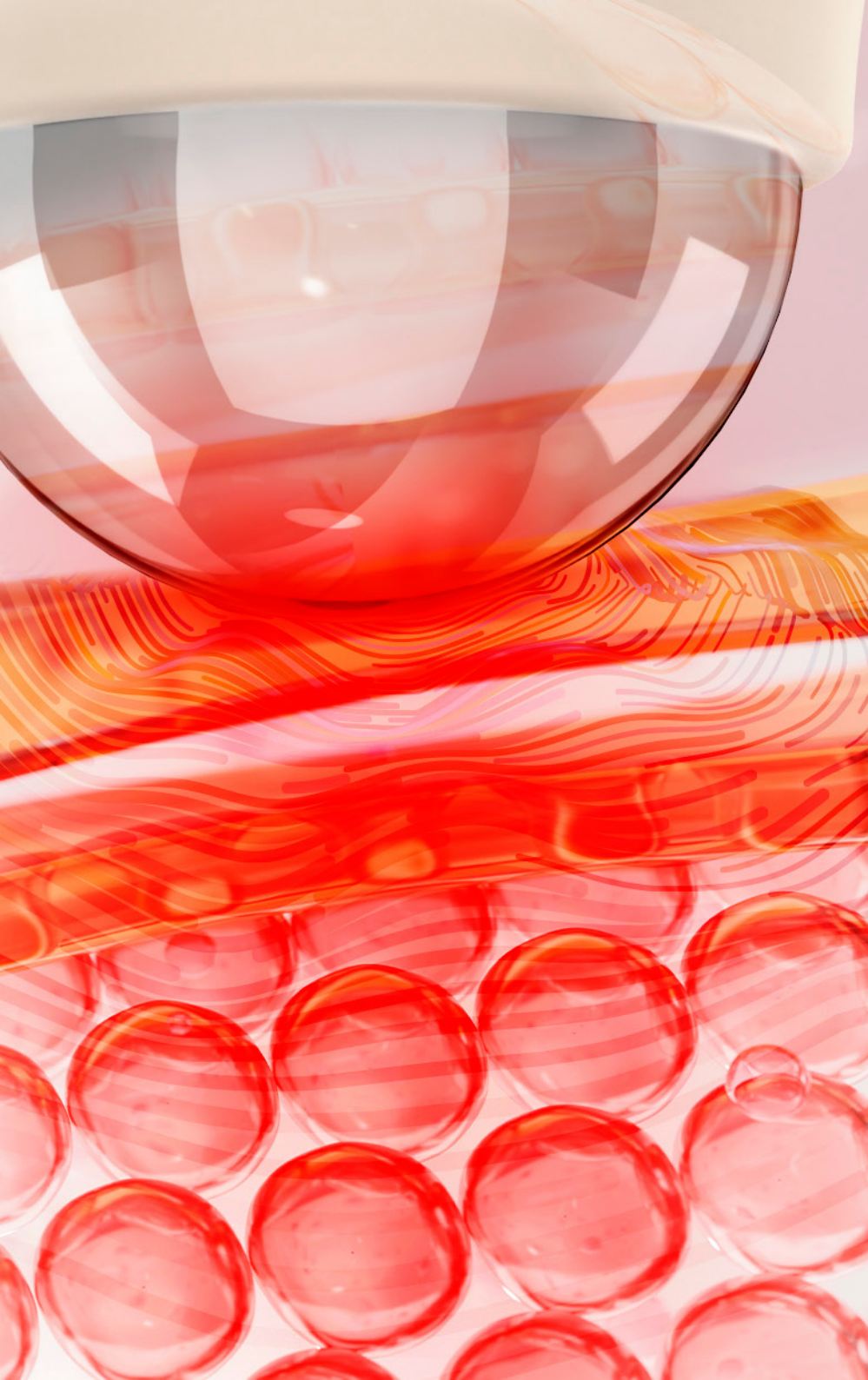


Funkcja termoterapii

Termoterapia wykorzystuje ciepło, które poprawia krążenie i wspiera naturalne procesy regeneracyjne skóry. Rozszerzone naczynia krwionośne lepiej transportują tlen i składniki odżywcze, a mięśnie rozluźniają się po całym dniu. To nie tylko pielęgnacja, ale też chwila przyjemnego relaksu dla Ciebie.

Exclusive Series

Masaż wibracyjny

Masaż wibracyjny opiera się na szybkich, rytmicznych pulsacjach, które wprowadzają skórę twarzy w delikatne drgania. Taki masaż poprawia mikrokrążenie, łagodzi napięcia i nadaje cerze promienny wygląd. To prosty sposób, aby poczuć odprężenie w kilka minut.

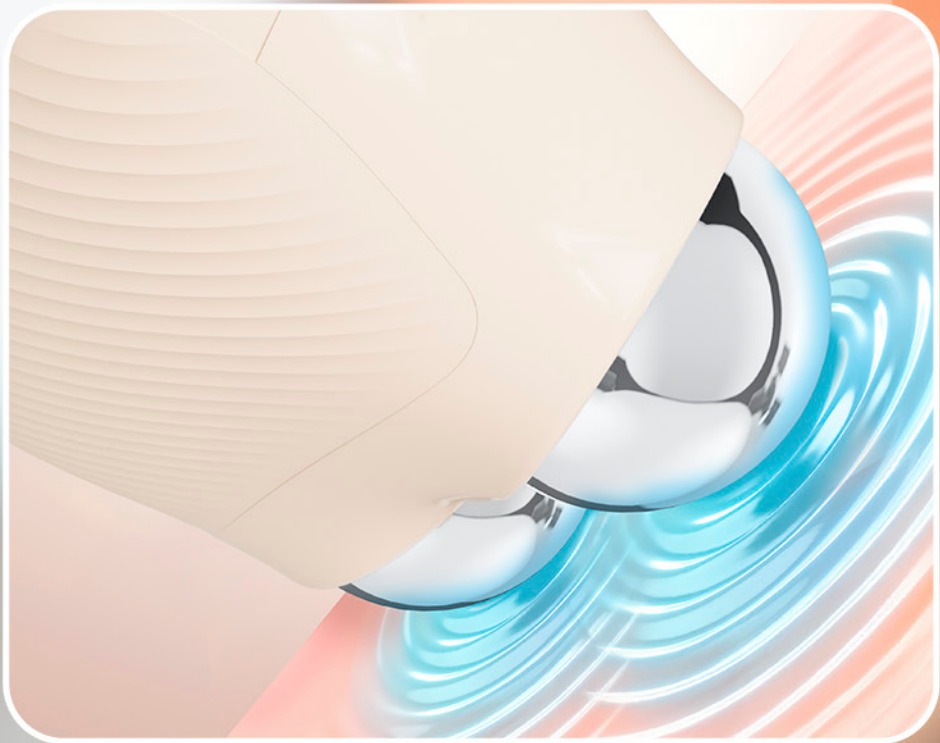

Exclusive Series

Podwójna głowica

Ergonomiczna, podwójna
głowica masująca została
zaprojektowana z myślą o
precyzyjnej stymulacji
mięśni twarzy. Naturalnie
dopasowuje się do jej
kształtów – od linii żuchwy,
przez policzki, aż po szyję.
Dzięki temu zabieg jest
płynny, komfortowy i
skuteczny.




Exclusive Series

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her right cheek. She is holding a white, rectangular skin care device with two circular applicators against her skin. The background is a solid light blue.

5

poziomów intensywności

Dzięki 5 poziomom intensywności możesz dostosować działanie urządzenia do wrażliwości swojej skóry i oczekiwanych efektów. Warto zaczynać od niższych poziomów intensywności i stopniowo je zwiększać wraz z kolejnymi sesjami – dzięki temu skóra łatwiej przyzwyczaja się do zabiegu, a odczucia stają się bardziej komfortowe.

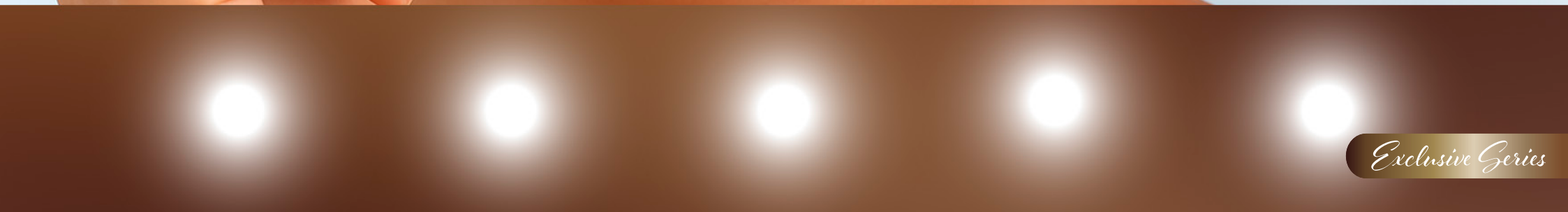A dark brown horizontal bar at the bottom of the page. It features five bright, out-of-focus white light spots arranged in a row.

Exclusive Series

Kierunki masażu

Korzystając z Neno Beauty Naya, prowadź głowicę od środka twarzy na zewnątrz i delikatnie ku górze według zaznaczonych na grafice linii. Dla uzyskania optymalnych efektów oraz zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa zalecamy stosowanie urządzenia wyłącznie z żelem przewodzącym odpowiednim do technologii RF i EMS lub z lekkim, beztłuszczowym kosmetykiem do pielęgnacji twarzy. Pamiętaj, aby nigdy nie używać urządzenia na suchej skórze – może to prowadzić do nieprzyjemnych doznań, podrażnień oraz zmniejszyć skuteczność zabiegu.



obszar
zabronionego
stosowania

zalecane obszary
niskiego poziomu
użytkowania



Exclusive Series



Wskazówki bezpieczeństwa i higieny

- Zachowaj higienę – po każdym użyciu oczyść urządzenie, przecierając je suchą lub delikatnie zwilżoną ciepłą wodą z odrobiną łagodnego mydła ściereczką. W celu dezynfekcji przetrzyj głowice chusteczką nasączoną płynem na bazie alkoholu izopropylowego (do 70% stężenia). Unikaj agresywnych detergentów, wybielaczy i zanurzania urządzenia w wodzie.
- Bezwzględnie unikaj stosowania urządzenia jeśli posiadasz jakiegokolwiek implanty elektroniczne (np. rozrusznik serca, pompa insulinowa) lub metalowe implanty w obrębie głowy i szyi (w tym implanty stomatologiczne, mosty, korony, aparaty ortodontyczne, metalowe implanty słuchowe).
- Omijaj wrażliwe obszary – unikaj stosowania głowic masujących bezpośrednio pod oczami, na powiekach oraz na szyi w rejonie tarczycy. W okolicy oczu, nosa oraz ust używaj zawsze najniższego poziomu intensywności.
- Regularność z umiarem – najlepsze efekty przynosi systematyczna pielęgnacja 2–4 razy w tygodniu przez 6 minut, z zachowaniem przerw i różnorodności trybów.
- Urządzenie jest bezwzględnie przeciwwskazane w okresie ciąży i laktacji.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi.

Funkcja pamięci

Neno Beauty Naya
zapamiętuje ostatnio
używane ustawienia, więc
po włączeniu wracasz do
swoich preferencji bez
ponownej konfiguracji –
szybko, wygodnie i spójnie z
Twoją rutyną.

Exclusive Series

Wbudowany timer

Timer w Neno Beauty Naya prowadzi rytm zabiegu: 6 minut łącznie, a co 15 sekund sygnał przypomina o zmianie obszaru. Po upływie czasu urządzenie wyłącza się automatycznie.




Exclusive Series

Akcesoria w zestawie

Przezroczysta podstawka Neno Beauty Naya zapewnia stabilne przechowywanie produktu. Urządzenie możesz ustawić na toalecie, półce w łazience czy stoliku nocnym – zawsze będzie pod ręką i gotowe do użycia, a jednocześnie przechowywane w higieniczny i estetyczny sposób. W zestawie znajdziesz także miękką ściereczkę z mikrofibry, która ułatwia codzienne czyszczenie urządzenia, oraz kabel USB, dzięki któremu szybko i wygodnie naładujesz urządzenie.



kabel
USB-C

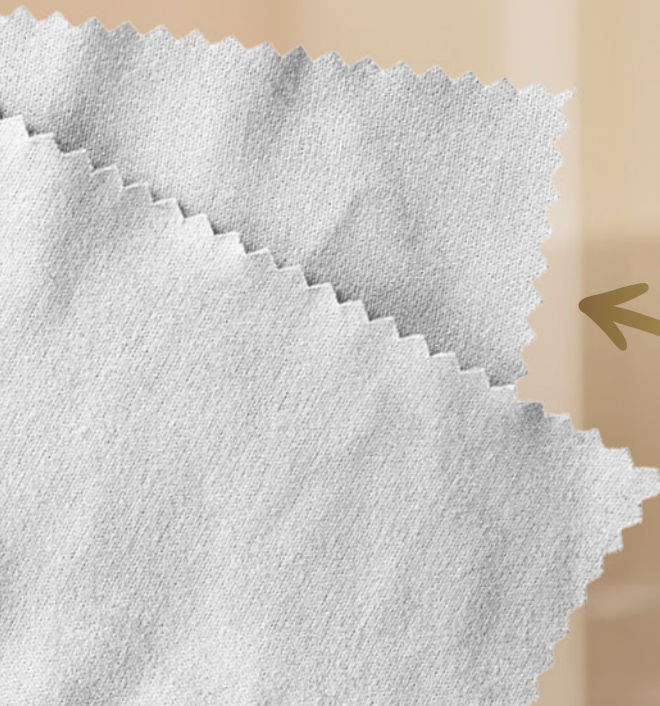

ściereczka
z mikrofibry

podstawka



Exclusive Series

nenob[®] beauty

NAYA

DANE TECHNICZNE

Model:	Neno Beauty Naya
Zasilanie:	5V 0.7A
Moc	6W
Bateria:	1000mAh
Timer:	6min
Materiał:	ABS + PC + silikon + stop cynkowy
Wymiary:	84x45x68mm
Waga:	172g
Kod EAN:	5902479677163
Wymiary pudełka:	147x207x60 mm
Waga pudełka:	0,53kg
PN:	NEN-DOM-PI002
Zawartość zestawu:	masażer, podstawka, ściereczka z mikrofibry, kabel typ-C, instrukcja obsługi
Kontakt:	Tel.: 731 594 301; mail: info@nenob.pl
Producent:	KGK Trend sp. z o.o. ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków



NAGRODY DLA
FIRMY KGK TREND
Właściciela marki Neno:



Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy, wsparcia albo masz pytania do ekspertów, zadzwoń lub napisz bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta Neno.
Infolinia: 731 594 301, mail:info@nenob.pl