

nenob[®]

Leite




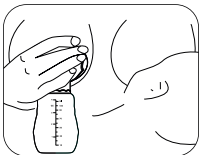


Table of contents

Spis treści

4	Instrukcja obsługi	PL
5	User manual	EN
7	Bedienungsanleitung	DE
9	Návod k použití	CZ
10	Használati utasítás	HU
12	Používateľská príručka	SK
14	Användarhandbok	SE
15	Käyttäjän käsikirja	FI
17	Brukerhåndbok	NO
19	Brugermanual	DK
20	Gebruikershandleiding	NL
22	Manual del usuario	ES
24	Manuale utente	IT
25	Manuel de l'utilisateur	FR
27	Manual de utilizare	RO
29	Manual do utilizador	PT
30	Korisnički priručnik	HR/BA
32	Korisničko uputstvo	RS/ME
33	Uporabniški priročnik	SI
35	Εγχειρίδιο χρήστη	GR
37	Naudotojo vadovas	LT
38	Lietotāja rokasgrāmata	LV
40	Kasutusjuhend	ET
41	Інструкція користувача	UA
43	Упатство за корисник	MK
45	Ръководство за потребителя	BG

A

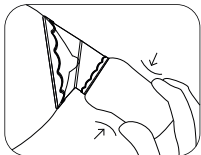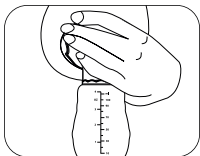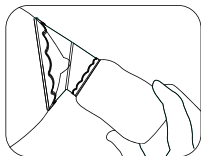

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,

zakupione przez Ciebie urządzenie Neno Leite to silikonowy kolektor mleka służący do zbierania mleka podczas karmienia/odciągania z drugiej piersi. Ma na celu zbieranie pokarmu w prosty i efektywny sposób.

01. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzać stan produktu.
2. Do czyszczenia zalecamy użycie jedynie miękkich szczotek lub gąbek, twarde materiały mogą spowodować zarysowania.
3. Jeśli wystąpią oznaki uszkodzenia, należy wymienić produkt.
4. Nie przechowuj w pobliżu ostrych przedmiotów.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Kolektor należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Przechowuj produkt w suchym miejscu oraz unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

02. CECHY PRODUKTU

Łatwy w użyciu

Za jednym naciśnięciem, pojemnik odciąga mleko z mocą ciągłego ssania - bez hałasu, bez prądu i bez kabli.

Wolny od BPA

Zrobiony z wysokiej jakości silikonu. Bez BPA.

Bezbolesna, cicha praca

Kolektor pozwala na dyskretne, ciche i szybkie odciąganie mleka z piersi.

Pozbądź się wycieków

W czasie karmienia jedną piersią, mleko z drugiej piersi wypływa samoistnie. To doskonałe urządzenie, aby uniknąć zabrudzenia bielizny i jednocześnie nie marnować cennego pokarmu mamy. Kolektor zbiera każdą kroplę mleka wypływającą z piersi, którą akurat nie karmisz maluszka.

Łatwy w czyszczeniu

Urządzenie nie wymaga demontażu przed czyszczeniem ze względu na zastosowaną

technologię all-in-one. Wystarczy tylko włożyć kolektor do gotującej się wody na około 2 minuty i gotowe!

03. JAK UŻYWAĆ KOLEKTORA?

PATRZ RYS. A

1. Upewnij się, że kolektor został wyczyszczony zarówno przed jak i po użyciu.
2. Ściśnij pompę, aby wypchnąć zgromadzone powietrze na zewnątrz.
3. Odegnij kołnierz i umieść sutek po środku lejka.
4. Przywróć kołnierz do wyjściowej pozycji, wtedy pompka mocno przyklei się do piersi.
5. Możesz używać produktu wyłącznie jako kolektora. Wówczas mleko będzie swobodnie spływało do pompy. Jeśli chcesz korzystać z niego jak z manualnego laktatora – ściskaj pompę, aby ułatwić pobór mleka.

04. SPECYFIKACJA

Materiał: silikon+PP

Pojemność: 100 ml

05. KARTA GWARANCYJNA

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://neno.pl/gwarancja>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie:

<https://neno.pl/kontakt>

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

EN

USER MANUAL

Dear Customer,
thank you for purchasing Neno Leite, a silicone milk collector for collecting milk during feeding/pumping from the other breast. It aims to collect food in a simple and effective way.

01. SAFETY MEASURES

1. Before each use, check the condition of the product.

2. We recommend using only soft brushes or sponges for cleaning, hard materials may scratch.
3. If there is any sign of damage, replace the product.
4. Do not store near sharp objects.
5. This product is not a toy. The collector should be used in accordance with its intended use.
6. Store the product in a dry place and avoid direct sunlight.

02. PRODUCT FEATURES

Easy to use

With just one squeeze, the milk collector draws out your milk with the power of continuous suction-no noise, no electricity and no cords.

BPA FREE Material

Made of high quality of silicone. No BPA, PCV and phthalate.

Painless and work silent

The milk collector helps to express breast milk discreetly, silently and quickly. Avoid embarrassment in public places.

No Leak Any More

When most mother are breastfeeding, the breast on the other side would often spill breast milk which may wet your clothes or your baby, or be wasted on the disposable nursing pad. The milk collector can collect every drop of breast milk while you're breastfeeding.

Easy to clean

All-in-one design and no disassemble required. They are very easy to clean by clear boiling water for about 2 minutes.

03. HOW TO USE

SEE FIG. A

1. Make sure your milk collector has been cleaned before and after use.
2. Squeeze the pump to push internal air out.
3. Invert the flange, place it onto your nipple centered in the middle of the breast shield.
4. Restore the flange, then the pump would firmly suck onto your breast.
5. You may use the product as a collector. The milk will then flow freely to the pump. If you want to use it as a manual breast pump - squeeze the pump to facilitate milk leak.

04. SPECIFICATION

Material: Silicone+PP

Capacity: 100 ml

05. WARRANTY CARD

The product is covered by a 24-month warranty.

The terms of the guarantee can be found at: <https://nenop.pl/gwarancja>

Details, contact and website address can be found at: <https://nenop.pl/kontakt>

Specifications and contents of the kit are subject to change without notice.

We apologise for any inconvenience.

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kære kunde,

Tak, fordi du har købt Neno Leite, en mælkeopsamler i silikone til opsamling af mælk under amning/udpumpning fra det andet bryst. Den har til formål at opsamle mad på en enkel og effektiv måde.

01. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Før hver brug skal du kontrollere produktets tilstand.
2. Vi anbefaler, at du kun bruger bløde børster eller svampe til rengøring, da hårde materialer kan ridse.
3. Hvis der er tegn på skader, skal produktet udskiftes.
4. Må ikke opbevares i nærheden af skarpe genstande.
5. Dette produkt er ikke et legetøj. Opsamleren skal bruges i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.
6. Opbevar produktet på et tørt sted og undgå direkte sollys.

02. PRODUKTEGENSKABER

Let at bruge

Med et enkelt tryk suger mælkeopsamleren din mælk ud med en kontinuerlig sugeevne - uden støj, elektricitet eller ledninger.

BPA-frit materiale

Fremstillet af silikone af høj kvalitet. Ingen BPA, PCV og phthalater.

Smertefrit og lydløst arbejde

Mælkeopsamleren hjælper med at udmalke brystmælk diskret, lydløst og hurtigt. Undgå forlegenhed på offentlige steder.

Ingen lækage længere

Når de fleste mødre ammer, vil brystet på den anden side ofte spilde brystmælk, som kan gøre dit tøj eller dit barn vådt eller blive spildt på engangs ammeindlægget. Mælkeopsamleren kan opsamle hver eneste dråbe brystmælk, mens du ammer.

Let at rengøre

Alt-i-et-design, som ikke kræver adskillelse. De er meget nemme at rengøre med rent kogende vand i ca. 2 minutter.

03. SÅDAN BRUGER DU

SE FIG. A

1. Sørg for, at din mælkeopsamler er blevet rengjort før og efter brug.
2. Klem på pumpen for at presse den indvendige luft ud.
3. Vend flangen om, og placer den på brystvorten centreret i midten af brystskjoldet.
4. Sæt flangen på igen, så suger pumpen sig fast til dit bryst.
5. Du kan bruge produktet som opsamler. Mælken vil så flyde frit til pumpen. Hvis du vil bruge den som en manuel brystpumpe, skal du klemme på pumpen for at lette mælkelækagen.

04. SPECIFIKATION

Materiale: Silikone+PP

Kapacitet: 100 ml

05. GARANTIKORT

Produktet er dækket af en 24-måneders garanti.

Vilkårene for garantien kan findes på: <https://nenopl/gwarancja>

Detaljer, kontakt og hjemmesideadresse kan findes på: <https://nenopl/kontakt>

Specifikationer og indhold i sættet kan ændres uden varsel. Vi undskylder for eventuelle ulemper.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení silikonového sběrače mléka Neno Leite pro sběr mléka během krmení/odsávání z druhého prsu. Jeho cílem je sběr potravy jednoduchým a efektivním způsobem.

01. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku.
2. K čištění doporučujeme používat pouze měkké kartáče nebo houbičky, tvrdé materiály by se mohly poškrábat.
3. Pokud se objeví známky poškození, výrobek vyměňte.
4. Neskladujte v blízkosti ostrých předmětů.
5. Tento výrobek není hračka. Sběrač by měl být používán v souladu s jeho určením.
6. Výrobek skladujte na suchém místě a vyhněte se přímému slunečnímu záření.

02. VLASTNOSTI PRODUKTU

Snadné použití

Jedním stisknutím sběrač mléka vysaje mléko silou nepřetržitého sání - bez hluku, bez elektřiny a bez kabelů.

Materiál BPA FREE

Vyrobeno z vysoce kvalitního silikonu. Bez BPA, PCV a ftalátů.

Bezbolestná a tichá práce

Sběrač mléka pomáhá diskrétně, tiše a rychle odsávat mateřské mléko. Vyhněte se rozpakům na veřejných místech.

Už žádný únik

Když většina matek kojí, prs na druhé straně by často rozlil mateřské mléko, které by mohlo namočit vaše oblečení nebo vaše dítě, nebo by bylo vyplýtváno na jednorázové kojící podložce. Sběrač mléka dokáže během kojení zachytit každou kapku mateřského mléka.

Snadné čištění

Konstrukce „vše v jednom“ a bez nutnosti demontáže. Velmi snadno se čistí čistou vroucí vodou po dobu asi 2 minut.

03. JAK POUŽÍVAT

VIZ OBR. A

1. Ujistěte se, že jste sběrač mléka před použitím a po něm vyčistili.
2. Stisknutím čerpadla vytlačte vnitřní vzduch.
3. Obraťte přírubu a umístěte ji na bradavku uprostřed prsního štítu.
4. Obnovte přírubu, pak by pumpa pevně sáť na prsu.
5. Výrobek můžete používat jako sběrač. Mléko pak bude volně proudit do čerpadla. Pokud jej chcete použít jako ruční odsávačku mateřského mléka - stiskněte odsávačku, abyste usnadnili únik mléka.

04. SPECIFIKACE

Materiál: silikon + PP

Objem: 100 ml

05. ZÁRUČNÍ KARTA

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců.

Podmínky záruky jsou k dispozici na adrese: <https://neno.pl/gwarancja>.

Podrobnosti, kontakt a adresu webových stránek naleznete na adrese:

<https://neno.pl/kontakt>.

Specifikace a obsah sady se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves Ügyfél,

köszönjük, hogy megvásárolta a Neno Leite szilikon tejgyűjtőt, amely a másik mellről történő etetés/szivattyúzás közbeni tejgyűjtéshez használható. Célja az egyszerű és hatékony gyűjtés.

01. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Minden használat előtt ellenőrizze a termék állapotát.
2. A tisztításhoz csak puha kefért vagy szivacsot ajánlunk, a kemény anyagok

megkarcolhatják.

3. Ha bármilyen sérülés jele van, cserélje ki a terméket.
4. Ne tárolja éles tárgyak közelében.
5. Ez a termék nem játék. A gyűjtőt rendeltetésének megfelelően kell használni.
6. A terméket száraz helyen tárolja, és kerülje a közvetlen napfényt.

02. TERMÉKJELLEMZŐK

Könnyen használható

A tejszívó egyetlen nyomással, a folyamatos szívás erejével szívja ki a tejet - nincs zaj, nincs áram és nincsenek kábelek.

BPA INGYENES anyag

Kiváló minőségű szilikonból készült. Nincs BPA, PCV és ftalát.

Fájdalommentes és csendes munka

A tejszívó segít diszkrétan, csendben és gyorsan kinyomni az anyatejet. Kerülje el a nyilvános helyeken való szégyenkezést.

Nincs többé szivárgás

Amikor a legtöbb anya szoptat, a másik oldalon lévő mell gyakran kiömlik az anyatej, amely nedves lehet a ruhája vagy a baba, vagy az eldobható szoptatós betétre pazarolódik. A tejszívó minden csepp anyatejet összegyűjthet szoptatás közben.

Könnyen tisztítható

All-in-one kialakítás és nincs szükség szétszerelésre. Nagyon könnyen tisztíthatók tiszta forrásban lévő vízzel kb. 2 percre.

03. HOGYAN HASZNÁLJUK

LÁSD AZ A ÁBRÁT

1. Győződjön meg róla, hogy a tejszívóját használat előtt és után megtisztította.
2. Nyomja össze a szivattyút, hogy a belső levegőt kiszorítsa.
3. Fordítsa meg a peremet, helyezze a mellbimbójára, a mellvédő közepére.
4. Állítsa vissza a karimát, majd a szivattyú szilárdan a mellére szívja.
5. A terméket gyűjtőként használhatja. A tej ezután szabadon áramlik a szivattyúba. Ha kézi mellszívóként szeretné használni - nyomja össze a szivattyút, hogy megkönnyítse a tej szivárgását.

04. MŰSZAKI ADATOK

Anyag: Szilikon + PP

Kapacitás: 100 ml

05. GARANCIA KÁRTYA

A termékre 24 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia feltételei a következő címen találhatók: <https://nenopl/gwarancja>.

Részletek, elérhetőségek és a honlap címe a következő címen található:

<https://nenopl/kontakt>.

A készlet specifikációi és tartalma előzetes értesítés nélkül változhatnak. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért.

SK

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie silikónového zberača mlieka Neno Leite na zber mlieka počas kŕmenia/odčerpávania z druhého prsníka. Jeho cieľom je zbierať potravu jednoduchým a účinným spôsobom.

01. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku.
2. Na čistenie odporúčame používať len mäkké kefy alebo špongie, tvrdé materiály sa môžu poškriabať.
3. Ak sa objavia akékoľvek známky poškodenia, výrobok vymeňte.
4. Neskladujte v blízkosti ostrých predmetov.
5. Tento výrobok nie je hračka. Zberač by sa mal používať v súlade s jeho určením.
6. Výrobok skladujte na suchom mieste a vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.

02. VLASTNOSTI PRODUKTU

Jednoduché používanie

Stačí jedno stlačenie a odsávačka mlieka odčerpá mlieko pomocou nepretržitého sania - bez hluku, elektriny a káblov.

Materiál BPA FREE

Vyrobené z kvalitného silikónu. Bez BPA, PCV a ftalátov.

Bezbolestná a tichá práca

Odsávačka mlieka pomáha diskrétno, ticho a rýchlo odsávať materské mlieko. Vyhnete sa rozpakom na verejných miestach.

Už žiadny únik

Keď väčšina matiek dojčí, prsník na druhej strane by často vylial materské mlieko, ktoré môže zmočiť vaše oblečenie alebo vaše dieťa, alebo sa stratí na jednorazovej dojčiacej podložke. Zberač mlieka dokáže počas dojčenia zachytiť každú kvapku materského mlieka.

Jednoduché čistenie

Konštrukcia „všetko v jednom“ a bez potreby demontáže. Veľmi ľahko sa čistia čistou vriacou vodou približne 2 minúty.

03. AKO POUŽÍVAŤ

POZRI OBRÁZOK A

1. Uistite sa, že ste zberač mlieka pred a po použití vyčistili.
2. Stlačte čerpadlo, aby ste vytlačili vnútorný vzduch.
3. Obráťte prírubu a umiestnite ju na bradavku v strede prsného štítu.
4. Obnovte prírubu, potom by sa čerpadlo pevne prisalo na prsník.
5. Výrobok môžete používať ako zbernú nádobu. Mlieko potom bude voľne prúdiť do čerpadla. Ak ho chcete používať ako manuálnu odsávačku mlieka - stlačte odsávačku, aby ste uľahčili únik mlieka.

04. ŠPECIFIKÁCIA

Materiál: Silikón + PP

Objem: 100 ml

05. ZÁRUČNÁ KARTA

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka.

Podmienky záruky nájdete na adrese: <https://nenopl/gwarancja>.

Podrobnosti, kontakt a webovú adresu nájdete na: <https://nenopl/kontakt>

Špecifikácie a obsah súpravy sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Ospravedľňujeme sa za prípadné neprijemnosti.

ANVÄNDARHANDBOK

Kära kund,

Tack för att du har köpt Neno Leite, en mjölkuppsamlare i silikon för uppsamling av mjölk vid matning/pumpning från det andra bröstet. Syftet är att samla upp mat på ett enkelt och effektivt sätt.

01. SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Kontrollera produktens skick före varje användning.
2. Vi rekommenderar att du endast använder mjuka borstar eller svampar för rengöring, hårda material kan repa.
3. Om det finns några tecken på skada, byt ut produkten.
4. Får inte förvaras i närheten av vassa föremål.
5. Denna produkt är inte en leksak. Uppsamlaren ska användas i enlighet med dess avsedda användning.
6. Förvara produkten på en torr plats och undvik direkt solljus.

02. PRODUKTEGENSKAPER

Lätt att använda

Med bara ett tryck suger mjölkuppsamlaren ut mjölken med kontinuerlig sugkraft - utan ljud, elektricitet eller sladdar.

BPA-fritt material

Tillverkad av högkvalitativt silikon. Ingen BPA, PCV och ftalat.

Smärtfritt och tyst arbete

Mjölkuppsamlaren hjälper dig att pumpa ut bröstmjölk diskret, tyst och snabbt. Undvik pinsamheter på offentliga platser.

Inget läckage längre

När de flesta mammor ammar spiller bröstet på andra sidan ofta bröstmjölk som kan göra dina kläder eller ditt barn blöta, eller som slösas bort på engångs amningsunderlägg. Mjölkuppsamlaren kan samla upp varje droppe bröstmjölk medan du ammar.

Lätt att rengöra

Allt-i-ett-design och ingen demontering krävs. De är mycket enkla att rengöra med kokande vatten i ca 2 minuter.

03. HUR MAN ANVÄNDER

SE FIG. A

1. Se till att mjölkuppsamlaren rengörs före och efter användning.
2. Tryck på pumpen för att pressa ut intern luft.
3. Vänd på flänsen och placera den på din bröstvårta centrerad i mitten av bröstskyddet.
4. Återställ flänsen, så kommer pumpen att suga fast ordentligt på ditt bröst.
5. Du kan använda produkten som uppsamlare. Mjölken kommer då att rinna fritt till pumpen. Om du vill använda den som en manuell bröstpump - kläm på pumpen för att underlätta mjölkfläckage.

04. SPECIFIKATION

Material: Silikon+PP

Kapacitet: 100 ml

05. GARANTIKORT

Produkten omfattas av en 24-månaders garanti.

Villkoren för garantin finns på: <https://nenopl/gwarancja>

Närmare upplysningar, kontaktuppgifter och webbadress finns på:

<https://nenopl/kontakt>

Specifikationer och innehåll i satsen kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

FI

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Hyvä asiakas,

kiitos, että olet ostanut Neno Leite, silikoninen maidonkerääjä maidon keräämiseen syöttämisen/pumppaamisen aikana toisesta rinnasta. Sen tarkoituksena on kerätä ruokaa yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla.

01. TURVATOIMET

1. Tarkista tuotteen kunto ennen jokaista käyttökertaa.
2. Suosittelemme käyttämään puhdistukseen vain pehmeitä harjoja tai sieniä, sillä kovat materiaalit voivat naarmuttaa.
3. Jos tuotteessa on merkkejä vaurioista, vaihda tuote.
4. Älä säilytä terävien esineiden lähellä.

5. Tämä tuote ei ole lelu. Keräintä on käytettävä sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
6. Säilytä tuote kuivassa paikassa ja vältä suoraa auringonvaloa.

02. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Helppo käyttää

Vain yhdellä puristuksella maidonkerääjä imee maidon ulos jatkuvan imun voimalla - ei melua, ei sähköä eikä johtoja.

BPA-vapaa materiaali

Valmistettu korkealaatuisesta silikonista. Ei BPA:ta, PCV:tä ja ftalaattia.

Kivuton ja hiljainen työ

Maidonkerääjä auttaa ilmaisemaan rintamaitoa huomaamattomasti, äänettömästi ja nopeasti. Vältä nolistuminen julkisilla paikoilla.

Ei enää vuotoja

Kun useimmat äidit imettävät, toisella puolella oleva rinta vuotaa usein rintamaitoa, joka voi kastella vaatteesi tai vauvasi tai hukata kertakäyttöisen imetystyynyn. Maidonkerääjä voi kerätä jokaisen pisaran rintamaitoa imetyksen aikana.

Helppo puhdistaa

All-in-one-suunnittelu, eikä purkamista tarvita. Ne on erittäin helppo puhdistaa kirkkaalla kiehuvalle vedelle noin 2 minuutin ajan.

03. KUINKA KÄYTTÄÄ

KATSO KUVA A

1. Varmista, että maidonkerääjä on puhdistettu ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
2. Purista pumpppua työntääksesi sisäisen ilman ulos.
3. Käännä laippa ylösalaisin ja aseta se nännin päälle keskelle rintasuojuksen keskelle.
4. Palauta laippa, niin pumpppu imee tiukasti rintaasi.
5. Tuotetta voi käyttää keräilijänä. Maito virtaa tällöin vapaasti pumpppuun. Jos haluat käyttää sitä manuaalisena rintapumpuna - purista pumpppua maidon vuotamisen helpottamiseksi.

04. TEKNISET TIEDOT

Materiaali: Silikoni + PP

Kapasiteetti: 100 ml

05. TAKUUKORTTI

Tuotteella on 24 kuukauden takuu.

Takuuehdot ovat saatavilla osoitteessa: <https://nenopl/gwarancja>.

Yksityiskohdat, yhteystiedot ja verkkosivuston osoite ovat osoitteessa:

<https://nenopl/kontakt>.

Pakkauksen tekniset tiedot ja sisältö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Pahoittelemme mahdollisia hankaluuksia.

NO

BRUKERHÅNDBOK

Kjære kunde,

takk for at du har kjøpt Neno Leite, en melkeoppsamler i silikon for oppsamling av melk under mating/pumping fra det andre brystet. Formålet er å samle opp mat på en enkel og effektiv måte.

01. SIKKERHETSTILTAK

1. Kontroller produktets tilstand før hver bruk.
2. Vi anbefaler at du kun bruker myke børster eller svamper til rengjøring, harde materialer kan lage riper.
3. Bytt ut produktet hvis det er tegn på skade.
4. Må ikke oppbevares i nærheten av skarpe gjenstander.
5. Dette produktet er ikke et leketøy. Samleren skal brukes i samsvar med tiltenkt bruk.
6. Oppbevar produktet på et tørt sted og unngå direkte sollys.

02. PRODUKTEGENSKAPER

Enkel å bruke

Med bare ett trykk suger melkeoppsamleren ut melken med kontinuerlig sugekraft - uten støy, strøm eller ledninger.

BPA-fritt materiale

Laget av silikon av høy kvalitet. Uten BPA, PCV og ftalater.

Smertefritt og lydløst arbeid

Melkeoppsamleren hjelper deg med å pumpe ut morsmelk diskret, lydløst og raskt. Unngå forlegenhet på offentlige steder.

Ingen lekkasje lenger

Når de fleste mødre ammer, vil brystet på den andre siden ofte søle brystmelk som kan gjøre klærne dine eller babyen våt, eller som kan gå til spille på engangs ammeinnlegg. Melkeoppsamleren kan samle opp hver eneste dråpe morsmelk mens du ammer.

Lett å rengjøre

Alt-i-ett-design som ikke krever demontering. De er svært enkle å rengjøre med kokende vann i ca. 2 minutter.

03. HVORDAN BRUKES

SE FIG. A

1. Sørg for at melkesamleren er rengjort før og etter bruk.
2. Klem på pumpen for å presse ut innvendig luft.
3. Snu flensen og plasser den på brystvorten midt på brystbeskyttelsen.
4. Sett flensen på plass igjen, så suger pumpen seg fast til brystet.
5. Du kan bruke produktet som oppsamler. Melken vil da flyte fritt til pumpen. Hvis du vil bruke den som en manuell brystpumpe - klem på pumpen for å lette melkelekkasjen.

04. SPESIFIKASJON

Materiale: Silikon + PP

Kapasitet: 100 ml

05. GARANTIKORT

Produktet dekkes av en 24-måneders garanti.

Vilkårene for garantien finner du på: <https://neno.pl/gwarancja>

Nærmere opplysninger, kontaktinformasjon og nettadresse finner du på:

<https://neno.pl/kontakt>

Spesifikasjoner og innhold i settet kan endres uten varsel. Vi beklager eventuelle ulemper.

BRUGERMANUAL

Kære kunde,

Tak, fordi du har købt Neno Leite, en mælkeopsamler i silikone til opsamling af mælk under amning/udpumpning fra det andet bryst. Den har til formål at opsamle mælk på en enkel og effektiv måde.

01. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Før hver brug skal du kontrollere produktets tilstand.
2. Vi anbefaler, at du kun bruger bløde børster eller svampe til rengøring, da hårde materialer kan ridse.
3. Hvis der er tegn på skader, skal produktet udskiftes.
4. Må ikke opbevares i nærheden af skarpe genstande.
5. Dette produkt er ikke et legetøj. Opsamleren skal bruges i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.
6. Opbevar produktet på et tørt sted og undgå direkte sollys.

02. PRODUKTEGENSKABER

Let at bruge

Med et enkelt tryk suger mælkeopsamleren din mælk ud med en kontinuerlig sugeevne - uden støj, elektricitet eller ledninger.

BPA-frit materiale

Fremstillet af silikone af høj kvalitet. Ingen BPA, PCV og phthalater.

Smertefrit og lydløst arbejde

Mælkeopsamleren hjælper med at udmalke brystmælk diskret, lydløst og hurtigt. Undgå forlegenhed på offentlige steder.

Ingen lækage længere

Når de fleste mødre ammer, vil brystet på den anden side ofte spilde brystmælk, som kan gøre dit tøj eller dit barn vådt eller blive spildt på engangs ammeindlægget. Mælkeopsamleren kan opsamle hver eneste dråbe brystmælk, mens du ammer.

Let at rengøre

Alt-i-et-design, som ikke kræver adskillelse. De er meget nemme at rengøre med rent kogende vand i ca. 2 minutter.

03. SÅDAN BRUGER DU

SE FIG. A

1. Sørg for, at din mælkeopsamler er blevet rengjort før og efter brug.
2. Klem på pumpen for at presse den indvendige luft ud.
3. Vend flangen om, og placer den på brystvorten centreret i midten af brystskjoldet.
4. Sæt flangen på igen, så suger pumpen sig fast til dit bryst.
5. Du kan bruge produktet som opsamler. Mælken vil så flyde frit til pumpen. Hvis du vil bruge den som en manuel brystpumpe, skal du klemme på pumpen for at lette mælkelækagen.

04. SPECIFIKATION

Materiale: Silikone+PP

Kapacitet: 100 ml

05. GARANTIKORT

Produktet er dækket af en 24-måneders garanti.

Vilkårene for garantien kan findes på: <https://neno.pl/gwarancja>

Detaljer, kontakt og hjemmesideadresse kan findes på: <https://neno.pl/kontakt>

Specifikationer og indhold i sættet kan ændres uden varsel. Vi undskylder for eventuelle ulemper.

NL

GEbruikersHANDLEIDING

Geachte klant,

Bedankt voor je aankoop van Neno Leite, een siliconen melkverzamelaar voor het opvangen van melk tijdens het voeden/kolven vanaf de andere borst. Het doel is om voeding op een eenvoudige en effectieve manier op te vangen.

01. VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Controleer voor elk gebruik de toestand van het product.
2. We raden aan om alleen zachte borstels of sponzen te gebruiken voor het schoonmaken, harde materialen kunnen krassen veroorzaken.
3. Vervang het product als er tekenen van schade zijn.
4. Niet bewaren in de buurt van scherpe voorwerpen.
5. Dit product is geen speelgoed. De collector moet worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik.

6. Bewaar het product op een droge plaats en vermijd direct zonlicht.

02. PRODUCTKENMERKEN

Gemakkelijk te gebruiken

Met slechts één knijpbeweging zuigt de melkverzamelaar je melk op met de kracht van continue zuiging - geen lawaai, geen elektriciteit en geen snoeren.

BPA-VRIJ materiaal

Gemaakt van siliconen van hoge kwaliteit. Geen BPA, PCV en ftalaat.

Pijnloos en werk geruisloos

De melkverzamelaar helpt bij het discreet, stil en snel afkolven van moedermelk. Vermijd verlegenheid in openbare gelegenheden.

Geen lekkage meer

Wanneer de meeste moeders borstvoeding geven, morst de borst aan de andere kant vaak moedermelk die je kleren of je baby nat kan maken, of verspild wordt op het wegwerpzoogkussen. De melkverzamelaar kan elke druppel moedermelk opvangen terwijl je borstvoeding geeft.

Gemakkelijk schoon te maken

Alles-in-één ontwerp en geen demontage nodig. Ze zijn heel gemakkelijk schoon te maken door kokend water voor ongeveer 2 minuten.

03. HOE TE GEBRUIKEN

ZIE FIG. A

1. Zorg ervoor dat je melkverzamelaar voor en na gebruik is schoongemaakt.
2. Knijp in de pomp om de interne lucht eruit te persen.
3. Draai de flens om en plaats deze op je tepel in het midden van het borstschild.
4. Herstel de flens, dan zuigt de kolf stevig aan je borst.
5. Je kunt het product gebruiken als opvangbak. De melk stroomt dan vrij naar de pomp. Als je het product als handmatige borstkolf wilt gebruiken - knijp dan in de kolf om het lekken van de melk te vergemakkelijken.

04. SPECIFICATIE

Materiaal: Silicone+PP

Inhoud: 100 ml

05. GARANTIEKAART

Het product heeft een garantie van 24 maanden.

De voorwaarden van de garantie zijn te vinden op: <https://nenopl/gwarancja>

Details, contactgegevens en het adres van de website zijn te vinden op:

<https://nenopl/kontakt>

Specificaties en inhoud van de kit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onze excuses voor eventueel ongemak.

ES

MANUAL DEL USUARIO

Estimado cliente,

Gracias por comprar Neno Leite, un recolector de leche de silicona para recoger la leche durante la lactancia/extracción del otro pecho. Su objetivo es recoger los alimentos de una manera sencilla y eficaz.

01. MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de cada uso, compruebe el estado del producto.
2. Recomendamos utilizar sólo cepillos o esponjas suaves para la limpieza, los materiales duros pueden rayar.
3. Si hay algún signo de daño, sustituya el producto.
4. No almacenar cerca de objetos afilados.
5. Este producto no es un juguete. El colector debe utilizarse de acuerdo con su uso previsto.
6. Guarde el producto en un lugar seco y evite la luz solar directa.

02. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fácil de usar

Con un solo apretón, el colector de leche extrae la leche con la potencia de una succión continua, sin ruido, sin electricidad y sin cables.

Material sin BPA

Fabricado en silicona de alta calidad. Sin BPA, PCV y ftalato.

Sin dolor y trabajo silencioso

El colector de leche ayuda a extraer la leche materna de forma discreta, silenciosa y rápida. Evita la vergüenza en lugares públicos.

Ya no hay fugas

Cuando la mayoría de las madres están amamantando, el pecho del otro lado a menudo derrama leche materna que puede mojar su ropa o a su bebé, o desperdiciarse en el cojín de lactancia desechable. El colector de leche puede recoger cada gota de leche materna mientras está amamantando.

Fácil de limpiar

Diseño todo en uno que no requiere desmontaje. Son muy fáciles de limpiar con agua hirviendo clara durante unos 2 minutos.

03. CÓMO USARLO

VER FIG. A

1. Asegúrese de que el colector de leche se ha limpiado antes y después de su uso.
2. Apriete la bomba para expulsar el aire interno.
3. Invierta la brida, colóquela sobre su pezón centrada en el centro del protector mamario.
4. Vuelva a colocar la brida y el sacaleches succionará firmemente su pecho.
5. Puede utilizar el producto como colector. La leche fluirá libremente hacia el extractor. Si desea utilizarlo como sacaleches manual, apriete el extractor para facilitar la salida de la leche.

04. ESPECIFICACIÓN

Material: Silicona+PP

Capacidad: 100 ml

05. TARJETA DE GARANTÍA

El producto tiene una garantía de 24 meses.

Las condiciones de la garantía pueden consultarse en: <https://nenopl/gwarancja>

Los detalles, el contacto y la dirección del sitio web se encuentran en:

<https://nenopl/kontakt>

Las especificaciones y el contenido del kit están sujetos a cambios sin previo aviso.

Rogamos disculpen las molestias.

MANUALE UTENTE

Gentile cliente,

grazie per aver acquistato Neno Leite, un raccoglitore di latte in silicone per la raccolta del latte durante la poppata/il pompaggio dall'altro seno. Il suo scopo è quello di raccogliere il cibo in modo semplice ed efficace.

01. MISURE DI SICUREZZA

1. Prima di ogni utilizzo, verificare le condizioni del prodotto.
2. Si consiglia di utilizzare solo spazzole o spugne morbide per la pulizia, poiché i materiali duri potrebbero graffiarsi.
3. In caso di danni, sostituire il prodotto.
4. Non conservare in prossimità di oggetti appuntiti.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Il raccoglitore deve essere utilizzato in base alla sua destinazione d'uso.
6. Conservare il prodotto in un luogo asciutto ed evitare la luce solare diretta.

02. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Facile da usare

Con una sola pressione, il raccoglitore estrae il latte con la potenza di un'aspirazione continua, senza rumore, senza elettricità e senza cavi.

Materiale BPA FREE

Realizzato in silicone di alta qualità. Senza BPA, PCV e ftalati.

Indolore e silenzioso

Il raccoglitore di latte aiuta a esprimere il latte materno in modo discreto, silenzioso e veloce. Evita l'imbarazzo nei luoghi pubblici.

Non ci sono più perdite

Quando la maggior parte delle madri allatta, il seno dall'altra parte spesso fa fuoriuscire il latte materno, che può bagnare i vestiti o il bambino, o finire sul cuscinetto monouso per l'allattamento. Il raccoglitore di latte può raccogliere ogni goccia di latte materno durante l'allattamento.

Facile da pulire

Design all-in-one che non richiede smontaggio. Sono molto facili da pulire con acqua bollente per circa 2 minuti.

03. COME SI USA

VEDERE FIG. A

1. Assicurarsi che il raccoglitore di latte sia stato pulito prima e dopo l'uso.
2. Spremere la pompa per far uscire l'aria interna.
3. Invertire la flangia e posizionarla sul capezzolo al centro della protezione per il seno.
4. Ripristinando la flangia, il microinfusore succhia saldamente il seno.
5. È possibile utilizzare il prodotto come collettore. Il latte fluirà liberamente verso il tiralatte. Se si desidera utilizzarlo come tiralatte manuale, spremere la pompa per facilitare la fuoriuscita del latte.

04. SPECIFICA

Materiale: Silicone+PP

Capacità: 100 ml

05. CARTA DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi.

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo: <https://neno.pl/gwarancja>.

I dettagli, i contatti e l'indirizzo del sito web sono disponibili all'indirizzo:

<https://neno.pl/kontakt>

Le specifiche e i contenuti del kit sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

FR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Cher client,

Merci d'avoir acheté Neno Leite, un collecteur de lait en silicone pour recueillir le lait pendant l'allaitement/le pompage de l'autre sein. Il vise à recueillir les aliments d'une manière simple et efficace.

01. MESURES DE SÉCURITÉ

1. Avant chaque utilisation, vérifiez l'état du produit.
2. Nous recommandons d'utiliser uniquement des brosses ou des éponges douces pour le nettoyage, les matériaux durs pouvant se rayer.
3. S'il y a des signes d'endommagement, remplacez le produit.
4. Ne pas stocker à proximité d'objets tranchants.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Le collecteur doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné.
6. Conservez le produit dans un endroit sec et évitez la lumière directe du soleil.

02. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Facile à utiliser

D'une simple pression, le collecteur de lait aspire le lait avec la puissance d'une aspiration continue - sans bruit, sans électricité et sans cordon.

Matériau sans BPA

Fabriqué en silicone de haute qualité. Sans BPA, PCV et phtalate.

Indolore et silencieux

Le collecteur de lait permet d'exprimer le lait maternel discrètement, silencieusement et rapidement. Évitez la gêne dans les lieux publics.

Il n'y a plus de fuite

Lorsque la plupart des mères allaitent, le sein de l'autre côté déverse souvent du lait maternel qui risque de mouiller vos vêtements ou votre bébé, ou de se répandre sur le coussin d'allaitement jetable. Le collecteur de lait permet de recueillir chaque goutte de lait maternel pendant l'allaitement.

Facile à nettoyer

Conception tout-en-un et aucun démontage n'est nécessaire. Ils sont très faciles à nettoyer à l'eau bouillante claire pendant environ 2 minutes.

03. MODE D'EMPLOI

VOIR FIG. A

1. Assurez-vous que votre collecteur de lait a été nettoyé avant et après utilisation.
2. Pressez la pompe pour expulser l'air interne.
3. Inversez la bride et placez-la sur votre mamelon en la centrant au milieu de la protection mammaire.
4. Rétablissez la bride, puis le tire-lait aspirera fermement votre sein.

5. Vous pouvez utiliser le produit comme collecteur. Le lait s'écoulera alors librement vers le tire-lait. Si vous souhaitez l'utiliser comme tire-lait manuel, pressez le tire-lait pour faciliter l'écoulement du lait.

04. SPECIFICATION

Matériau: Silicone+PP

Capacité: 100 ml

05. CARTE DE GARANTIE

Le produit est couvert par une garantie de 24 mois.

Les conditions de la garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante:

<https://neno.pl/gwarancja>

Les détails, le contact et l'adresse du site web sont disponibles à l'adresse suivante:

<https://neno.pl/kontakt>

Les spécifications et le contenu du kit peuvent être modifiés sans préavis. Nous nous excusons pour tout inconvénient.

RO

MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client,

vă mulțumim că ați cumpărat Neno Leite, un colector de lapte din silicon pentru colectarea laptelui în timpul hrănirii/pompării de la celălalt sân. Acesta are ca scop colectarea alimentelor într-un mod simplu și eficient.

01. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Înainte de fiecare utilizare, verificați starea produsului.
2. Vă recomandăm să folosiți numai perii sau bureți moi pentru curățare, deoarece materialele dure pot zgâria.
3. În cazul în care există semne de deteriorare, înlocuiți produsul.
4. Nu depozitați în apropierea obiectelor ascuțite.
5. Acest produs nu este o jucărie. Colectorul trebuie utilizat în conformitate cu destinația sa.
6. Depozitați produsul într-un loc uscat și evitați lumina directă a soarelui.

02. CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

Ușor de utilizat

Cu o singură apăsare, colectorul de lapte extrage laptele cu puterea de aspirare continuă - fără zgomot, fără electricitate și fără cabluri.

Material BPA FREE

Fabricat din silicon de înaltă calitate. Fără BPA, PCV și ftalat.

Fără durere și muncă silențioasă

Colectorul de lapte ajută la extragerea discretă, silențioasă și rapidă a laptelui matern. Evitați rușinea în locurile publice.

Nu mai există scurgeri

Atunci când majoritatea mamelor alăptează, sânul de pe cealaltă parte va vărsa adesea lapte matern care vă poate uda hainele sau bebelușul sau poate fi irosit pe pernuța de alăptare de unică folosință. Colectorul de lapte poate colecta fiecare picătură de lapte matern în timp ce alăptați.

Ușor de curățat

Design complet și nu necesită dezasamblare. Sunt foarte ușor de curățat cu apă clocotită timp de aproximativ 2 minute.

03. CUM SE UTILIZEAZĂ

VEZI FIG. A

1. Asigurați-vă că dispozitivul de colectare a laptelui a fost curățat înainte și după utilizare.
2. Strângeți pompa pentru a împinge afară aerul intern.
3. Intoarceți flanșa, puneți-o pe mamelon, centrat în mijlocul scutului mamar.
4. Refaceți flanșa, apoi pompa va aspira ferm pe sânul dumneavoastră.
5. Puteți utiliza produsul ca un colector. Laptele va curge apoi liber către pompă. Dacă doriți să îl utilizați ca pompă de sân manuală - strângeți pompa pentru a facilita scurgerea laptelui.

04. SPECIFICAȚIE

Material: Silicon + PP

Capacitate: 100 ml

05. CARD DE GARANȚIE

Produsul este acoperit de o garanție de 24 de luni.

Termenii garanției pot fi consultați la adresa: <https://nenopl/gwarancja>

Detalii, adresa de contact și adresa site-ului web pot fi găsite la:

<https://nenopl/kontakt>

*Specificações e conteúdo do kit podem ser modificados sem prévio aviso.
Não nos responsabilizamos por qualquer inconveniente.*

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

Caro Cliente,

obrigado por comprar Neno Leite, um coletor de leite de silicone para coletar leite durante a alimentação / bombeamento do outro peito. Tem como objetivo a recolha de alimentos de forma simples e eficaz.

01. MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. Antes de cada utilização, verifique o estado do produto.
2. Recomendamos usar apenas escovas macias ou esponjas para limpeza, materiais duros podem riscar.
3. Se houver algum sinal de dano, substitua o produto.
4. Não guarde perto de objetos pontiagudos.
5. Este produto não é um brinquedo. O coletor deve ser utilizado de acordo com a utilização prevista.
6. Guarde o produto em local seco e evite a luz solar direta.

02. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Fácil de usar

Com apenas um aperto, o coletor de leite extrai seu leite com o poder de sucção contínua - sem ruído, sem eletricidade e sem cabos.

Material livre de BPA

Feito de silicone de alta qualidade. Sem BPA, PCV e ftalato.

Indolor e trabalho silencioso

O coletor de leite ajuda a extrair o leite materno de forma discreta, silenciosa e rápida. Evite constrangimentos em locais públicos.

Sem mais vazamentos

Quando a maioria das mães está amamentando, o peito do outro lado muitas vezes derrama leite materno que pode molhar suas roupas ou seu bebê, ou ser desperdiçado na almofada de amamentação descartável. O coletor de leite pode coletar cada gota de leite materno enquanto você está amamentando.

Fácil de limpar

Design tudo-em-um e sem necessidade de desmontagem. Eles são muito fáceis de limpar com água fervente clara por cerca de 2 minutos.

03. COMO UTILIZAR

VER FIG. Um

1. Certifique-se de que o seu coletor de leite foi limpo antes e depois da utilização.
2. Aperte a bomba para empurrar o ar interno para fora.
3. Inverta o flange, coloque-o no mamilo centrado no meio do escudo mamário.
4. Restaure a flange, em seguida, a bomba sugaria firmemente o seu seio.
5. Você pode usar o produto como um coletor. O leite fluirá então livremente para a bomba. Se quiser usá-lo como bomba tira leite manual - aperte a bomba para facilitar a fuga de leite.

04. ESPECIFICAÇÃO

Material: Silicone+PP

Capacidade: 100 ml

05. CARTÃO DE GARANTIA

O produto está coberto por uma garantia de 24 meses.

Os termos da garantia podem ser consultados em: <https://neno.pl/gwarancja>

Detalhes, contato e endereço do site podem ser encontrados em:

<https://neno.pl/kontakt>

As especificações e o conteúdo do kit estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Pedimos desculpa pelo inconveniente.

HR/BA

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Poštovani kupče,
hvala vam što ste kupili Neno Leite, silikonski sakupljač mlijeka za prikupljanje mlijeka tijekom hranjenja / izdavanja s druge dojke. Cilj mu je prikupiti hranu na jednostavan i učinkovit način.

01. SIGURNOSNE MJERE

1. Prije svake uporabe provjerite stanje proizvoda.
2. Za čišćenje preporučujemo korištenje samo mekih četkica ili spužvi, tvrdi

materijali mogu se ogrebat.

3. Ako postoje znakovi oštećenja, zamijenite proizvod.
4. Ne čuvajte u blizini oštih predmeta.
5. Ovaj proizvod nije igračka. Kolektor treba koristiti u skladu s njegovom namjenom.
6. Proizvod čuvajte na suhom mjestu i izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.

02. ZNAČAJKE PROIZVODA

Jednostavan za korištenje

Samo jednim stiskanjem sakupljač mlijeka izvlači vaše mlijeko snagom kontinuiranog usisavanja - bez buke, bez struje i bez kabela.

Materijal bez BPA

Izrađen od visokokvalitetnog silikona. Nema BPA, PCV-a i ftalata.

Bezbolan i tihi rad

Sakupljač mlijeka pomaže u diskretnom, tihom i brzom izlučivanju majčinog mlijeka. Izbjegavajte neugodnosti na javnim mjestima.

Nema više curenja

Kada većina majki doji, dojka s druge strane često bi prolila majčino mlijeko koje može smočiti vašu odjeću ili bebu ili se potrošiti na jednokratni jastučić za dojenje. Sakupljač mlijeka može prikupiti svaku kap majčinog mlijeka dok dojite.

Lako se čisti

Dizajn sve u jednom i nije potrebno rastavljanje. Vrlo se lako čiste bistrom kipućom vodom oko 2 minute.

03. KAKO KORISTITI

VIDI SL. A

1. Provjerite je li vaš sakupljač mlijeka očišćen prije i nakon upotrebe.
2. Stisnite pumpu kako biste istisnuli unutarnji zrak.
3. Obrnite prirubnicu, stavite je na bradavicu centriranu u sredini štitnika za grudi.
4. Vratite prirubnicu, tada bi pumpa čvrsto usisala vašu dojku.
5. Proizvod možete koristiti kao kolekcionar. Mlijeko će tada slobodno teći do pumpe. Ako ga želite koristiti kao ručnu pumpu za dojke - stisnite pumpu kako biste olakšali curenje mlijeka.

04. SPECIFIKACIJA

Materijal: silikon + PP

Kapacitet: 100 ml

05. JAMSTVENI LIST

Proizvod je pokriven 24-mjesečnim jamstvom.

Uvjete jamstva možete pronaći na: <https://nenop.pl/gwarancja>

Detalje, kontakt i adresu web stranice možete pronaći na: <https://nenop.pl/kontakt>

Specifikacije i sadržaj kompleta podložni su promjenama bez prethodne najave.

Ispričavamo se zbog neugodnosti.

RS/ME

KORISNIČKO UPUTSTVO

Poštovani kupci,

hvala vam što ste kupili Neno Leite, silikonski sakupljač mleka za sakupljanje mleka tokom hranjenja / pumpanja iz druge dojke. Cilj mu je da prikupi hranu na jednostavan i efikasan način.

01. MERE BEZBEDNOSTI

1. Pre svake upotrebe proverite stanje proizvoda.
2. Preporučujemo da koristite samo meke četke ili sunđere za čišćenje, tvrdi materijali mogu ogrebat.
3. Ako postoji bilo kakav znak oštećenja, zamenite proizvod.
4. Ne skladištite u blizini oštarih predmeta.
5. Ovaj proizvod nije igračka. Kolektor treba koristiti u skladu sa njegovom namjenom.
6. Proizvod čuvajte na suvom mestu i izbegavajte direktnu sunčevu svetlost.

02. KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Jednostavan za korišćenje

Sa samo jednim stiskom, sakupljač mleka izvlači vaše mleko snagom kontinuiranog usisavanja - bez buke, bez struje i bez kablova.

Materijal bez BPA

Napravljen od visokog kvaliteta silikona. Nema BPA, PCV i ftalata.

Bezbolan i tihi rad

Sakupljač mleka pomaže da se majčino mleko izrazi diskretno, tiho i brzo. Izbegavajte sramotu na javnim mestima.

Nema curenja više

Kada većina majki doji, dojke sa druge strane često bi prosule majčino mleko koje može da skvasi vašu odeću ili bebu, ili da se troši na jednokratnu podlogu za negu. Sakupljač mleka može da sakupi svaku kap majčinog mleka dok dojite.

Lako se čisti

All-in-one dizajn i nije potrebno rastavljanje. Vrlo se lako čiste bistrom kipućom vodom oko 2 minuta.

03. KAKO KORISTITI

VIDI SL. A

1. Uverite se da je vaš sakupljač mleka očišćen pre i posle upotrebe.
2. Stisnite pumpu da gurne unutrašnji vazduh napolje.
3. Obrnite prirubnicu, stavite je na bradavicu centriranu u sredini štitnika za grudi.
4. Vratite prirubnicu, onda će pumpa čvrsto usisati na dojke.
5. Proizvod možete koristiti kao kolektor. Mleko će tada slobodno teći do pumpe. Ako želite da ga koristite kao ručnu pumpu za grudi - stisnite pumpu kako biste olakšali curenje mleka.

04. SPECIFIKACIJU

Materijal: Silikon + PP

Kapacitet: 100 ml

05. GARANTNI LIST

Proizvod je pokriven garancijom od 24 meseca.

Uslovi garancije mogu se naći na: <https://neno.pl/gwarancja>

Detalje, kontakt i adresu sajta možete naći na: <https://neno.pl/kontakt>

Specifikacije i sadržaj kompleta podložni su promenama bez prethodne najave.

Izvinjavamo se zbog neugodnosti.

SI

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Spoštovana stranka,

hvala, ker ste kupili Neno Leite, silikonski zbiralnik mleka za zbiranje mleka med hranjenjem / črpanjem iz druge dojke. Njegov cilj je zbiranje hrane na enostaven in učinkovit način.

01. VARNOSTNI UKREPI

1. Pred vsako uporabo preverite stanje izdelka.
2. Za čiščenje priporočamo uporabo samo mehkih ščetk ali gobic, trdi materiali se lahko opraskajo.
3. Če obstajajo znaki poškodbe, izdelek zamenjajte.
4. Ne shranjujte v bližini ostrih predmetov.
5. Ta izdelek ni igrača. Zbiralnik je treba uporabljati v skladu s predvideno uporabo.
6. Izdelek shranjujte na suhem mestu in se izogibajte neposredni sončni svetlobi.

02. LASTNOSTI IZDELKA

Enostaven za uporabo

Z enim samim stiskom zbiralnik mleka izvleče vaše mleko z močjo neprekinjenega sesanja - brez hrupa, brez elektrike in brez kablov.

Material brez BPA

Izdelana iz visoko kakovostnega silikona. Brez BPA, PCV in ftalatov.

Neboleč in tiho delo

Zbiralnik mleka pomaga diskretno, tiho in hitro izraziti materino mleko. Izogibajte se zadregi na javnih mestih.

Ni več puščanja

Ko večina mater doji, bi dojke na drugi strani pogosto razlile materino mleko, ki lahko zmoči vaša oblačila ali vašega otroka ali pa se zapravlja na blazini za dojenje za enkratno uporabo. Zbiralnik mleka lahko med dojenjem zbere vsako kapljico materinega mleka.

Enostavno čiščenje

Vsestranska zasnova in brez razstavljanja. Zelo enostavno jih je očistiti s čisto vrelo vodo približno 2 minuti.

03. KAKO UPORABLJATI

GLEJ SL. A

1. Prepričajte se, da je zbiralnik mleka očiščen pred in po uporabi.
2. Stisnite črpalko, da potisnete notranji zrak ven.
3. Obrnite prirobnico in jo položite na bradavico na sredini prsnega ščitnika.
4. Obnovite prirobnico, nato pa bi črpalka trdno sesala na vaše prsi.
5. Izdelek lahko uporabljate kot zbiratelj. Mleko bo nato prosto teklo v črpalko. Če ga želite uporabiti kot ročno črpalko za dojke - stisnite črpalko, da olajšate

uhajanje mleka.

04. SPECIFIKACIJA

Material: silikon + PP

Prostornina: 100 ml

05. GARANCIJSKI LIST

Izdelek je zajet s 24-mesečno garancijo.

Pogoji garancije so na voljo na: <https://neno.pl/gwarancja>

Podrobnosti, kontakt in naslov spletne strani so na voljo na:

<https://neno.pl/kontakt>

Specifikacije in vsebina kompleta se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

GR

ПОТРЕБИТЕЛЯ

Αγαπητέ πελάτη,

σας ευχαριστούμε που αγοράσατε Neno Leite, έναν συλλέκτη γάλακτος σιλικόνης για τη συλλογή γάλακτος κατά τη διάρκεια της σίτισης / άντλησης από το άλλο στήθος. Στοχεύει στη συλλογή τροφίμων με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

01. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την κατάσταση του προϊόντος.
2. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο μαλακές βούρτσες ή σφουγγάρια για καθαρισμό, τα σκληρά υλικά μπορεί να γρατσουνίσουν.
3. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε σημάδι ζημιάς, αντικαταστήστε το προϊόν.
4. Μην αποθηκεύετε κοντά σε αιχμηρά αντικείμενα.
5. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Ο συλλέκτης πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται.
6. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

02. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εύκολο στη χρήση

Με μία μόνο συμπίεση, ο συλλέκτης γάλακτος αντλεί το γάλα σας με τη δύναμη της συνεχούς αναρρόφησης - χωρίς θόρυβο, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς καλώδια.

Υλικό BPA FREE

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας σιλικόνη. Χωρίς BPA, PCV και φθαλικά εστέρα.

Ανώδυνη και αθόρυβη εργασία

Ο συλλέκτης γάλακτος βοηθά στην έκφραση του μητρικού γάλακτος διακριτικά, αθόρυβα και γρήγορα. Αποφύγετε την αμηχανία σε δημόσιους χώρους.

Καμία διαρροή πια

Όταν οι περισσότερες μητέρες θηλάζουν, το στήθος από την άλλη πλευρά συχνά χύνει μητρικό γάλα που μπορεί να βρέξει τα ρούχα σας ή το μωρό σας ή να σπαταληθεί στο μαξιλάρι θηλασμού μιας χρήσης. Ο συλλέκτης γάλακτος μπορεί να συλλέξει κάθε σταγόνα μητρικού γάλακτος ενώ θηλάζετε.

Εύκολος καθαρισμός

Σχεδιασμός all-in-one και δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση. Είναι πολύ εύκολο να καθαριστούν με καθαρό βραστό νερό για περίπου 2 λεπτά.

03. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΛΕΠΕ ΣΧ. Ένας

1. Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης γάλακτος έχει καθαριστεί πριν και μετά τη χρήση.
2. Πιέστε την αντλία για να ωθήσετε τον εσωτερικό αέρα προς τα έξω.
3. Αναστρέψτε τη φλάντζα, τοποθετήστε την στη θηλή σας κεντραρισμένη στη μέση της ασπίδας στήθους.
4. Επαναφέρετε τη φλάντζα, τότε η αντλία θα πιπιλίζει σταθερά στο στήθος σας.
5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως συλλέκτης. Στη συνέχεια, το γάλα θα ρέει ελεύθερα στην αντλία. Εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε ως χειροκίνητο θήλαστρο - πιέστε την αντλία για να διευκολύνετε τη διαρροή γάλακτος.

04. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Υλικό: Σιλικόνη + PP

Χωρητικότητα: 100 ml

05. ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών.

Οι όροι της εγγύησης βρίσκονται στη διεύθυνση: <https://neno.pl/gwarancja>

Λεπτομέρειες, επικοινωνία και διεύθυνση ιστότοπου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: <https://neno.pl/kontakt>

Oi προδιαγραφές και το περιεχόμενο του κιτ υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία.

LT

NAUDOTOJO VADOVAS

Gerbiamas Kliente,

dėkojame, kad įsigijote „Neno Leite“, silikoninį pieno surinkėją, skirtą pienui rinkti maitinant / pumpuojant iš kitos krūties. Juo siekiama paprastai ir efektyviai surinkti maistą.

01. SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite produkto būklę.
2. Valymui rekomenduojame naudoti tik minkštus šepetėlius ar kempines, kietos medžiagos gali subraižyti.
3. Jei yra kokių nors pažeidimo požymių, pakeiskite gaminį.
4. Nelaikykite šalia aštrių daiktų.
5. Šis produktas nėra žaistas. Kolektorius turėtų būti naudojamas pagal numatytą paskirtį.
6. Laikykite produktą sausoje vietoje ir venkite tiesioginių saulės spindulių.

02. PRODUKTO SAVYBĖS

Lengva naudoti

Vos vienu paspaudimu pieno surinkėjas ištraukia jūsų pieną nuolatinio siurbimo galia - be triukšmo, be elektros ir be laidų.

BPA nemokama medžiaga

Pagaminta iš aukštos kokybės silikono. Nėra BPA, PCV ir ftalato.

Neskausmingas ir tylus darbas

Pieno surinkėjas padeda diskretiškai, tyliai ir greitai išreikšti motinos pieną. Venkite gėdos viešose vietose.

Daugiau jokio nuotėkio

Kai dauguma motinų maitina krūtimi, kitoje pusėje esanti krūtis dažnai išsilieja motinos pienu, kuris gali sudrėkinti jūsų drabužius ar kūdikį arba būti iššvaistytas ant vienkartinio slaugos įklotų. Pieno surinkėjas gali surinkti kiekvieną motinos pieno lašą, kol maitinate krūtimi.

Lengva valyti

„Viskas viename“ dizainas ir nereikia išardyti. Juos labai lengva valyti švariu verdančiu vandeniu maždaug 2 minutes.

03. KAIP NAUDOTIS

ŽR. A

1. Įsitikinkite, kad jūsų pieno surinkėjas buvo išvalytas prieš ir po naudojimo.
2. Išspauskite siurbį, kad išstumtumėte vidinį orą.
3. Apverskite flanšą, padėkite jį ant spenelio, kurio centras yra krūties skydo viduryje.
4. Atkurkite flanšą, tada pompa tvirtai įsisiurbtų į jūsų krūtį.
5. Produktą galite naudoti kaip kolekcionierių. Tada pienas laisvai tekės į siurbį. Jei norite jį naudoti kaip rankinį krūties siurbį - išspauskite siurbį, kad palengvintumėte pieno nutekėjimą.

04. SPECIFIKACIJOS

Medžiaga: silikonas + PP

Talpa: 100 ml

05. GARANTIJOS KORTELĖ

Gaminiui taikoma 24 mėnesių garantija.

Garantijos sąlygas galima rasti: <https://neno.pl/gwarancja>

Išsamią informaciją, kontaktinį adresą ir interneto svetainės adresą galima rasti adresu: <https://neno.pl/kontakt>

Rinkinio specifikacijos ir turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Atsiprašome už nepatogumus.

LV

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Cienījamie klienti,

paldies, ka iegādājāties Neno Leite, silikona piena savācēju piena savākšanai barošanas / sūkņēšanas laikā no otras krūts. Tā mērķis ir savākt pārtiku vienkāršā un efektīvā veidā.

01. DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Pirms katras lietošanas pārbaudiet produkta stāvokli.
2. Tīrīšanai iesakām izmantot tikai mīkstas birstes vai sūkļus, cietie materiāli

var saskrāpēt.

3. Ja ir kādas bojājumu pazīmes, nomainiet produktu.
4. Neuzglabājiēt asu priekšmetu tuvumā.
5. Šis produkts nav rotaļlieta. Kolektors jālieto atbilstoši paredzētajam lietojumam.
6. Uzglabājiēt produktu sausā vietā un izvairieties no tiešiem saules stariem.

02. PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Viegli lietojams

Tikai ar vienu izspiešanu, piena savācējs izvelk jūsu pienu ar nepārtrauktas sūkšanas jaudu - bez trokšņa, bez elektrības un bez vadiem.

Materiāls bez BPA

Izgatavots no augstas kvalitātes silikona. Nav BPA, PCV un ftalāta.

Nesāpīgs un kluss darbs

Piena savācējs palīdz diskrēti, klusi un ātri izteikt mātes pienu. Izvairieties no apmulsuma sabiedriskās vietās.

Vairs nav noplūdes

Kad lielākā daļa mātes baro bērnu ar krūti, krūts otrā pusē bieži izšļakstīja mātes pienu, kas var saslapināt jūsu drēbes vai bērnu vai izšķērdēt vienreizlietojamo zīdīšanas spilventiņu. Piena savācējs var savākt katru pilienu mātes piena zīdīšanas laikā.

Viegli tīrāms

Viss vienā dizains un nav nepieciešama izjaukšana. Tos ir ļoti viegli tīrīt ar dzidru verdošu ūdeni apmēram 2 minūtes.

03. KĀ LIETOT

SKATĪT ATTĒLU. A

1. Pārliecinieties, ka piena savācējs ir iztīrīts pirms un pēc lietošanas.
2. Izspiediet sūkni, lai izstumtu iekšējo gaisu.
3. Apgrieziet atloku, novietojiet to uz krūtsgala, kas centrēts krūšu vairoga vidū.
4. Atjaunojiet atloku, tad sūknis stingri iesūksies uz krūtīm.
5. Jūs varat izmantot produktu kā kolekcionāru. Pēc tam piens brīvi plūst uz sūkni. Ja vēlaties to izmantot kā manuālu krūts sūkni - izspiediet sūkni, lai atvieglotu piena noplūdi.

04. SPECIFIKĀCIJU

Materiāls: silikons + PP

Ietilpība: 100 ml

05. GARANTIJA KARTE

Produktam ir 24 mēnešu garantija.

Garantijas noteikumus var atrast: <https://nenopli/gwarancja>

Sīkāka informācija, kontaktpersona un tīmekļa vietnes adrese ir atrodama šeit:

<https://nenopli/kontakt>

Komplekta specifikācijas un saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs atvairināmies par jebkādam neērtībām.

ET

KASUTUSJUHEND

Lugupeetud klient,

aitāh, et ostsīte Neno Leite, silikoonist piimakoguja piima kogumiseks teisest rinnast toitmise / pumpamise ajal. Selle eesmärk on koguda toitu lihtsal ja tōhusal viisil.

01. OHUTUSMEETMED

1. Enne iga kasutamist kontrollige toote seisukorda.
2. Soovitame puhastamiseks kasutada ainult pehmeid harju vōi kāsnsid, kōvad materjalid vōivad kriimustada.
3. Kui on kahjustusi, vahetage toode vālja.
4. Ārge hoidke teravate esemete lāheduses.
5. See toode ei ole mānguasi. Kollektorit tuleb kasutada vastavalt selle sihtotstarbele.
6. Hoidke toodet kuivas kohas ja vāltige otsest pāikesevalgust.

02. TOOTE OMADUSED

Lihtne kasutada

Vaid ūhe pigistusega tōmbab piimakoguja teie piima vālja pideva imemise jōul - ilma mūra, elektri ja juhtmeteta.

BPA-vaba materjal

Valmistatud kvaliteetsest silikoonist. Ei sisalda BPA-d, PCV-d ega ftalaati.

Valutu ja vaikne tōō

Piimakoguja aitab rinnapiima diskreetselt, vaikselt ja kiiresti vālja pumbata. Vāltige piinlikkust avalikes kohtades.

Enam pole leket

Kui enamik emasid toidab last rinnaga, valgub teisel küljel olev rind sageli rinnapiima, mis võib teie riideid või last märjaks teha või ühekordselt kasutatavale imetamispadjale raisata. Piimakogu suudab rinnaga toitmise ajal koguda iga tilga rinnapiima.

Lihntne puhastada

Kõik-ühes disain ja lahtivõtmist pole vaja. Neid on väga lihtne puhastada puhta keeva veega umbes 2 minutit.

03. KUIDAS KASUTADA

VT JOONIS. A

1. Veenduge, et teie piimakogu oleks enne ja pärast kasutamist puhastatud.
2. Pigistage pumpa, et siseõhk välja suruda.
3. Pöörake äärik ümber, asetage see rinnakilbi keskele nibule.
4. Taastage äärik, siis imeb pump kindlalt teie rinda.
5. Võite toodet kasutada kollektsionäärina. Seejärel voolab piim vabalt pumpa.
Kui soovite seda kasutada manuaalse rinnapumbana, pigistage pumpa, et hõlbustada piimalekkeid.

04. SPETSIFIKATSIOON

Materjal: silikoon+PP

Mahutavus: 100 ml

05. GARANTIIKAART

Tootele kehtib 24-kuuline garantii.

Garantii tingimused on leitavad aadressilt: <https://neno.pl/gwarancja>

Üksikasjad, kontaktandmed ja veebisaidi aadress leiate aadressilt:

<https://neno.pl/kontakt>

Komplekti tehnilisi andmeid ja sisu võidakse ette teatamata muuta. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

UA

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Шановний Замовник,

Дякуємо за придбання Neno Leite, силіконового збирача молока для збору молока під час годування / зціджування з іншої груді. Він спрямований на збір їжі простим та ефективним способом.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Перед кожним використанням перевіряйте стан виробу.
2. Рекомендуємо використовувати для чищення тільки м'які щітки або губки, тверді матеріали можуть подрпати.
3. Якщо є будь-які ознаки пошкодження, замініть виріб.
4. Не зберігати поблизу гострих предметів.
5. Цей виріб не є іграшкою. Колектор слід використовувати відповідно до його призначення.
6. Зберігайте виріб у сухому місці та уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

Простота у використанні

Лише одним стисканням молокозбірник витягує молоко з потужністю безперервного всмоктування – без шуму, без електрики та без шнурів.

Матеріал, що не містить бісфенолу А

Виготовлений з високоякісного силікону. Не містить BPA, PCV і фталатів.

Безболісність і безшумна робота

Молокозбірник допомагає зціджувати грудне молоко непомітно, безшумно і швидко. Уникайте конфузів в громадських місцях.

Більше ніякого витоку

Коли більшість матерів годують грудьми, з іншого боку часто проливається грудне молоко, яке може намочити ваш одяг або вашу дитину, або бути витрачене на одноразову прокладку для годування. Збирач молока може збирати кожну краплю грудного молока під час годування груддю.

Легко чистити

Конструкція «все в одному» і не вимагає розбирання. Їх дуже легко очистити чистим кип'ятком протягом приблизно 2 хвилин.

3. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ДИВ. А

1. Переконайтеся, що ваш контейнер для молока був очищений до та після використання.
2. Стисніть насос, щоб витіснити внутрішнє повітря.
3. Переверніть фланець, покладіть його на сосок по центру посередині щітки для грудей.
4. Відновіть фланець, тоді насос буде міцно присмоктуватися до ваших

грудей.

5. Ви можете використовувати продукт як колекціонер. Після цього молоко буде вільно надходити до насоса. Якщо ви хочете використовувати його як ручний молоковідсмоктувач - стисніть насос, щоб полегшити витік молока.

4. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Матеріал: силікон + ПП

Ємність: 100 мл

5. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На товар поширюється гарантія 24 місяці.

З умовами гарантії можна ознайомитися за адресою: <https://neno.pl/gwarancja>

Деталі, контакти та адресу сайту можна знайти за адресою:

<https://neno.pl/kontakt>

Технічні характеристики та вміст комплекту можуть бути змінені без попередження. Приносимо вибачення за можливі незручності.

МК

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

Драги клієнти,

Благодариме ви за купування на Neno Leite, силіконски колектор за млеко за собирање млеко за време на хранење / пумпање од другата града. Таа има за цел да собира храна на едноставен и ефикасен начин.

1. БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

1. Пред секоја употреба, проверете состојбата на производот.
2. Препорачуваме да се користат само меки четки или сунѓери за чистење, тврдите материјали може да се изгребат.
3. Ако има знаци на оштетување, заменете го производот.
4. Не чувајте во близина на остри предмети.
5. Овој производ не е играчка. Колекторот треба да се користи во согласност со неговата намена.
6. Чувајте го производот на суво место и избегнувајте директна сончева светлина.

2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Лесен за користење

Со само едно притискање, колекторот за млеко го извлекува млекото со моќ на континуирано вшмукување - без бучава, без струја и без жици.

Материјал без BPA

Изработен е од висок квалитет на силикон. Нема BPA, PCV и фталат.

Безболно и тивко

Собирачот на млеко помага да се изцеди мајчиното млеко дискретно, тивко и брзо. Избегнувајте засрамување на јавни места.

Нема повеќе протекување

Кога повеќето мајки дојат, градите од другата страна често се истуруваат мајчино млеко кое може да ја намокри вашата облека или бебето. Собирачот на млеко може да ја собере секоја капка мајчино млеко додека доите.

Лесно се чисти

Сè во еден дизајн и не е потребно разглобување. Тие се многу лесни за чистење со чиста врела вода за околу 2 минути.

3. КАКО ДА СЕ КОРИСТИ

ВИДЕТЕ СЛИКА. А

1. Уверете се дека колекторот за млеко е исчистен пред и по употребата.
2. Стиснете ја пумпата за да го истуркате внатрешниот воздух надвор.
3. Превртете ја прирубницата, ставете ја на брадавицата во центарот на средината на градниот штитник.
4. Вратете ја прирубницата, тогаш пумпата цврсто ќе ви цица градите.
5. Можете да го користите производот како колекционер. Млекото потоа слободно ќе тече до пумпата. Ако сакате да го користите како рачна пумпа за доење - стиснете ја пумпата за да го олесните истекувањето на млекото.

4. СПЕЦИФИКАЦИЈА

Материјал: силикон + PP

Капацитет: 100 мл

5. ГАРАНЦИОНА КАРТИЧКА

Производот е покриен со 24-месечна гаранција.

Условите на гаранцијата може да се најдат на: <https://nenopl/gwarancja>

Детали, контакт и адреса на веб-сајтот може да се најдат на:

<https://nenopl/kontakt>

Спецификациите и содржината на комплетот се предмет на промена без

РЪКОВОДСТВО ЗА

Уважаеми клиенти,

благодарим ви, че закупихте Neno Leite, силиконов колектор за мляко за събиране на мляко по време на хранене / изцеждане от другата гърда. Той има за цел да събира храна по прост и ефективен начин.

1. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди всяка употреба проверявайте състоянието на продукта.
2. Препоръчваме да използвате само меки четки или гъби за почистване, твърдите материали могат да се надраскат.
3. Ако има някакви признаци на повреда, сменете продукта.
4. Не съхранявайте в близост до остри предмети.
5. Този продукт не е играчка. Колекторът трябва да се използва в съответствие с предназначението му.
6. Съхранявайте продукта на сухо място и избягвайте пряка слънчева светлина.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Лесен за използване

Само с едно изстискване колекторът за мляко изтегля млякото ви със силата на непрекъснато засмукване - без шум, без електричество и без кабели.

Материал без BPA

Изработен от висококачествен силикон. Без BPA, PCV и фталат.

Безболезнена и безшумна работа

Колекторът за мляко помага за изцеждане на кърмата дискретно, безшумно и бързо. Избягвайте неудобството на обществени места.

Вече няма течове

Когато повечето майки кърмят, гърдата от другата страна често разлива кърма, която може да намокри дрехите ви или бебето ви или да се губи върху подложката за кърмене за еднократна употреба. Колекторът за мляко може да събере всяка капка кърма, докато кърмите.

Лесен за почистване

Дизайн „всичко в едно“ и не е необходимо разглобяване. Те се почистват много лесно с бистра вряща вода за около 2 минути.

3. НАЧИН НА УПОТРЕБА

ВИЖ ФИГ. Една

1. Уверете се, че вашият колектор за мляко е почистен преди и след употреба.
2. Стиснете помпата, за да изтласкате вътрешния въздух навън.
3. Обърнете фланеца, поставете го върху зърното си, центрирано в средата на щита за гърди.
4. Възстановете фланеца, тогава помпата ще засмуква здраво гърдите ви.
5. Можете да използвате продукта като колекционер. След това млякото ще тече свободно към помпата. Ако искате да го използвате като ръчна помпа за кърма - стиснете помпата, за да улесните изтичането на мляко.

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал: силикон + PP

Вместимост: 100 мл

5. ГАРАНЦИОННА КАРТА

Продуктът е покрит от 24-месечна гаранция.

Условията на гаранцията могат да бъдат намерени на:

<https://neno.pl/gwarancja>

Подробности, контакт и адрес на уебсайта можете да намерите на:

<https://neno.pl/kontakt>

Спецификациите и съдържанието на комплекта подлежат на промяна без предизвестие. Извиняваме се за причиненото неудобство.

nenor[®]

Producent:

KGK TREND Sp. z o.o.
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków, Polska.
Wyprodukowano w PRC

Producer:

KGK TREND Sp. z o. o.
st. Ujastek 5b, 31-752 Cracow, Poland.
Made in PRC