

nenor[®]

Sole Twin



Table of contents



Spis treści

7	Instrukcja obsługi	PL
13	User manual	EN
20	Bedienungsanleitung	DE
27	Návod k použití	CZ
33	Használati utasítás	HU
40	Používateľská príručka	SK
46	Användarhandbok	SE
53	Käyttäjän käsikirja	FI
59	Brugerhåndbok	NO
65	Brugermanual	DK
72	Gebruikershandleiding	NL
78	Manual del usuario	ES
85	Manuale utente	IT
92	Manuel de l'utilisateur	FR
98	Manual de utilizare	RO
105	Korisnički priručnik	HR/BA
111	Uputstvo za upotrebu	RS/ME
117	Uporabniški pravilnik	SI
124	Εγχειρίδιο χρήστη	GR
131	Lietotāja rokasgrāmata	LV
137	Vartotojo vadovas	LT
143	Kasutusjuhend	ET
150	Посібник користувача	UA
157	Ръководство за потребителя	BG
164	Упатство за употреба	MK
171	Manual do utilizador	PT


A



B

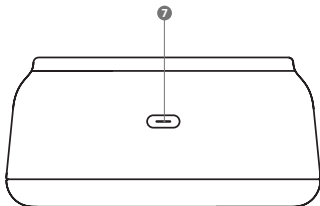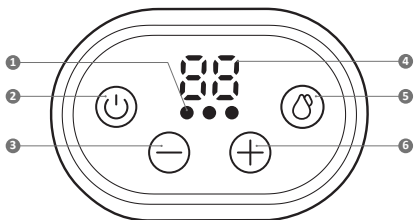

C

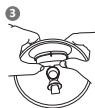

D



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,
kupione przez Ciebie urządzenie Neno Sole Twin, to podwójny, elektroniczny, trójfazowy laktator służący do odciągania pokarmu z piersi kobiety po porodzie. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.

01. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Zawsze odłączaj urządzenie od prądu po naładowaniu, jeśli nie musisz ładować akumulatora urządzenia.
2. Nie umieszczaj produktu w miejscach, w których grozi mu wpadnięcie do zlewu, wanny lub innych zbiorników z wodą.
3. Laktator i jego komponenty nie są odporne na wysokie temperatury – trzymaj urządzenie z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia.
4. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
5. Laktator nie powinien być pozostawiony bez opieki, gdy jest podłączony do źródła zasilania.
6. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób.
7. Nie korzystaj z urządzenia, którego przewód lub wtyczka zasilania są uszkodzone.
8. Nie korzystaj z urządzenia w wannie lub pod prysznicem.
9. Nie umieszczaj urządzenia pod wodą lub w innych płynach.
10. Nie myj urządzenia pod bieżącą wodą.
11. Nie podłączaj urządzenia do gniazdka zasilania, które miało kontakt z wodą lub innymi płynami.
12. Jeżeli urządzenie zostało wystawione na działanie wody lub innych płynów – nie dotykaj urządzenia bezpośrednio, odłącz je od zasilania, wyłącz je i skontaktuj się z producentem.
13. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez pojedynczego użytkownika. Korzystanie z laktatora przez więcej, niż jedną osobę, niesie ze sobą ryzyko uszczerbku na zdrowiu użytkowników i unieważnia gwarancję.
14. Nie dokonuj samodzielnej naprawy lub modyfikacji urządzenia.
15. Używaj laktatora tylko w sposób opisany w instrukcji. Nie stosuj urządzenia w żadnym innym celu.
16. Dokonaj inspekcji wszystkich elementów laktatora przed każdym

- użyciem.
17. Nie podgrzewaj odprowadzonego mleka w mikrofali. Mleko podgrzewane w mikrofali może poparzyć buzię dziecka, ponieważ podgrzewanie z użyciem fal mikrofalowych może wytworzyć pęcherzyki wysokiej temperatury w płynie. Dodatkowo, fale mikrofalowe mogą zmienić skład mleka.
 18. Nie doprowadź do wrzenia mleka w czasie jego podgrzewania.
 19. Przed pierwszym użyciem laktatora, umyj i zdezynfekuj wszystkie elementy urządzenia, które będą wchodzić w bezpośredni kontakt z Twoją piersią lub z mlekiem.
 20. Po każdym użyciu laktatora, umyj wszystkie elementy urządzenia, które wchodzi w bezpośredni kontakt z Twoją piersią lub z mlekiem.
 21. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy używasz laktatora lub jego akcesoriów w pobliżu dzieci.
 22. Nie korzystaj z laktatora w trakcie ładowania.

02. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Podłącz laktatory do zasilania. Ładuj baterie przez 2,5 godziny.
2. Zdejmij pompę laktatora.
3. Odłącz elementy laktatora, które będą miały bezpośredni kontakt z piersią lub mlekiem: zdejmij lejek z pojemnika na mleko, następnie pociągnij zawór w dół, a membranę w górę, aby odłączyć od konektora.
4. Umyj elementy urządzenia (odnieś się do działu CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA).

UWAGA!

Należy używać laktatora w pozycji pionowej. Korzystanie w innej pozycji (np. leżącej) doprowadzi do nieprawidłowego dopasowania laktatora do piersi i wylewania mleka.

03. ELEMENTY

RYS. A

1. Urządzenie pompujące x2
2. Pojemnik na mleko x2
3. Konektor x2
4. Zaworek x4
5. Kabel ładujący USB-C x2
6. Lejek 24mm x2
7. Membrana x4
8. Reduktor lejka 20mm x2

04. OPIS URZĄDZENIA POMPUJĄCEGO

RYŚ. B

1. Ikona wybranego trybu (I kropka - faza stymulacji, II kropki - faza głębokiego odciągania, III kropki - faza mieszana).
2. Przycisk zasilania – Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy aby wyłączyć lub wyłączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone naciśnij, aby wstrzymać pracę laktatora.
3. Zmiana poziomu ssania – Naciśnij „-”, aby zmniejszyć siłę ssania.
4. Ikona wybranego trybu (L1-L8)/czasu pracy laktatora.
5. Przycisk zmiany trybu – Naciśnij przycisk aby zmienić tryb pracy urządzenia.
6. Zmiana poziomu ssania – Naciśnij „+”, aby zwiększyć siłę ssania.
7. Gniazdo ładowania USB-C

05. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Mycie oraz dezynfekcja to dwie różne czynności. Muszą być dokonywane oddzielnie, aby chronić Twoje dziecko oraz zapewnić poprawne działanie laktatora.

Mycie - przemyć powierzchnię urządzenia i usunięcie zanieczyszczeń.

Dezynfekcja - zabicie organizmów takich jak bakterie czy wirusy, które mogą być obecne na powierzchni urządzenia.

Lejek, membrana, zaworek, reduktor, konektor, pojemnik na mleko:

Przed pierwszym użyciem – mycie i dezynfekcja.

Po każdym użyciu – mycie.

Raz dziennie oraz przed pierwszym użyciem – dezynfekcja.

A. MYCIE:

- Rozmontuj wszystkie elementy laktatora (z wyjątkiem urządzenia pompującego) i umyć w ciepłej wodzie z mydłem przez 5 minut, następnie opłucz.

Należy wykonać od razu po użyciu urządzenia. Dzięki temu usuniesz osad z mleka i zapobiegiesz rozwojowi bakterii.

- Do mycia używaj tylko wody z kranu, która jest zdatna do picia. Użyj wody butelkowanej, jeśli woda w twoim kranie nie spełnia tego wymogu.

- Przy czyszczeniu silikonowych elementów nie używaj szczotek. Uważaj, aby nie przebić ich na wylot.

- Korzystaj z delikatnego płynu do naczyń lub mydła.

- Daj elementom wyschnąć naturalnie. Przechowuj suche części urządzenia w chłodnym i suchym miejscu, gdy z nich nie korzystasz.

B. DEZYNFEKCJA:

Membrana, zaworek, reduktor, konektor, lejek, pojemnik na mleko:

- Napełnij garnek lub sterylizator wodą tak, aby wszystkie umieszczone w nim elementy (membranę, zaworek, reduktory, konektor, lejek, pojemnik na mleko) były przykryte po ich umieszczeniu wewnątrz. Doprowadź do wrzenia. Umieść elementy laktatora we wrzącej wodzie na 10 minut. Nie gotuj.
- Pozwól elementom wyschnąć naturalnie. Przechowuj suche elementy zestawu w chłodnym, suchym miejscu, gdy z nich nie korzystasz.

C. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA POMIĄJĄCEGO:

- Przetrzyj jednostkę pompującą z użyciem delikatnej, mokrej ściereczki i delikatnego płynu do naczyń/mydła. Inne środki czystości lub materiały ściernie mogą uszkodzić urządzenie i jego wyświetlacz.
- Gdy nie korzystasz z jednostki pompującej, przechowuj ją w chłodnym, suchym miejscu.

06. MONTAŻ I UŻYWANIE LAKTATORA

RYS. C

Zamocuj elementy zgodnie z RYS. C 1-5.

UWAGA: Dokładnie umyj ręce mydłem oraz wodą przed dotykaniem laktatora i piersi.

1. Włóż membranę do konektora. **RYS. C1.**
2. Podłącz zaworek do konektora. **RYS. C2. UWAGA:** zaworek powinien być zamocowany dłuższą częścią w stronę lejka. Poglądowo: **RYS. C6.**
3. Zamocuj konektor z membraną i zaworkiem w pojemniku na mleko, zaczynając od umieszczenia membrany w wyżłobieniu. **RYS. C3.**
4. Umieść lejek w pojemniku na mleku. **RYS. C4.**
5. Zamocuj urządzenie pompujące w górnej części pojemnika na mleko. **RYS. C5.**
6. Umieść lejek na piersi tak, aby sutek znajdował się wewnątrz kanału odprowadzającego. Przyciśnij lejek oraz złączenie laktatora do Twojej piersi, korzystając z kciuka i palca wskazującego. **RYS. C6.**
7. Włóż laktator do biustonosza/gorsetu laktacyjnego. **RYS. C7.**
8. Włącz laktator naciskając przycisk zasilania i wybierz odpowiadający Ci tryb działania.
9. Aby przelać mleko przytrzymaj laktator poziomo i odkręć ostrożnie pompę **RYS C8.** Trzymaj pojemnik z mlekiem leżkiem skierowanym do góry - połóż go płasko na blacie stołu (nie kładź go do góry, aby zapobiec wypłynięciu mleka). **RYS C9.** Ostrożnie przelej mleko do butelki/pojemnika do przechowywania. **RYS C10.**
10. Po użyciu wyjąć i oczyścić wszystkie elementy laktatora. **RYS C11.**

Rady:

- a. Przed każdym użyciem sprawdź czy części laktatora nie są uszkodzone. W razie potrzeby zastąp uszkodzone elementy nowymi.
- b. Zawsze sprawdzaj czystość elementów przed użyciem urządzenia.
- c. Jeżeli średnica lejka jest zbyt duża, użyj dołączonego reduktora, wkładając go do środka lejka. **RYS. C12.**

UWAGI:

Laktator zaczyna pracę w trybie stymulacji. Ustaw wygodny dla Ciebie poziom siły ssania z użyciem przycisków +/-:

- Tryb stymulacji - szybkie pompowanie, które naśladuje naturalne ssanie mleka z piersi przez dziecko, stymulujące przepływ mleka. Po 2 minutach, laktator automatycznie włączy tryb głębokiego odciągania. Dostosuj poziom siły ssania z użyciem przycisków +/-, aby znaleźć najwyższy poziom siły ssania, który jest dla Ciebie komfortowy. Jeżeli pokarm zacznie wypływać z Twojej piersi przed upływem dwóch minut, naciśnij przycisk zmiany trybu, aby ręcznie przejść do trybu głębokiego poboru pokarmu.
- Tryb głębokiego odciągania - wolniejsze pompowanie, które delikatnie i wydajnie zasysa mleko z piersi. W trybie poboru pokarmu, zwiększ siłę ssania do momentu, w którym odczuwasz lekki dyskomfort (nie ból) i zmniejsz siłę ssania o jeden stopień.
- Tryb mieszany - naśladuje odruch ssania dziecka. Może być używany po odciążeniu pokarmu, aby pomóc opróżnić pierś i zwiększyć laktację.

07. ŁADOWANIE LAKTATORA

W pełni naładuj akumulator laktatora przed odłożeniem go do przechowywania, jeżeli zamierzasz nie korzystać z urządzenia przez długi okres czasu. Naładuj baterię urządzenia, zanim zostanie zupełnie wyczerpana. Wydłuża to żywotność baterii. Jeżeli laktator był przechowywany w gorącym miejscu, akumulator urządzenia może z początku nie działać. Pozwól laktatorowi ochłodzić się przez godzinę zanim zaczniesz użytkowanie.

Oznaczenia:

LO – wyświetla się, jeżeli poziom baterii jest poniżej 20%. **RYS D1.**

Migające kropki – laktator w trakcie ładowania. **RYS D2.**

Trzy kropki świeące ciągiem – bateria w pełni naładowana. **RYS D3.**
Nie korzystaj z laktatora w trakcie ładowania.

08. WYMIANA ELEMENTÓW EKSPLOATACYJNYCH

Elementy eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy laktatora, dlatego też nie są objęte gwarancją producenta.

Zużyte elementy laktatora, które mają styczność z mlekiem, należy wymienić. Zużyty element posiada pęknięcie, odkształcenie, zmatowienie lub wyraźną zmianę koloru.

- Membranę należy wymieniać co 8 tygodni (jeśli używamy laktatora 1-3 razy dziennie) lub co 3-4 tygodnie (jeśli używamy laktatora częściej niż 3 razy dziennie).
- Zaworek należy wymieniać co 2-3 miesiące (jeśli używamy laktatora 1-3 razy dziennie) lub co 4 tygodnie (jeśli używamy laktatora częściej niż 3 razy dziennie).
- Lejek i konektor należy wymieniać co 6 miesięcy, jeśli używamy laktatora więcej niż 3 razy dziennie.

09. DŁUGOTERMINOWE PRZECHOWYWANIE

Laktator ma wbudowany akumulator. Aby uchronić się przed uszkodzeniem, urządzenie przechodzi w tryb przechowywania po długim okresie nieaktywności. Aby wyłączyć tryb przechowywania, podłącz urządzenie do zasilania i naładuj je przez 2 godziny. Zanim odłożysz laktator na dłuższy okres czasu, upewnij się, że:

- Wszystkie elementy laktatora są czyste.
- Wyczyściłeś urządzenie pompujące.
- Akumulator urządzenia jest w pełni naładowany.

10. FAQ

1. **Urządzenie nie uruchamia się:** upewnij się, że laktator jest podłączony do działającego gniazdka elektrycznego. Jeżeli laktator nie ma żadnego źródła zasilania, jego wyświetlacz się nie włączy i nie pojawia się żaden komunikat o błędzie.
2. **Brak/ słabe ssanie:** upewnij się, że wszystkie elementy laktatora są umieszczone poprawnie. Rozłóż laktator na części i upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i nieuszkodzone. Złóż laktator ponownie zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji MONTAŻ LAKTATORA. W czasie pompowania upewnij się, że lejek całą powierzchnią przylega do piersi.
3. **Z piersi wypłynęło więcej mleka, niż jest w stanie pomieścić pojemnik:** Użyj zwilżonej (nie mokrej) ściereczki, aby wytrzeć laktator. Umyj elementy laktatora, w których znajduje się mleko, zgodnie z instrukcjami w dziale CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA. Gdy wszystkie elementy urządzenia wyschną, złóż je ponownie.

11. SPECYFIKACJA

Objętość pojemnika na mleko: 210ml

Pojemność baterii: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Moc wejściowa: 110-240V
Moc wyjściowa: 5V 1A
Czas pracy: do 150min
Czas ładowania: około 150min
Wymiary pompy laktatora: 9x4,5x6 cm x2
Waga pompy laktatora: 150g x2

Siła odsysania:

1. Tryb stymulacji (8 poziomów): 9-24 kPa
2. Tryb głębokiego odciągania (8 poziomów): 13-40 kPa
3. Tryb mieszany (8 poziomów): 10-24 kPa

Dopuszczalna różnica ± 5 Kpa.

12. KARTA GWARANCYJNA/REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://neno.pl/gwarancja>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie:

<https://neno.pl/kontakt>

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

EN

USER MANUAL

Dear Customer,

The Neno Sole Twin device you have purchased is an dual, electronic, three-phase breast pump used to express breast milk from a woman's breast after giving birth. Read the instruction manual before use.

01. PRECAUTIONS

1. Always unplug the device after charging if you do not need to charge the device's battery.
2. Do not place the product where it is in danger of falling into sinks, bathtubs or other containers.
3. The breast pump and its components are not heat resistant – keep the device away from hot surfaces and open flames.
4. Do not use the device near flammable materials.

5. The breast pump should not be left unattended when connected to a power source.
6. Never use the device if it has been dropped or otherwise damaged.
7. Do not use a device whose power cord or plug is damaged.
8. Do not use the device in the bath or shower.
9. Do not place the device under water or in other liquids.
10. Do not wash the unit under running water.
11. Do not connect the device to a power socket that has been in contact with water or other liquids.
12. If the device has been exposed to water or other liquids - do not touch the device directly, disconnect it from the power supply, switch it off and contact the manufacturer.
13. This appliance is intended for use by a single user. Use of the breast pump by more than one person carries a risk of harm to the users and voids the warranty.
14. Do not repair or modify the unit yourself.
15. Use the breast pump only as described in the instructions. Do not use the device for any other purpose.
16. Inspect all breast pump components before each use.
17. Do not heat the discharged milk in the microwave. Milk heated in a microwave can burn the baby's face because heating with microwave waves can create high temperature bubbles in the liquid. In addition, microwave waves can change the composition of the milk.
18. Do not bring the milk to the boil while heating it.
19. Before using the breast pump for the first time, wash and disinfect all parts of the machine that will come into direct contact with your breast or milk.
20. After each use of the breast pump, wash all parts of the machine that come into direct contact with your breast or milk.
21. Take special care when using the breast pump or its accessories near children.
22. Do not use the breast pump while charging.

02. BEFORE FIRST USE

1. Connect the breast pump to the power supply. Charge the batteries for 2,5 hours.
2. Remove the breast pump.
3. Disconnect the parts of the breast pump that will come into direct contact with the breast or milk: remove the breast shield from the milk container, then pull the valve down and the membrane up to disconnect from the connector.

4. Clean the appliance components (refer to the **CLEANING AND DISINFECTION** section).

NOTE!

Use the breast pump in an upright position. Use in any other position (e.g. lying down) will result in the breast pump not fitting properly to the breast and milk leaking out.

03. ELEMENTS

FIG. A

1. Pumping device x2
2. Milk container x2
3. Connector x2
4. Valve x4
5. USB-C charging cable x2
6. Breast shield 24mm x2
7. Membrane x4
8. Breast shield reducer 20mm x2

04. DESCRIPTION OF THE PUMPING DEVICE

FIG. B

1. Icon of the selected mode (I dot - stimulation phase, II dots - deep extraction phase, III dots - mixed phase).
2. Power button - Hold the button for 2 seconds to switch the device on or off. When the device is on press to pause the breast pump.
3. Changing the suction level - Press “-” to reduce the suction power.
4. Icon of the selected mode (L1-L8)/time of the breast pump.
5. Mode change button - Press the button to change the operating mode of the unit.
6. Changing the suction level - Press “+” to increase the suction power.
7. USB-C charging socket

05. CLEANING AND DISINFECTION

Washing and disinfecting are two different operations. They must be carried out separately to protect your baby and to ensure that the breast pump works properly.

Washing - washing the surface of the unit and removing dirt.

Disinfection - killing organisms such as bacteria or viruses that may be present on the surface of the equipment.

Breast shield, membrane, valve, reducer, connector, milk container:

Wash and disinfect - before first use.

Wash - after each use.

Once a day and before first use - disinfection.

A. WASHING:

- Disassemble all parts of the breast pump (except the pumping device) and wash in warm soapy water for 5 minutes, then rinse. Do this immediately after using the machine. This will remove milk deposits and prevent bacterial growth.
- Only use drinkable tap water for washing. Use bottled water if the water in your tap does not meet this requirement.
- When cleaning silicone parts, do not use brushes. Be careful not to pierce them through.
- Use a mild dishwashing liquid or soap.
- Allow the parts to dry naturally. Store dry appliance parts in a cool, dry place when you are not using them.

B. DISINFECTION:

Membrane, valve, reducer, connector, breast shield, milk container:

- Fill the pot or steriliser with water so that all the components inside (membrane, valve, reducer, connector, breast shield, milk container) are covered when placed inside. Bring to the boil. Place breast pump parts in boiling water for 10 minutes. Do not boil.
- Allow the pieces to dry naturally. Store dry kit items in a cool, dry place when you are not using them.

C. CLEANING THE PUMPING DEVICE:

- Wipe the pump unit with a soft, wet cloth and a mild dishwashing liquid/soap. Other cleaners or abrasives may damage the unit and its display.
- When not using the pump unit, store it in a cool, dry place.

06. ASSEMBLY AND USE OF THE BREAST PUMP

FIG. C

Attach the components as shown in FIGS. C 1-5.

NOTE: Wash your hands thoroughly with soap and water before touching the breast pump and breast.

1. Insert the membrane into the connector. **FIG. C1.**
2. Connect the valve to the connector. **FIG. C2. ATTENTION:** The valve should be fixed with its longer part towards the breast shield. For an overview: **FIG. C6.**
3. Attach the connector with the membrane and valve to the milk container, starting by placing the membrane in the groove. **FIG. C3.**
4. Place the breast shield in the milk container. **FIG. C4.**
5. Attach the pumping device to the top of the milk container. **FIG. C5.**
6. Place the breast shield on your breast so that the nipple is inside the

drainage channel. Press the breast shield and breast pump connector against your breast using your thumb and index finger. **FIG. C6.**

7. Insert the breast pump into the bra/lactation corset. **FIG. C7.**
8. Turn on the breast pump by pressing the power button and select the operation mode that suits you.
9. To pour the milk hold the breast pump horizontally and carefully unscrew the pump **FIG C8.** Hold the milk container with the breast shield facing upwards - lay it flat on the table top (do not lay it upwards to prevent the milk from flowing out). **FIG C9.** Carefully pour the milk into the bottle/storage container. **FIG C10.**
10. Remove and clean all breast pump components after use. **FIG C11.**

NOTES:

- a. Before each use, check the parts of the breast pump for damage. If necessary, replace damaged parts with new ones.
- b. Always check the cleanliness of components before using the unit.
- c. If the diameter of the breast shield is too large, use the supplied reducer by inserting it inside. **FIG. C12.**

NOTES:

The breast pump starts in stimulation mode. Set the level of suction strength comfortable for you using the +/- buttons:

- Stimulation mode - fast pumping that mimics your baby's natural sucking of breast milk to stimulate milk flow. After 2 minutes, the breast pump will automatically activate the deep pumping mode. Adjust the suction level using the +/- buttons to find the highest level of suction that is comfortable for you. If milk starts to flow from your breast before two minutes have elapsed, press the mode change button to manually switch to deep extraction mode.
- Deep pumping mode - slower pumping that gently and efficiently sucks milk from the breast. In this mode increase the suction until you feel slight discomfort (not pain) and reduce the suction by one degree.
- Mixed mode - mimics the baby's sucking reflex. Can be used after pumping to help empty the breast and increase lactation.

07. CHARGING THE BREAST PUMP

Fully charge the breast pump battery before putting it into storage if you intend not to use the device for a long period of time. Charge the device battery before it is completely exhausted. This extends the life of the battery. If the breast pump has been stored in a hot place, the device battery may not work at first. Allow the breast pump to cool down for one hour before you start using it.

Indications:

LO - displays if the battery level is below 20%. **FIG D1.**

Flashing dots - breast pump under charging. **FIG D2.**

Three dots glowing continuously- battery fully charged. **FIG D3.**

Do not use the breast pump while charging.

08. REPLACEMENT OF CONSUMABLES

Consumable components are subject to natural wear and tear during operation of the breast pump and are therefore not covered by the manufacturer's warranty.

Worn components of the breast pump that come into contact with milk should be replaced. A worn component has a crack, deformation, tarnishing or a distinct change in colour.

- The membrane should be replaced every 8 weeks (if you use the breast pump 1-3 times a day) or every 3-4 weeks (if you use the breast pump more than 3 times a day).
- The valve should be replaced every 2-3 months (if you use the breast pump 1-3 times a day) or every 4 weeks (if you use the breast pump more than 3 times a day).
- The breast shield and connector should be replaced every 6 months if you use the breast pump more than 3 times a day.

09. LONG-TERM STORAGE

The breast pump has a built-in rechargeable battery. To protect itself from damage, the device enters storage mode after a long period of inactivity. To deactivate the storage mode, connect the device to power and charge it for 2 hours. Before you put the breast pump away for a long period of time, make sure that:

- All components of the breast pump are clean.
- You have cleaned the pumping device.
- The device's battery is fully charged.

10. FAQ

1. **The device does not start:** make sure the breast pump is plugged into a working electrical outlet. If the breast pump has no power source, its display will not turn on and no error message appears.
2. **No/poor suction:** make sure all breast pump parts are positioned correctly. Take the breast pump apart and make sure all parts are clean and undamaged. Reassemble the breast pump according to the instructions in the LACTATOR ASSEMBLY section. When pumping, make sure the

funnel is fully seated against the breast.

- 3. More milk has flowed from the breast than the container can hold:**
use a damp (not wet) cloth to wipe the breast pump. Wash the parts of the breast pump that hold milk according to the instructions in the CLEANING AND DISINFECTING section. When all parts of the machine are dry, reassemble.

11. SPECIFICATION

Capacity of milk container: 210ml

Battery capacity: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Input power: 110-240V

Output power: 5V 1A

Operating time: up to 150min

Charging time: approx. 150min

Dimensions of breast pump: 9x4,5x6 cm x2

Weight of breast pump: 150g x2

Suction power:

1. Stimulation mode (8 levels): 9-24 kPa
2. Deep extraction mode (8 levels): 13-40 kPa
3. Mixed mode (8 levels): 10-24 kPa

Permissible variation ± 5 Kpa.

12. WARRANTY/ COMPLAINTS CARD

The product comes with a 24-month warranty. Warranty conditions can be found at: <https://nenopl/gwarancja>

Details, contact and service address can be found at:

<https://nenopl/kontakt>

Specifications and contents are subject to change without notice. We apologise for any inconvenience.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

Das Neno Sole Twin Gerät, das Sie erworben haben, ist eine doppelte, elektronische, dreiphasige Milchpumpe, die zum Abpumpen von Muttermilch nach der Geburt verwendet wird. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.

01. VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Trennen Sie das Gerät nach dem Aufladen immer vom Stromnetz, wenn Sie den Akku des Geräts nicht aufladen müssen.
2. Stellen Sie das Produkt nicht so auf, dass es in Waschbecken, Bädewannen oder andere Behälter fallen kann.
3. Die Milchpumpe und ihre Bestandteile sind nicht hitzebeständig - halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
5. Die Milchpumpe sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen ist.
6. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es heruntergefallen oder anderweitig beschädigt ist.
7. Verwenden Sie kein Gerät, dessen Netzkabel oder Stecker beschädigt ist.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder Dusche.
9. Stellen Sie das Gerät nicht unter Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
10. Waschen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser.
11. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
12. Wenn das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist - berühren Sie das Gerät nicht direkt, trennen Sie es von der Stromversorgung, schalten Sie es aus und wenden Sie sich an den Hersteller.
13. Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch eine einzige Person bestimmt. Die Verwendung der Milchpumpe durch mehr als eine Person birgt das Risiko von Schäden für die Benutzerinnen und führt zum

Erlöschen der Garantie.

14. Reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst.
15. Verwenden Sie die Milchpumpe nur wie in der Anleitung beschrieben. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.
16. **Überprüfen Sie alle Bestandteile der Milchpumpe vor jedem Gebrauch.**
17. Erhitzen Sie die abgepumpte Milch nicht in der Mikrowelle. In der Mikrowelle erwärmte Milch kann das Gesicht des Babys verbrennen, da durch die Erwärmung mit Mikrowellen Blasen mit hoher Temperatur in der Flüssigkeit entstehen können. Außerdem können die Mikrowellen die Zusammensetzung der Milch verändern.
18. Die Milch darf beim Erhitzen nicht zum Kochen gebracht werden.
19. Waschen und desinfizieren Sie vor der ersten Benutzung der Milchpumpe alle Teile des Geräts, die direkt mit Ihrer Brust oder Milch in Berührung kommen.
20. Waschen Sie nach jedem Gebrauch der Milchpumpe alle Teile des Geräts, die direkt mit Ihrer Brust oder Milch in Berührung kommen.
21. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Milchpumpe oder ihr Zubehör in der Nähe von Kindern verwenden.
22. Verwenden Sie die Milchpumpe nicht während des Ladevorgangs.

02. VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1. Schließen Sie die Milchpumpe an das Stromnetz an. Laden Sie die Batterien für 2,5 Stunden auf.
2. Entfernen Sie die Milchpumpe.
3. Trennen Sie die Teile der Milchpumpe, die direkt mit der Brust oder der Milch in Berührung kommen: Nehmen Sie den Brustschutz vom Milchbehälter ab und ziehen Sie dann das Ventil nach unten und die Membran nach oben, um sie vom Anschluss zu trennen.
4. Reinigen Sie die Bauteile des Geräts (siehe Abschnitt REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG).

HINWEIS:

Verwenden Sie die Milchpumpe in einer aufrechten Position. Die Verwendung in einer anderen Position (z. B. im Liegen) führt dazu, dass die Milchpumpe nicht richtig an der Brust anliegt und Milch ausläuft.

03. ELEMENTE

FIG. A

1. Abpumpvorrichtung x2
2. Milchbehälter x2
3. Stecker x2

4. Ventil x4
5. USB-C-Ladekabel x2
6. Brustschild 24mm x2
7. Membrane x4
8. Brustschild-Reduzierer 20mm x2

04. BESCHREIBUNG DES PUMPENGERÄTS

ABBILDUNG B

1. Symbol für den gewählten Modus (I Punkt - Stimulationsphase, II Punkte - Tiefenextraktionsphase, III Punkte - gemischte Phase).
2. Einschalttaste - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um die Milchpumpe anzuhalten.
3. Ändern der Saugstufe - Drücken Sie «-», um die Saugleistung zu verringern.
4. Symbol für den ausgewählten Modus (L1-L8)/die Uhrzeit der Milchpumpe.
5. Betriebsartwechseltaste - Drücken Sie die Taste, um die Betriebsart des Geräts zu ändern.
6. Ändern der Saugstufe - Drücken Sie «+», um die Saugleistung zu erhöhen.
7. USB-C-Ladebuchse

05. REINIGUNG UND DESINFEKTION

Waschen und Desinfizieren sind zwei verschiedene Vorgänge. Sie müssen getrennt durchgeführt werden, um Ihr Baby zu schützen und um sicherzustellen, dass die Milchpumpe ordnungsgemäß funktioniert.

Waschen - Waschen der Oberfläche des Geräts und Entfernen von Schmutz.
Desinfektion - Abtöten von Organismen wie Bakterien oder Viren, die sich auf der Oberfläche des Geräts befinden können.

Brustschild, Membran, Ventil, Reduzierstück, Anschlussstück, Milchbehälter:

Waschen und desinfizieren - vor dem ersten Gebrauch.

Waschen - nach jedem Gebrauch.

Einmal am Tag und vor der ersten Anwendung - Desinfektion.

A. WASCHEN:

- Demontieren Sie alle Teile der Milchpumpe (mit Ausnahme des Abpumpgeräts) und waschen Sie sie 5 Minuten lang in warmem Seifenwasser, dann spülen Sie sie ab. Tun Sie dies sofort nach der Verwendung der Maschine. Dadurch werden Milchablagerungen entfernt und das Wachstum von

Bakterien verhindert.

- Verwenden Sie zum Waschen nur trinkbares Leitungswasser. Verwenden Sie abgefülltes Wasser, wenn das Wasser aus Ihrem Wasserhahn diese Anforderung nicht erfüllt.
- Verwenden Sie zur Reinigung von Silikonteilen keine Bürsten. Achten Sie darauf, sie nicht zu durchstechen.
- Verwenden Sie ein mildes Geschirrspülmittel oder eine Seife.
- Lassen Sie die Teile natürlich trocknen. Lagern Sie trockene Geräteteile an einem kühlen, trockenen Ort, wenn Sie sie nicht benutzen.

B. DISINFECTION:

Membrane, Ventil, Reduzierstück, Anschlussstück, Brustschild, Milchbehälter:

- Füllen Sie den Topf oder Sterilisator mit Wasser, so dass alle darin befindlichen Komponenten (Membran, Ventil, Reduzierstück, Anschlussstück, Brustschild, Milchbehälter) bedeckt sind. Bringen Sie das Wasser zum Kochen. Legen Sie die Teile der Milchpumpe für 10 Minuten in das kochende Wasser. Nicht kochen.
- Lassen Sie die Teile natürlich trocknen. Lagern Sie trockene Bausatzteile an einem kühlen, trockenen Ort, wenn Sie sie nicht benutzen.

C. DIE REINIGUNG DER PUMPVORRICHTUNG:

- Wischen Sie das Pumpenaggregat mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Geschirrspülmittel/einer milden Seife ab. Andere Reinigungs- oder Scheuermittel können das Gerät und sein Display beschädigen.
- Wenn Sie das Pumpenaggregat nicht benutzen, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

06. ZUSAMMENBAU UND VERWENDUNG DER MILCHPUMPE ABBILDUNG C

Befestigen Sie die Bauteile wie in ABB. C 1-5 gezeigt.

HINWEIS: Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife, bevor Sie die Milchpumpe und die Brust berühren.

1. Setzen Sie die Membran in den Anschluss ein. **ABB. C1.**
2. Schließen Sie das Ventil an den Stecker an. **ABB. C2. ACHTUNG:** Das Ventil sollte mit seinem längeren Teil in Richtung Brustschild befestigt werden. Zur Übersicht: **ABB. C6.**
3. Befestigen Sie das Verbindungsstück mit der Membrane und dem Ventil am Milchbehälter, indem Sie zunächst die Membrane in die Rille legen. **ABB. C3.**
4. Legen Sie das Brustschild in den Milchbehälter. **ABB. C4.**

5. Bringen Sie die Abpumpvorrichtung oben am Milchbehälter an. **ABB. C5.**
6. Legen Sie den Brustschild so auf Ihre Brust, dass sich die Brustwarze innerhalb des Abflusskanals befindet. Drücken Sie den Brustschild und den Anschluss der Milchpumpe mit Daumen und Zeigefinger gegen Ihre Brust. **ABB. C6.**
7. Setzen Sie die Milchpumpe in den BH/das Stillkorsett ein. **ABB. C7.**
8. Schalten Sie die Milchpumpe durch Drücken der Einschalttaste ein und wählen Sie den für Sie geeigneten Betriebsmodus.
9. Zum Ausgießen der Milch halten Sie die Milchpumpe waagerecht und schrauben die Pumpe vorsichtig ab (**Abb. C8**). Halten Sie den Milchbehälter mit dem Brustschild nach oben - legen Sie ihn flach auf die Tischplatte (legen Sie ihn nicht nach oben, damit die Milch nicht ausläuft). **ABBILDUNG C9.** Gießen Sie die Milch vorsichtig in die Flasche/den Vorratsbehälter. **ABBILDUNG C10.**
10. Entfernen und reinigen Sie alle Teile der Milchpumpe nach dem Gebrauch. **ABBILDUNG C11.**

ANMERKUNGEN:

- a. Prüfen Sie die Teile der Milchpumpe vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Ersetzen Sie ggf. beschädigte Teile durch neue.
- b. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts stets die Sauberkeit der Komponenten.
- c. Wenn der Durchmesser des Brustschilds zu groß ist, verwenden Sie das mitgelieferte Reduzierstück, indem Sie es in das Innere einführen. **ABB. C12.**

ANMERKUNGEN:

Die Milchpumpe startet im Stimulationsmodus. Stellen Sie mit den Tasten +/- die für Sie angenehme Saugstärke ein:

- Stimulationsmodus - schnelles Abpumpen, das das natürliche Saugen Ihres Babys an der Muttermilch nachahmt, um den Milchfluss anzuregen. Nach 2 Minuten aktiviert die Milchpumpe automatisch den tiefen Abpumpmodus. Stellen Sie die Saugstärke mit den Tasten +/- ein, um die für Sie angenehmste Saugstärke zu finden. Wenn die Milch vor Ablauf der zwei Minuten aus Ihrer Brust zu fließen beginnt, drücken Sie die Taste zum Ändern des Modus, um manuell in den tiefen Abpumpmodus zu wechseln.
- Tiefes Abpumpen - langsames Abpumpen, das die Milch sanft und effizient aus der Brust saugt. Erhöhen Sie in diesem Modus die Saugkraft, bis Sie ein leichtes Unbehagen (keine Schmerzen) verspüren, und verringern Sie dann die Saugkraft um ein Grad.

- Gemischter Modus - ahmt den Saugreflex des Babys nach. Kann nach dem Abpumpen verwendet werden, um die Brust zu entleeren und die Laktation zu steigern.

07. AUFLADEN DER MILCHPUMPE

Laden Sie den Akku der Milchpumpe vollständig auf, bevor Sie sie einlagern, wenn Sie beabsichtigen, das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zu benutzen. Laden Sie den Geräteakku auf, bevor er vollständig entladen ist. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus verlängert. Wenn die Milchpumpe an einem heißen Ort gelagert wurde, funktioniert der Akku des Geräts möglicherweise zunächst nicht. Lassen Sie die Milchpumpe eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.

Indikationen:

LO - wird angezeigt, wenn der Batteriestand unter 20 % liegt. **BILD D1.**

Blinkende Punkte - Milchpumpe wird geladen. **BILD D2.**

Drei Punkte leuchten kontinuierlich - die Batterie ist vollständig geladen.

ABBILDUNG D3.

Verwenden Sie die Milchpumpe nicht während des Ladevorgangs.

08. ERSATZ VON VERBRAUCHSMATERIAL

Verschleißteile unterliegen dem natürlichen Verschleiß während des Betriebs der Milchpumpe und sind daher nicht von der Herstellergarantie abgedeckt.

Abgenutzte Teile der Milchpumpe, die mit Milch in Berührung kommen, sollten ausgetauscht werden. Ein verschlissenes Teil hat einen Riss, eine Verformung, ein Anlaufen oder eine deutliche Farbveränderung.

- Die Membran sollte alle 8 Wochen (wenn Sie die Milchpumpe 1-3 Mal pro Tag verwenden) oder alle 3-4 Wochen (wenn Sie die Milchpumpe mehr als 3 Mal pro Tag verwenden) ausgetauscht werden.
- Das Ventil sollte alle 2-3 Monate (wenn Sie die Milchpumpe 1-3 Mal pro Tag verwenden) oder alle 4 Wochen (wenn Sie die Milchpumpe mehr als 3 Mal pro Tag verwenden) ausgetauscht werden.
- Das Brustschild und der Anschluss sollten alle 6 Monate ausgetauscht werden, wenn Sie die Milchpumpe mehr als 3 Mal pro Tag verwenden.

09. LANGZEITLAGERUNG

Die Milchpumpe hat einen eingebauten Akku. Um sich vor Schäden zu schützen, geht das Gerät nach längerer Inaktivität in den Speichermodus über. Um den Speichermodus zu deaktivieren, schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und laden Sie es 2 Stunden lang auf. Bevor Sie die Milchpumpe

für längere Zeit weglegen, stellen Sie sicher, dass:

- Alle Bestandteile der Milchpumpe sind sauber.
- Sie haben das Abpumpgerät gereinigt.
- Der Akku des Geräts ist vollständig geladen.

10. FAQ

1. **Das Gerät startet nicht:** Stellen Sie sicher, dass die Milchpumpe an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Wenn die Milchpumpe keine Stromquelle hat, schaltet sich das Display nicht ein und es erscheint keine Fehlermeldung.
2. **Keine/schlechte Absaugung: Vergewissern Sie sich,** dass alle Teile der Milchpumpe richtig positioniert sind. Nehmen Sie die Milchpumpe auseinander und stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und unbeschädigt sind. Bauen Sie die Milchpumpe gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Zusammenbau der Milchpumpe" wieder zusammen. Achten Sie beim Abpumpen darauf, dass der Trichter vollständig an der Brust anliegt.
3. **Es ist mehr Milch aus der Brust geflossen, als der Behälter aufnehmen kann:** Verwenden Sie ein feuchtes (nicht nasses) Tuch, um die Milchpumpe abzuwischen. Waschen Sie die Teile der Milchpumpe, die Milch aufnehmen, gemäß den Anweisungen im Abschnitt REINIGUNG UND DESINFEKTION. Wenn alle Teile der Maschine trocken sind, setzen Sie sie wieder zusammen.

11. SPEZIFIKATION

Fassungsvermögen des Milchbehälters: 210ml

Akku-Kapazität: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Eingangsleistung: 110-240V

Ausgangsleistung: 5V 1A

Betriebsdauer: bis zu 150 Minuten

Aufladezeit: ca. 150min

Abmessungen der Milchpumpe: 9x4,5x6 cm x2

Gewicht der Milchpumpe: 150g x2

Absaugleistung:

1. Stimulationsmodus (8 Stufen): 9-24 kPa
2. Tiefenextraktionsmodus (8 Stufen): 13-40 kPa
3. Gemischter Modus (8 Stufen): 10-24 kPa

Zulässige Abweichung ± 5 Kpa.

12. GARANTIE-/ REKLAMATIONSKARTE

Das Produkt wird mit einer 24-monatigen Garantie geliefert. Die Garantiebe-

dingungen finden Sie unter: <https://nenopl/gwarancja>
Einzelheiten, Kontakt und Serviceadresse finden Sie unter:
<https://nenopl/kontakt>

Änderungen der technischen Daten und des Inhalts sind ohne
vorherige Ankündigung vorbehalten. Wir entschuldigen uns für etwaige
Unannehmlichkeiten.

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,
Přístroj Neno Sole Twin, který jste si zakoupili, je duální, elektronická,
třífázová odsávačka mateřského mléka, která se používá k odsávání
mateřského mléka z prsu ženy po porodu. Před použitím si přečtěte návod
k použití.

01. PŘEDPISY

1. Pokud baterii zařízení nepotřebujete nabíjet, vždy ji po nabíť odpojte od sítě.
2. Výrobek neumísťujte na místa, kde hrozí nebezpečí pádu do umyvadla, vany nebo jiných nádob.
3. Odsávačka mateřského mléka a její součásti nejsou odolné vůči teple - udržujte přístroj mimo dosah horkých povrchů a otevřeného ohně.
4. Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
5. Odsávačka mateřského mléka by neměla být ponechána bez dozoru, pokud je připojena ke zdroji napájení.
6. Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud bylo upuštěno nebo jinak poškozeno.
7. Nepoužívejte zařízení, jehož napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozené.
8. Přístroj nepoužívejte ve vaně ani ve sprše.
9. Přístroj neumísťujte pod vodu ani do jiných kapalin.
10. Přístroj nemyjte pod tekoucí vodou.
11. Nepřipojujte zařízení do zásuvky, která byla v kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
12. Pokud byl přístroj vystaven působení vody nebo jiných kapalin - nedotýkejte se přímo přístroje, odpojte jej od napájení, vypněte jej a kontaktujte výrobce.

13. Tento spotřebič je určen pro jednoho uživatele. Používání odsávačky více než jednou osobou s sebou nese riziko poškození uživatele a ztrátu záruky.
14. Přístroj sami neopravujte ani neupravujte.
15. Odsávačku mateřského mléka používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu. Přístroj nepoužívejte k jiným účelům.
16. Před každým použitím zkontrolujte všechny součásti odsávačky mateřského mléka.
17. Vypuštěné mléko neohřívejte v mikrovlnné troubě. Mléko ohřívání v mikrovlnné troubě může popálit obličej dítěte, protože ohřev pomocí mikrovlnných vln může v tekutině vytvořit bubliny o vysoké teplotě. Kromě toho mohou mikrovlnné vlny změnit složení mléka.
18. Mléko při ohřívání nepřivádějte k varu.
19. Před prvním použitím odsávačky mateřského mléka umyjte a vydezinfikujte všechny části přístroje, které přijdou do přímého kontaktu s prsy nebo mlékem.
20. Po každém použití odsávačky mateřského mléka umyjte všechny části přístroje, které přicházejí do přímého kontaktu s prsy nebo mlékem.
21. Při používání odsávačky mateřského mléka nebo jejího příslušenství v blízkosti dítěte dbejte zvýšené opatrnosti.
22. Během nabíjení odsávačku nepoužívejte.

02. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Připojte odsávačku k napájení. Nabíjejte baterie po dobu 2,5 hodiny.
2. Vyjměte odsávačku mateřského mléka.
3. Odpojte části odsávačky, které přijdou do přímého kontaktu s prsy nebo mlékem: vyjměte prsní štít z nádoby na mléko, poté stáhněte ventil dolů a membránu nahoru, aby se odpojila od konektoru.
4. Vyčistěte součásti spotřebiče (viz kapitola ČISTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ).

POZNÁMKA!

Odsávačku používejte ve vzpřímené poloze. Použití v jiné poloze (např. vleže) způsobí, že odsávačka nebude správně přiložena k prsu a mléko bude vytékat.

03. ELEMENTY

FIG. A

1. Čerpací zařízení x2
2. Nádobka na mléko x2
3. Konektor x2
4. Ventil x4
5. Nabíjecí kabel USB-C x2

6. Prsní štít 24 mm x2
7. Membrána x4
8. Redukce prsního štítu 20 mm x2

04. POPIS ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ

FIG. B

1. Ikona zvoleného režimu (I tečka - stimulační fáze, II tečka - fáze hluboké extrakce, III tečka - smíšená fáze).
2. Tlačítko napájení - podržením tlačítka po dobu 2 sekund zařízení zapnete nebo vypnete. Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka odsávačku pozastavíte.
3. Změna úrovně sání - Stisknutím tlačítka “-” snížíte sací výkon.
4. Ikona zvoleného režimu (L1-L8)/času odsávačky mateřského mléka.
5. Tlačítko změny režimu - Stisknutím tlačítka změňte provozní režim přístroje.
6. Změna úrovně sání - Stisknutím tlačítka “+” zvýšíte sací výkon.
7. Nabíjecí zásuvka USB-C

05. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Mytí a dezinfekce jsou dvě různé operace. Je třeba je provádět odděleně, abyste chránili své dítě a zajistili správnou funkci odsávačky mateřského mléka.

Mytí - mytí povrchu jednotky a odstraňování nečistot.

Dezinfekce - ničení organismů, jako jsou bakterie nebo viry, které se mohou nacházet na povrchu zařízení.

Prsní štít, membrána, ventil, redukce, konektor, nádoba na mléko:

Před prvním použitím umyjte a vydezinfikujte.

Umyjte - po každém použití.

Jednou denně a před prvním použitím - dezinfekce.

A. MYTÍ:

- Rozeberte všechny části odsávačky mateřského mléka (kromě odsávacího zařízení) a umyjte je v teplé mýdlové vodě po dobu 5 minut, poté je opláchněte. Tento postup proveďte ihned po použití odsávačky. Odstraníte tak usazeniny mléka a zabráníte růstu bakterií.
- K mytí používejte pouze pitnou vodu z vodovodu. Pokud voda z kohoutku nesplňuje tento požadavek, používejte balenou vodu.
- Při čištění silikonových dílů nepoužívejte kartáče. Dávejte pozor, abyste je nepropíchli.
- Použijte jemný prostředek na mytí nádobí nebo mýdlo.
- Nechte díly přirozeně vyschnout. Pokud suché části spotřebiče nepoužíváte, skladujte je na chladném a suchém místě.

B. DEZINFEKCE:

Membrána, ventil, redukce, konektor, prsní štít, nádoba na mléko:

- Nádobu nebo sterilizátor naplňte vodou tak, aby všechny součásti uvnitř (membrána, ventil, redukce, konektor, prsní štít, nádoba na mléko) byly po vložení dovnitř zakryty. Přiveďte k varu. Součásti odsávačky mateřského mléka vložte na 10 minut do vroucí vody. Nevařte.

- Kousky nechte přirozeně uschnout. Pokud nepoužíváte suché stavebnice, skladujte je na chladném a suchém místě.

C. ČIŠTĚNÍ ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ:

- Jednotku čerpadla otřete měkkým vlhkým hadříkem s jemným prostředkem na mytí nádobí/mýdlem. Jiné čisticí prostředky nebo abraziva mohou jednotku a její displej poškodit.

- Pokud jednotku čerpadla nepoužíváte, uložte ji na chladném a suchém místě.

06. MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ ODSÁVAČKY MATEŘSKÉHO MLÉKA

FIG. C

Připevněte součásti podle obrázků C 1-5.

POZNÁMKA: Před dotykem odsávačky a prsu si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

1. Vložte membránu do konektoru. **OBRÁZEK C1.**
2. Připojte ventil ke konektoru. **OBRÁZEK C2. POZOR:** Ventil by měl být upevněn delší částí směrem k prsnímu štítu. Pro přehled: **OBRÁZEK C6.**
3. Připojte konektor s membránou a ventilem k nádobě na mléko, přičemž začněte umístěním membrány do drážky. **OBRÁZEK C3.**
4. Umístěte prsní štít do nádoby na mléko. **OBRÁZEK C4.**
5. Připevněte čerpací zařízení k horní části nádoby na mléko. **OBRÁZEK C5.**
6. Umístěte prsní štít na prs tak, aby bradavka byla uvnitř odvodňovacího kanálku. Palcem a ukazováčkem přitiskněte prsní štít a konektor prsní pumpy k prsu. **OBRÁZEK C6.**
7. Vložte odsávačku do podprsenky/kojeneckého korzetu. **OBRÁZEK C7.**
8. Zapněte odsávačku stisknutím tlačítka napájení a zvolte provozní režim, který vám vyhovuje.
9. Pro vylití mléka držte odsávačku ve vodorovné poloze a opatrně odšroubujte pumpu **FIG C8**. Nádobku na mléko držte prsním štítem směrem nahoru - položte ji naplocho na desku stolu (nepokládejte ji nahoru, aby mléko nevytékalo). **FIG C9**. Opatrně nalijte mléko do láhve/úložné nádoby. **OBRÁZEK C10.**
10. Po použití vyjměte a vyčistěte všechny součásti odsávačky

mateřského mléka. **OBRÁZEK C11.**

POZNÁMKY:

- a. Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou části odsávačky poškozeny. V případě potřeby vyměňte poškozené díly za nové.
- b. Před použitím přístroje vždy zkontrolujte čistotu součástí.
- c. Pokud je průměr prsního štítu příliš velký, použijte dodanou redukci a vložte ji dovnitř. **OBRÁZEK C12.**

POZNÁMKY:

Odsávačka mateřského mléka se spustí v režimu stimulace. Pomocí tlačítek

+/- nastavte úroveň síly odsávání, která vám vyhovuje:

- Stimulační režim - rychlé odsávání, které napodobuje přirozené sání mateřského mléka vaším dítětem a stimuluje tak tok mléka. Po 2 minutách odsávačka automaticky aktivuje režim hlubokého čerpání. Pomocí tlačítek +/- nastavte úroveň sání a najděte nejvyšší úroveň sání, která vám vyhovuje. Pokud vám mléko začne vytékat z prsu před uplynutím dvou minut, stiskněte tlačítko pro změnu režimu a ručně přepněte na režim hlubokého odsávání.
- Režim hlubokého odsávání - pomalejší odsávání, které jemně a efektivně odsává mléko z prsu. V tomto režimu zvyšujte sání, dokud neucítíte mírné nepohodlí (nikoliv bolest), a snižte sání o jeden stupeň.
- Smlíšený režim - napodobuje sací reflex dítěte. Lze použít po odsátí mléka k vyprázdnění prsu a zvýšení laktace.

07. NABÍJENÍ ODSÁVAČKY MATEŘSKÉHO MLÉKA

Pokud se chystáte odsávačku mateřského mléka delší dobu nepoužívat, před uskladněním ji plně nabijte. Baterii přístroje nabíjejte před jejím úplným vybitím. Tím prodloužíte životnost baterie. Pokud byla odsávačka mateřského mléka uložena na horkém místě, baterie přístroje nemusí zpočátku fungovat. Než začnete odsávačku mateřského mléka používat, nechte ji jednu hodinu vychladnout.

Indikace:

LO - zobrazí se, pokud je úroveň nabití baterie nižší než 20 %. **FIG D1.**

Blikající tečky - odsávačka mateřského mléka se nabíjí. **OBRÁZEK D2.**

Tři nepřetržitě svítící tečky - baterie je plně nabitá. **OBRÁZEK D3.**

Během nabíjení odsávačku nepoužívejte.

08. VÝMĚNA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

Spotřební součásti podléhají přirozenému opotřebení během provozu odsávačky mateřského mléka, a proto se na ně nevztahuje záruka výrobce.

Opotřebované součásti odsávačky, které přicházejí do styku s mlékem, by měly být vyměněny. Opotřebovaná součástka má prasklinu, deformaci, zašednutí nebo výraznou změnu barvy.

- Membránu je třeba vyměnit každých 8 týdnů (pokud odsávačku používáte 1-3krát denně) nebo každé 3-4 týdny (pokud odsávačku používáte častěji než 3krát denně).
- Ventil je třeba vyměnit každé 2-3 měsíce (pokud odsávačku používáte 1-3krát denně) nebo každé 4 týdny (pokud odsávačku používáte častěji než 3krát denně).
- Pokud odsávačku mateřského mléka používáte častěji než třikrát denně, je třeba každých 6 měsíců vyměnit prsní štít a konektor.

09. DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

Odsávačka mateřského mléka má zabudovanou dobíjecí baterii. Z důvodu ochrany před poškozením se přístroj po delší době nečinnosti přepne do režimu ukládání. Chcete-li skladovací režim deaktivovat, připojte přístroj k napájení a nabíjejte jej po dobu 2 hodin. Před odložením odsávačky mateřského mléka na delší dobu se ujistěte, že:

- Všechny součásti odsávačky jsou čisté.
- Vyčistili jste čerpací zařízení.
- Baterie zařízení je plně nabitá.

10. ČASTO Kladené DOTAZY

1. **Přístroj se nespustí: ujistěte se**, že je odsávačka zapojena do funkční elektrické zásuvky. Pokud odsávačka mateřského mléka nemá zdroj napájení, její displej se nezapne a nezobrazí se žádné chybové hlášení.
2. **Žádné/slabé sání:** zkontrolujte, zda jsou všechny části odsávačky správně umístěny. Rozeberte odsávačku mateřského mléka a zkontrolujte, zda jsou všechny díly čisté a nepoškozené. Znovu sestavte odsávačku mateřského mléka podle pokynů uvedených v části MONTÁŽ LAKTÁTORU. Při odsávání se ujistěte, že je nálevka zcela přiložena k prsu.
3. **Z prsu vyteklo více mléka, než se vejde do zásobníku:** otřete odsávačku vlhkým (ne mokrým) hadříkem. Části odsávačky mateřského mléka, které zadržují mléko, umyjte podle pokynů v části ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE. Když jsou všechny části odsávačky suché, znovu ji sestavte.

11. SPECIFIKACE

Objem nádoby na mléko: 210 ml

Kapacita baterie: 3,7 V 1500 mAh Li-Po

Vstupní napájení: 110-240 V

Výstupní výkon: 5V 1A
Provozní doba: až 150 minut
Doba nabíjení: přibližně 150 minut
Rozměry prsní pumpy: 9x4,5x6 cm x2
Hmotnost odsávačky mateřského mléka: 150 g x2

Sací výkon:

1. Režim stimulace (8 úrovní): 9-24 kPa
2. Režim hloubkové extrakce (8 úrovní): 13-40 kPa
3. Smíšený režim (8 úrovní): 10-24 kPa

Přípustná odchylka ± 5 Kpa.

12. ZÁRUČNÍ/REKLAMAČNÍ LIST

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční podmínky naleznete na adrese: <https://neno.pl/gwarancja>.

Podrobnosti, kontakt a adresu pro poskytování služeb naleznete na adrese: <https://neno.pl/kontakt>.

Specifikace a obsah se mohou změnit bez předchozího upozornění. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves Ügyfél,

Az Ön által megvásárolt Neno Sole Twin készülék egy kettős, elektronikus, háromfázisú mellszívó, amelyet a szülés után a női mellből történő anyatej kinyomására használnak. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

01. ÓVINTSZABÁLYOK

1. Töltés után mindig húzza ki a készüléket, ha nincs szüksége a készülék akkumulátorának töltésére.
2. Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol fennáll a veszélye, hogy mosogatóba, fürdőkádba vagy más edénybe esik.
3. A mellszívó és alkatrészei nem hőállóak - tartsa a készüléket forró felületektől és nyílt lángtól távol.
4. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
5. A mellszívót nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha áramforráshoz van csatlakoztatva.

6. Soha ne használja a készüléket, ha az leesett vagy más módon megsérült.
7. Ne használjon olyan készüléket, amelynek tápkábele vagy dugója sérült.
8. Ne használja a készüléket kádban vagy zuhanyzóban.
9. Ne tegye a készüléket víz alá vagy más folyadékba.
10. Ne mossa a készüléket folyó víz alatt.
11. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan konnektorhoz, amely vízzel vagy más folyadékkal érintkezett.
12. Ha a készüléket víz vagy más folyadék érte - ne érintse meg közvetlenül a készüléket, válassza le a tápegységről, kapcsolja ki és forduljon a gyártóhoz.
13. Ezt a készüléket egyetlen felhasználó általi használatra szánják. A mellszívó egynél több személy általi használata a felhasználókra nézve sérülésveszélyt jelent, és a garancia érvényét veszti.
14. Ne javítsa vagy módosítsa a készüléket saját maga.
15. A mellszívót csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Ne használja a készüléket más célra.
16. Minden használat előtt ellenőrizze az összes mellszívó alkatrészt.
17. Ne melegítse a lemerült tejet mikrohullámú sütőben. A mikrohullámú sütőben melegített tej megégetheti a baba arcát, mert a mikrohullámú hullámokkal történő melegítés magas hőmérsékletű buborékokat hozhat létre a folyadékban. Ezenkívül a mikrohullámok megváltoztathatják a tej összetételét.
18. Ne forralja fel a tejet melegítés közben.
19. A mellszívó első használata előtt mossa és fertőtlenítsen a gép minden olyan részét, amely közvetlenül érintkezik a mellével vagy a tejjel.
20. A mellszívó minden egyes használata után mossa el a gép minden olyan részét, amely közvetlenül érintkezik a mellével vagy a tejjel.
21. Legyen különösen óvatos, ha a mellszívót vagy tartozékait gyermekek közelében használja.
22. Ne használja a mellszívót töltés közben.

02. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Csatlakoztassa a mellszívót a tápegységhez. Töltse fel az akkumulátorokat 2,5 órán keresztül.
2. Vegye ki a mellszívót.
3. Válassza le a mellszívó azon részeit, amelyek közvetlenül érintkeznek a mellel vagy a tejjel: vegye le a mellvédő pajzsot a tejtartályról, majd húzza lefelé a szelepet és felfelé a membránt, hogy leváljon a csatlakozóról.

4. Tisztítsa meg a készülék alkatrészeit (lásd a tisztítás és fertőtlenítés című fejezetet).

MEGJEGYZÉS!

Használja a mellszívót függőleges helyzetben. Bármilyen más helyzetben történő használat (pl. fekvé) azt eredményezi, hogy a mellszívó nem illeszkedik megfelelően a mellhez, és a tej kifolyik.

03. ELEMENTS

A. ÁBRÁNY

1. Szivattyúberendezés x2
2. Tejtartály x2
3. Csatlakozó x2
4. Szelep x4
5. USB-C töltőkábel x2
6. Mellpajzs 24mm x2
7. Membrán x4
8. Mellpajzs szűkítő 20mm x2

04. A SZIVATTYÚBERENDEZÉS LEÍRÁSA

B. ÁBRÁNY

1. A kiválasztott üzemmód ikonja (I pont - stimulációs fázis, II pont - mély extrakciós fázis, III pont - vegyes fázis).
2. Bekapcsológomb - Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához. Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a mellszívó szüneteltetéséhez.
3. A szívási szint megváltoztatása - A szívási teljesítmény csökkentéséhez nyomja meg a “-” gombot.
4. A mellszívó kiválasztott üzemmódjának (L1-L8)/idejének ikonja.
5. Módváltó gomb - Nyomja meg a gombot a készülék működési módjának megváltoztatásához.
6. A szívási szint megváltoztatása - A szívási teljesítmény növeléséhez nyomja meg a “+” gombot.
7. USB-C töltőcsatlakozó

05. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

A mosás és a fertőtlenítés két különböző művelet. Ezeket külön kell elvégezni a baba védelme és a mellszívó megfelelő működésének biztosítása érdekében.

Mosás - a készülék felületének lemosása és a szennyeződések eltávolítása.
Fertőtlenítés - a berendezés felületén esetlegesen jelen lévő organizmusok, például baktériumok vagy vírusok elpusztítása.

Mellpajzs, membrán, szelep, szűkítő, csatlakozó, tejtartály:

Mossa és fertőtlenítsen - az első használat előtt.

Minden használat után mossa ki.

Naponta egyszer és az első használat előtt - fertőtlenítsen.

A. MOSÁS:

- Szedje szét a mellszívó minden részét (kivéve a pumpáló készüléket), és mossa le meleg szappanos vízben 5 percig, majd öblítse le. Ezt közvetlenül a gép használata után tegye meg. Ez eltávolítja a tejlerakódásokat és megakadályozza a baktériumok elszaporodását.

- Mosakodáshoz csak iható csapvizet használjon. Használjon palackozott vizet, ha a csapvíz nem felel meg ennek a követelménynek.

- A szilikon alkatrészek tisztításakor ne használjon kefét. Vigyázzon, hogy ne szűrje át őket.

- Használjon enyhe mosogatószeret vagy szappant.

- Hagyja az alkatrészeket természetes módon megszáradni. A száraz készülékalkatrészeket hűvös, száraz helyen tárolja, amikor nem használja őket.

B. FERTŐTLENÍTÉS:

Membrán, szelep, szűkítő, csatlakozó, mellvédő, tejtartály:

- Töltsen meg az edényt vagy sterilizálót vízzel úgy, hogy a belsejében lévő összes alkatrész (membrán, szelep, szűkítő, csatlakozó, mellvédő, tejtartály) fedve legyen, amikor belehelyezi. Forralja fel. Tegye a mellszívó alkatrészeit 10 percre a forrásban lévő vízbe. Ne forralja fel.

- Hagyja a darabokat természetes módon megszáradni. A száraz kiegészítőket hűvös, száraz helyen tárolja, amikor nem használja őket.

C. A SZIVATTYÚBERENDEZÉS TISZTÍTÁSA:

- Törölje át a szivattyúegységet puha, nedves ruhával és enyhe mosogatószerrel/szappannal. Más tisztítószerrel vagy súrolószerrel károsíthatják a készüléket és a kijelzőt.

- Ha nem használja a szivattyúegységet, tárolja hűvös, száraz helyen.

06. A MELLSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA

C. ÁBRA

Csatlakoztassa az alkatrészeket a C 1-5. ábrán látható módon.

MEGJEGYZÉS: Alaposan mosson kezet szappannal és vízzel, mielőtt a mellszívóhoz és a mellhez érne.

1. Helyezze be a membránt a csatlakozóba. **C1. ÁBRA.**

2. Csatlakoztassa a szelepet a csatlakozóhoz. **C2. ÁBRA. FIGYELEM:** A szelepet a hosszabbik részével a mellvéd felé kell rögzíteni. **Áttekintés: C6. ÁBRA.**

3. Csatlakoztassa a csatlakozót a membránnal és a szeleppel a tejtartályhoz, kezdve a membránnak a horonyba helyezésével. **C3. ÁBRA.**
4. Helyezze a mellvédet a tejtartályba. **C4. ÁBRA.**
5. Csatlakoztassa a szivattyúberendezést a tejtartály tetejére. **C5. ÁBRA.**
6. Helyezze a mellvédet a mellére úgy, hogy a mellbimbó a vízelvezető csatornában legyen. Nyomja a mellvédő és a mellszívó csatlakozóját a hüvelyk- és mutatóujjával a melléhez. **C6.**
7. Helyezze a mellszívót a melltartóba/laktációs fűzőbe. **C7. ÁBRA.**
8. Kapcsolja be a mellszívót a bekapcsológomb megnyomásával, és válassza ki az Önnek megfelelő üzemmódot.
9. A tej kiöntéséhez tartsa vízszintesen a mellszívót, és óvatosan csavarja le a szivattyút **FIG C8.** Tartsa a tejtartályt a mellvédővel felfelé - fektesse laposan az asztallapra (ne fektesse felfelé, hogy a tej ne folyjon ki). **C9. ÁBRA.** Óvatosan öntse a tejet a palackba/tárolóedénybe. **C10. ÁBRA.**
10. Használat után vegye ki és tisztítsa meg az összes mellszívó alkatrészt. **C11.**

MEGJEGYZÉSEK:

- a. Minden használat előtt ellenőrizze a mellszívó alkatrészeit, hogy nem sérültek-e meg. Ha szükséges, cserélje ki a sérült alkatrészeket újakra.
- b. A készülék használata előtt mindig ellenőrizze az alkatrészek tisztaságát.
- c. Ha a mellvédő átmérője túl nagy, használja a mellékelt szűkítőt a belsejébe helyezve. **C12. ÁBRA.**

MEGJEGYZÉSEK:

A mellszívó stimulációs üzemmódban indul. A +/- gombok segítségével állítsa be az Ön számára kényelmes szívóerősséget:

- Stimulációs üzemmód - gyors pumpálás, amely a baba természetes anyatej-szívását utánozza a tejáramlás serkentése érdekében. 2 perc elteltével a mellszívó automatikusan aktiválja a mélyszivattyúzási üzemmódot. Állítsa be a szívási szintet a +/- gombok segítségével, hogy megtalálja az Ön számára kényelmes legmagasabb szívási szintet. Ha a két perc letelte előtt elkezd folyni a tej a melléből, nyomja meg az üzemmódváltó gombot, hogy manuálisan átkapcsoljon mélyszívó üzemmódra.

- Mélyszivattyúzási mód - lassabb szivattyúzás, amely kíméletesen és hatékonyan szívja ki a tejet a mellből. Ebben az üzemmódban növelje a szívást, amíg enyhe kellemetlenséget (nem fájdalmat) nem érez, majd csökkentse a szívást egy fokkal.

- Vegyes üzemmód - utánozza a baba szopóreflexét. Használható a pumpálás után, hogy segítse a mell kiürülését és fokozza a szoptatást.

07. A MELLSZÍVÓ FELTÖLTÉSE

Teljesen töltsse fel a mellszívó akkumulátorát, mielőtt tárolóba helyezi, ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket. Töltsse fel a készülék akkumulátorát, mielőtt az teljesen lemerülne. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Ha a mellszívót meleg helyen tárolta, előfordulhat, hogy a készülék akkumulátora eleinte nem működik. Hagyja a mellszívót egy órán át hűlni, mielőtt használni kezdené.

Jelzések:

LO - akkor jelenik meg, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alatt van.

D1.

Villogó pontok - mellszívó töltés alatt. **D2.**

Három folyamatosan világító pont - az akkumulátor teljesen feltöltve. **D3.**

Ne használja a mellszívót töltés közben.

08. FOGYÓESZKÖZÖK CSERÉJE

A fogyó alkatrészek a mellszívó működése során természetes elhasználódásnak vannak kitéve, ezért a gyártó garanciája nem terjed ki rájuk. A mellszívó elhasználódott, tejjel érintkező alkatrészeit ki kell cserélni. Az elhasználódott alkatrész repedést, deformációt, elszíneződést vagy határozott színváltozást mutat.

- A membránt 8 hetente (ha naponta 1-3 alkalommal használja a mellszívót) vagy 3-4 hetente (ha naponta több mint háromszor használja a mellszívót) kell cserélni.
- A szelepet 2-3 havonta (ha naponta 1-3 alkalommal használja a mellszívót) vagy 4 hetente (ha naponta több mint háromszor használja a mellszívót) kell cserélni.
- A mellvédő és a csatlakozó 6 havonta cserélendő, ha naponta több mint háromszor használja a mellszívót.

09. HOSSZÚ TÁVÚ TÁROLÁS

A mellszívó beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. A károsodástól való védelem érdekében a készülék hosszú ideig tartó inaktivitás után tárolási üzemmódba lép. A tároló üzemmód kikapcsolásához csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és töltsse fel 2 órán keresztül. Mielőtt hosszabb időre eltenné a mellszívót, győződjön meg róla, hogy:

- A mellszívó minden alkatrésze tiszta.
- Megtisztította a szivattyúberendezést.
- A készülék akkumulátora teljesen feltöltött.

10. GYIK

1. **A készülék nem indul el:** győződjön meg róla, hogy a mellszívó be van-e dugva egy működő konnektorba. Ha a mellszívónak nincs áramforrása, a kijelzője nem kapcsol be, és nem jelenik meg hibaüzenet.
2. **Nincs/rossz a szívás:** győződjön meg arról, hogy a mellszívó minden alkatrészre helyesen van-e elhelyezve. Szedje szét a mellszívót, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta és sértetlen. Szerelje össze újra a mellszívót a LAKTÁRI SZERELÉS című fejezetben található utasításoknak megfelelően. Pumpálás közben győződjön meg arról, hogy a tölcser teljesen a mellhez simul.
3. **Több tej folyt ki a mellből, mint amennyit a tartály elbír:** nedves (nem nedves) ruhával törölje le a mellszívót. Mossa ki a mellszívó azon részeit, amelyekben a tej található, a TISZTÍTÁS ÉS SZEMÉLYMENTESÍTÉS fejezetben található utasításoknak megfelelően. Amikor a gép minden része megszáradt, szerelje össze újra.

11. MŰSZAKI ADATOK

Tejtartály kapacitása: 210ml

Akkumulátor kapacitás: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Bemeneti teljesítmény: 110-240V

Kimeneti teljesítmény: 5V 1A

Működési idő: legfeljebb 150 perc

Töltési idő: kb. 150 perc

A mellszívó méretei: 9x4,5x6 cm x2

A mellszívó súlya: 150g x2

Shívóerő:

1. Stimulációs üzemmód (8 szint): 9-24 kPa
2. Mély extrakciós üzemmód (8 szint): 13-40 kPa
3. Vegyes üzemmód (8 szint): 10-24 kPa

Megengedett eltérés ± 5 Kpa.

12. JÓTÁLLÁSI/ REKLAMÁCIÓS KÁRTYA

A termékre 24 hónapos garancia vonatkozik. A garanciális feltételek a <https://nenopl/gwarancja> oldalon találhatók.

Részletek, elérhetőség és a szolgáltatás címe a következő címen található:

<https://nenopl/kontakt>

A specifikációk és a tartalom előzetes értesítés nélkül változhatnak. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Vážený zákazník,

Prístroj Neno Sole Twin, ktorý ste si zakúpili, je duálna, elektronická, trojfázová odsávačka mlieka, ktorá sa používa na odsávanie materského mlieka z prsníkov žien po pôrode. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

01. PREKÁŽKY

1. Ak nepotrebuje nabíjať batériu zariadenia, vždy ho po nabití odpojte od elektrickej siete.
2. Výrobok neumiestňujte na miesta, kde hrozí jeho pád do umývadla, vane alebo iných nádob.
3. Odsávačka mlieka a jej súčasti nie sú odolné voči vysokým teplotám - udržiajte zariadenie mimo horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
4. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
5. Odsávačka mlieka by sa nemala nechávať bez dozoru, keď je pripojená k zdroju napájania.
6. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak vám spadlo alebo bolo inak poškodené.
7. Nepoužívajte zariadenie, ktorého napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené.
8. Prístroj nepoužívajte vo vani ani v sprche.
9. Zariadenie neumiestňujte pod vodu ani do iných kvapalín.
10. Prístroj neumývajte pod tečúcou vodou.
11. Zariadenie nepripájajte do elektrickej zásuvky, ktorá bola v kontakte s vodou alebo inými kvapalinami.
12. Ak bolo zariadenie vystavené pôsobeniu vody alebo iných kvapalín - nedotýkajte sa priamo zariadenia, odpojte ho od napájania, vypnite ho a kontaktujte výrobcu.
13. Tento spotrebič je určený na používanie jedným používateľom. Používanie odsávačky mlieka viac ako jednou osobou predstavuje pre používateľov riziko poškodenia a ruší platnosť záruky.
14. Jednotku neopravujte ani neupravujte sami.
15. Odsávačku mlieka používajte len podľa návodu na použitie. Prístroj nepoužívajte na žiadne iné účely.
16. Pred každým použitím skontrolujte všetky komponenty odsávačky mlieka.

17. Vypustené mlieko neohrievajte v mikrovlnnej rúre. Mlieko ohrievané v mikrovlnnej rúre môže popáliť tvár dieťaťa, pretože ohrievanie mikrovlnnými vlnami môže vytvoriť v tekutine bubliny s vysokou teplotou. Okrem toho môžu mikrovlnné vlny zmeniť zloženie mlieka.
18. Mlieko počas ohrievania neprivádzajte do varu.
19. Pred prvým použitím odsávačky mlieka umyte a vydezinfikujte všetky časti odsávačky, ktoré prídu do priameho kontaktu s prsníkmi alebo mliekom.
20. Po každom použití odsávačky mlieka umyte všetky časti odsávačky, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s prsníkmi alebo mliekom.
21. Pri používaní odsávačky mlieka alebo jej príslušenstva v blízkosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
22. Počas nabíjania odsávačku mlieka nepoužívajte.

02. PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Pripojte odsávačku mlieka k napájaniu. Batérie nabíjajte 2,5 hodiny.
2. Odstráňte odsávačku mlieka.
3. Odpojte časti odsávačky, ktoré prídu do priameho kontaktu s prsníkom alebo mliekom: odstráňte prsný štít z nádoby na mlieko, potom potiahnite ventil nadol a membránu nahor, aby ste ju odpojili od konektora.
4. Vyčistite súčasti spotrebiča (pozri časť ČISTENIE A ODSTRÁNENIE).

POZNÁMKA!

Odsávačku mlieka používajte vo vzpriamenej polohe. Používanie v akejkoľvek inej polohe (napr. v ľahu) spôsobí, že odsávačka nebude správne priliehať k prsníku a mlieko bude vytekať.

03. ELEMENTY

FIG. A

1. Čerpacie zariadenie x2
2. Nádoba na mlieko x2
3. Konektor x2
4. Ventil x4
5. Nabíjací kábel USB-C x2
6. Prsný štít 24 mm x2
7. Membrána x4
8. Redukcia prsného štítu 20 mm x2

04. OPIS ČERPACIEHO ZARIADENIA

FIG. B

1. Ikona zvoleného režimu (I bodka - stimulačná fáza, II bodka - fáza hlbokej extrakcie, III bodka - zmiešaná fáza).
2. Tlačidlo napájania - podržaním tlačidla na 2 sekundy zariadenie

zapnete alebo vypnete. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla pozastavíte odsávanie mlieka.

3. Zmena úrovne odsávania - Stlačením tlačidla “-” znížite výkon odsávania.
4. Ikona zvoleného režimu (L1-L8)/času odsávačky mlieka.
5. Tlačidlo zmeny režimu - Stlačením tlačidla zmeníte prevádzkový režim jednotky.
6. Zmena úrovne odsávania - Stlačením tlačidla “+” zvýšite výkon odsávania.
7. Nabíjacia zásuvka USB-C

05. ČISTENIE A DEZINFEKCIA

Umyvanie a dezinfekcia sú dve rôzne operácie. Musia sa vykonávať oddelene, aby sa chránilo vaše dieťa a zabezpečilo správne fungovanie odsávačky mlieka.

Umyvanie - umývanie povrchu jednotky a odstraňovanie nečistôt.

Dezinfekcia - ničenie organizmov, ako sú baktérie alebo vírusy, ktoré sa môžu nachádzať na povrchu zariadenia.

Prsný štít, membrána, ventil, redukcia, konektor, nádoba na mlieko:

Pred prvým použitím umyte a vydezinfikujte.

Umyte - po každom použití.

Raz denne a pred prvým použitím - dezinfekcia.

A. PRANIE:

- Rozmontujte všetky časti odsávačky (okrem odsávacieho zariadenia) a umývajte ich 5 minút v teplej mydlovej vode a potom opláchnite. Urobte tak ihneď po použití odsávačky. Odstránia sa tak usadeniny mlieka a zabráni sa rastu baktérií.

- Na umývanie používajte len pitnú vodu z vodovodu. Ak voda vo vašom vodovode nespĺňa túto požiadavku, používajte balenú vodu.

- Pri čistení silikónových dielov nepoužívajte kefy. Dávajte pozor, aby ste ich neprepichli.

- Použite jemný prostriedok na umývanie riadu alebo mydlo.

- Nechajte diely prirodzene vyschnúť. Suché časti spotrebiča skladujte na chladnom a suchom mieste, keď ich nepoužívate.

B. DEZINFEKCIA:

Membrána, ventil, redukcia, konektor, prsný štít, nádoba na mlieko:

- Naplňte nádobu alebo sterilizátor vodou tak, aby boli všetky komponenty vo vnútri (membrána, ventil, redukcia, konektor, prsný štít, nádoba na mlieko) pri vložení do nádoby zakryté. Privedte do varu. Časti odsávačky mlieka

vložte do vriacej vody na 10 minút. Nevarte.

- Kusy nechajte prirodzene vyschnúť. Ak nepoužívate suché súpravy, skladujte ich na chladnom a suchom mieste.

C. ČISTENIE ČERPACIEHO ZARIADENIA:

- Jednotku čerpadla utrite mäkkou, vlhkou handričkou a jemným prostriedkom na umývanie riadu/mydlom. Iné čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky môžu poškodiť jednotku a jej displej.

- Ak jednotku čerpadla nepoužívate, uložte ju na chladnom a suchom mieste.

06. MONTÁŽ A POUŽÍVANIE ODSÁVAČKY MLIEKA

FIG. C

Pripevnite komponenty podľa obrázkov C 1-5.

POZNÁMKA: Pred dotykom odsávačky a prsníka si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom.

1. Vložte membránu do konektora. **FIG. C1.**
2. Pripojte ventil ku konektoru. **FIG. C2. POZOR:** Ventil by mal byť upevnený dlhšou časťou smerom k prsnému štítu. Prehľad: **OBRÁZOK C6.**
3. Pripojte konektor s membránou a ventilom k nádobe na mlieko, pričom začnite umiestnením membrány do drážky. **FIG. C3.**
4. Umiestnite prsný štít do nádoby na mlieko. **FIG. C4.**
5. Pripevnite čerpacie zariadenie k hornej časti nádoby na mlieko. **FIG. C5.**
6. Umiestnite prsný štít na prsník tak, aby sa bradavka nachádzala vo vnútri odvodňovacieho kanálika. Palcom a ukazovákom pritlačte prsný štít a konektor odsávačky mlieka k prsníku. **OBRÁZOK C6.**
7. Vložte odsávačku mlieka do podprsenky/laktačného korzetu. **OBRÁZOK C7.**
8. Zapnite odsávačku mlieka stlačením tlačidla napájania a vyberte prevádzkový režim, ktorý vám vyhovuje.
9. Ak chcete mlieko vyliť, držte odsávačku mlieka vo vodorovnej polohe a opatrne odskrutkujte **FIG C8.** Nádobku na mlieko držte prsným štítom smerom nahor - položte ju rovno na dosku stola (nepokladajte ju smerom nahor, aby mlieko nevyteklo). **FIG C9.** Opatrne prelejte mlieko do fľaše/úložnej nádoby. **FIG C10.**
10. Po použití odstráňte a vyčistite všetky komponenty odsávačky mlieka. **OBRÁZOK C11.**

POZNÁMKY:

- a. Pred každým použitím skontrolujte časti odsávačky mlieka, či nie sú poškodené. V prípade potreby vymeňte poškodené časti za nové.

- b. Pred použitím prístroja vždy skontrolujte čistotu komponentov.
- c. Ak je priemer prsného štítu príliš veľký, použite dodanú redukciu tak, že ju vložíte dovnútra. **OBRÁZOK C12.**

POZNÁMKY:

Odsávačka mlieka sa spustí v stimulačnom režime. Pomocou tlačidiel +/- nastavte úroveň sily odsávania, ktorá vám vyhovuje:

- Stimulačný režim - rýchle odsávanie, ktoré napodobňuje prirodzené sanie materského mlieka bábätkom a stimuluje tak tok mlieka. Po 2 minútach odsávačka mlieka automaticky aktivuje režim hlbokého odsávania. Pomocou tlačidiel +/- nastavte úroveň odsávania, aby ste našli najvyššiu úroveň odsávania, ktorá vám vyhovuje. Ak vám začne z prsníka tiecť mlieko pred uplynutím dvoch minút, stlačením tlačidla na zmenu režimu manuálne prepnete na režim hlbokého odsávania.

- Režim hlbokého odsávania - pomalšie odsávanie, ktoré jemne a účinne odsáva mlieko z prsníka. V tomto režime zvýšte odsávanie, kým nepocítite mierny diskomfort (nie bolesť) a znížte odsávanie o jeden stupeň.

- Zmiešaný režim - napodobňuje sací reflex dieťaťa. Môže sa používať po odsávaní, aby pomohol vyprázdniť prsník a zvýšiť laktáciu.

07. NABÍJANIE ODSÁVAČKY MLIEKA

Ak nemáte v úmysle zariadenie dlhší čas používať, pred uložením odsávačky mlieka do skladu batériu úplne nabite. Batériu zariadenia nabite skôr, ako sa úplne vybije. Predĺžite tým životnosť batérie. Ak bola odsávačka mlieka skladovaná na horúcom mieste, batéria zariadenia nemusí spočiatku fungovať. Predtým, ako začnete odsávačku mlieka používať, nechajte ju jednu hodinu vychladnúť.

Indikácie:

LO - zobrazí sa, ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako 20 %. **FIG D1.**

Blikajúce bodky - odsávačka mlieka sa nabíja. **FIG D2.**

Tri nepretržité svietiace bodky - batéria je plne nabitá. **OBRÁZOK D3.**

Počas nabíjania odsávačku mlieka nepoužívajte.

08. VÝMENA SPOTREBNÉHO MATERIÁLU

Spotrebné komponenty podliehajú prirodzenému opotrebovaniu počas prevádzky odsávačky mlieka, a preto sa na ne nevzťahuje záruka výrobcu. Opotrebované súčasti odsávačky mlieka, ktoré prichádzajú do kontaktu s mliekom, by sa mali vymeniť. Opotrebovaná súčasť má prasklinu, deformáciu, zmatnenie alebo výraznú zmenu farby.

- Membrána by sa mala vymieňať každých 8 týždňov (ak odsávačku používate 1-3-krát denne) alebo každé 3-4 týždne (ak odsávačku

používate viac ako 3-krát denne).

- Ventil by sa mal vymieňať každé 2 - 3 mesiace (ak odsávačku používate 1 - 3-krát denne) alebo každé 4 týždne (ak odsávačku používate viac ako 3-krát denne).
- Ak používate odsávačku mlieka častejšie ako 3-krát denne, prsný štít a konektor by sa mali vymeniť každých 6 mesiacov.

09. DLHODOBÉ SKLADOVANIE

Odsávačka mlieka má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Na ochranu pred poškodením sa zariadenie po dlhšom čase nečinnosti prepne do režimu skladovania. Ak chcete deaktivovať režim ukladania, pripojte zariadenie k napájaniu a nabíjajte ho 2 hodiny. Pred odložením odsávačky mlieka na dlhší čas sa uistite, že:

- Všetky súčasti odsávačky mlieka sú čisté.
- Vyčistili ste čerpace zariadenie.
- Batéria zariadenia je úplne nabitá.

10. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. **Prístroj sa nespustí: skontrolujte**, či je odsávačka mlieka zapojená do funkčnej elektrickej zásuvky. Ak odsávačka mlieka nemá zdroj napájania, jej displej sa nezapne a nezobrazí sa žiadne chybové hlásenie.
2. **Žiadne/slabé odsávanie: uistite** sa, že sú všetky časti odsávačky umiestnené správne. Rozoberte odsávačku mlieka a skontrolujte, či sú všetky časti čisté a nepoškodené. Znovu zmontovať odsávačku mlieka podľa pokynov v časti MONTÁŽ LAKTÁTORU. Pri odsávaní sa uistite, či je lievik úplne nasadený na prsníku.
3. **Z prsníka vytieklo viac mlieka, ako sa zmestí do nádoby:** na utretie odsávačky použite vlhkú (nie mokrú) handričku. Časti odsávačky mlieka, v ktorých sa nachádza mlieko, umyte podľa pokynov v časti ČISTENIE A DEZINFEKCIA. Keď sú všetky časti odsávačky suché, znovu ju zostavte.

11. ŠPECIFIKÁCIA

Objem nádoby na mlieko: 210 ml

Kapacita batérie: 3,7 V 1500 mAh Li-Po

Vstupné napájanie: 110-240 V

Výstupný výkon: 5V 1A

Prevádzkový čas: do 150 minút

Čas nabíjania: približne 150 minút

Rozmery odsávačky mlieka: 9x4,5x6 cm x2

Hmotnosť odsávačky mlieka: 150 g x2

Sací výkon:

1. Režim stimulácie (8 úrovní): 9-24 kPa
2. Režim hĺbkovej extrakcie (8 úrovní): 13-40 kPa
3. Zmiešaný režim (8 úrovní): 10-24 kPa

Prípustná odchýlka ± 5 Kpa.

12. ZÁRUČNÝ/REKLAMAČNÝ LIST

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka. Záručné podmienky nájdete na:

<https://neno.pl/gwarancja>

Podrobnosti, kontaktné údaje a servisnú adresu nájdete na:

<https://neno.pl/kontakt>

Špecifikácie a obsah sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

SE

ANVÄNDARHANDBOK

Kära kund,

Den Neno Sole Twin-enhet som du har köpt är en dubbel, elektronisk tre-fasbröstpump som används för att pumpa ut bröstmjölk från kvinnans bröst efter förlossningen. Läs bruksanvisningen före användning.

01. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Koppla alltid ur enheten efter laddning om du inte behöver ladda enhetens batteri.
2. Placera inte produkten så att den riskerar att falla ner i diskbänkar, badkar eller andra behållare.
3. Bröstpumpen och dess komponenter är inte värmebeständiga - håll enheten borta från heta ytor och öppna lågor.
4. Använd inte enheten i närheten av brandfarliga material.
5. Bröstpumpen får inte lämnas utan uppsikt när den är ansluten till en strömkälla.
6. Använd aldrig enheten om den har tappats eller skadats på annat sätt.
7. Använd inte en enhet vars nätsladd eller kontakt är skadad.
8. Använd inte enheten i badkar eller dusch.
9. Placera inte enheten under vatten eller i andra vätskor.

10. Tvätta inte enheten under rinnande vatten.
11. Anslut inte enheten till ett eluttag som har varit i kontakt med vatten eller andra vätskor.
12. Om apparaten har utsatts för vatten eller andra vätskor - rör inte apparaten direkt, koppla bort den från strömförsörjningen, stäng av den och kontakta tillverkaren.
13. Denna apparat är avsedd att användas av en enda användare. Om bröstpumpen används av fler än en person finns det risk för att användarna skadas och garantin upphör att gälla.
14. Reparera eller modifiera inte enheten själv.
15. Använd bröstpumpen endast enligt beskrivningen i bruksanvisningen. Använd inte apparaten för något annat ändamål.
16. Inspektera alla bröstpumpens komponenter före varje användningstillfälle.
17. Värm inte den urdruckna mjölken i mikrovågsugnen. Mjolk som värms i mikrovågsugn kan bränna barnets ansikte eftersom uppvärmning med mikrovågsvågor kan skapa bubblor med hög temperatur i vätskan. Dessutom kan mikrovågsvågor ändra mjölkens sammansättning.
18. Låt inte mjölken koka upp under uppvärmningen.
19. Innan du använder bröstpumpen för första gången ska du tvätta och desinficera alla delar av maskinen som kommer i direkt kontakt med bröstet eller mjölken.
20. Efter varje användning av bröstpumpen ska du tvätta alla delar av maskinen som kommer i direkt kontakt med bröstet eller mjölken.
21. Var särskilt försiktig när du använder bröstpumpen eller dess tillbehör i närheten av barn.
22. Använd inte bröstpumpen medan den laddas.

02. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Anslut bröstpumpen till strömförsörjningen. Ladda batterierna i 2,5 timmar.
2. Ta bort bröstpumpen.
3. Koppla bort de delar av bröstpumpen som kommer i direkt kontakt med bröstet eller mjölken: ta bort bröstskyddet från mjölkbehållaren, dra sedan ventilen nedåt och membranet uppåt för att koppla bort från kontakten.
4. Rengör apparatens komponenter (se avsnittet RENGÖRING OCH DESINFEKTION).

OBS!

Använd bröstpumpen i upprätt läge. Om du använder bröstpumpen i någon annan position (t.ex. liggande) kommer den inte att sitta ordentligt på

bröstet och mjölk kan läcka ut.

03. ELEMENT

FIG. A

1. Pumpanordning x2
2. Mjölkbhållare x2
3. Anslutning x2
4. Ventil x4
5. USB-C laddningskabel x2
6. Bröstskydd 24 mm x2
7. Membran x4
8. Bröstskyddsreducerare 20 mm x2

04. BESKRIVNING AV PUMPANORDNINGEN

FIG. B

1. Ikon för valt läge (I-punkt - stimuleringsfas, II-punkter - djup extraktionsfas, III-punkter - blandad fas).
2. Strömknapp - Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att slå på eller stänga av enheten. När enheten är på trycker du på för att pausa bröstpumpen.
3. Ändra sugnivå - Tryck på «-» för att minska sugkraften.
4. Ikon för valt läge (L1-L8)/tid för bröstpumpen.
5. Lägesändringsknapp - Tryck på knappen för att ändra enhetens driftläge.
6. Ändra sugnivå - Tryck på «+» för att öka sugkraften.
7. USB-C laddningsuttag

05. RENGÖRING OCH DESINFEKTION

Tvättning och desinficering är två olika åtgärder. De måste utföras separat för att skydda ditt barn och för att säkerställa att bröstpumpen fungerar som den ska.

Tvätt - tvätta enhetens yta och avlägsna smuts.

Desinfektion - dödande av organismer som bakterier eller virus som kan finnas på utrustningens yta.

Bröstsköld, membran, ventil, reducerare, anslutning, mjölkbhållare:

Tvätta och desinficera - före första användning.

Tvätta - efter varje användning.

En gång om dagen och före första användning - desinfektion.

A. TVÄTTNING:

- Ta isär alla delar av bröstpumpen (utom pumpanordningen) och tvätta i

varmt tvålsvatten i 5 minuter och skölj sedan. Gör detta omedelbart efter att du har använt maskinen. På så sätt avlägsnas mjölkavlagringar och bakterietillväxt förhindras.

- Använd endast drickbart kranvatten för tvätt. Använd buteljerat vatten om vattnet i kranen inte uppfyller detta krav.
- Använd inte borstar vid rengöring av silikondelar. Var försiktig så att du inte sticker igenom dem.
- Använd ett mildt diskmedel eller tvål.
- Låt delarna torka på naturlig väg. Förvara torra delar av apparaten på en sval och torr plats när du inte använder dem.

B. DESINFEKTION:

Membran, ventil, reducerare, anslutning, bröstskydd, mjölkbehållare:

- Fyll kastrullen eller sterilisatorn med vatten så att alla komponenter inuti (membran, ventil, reducerare, kontakt, bröstskydd, mjölkbehållare) täcks när de placeras i kastrullen eller sterilisatorn. Låt koka upp. Placera bröstpumpens delar i kokande vatten i 10 minuter. Får inte koka.
- Låt delarna torka på naturlig väg. Förvara torra kitdelar på en sval och torr plats när du inte använder dem.

C. RENGÖRING AV PUMPANORDNINGEN:

- Torka av pumpenheten med en mjuk, våt trasa och ett mildt diskmedel/såpa. Andra rengöringsmedel eller slipmedel kan skada aggregatet och dess display.
- När pumpenheten inte används ska den förvaras på en sval och torr plats.

06. MONTERING OCH ANVÄNDNING AV BRÖSTPUMPEN

FIG. C

Fäst komponenterna enligt bilderna C 1-5.

OBS: Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan du vidrör bröstpumpen och bröstet.

1. Sätt in membranet i kontakten. **FIG. C1.**
2. Anslut ventilen till kontaktdonet. **FIG. C2. OBSERVERA:** Ventilen ska fästas med den längre delen mot bröstskölden. För en översikt: **FIG. C6.**
3. Fäst anslutningen med membranet och ventilen på mjölkbehållaren, börja med att placera membranet i spåret. **FIG. C3.**
4. Placera bröstskyddet i mjölkbehållaren. **FIG. C4.**
5. Sätt fast pumpanordningen på toppen av mjölkbehållaren. **FIG. C5.**
6. Placera bröstskyddet på bröstet så att bröstvårtan befinner sig i dräneringskanalen. Tryck bröstskyddet och bröstpumpens kontakt mot bröstet med tummen och pekfingeret. **FIG. C6.**

7. Sätt in bröstpumpen i bh/laktationskorsetten. **FIG. C7.**
8. Sätt på bröstpumpen genom att trycka på strömbrytaren och välj det driftläge som passar dig bäst.
9. För att hålla upp mjölken håller du bröstpumpen horisontellt och skruvar försiktigt loss pumpen **FIG C8.** Håll mjölkbehållaren med bröstskyddet uppåt - lägg den platt på bordsskivan (lägg den inte uppåt för att förhindra att mjölken rinner ut). **FIG C9.** Håll försiktigt upp mjölken i flaskan/förvaringsbehållaren. **FIG C10.**
10. Ta bort och rengör alla bröstpumpens komponenter efter användning. **FIG C11.**

NOTER:

- a. Före varje användningstillfälle ska bröstpumpens delar kontrolleras med avseende på skador. Byt vid behov ut skadade delar mot nya.
- b. Kontrollera alltid att komponenterna är rena innan du använder enheten.
- c. Om bröstskyddets diameter är för stor, använd den medföljande reduceraren genom att föra in den i bröstskyddet. **FIG. C12.**

NOTER:

Bröstpumpen startar i stimuleringsläge. Ställ in den sugstyrka som passar dig bäst med hjälp av +/- knapparna:

- Stimuleringsläge - snabb pumpning som efterliknar ditt barns naturliga sugning av bröstmjolk för att stimulera mjölkflödet. Efter 2 minuter aktiverar bröstpumpen automatiskt läget för djupumpning. Justera sugnivån med +/- knapparna för att hitta den högsta sugnivå som är bekväm för dig. Om mjölken börjar rinna från bröstet innan två minuter har gått, tryck på knappen för lägesändring för att manuellt växla till läget för djup urpumpning.
- Djupumpningsläge - långsammare pumpning som försiktigt och effektivt suger ut mjolk från bröstet. I det här läget ökar du sugningen tills du känner ett lätt obehag (inte smärta) och minskar sedan sugningen med en grad.
- Blandat läge - efterliknar barnets sugreflex. Kan användas efter pumpning för att hjälpa till att tömma bröstet och öka laktationen.

07. LADDNING AV BRÖSTPUMPEN

Ladda bröstpumpens batteri helt innan du ställer den i förvaring om du inte tänker använda enheten under en längre tid. Ladda enhetens batteri innan det är helt urladdat. Detta förlänger batteriets livslängd. Om bröstpumpen har förvarats på en varm plats kanske enhetens batteri inte fungerar i början. Låt bröstpumpen svalna i en timme innan du börjar använda den.

Indikationer:

LO - visas om batterinivån är lägre än 20%. **FIG D1.**

Blinkande prickar - bröstpump under laddning. **FIG D2.**

Tre prickar lyser kontinuerligt - batteriet är fulladdat. **FIG D3.**

Använd inte bröstpumpen medan den laddas.

08. UTBYTE AV FÖRBRUKNINGSVAROR

Förbrukningsbara komponenter utsätts för naturligt slitage under användning av bröstpumpen och omfattas därför inte av tillverkarens garanti. Slitna komponenter i bröstpumpen som kommer i kontakt med mjölk bör bytas ut. En sliten komponent har en spricka, deformation, missfärgning eller en tydlig färgförändring.

- Membranet bör bytas ut var 8:e vecka (om du använder bröstpumpen 1-3 gånger per dag) eller var 3-4:e vecka (om du använder bröstpumpen mer än 3 gånger per dag).
- Ventilen bör bytas ut var 2-3:e månad (om du använder bröstpumpen 1-3 gånger per dag) eller var 4:e vecka (om du använder bröstpumpen mer än 3 gånger per dag).
- Bröstskyddet och anslutningsdonet bör bytas ut var 6:e månad om du använder bröstpumpen mer än 3 gånger per dag.

09. LÅNGTIDSLAGRING

Bröstpumpen har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. För att skydda sig mot skador går enheten in i förvaringsläge efter en längre tids inaktivitet. För att avaktivera förvaringsläget ska du ansluta enheten till elnätet och ladda den i 2 timmar. Innan du ställer undan bröstpumpen för en längre tid ska du kontrollera att:

- Alla komponenter i bröstpumpen är rena.
- Du har rengjort pumpanordningen.
- Enhetens batteri är fulladdat.

10. VANLIGA FRÅGOR

1. **Enheter startar inte: Kontrollera att** bröstpumpen är ansluten till ett fungerande eluttag. Om bröstpumpen inte har någon strömkälla tänds inte displayen och inget felmeddelande visas.
2. **Inget/dåligt sug: Kontrollera att** alla bröstpumpens delar är korrekt placerade. Ta isär bröstpumpen och kontrollera att alla delar är rena och oskadade. Montera ihop bröstpumpen enligt anvisningarna i avsnittet Montering av laktator. Se till att tratten är helt placerad mot bröstet när du pumpar.
3. **Det har runnit mer mjölk från bröstet än vad behållaren rymmer:**

torka av bröstpumpen med en fuktig (inte våt) trasa. Tvätta de delar av bröstpumpen där det finns mjölk enligt anvisningarna i avsnittet RENGÖRING OCH DESINFEKTERING. Sätt ihop maskinen igen när alla delar är torra.

11. SPECIFIKATION

Mjölkbehållarens kapacitet: 210 ml

Batterikapacitet: 3,7 V 1500 mAh Li-Po

Ingångseffekt: 110-240V

Utgångseffekt: 5V 1A

Drifttid: upp till 150 minuter

Laddningstid: ca 150 minuter

Bröstpumpens mått: 9x4,5x6 cm x2

Vikt för bröstpump: 150g x2

Sugkraft:

1. Stimuleringsläge (8 nivåer): 9-24 kPa
2. Djupt extraktionsläge (8 nivåer): 13-40 kPa
3. Blandat läge (8 nivåer): 10-24 kPa

Tillåten variation ± 5 Kpa.

12. GARANTI-/REKLAMATIONSKORT

Produkten levereras med 24 månaders garanti. Garantivillkoren finns på:

<https://nenopl/gwarancja>

Mer information, kontaktuppgifter och serviceadress finns på:

<https://nenopl/kontakt>

Specifikationer och innehåll kan ändras utan föregående meddelande. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Hyvä asiakas,

Ostamasi Neno Sole Twin -laite on kaksivaiheinen, elektroninen, kolmivaiheinen rintapumppu, jota käytetään rintamaidon pumppaamiseen naisen rinnasta synnytyksen jälkeen. Lue käyttöohjeet ennen käyttöä.

01. VAROTOIMENPITEET

1. Irrota laite aina latauksen jälkeen pistorasiasta, jos et tarvitse ladata laitteen akkua.
2. Älä sijoita tuotetta paikkaan, jossa se on vaarassa pudota lavuaareihin, kylpyammeisiin tai muihin astioihin.
3. Rintapumppu ja sen osat eivät ole kuumuutta kestäviä - pidä laite kaukana kuumilta pinnoilta ja avotulesta.
4. Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähellä.
5. Rintapumppua ei saa jättää ilman valvontaa, kun se on kytketty virtalähteeseen.
6. Älä koskaan käytä laitetta, jos se on pudonnut tai muuten vahingoittunut.
7. Älä käytä laitetta, jonka virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.
8. Älä käytä laitetta kylpyammeessa tai suihkussa.
9. Älä aseta laitetta veden tai muiden nesteiden alle.
10. Älä pese laitetta juoksevan veden alla.
11. Älä kytke laitetta pistorasiaan, joka on ollut kosketuksissa veden tai muiden nesteiden kanssa.
12. Jos laite on altistunut vedelle tai muille nesteille - älä koske laitteeseen suoraan, irrota se virtalähteestä, sammuta se ja ota yhteys valmistajaan.
13. Tämä laite on tarkoitettu yhden käyttäjän käyttöön. Rintapumpun käyttö useamman kuin yhden henkilön toimesta aiheuttaa käyttäjille vahingonvaaran ja mitätöi takuun.
14. Älä korjaa tai muuta laitetta itse.
15. Käytä rintapumppua vain käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen.
16. Tarkasta kaikki rintapumpun osat ennen jokaista käyttökertaa.
17. Älä kuumenna purettua maitoa mikroaaltouunissa.

Mikroaaltouunissa lämmitetty maito voi polttaa vauvan kasvot,

koska mikroaaltojen avulla lämmittäminen voi luoda nesteeseen korkealämpöisiä kuplia. Lisäksi mikroaallot voivat muuttaa maidon koostumusta.

18. Älä kiehauta maitoa kuumennettaessa.
19. Ennen kuin käytät rintapumppua ensimmäistä kertaa, pese ja desinfioi kaikki koneen osat, jotka joutuvat suoraan kosketuksiin rintasi tai maidon kanssa.
20. Pese jokaisen rintapumpun käyttökerran jälkeen kaikki koneen osat, jotka joutuvat suoraan kosketuksiin rintojen tai maidon kanssa.
21. Ole erityisen varovainen, kun käytät rintapumppua tai sen lisävarusteita lasten lähellä.
22. Älä käytä rintapumppua latauksen aikana.

02. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

1. Kytke rintapumppu virtalähteeseen. Lataa akkuja 2,5 tuntia.
2. Poista rintapumppu.
3. Irrota rintapumpun osat, jotka joutuvat suoraan kosketuksiin rinnan tai maidon kanssa: irrota rintasuojat maitosäiliöstä ja vedä sitten venttiili alas ja kalvo ylöspäin irrottaaksesi sen liittimestä.
4. Puhdista laitteen osat (katso kohta PUHDISTUS JA PUHDISTUS).

HUOM!

Käytä rintapumppua pystyasennossa. Jos rintapumppua käytetään muussa asennossa (esim. makuulla), rintapumppu ei sovi kunnolla rintaan ja maitoa vuotaa ulos.

03. ELEMENTIT

KUVA A

1. Pumppulaite x2
2. Maitosäiliö x2
3. Liitin x2
4. Venttiili x4
5. USB-C-latauskaapeli x2
6. Rintasuojat 24mm x2
7. Kalvo x4
8. Rintasuojan pienennin 20mm x2

04. PUMPPULAITTEEN KUVAUS

KUVA B

1. Valitun tilan kuvake (I piste - stimulaatiovaihe, II piste - syväuuttovaihe, III piste - sekavaihe).
2. Virtapainike - Pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi

laitteen päälle tai pois päältä. Kun laite on päällä, paina painiketta pysäyttääksesi rintapumpun.

3. Imutason muuttaminen - Vähennä imutehoa painamalla “-”.
4. Rintapumpun valitun tilan (L1-L8)/ajan kuvake.
5. Tilanvaihtopainike - Paina painiketta vaihtaaksesi laitteen toimintatila.
6. Imutason muuttaminen - Lisää imutehoa painamalla “+”.
7. USB-C-latauspistoke

05. PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

Pesu ja desinfiointi ovat kaksi eri toimenpidettä. Ne on suoritettava erikseen, jotta voit suojella vauvaa ja varmistaa, että rintapumppu toimii oikein.

Pesu - laitteen pinnan pesu ja lian poisto.

Desinfiointi - laitteiden pinnalla mahdollisesti olevien organismien, kuten bakteerien tai virusten, tappaminen.

Rintasuojus, kalvo, venttiili, vähennysventtiili, liitin, maitosäiliö:

Pese ja desinfioi - ennen ensimmäistä käyttöä.

Pese - jokaisen käytön jälkeen.

Kerran päivässä ja ennen ensimmäistä käyttöä - desinfiointi.

A. PESU:

- Pura kaikki rintapumpun osat (pumppauslaitetta lukuun ottamatta) ja pese lämpimässä saippuavedessä 5 minuutin ajan ja huuhtelee sitten. Tee tämä heti koneen käytön jälkeen. Tämä poistaa maitokertymät ja estää bakteerien kasvua.

- Käytä pesuun vain juomakelpoista vesijohtovettä. Käytä pullotettua vettä, jos hanavesi ei täytä tätä vaatimusta.

- Älä käytä silikoniosia puhdistaessasi harjoja. Varo lävistämästä niitä.

- Käytä mietoa astianpesuainetta tai saippuaa.

- Anna osien kuivua luonnollisesti. Säilytä kuivia laitteen osia viileässä ja kuivassa paikassa, kun et käytä niitä.

B. HÄVITTÄMINEN:

Kalvo, venttiili, supistimet, liitin, rintasuojus, maitosäiliö:

- Täytä astia tai sterilointilaitte vedellä siten, että kaikki sen sisällä olevat osat (kalvo, venttiili, supistimet, liitin, rintasuojus, maitosäiliö) peittyvät, kun ne asetetaan siihen. Kuumenna kiehuvaan veteen 10 minuutiksi. Älä keitä.

- Anna kappaleiden kuivua luonnollisesti. Säilytä kuivat sarjatuotteet viileässä ja kuivassa paikassa, kun et käytä niitä.

C. PUMPPULAITTEEN PUHDISTAMINEN:

- Pyyhi pumppuyksikkö pehmeällä, märällä liinalla ja miedolla astianpesuaineella/saippualla. Muut puhdistus- tai hankausaineet voivat vahingoittaa yksikköä ja sen näyttoa.

- Kun pumppuyksikköä ei käytetä, säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.

06. RINTAPUMPUN KOKOAMINEN JA KÄYTTÖ

KUVIO C

Kiinnitä osat KUVIEN C 1-5 osoittamalla tavalla.

HUOMAUTUS: Pese kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä, ennen kuin kosketat rintapumppua ja rintaa.

1. Aseta kalvo liittimeen. **KUVA C1.**
2. Kytke venttiili liittimeen. **KUVA C2. HUOMIO:** Venttiili on kiinnitettävä siten, että sen pidempi osa on rintasuojaa kohti. Yleiskatsaus: **KUVA C6.**
3. Kiinnitä liitin, jossa on kalvo ja venttiili, maitosäiliöön asettamalla kalvo ensin uraan. **KUVA C3.**
4. Aseta rintasuojaa maitosäiliöön. **KUVA C4.**
5. Kiinnitä pumppauslaite maitosäiliön yläosaan. **KUVA C5.**
6. Aseta rintasuojaa rintasi päälle niin, että nänni on tyhjennyskanavan sisällä. Paina rintasuojaa ja rintapumpun liitintä rintaa vasten peukalolla ja etusormella. **KUVA C6.**
7. Aseta rintapumppu rintaliiveihin/ imetyskorsettiin. **KUVA C7.**
8. Kytke rintapumppu päälle painamalla virtapainiketta ja valitse sinulle sopiva toimintatila.
9. Maidon kaatamiseksi pidä rintapumppua vaakasuorassa ja kierrä varovasti irti pumpun **KUVA C8.** Pidä maitosäiliötä rintasuojaa ylöspäin - aseta se tasaisesti pöydälle (älä aseta sitä ylöspäin, jotta maito ei valu ulos). **KUVA C9.** Kaada maito varovasti pulloon/säilytysastiaan. **KUVA C10.**
10. Irrota ja puhdista kaikki rintapumpun osat käytön jälkeen. **KUVA C11.**

HUOMAUTUKSET:

- a. Tarkista rintapumpun osat ennen jokaista käyttökertaa vaurioiden varalta. Tarvittaessa vaihda vaurioituneet osat uusiin.
- b. Tarkista aina osien puhtaus ennen laitteen käyttöä.
- c. Jos rintasuojan halkaisija on liian suuri, käytä mukana toimitettua pienennintä asettamalla se sisään. **KUVA C12.**

HUOMAUTUKSET:

Rintapumppu käynnistyy stimulaatiotilassa. Aseta sinulle sopiva imun

voimakkuus +/- -painikkeilla:

- Stimulaatiotila - nopea pumpppaus, joka jäljittelee vauvan luonnollista rintamaidon imemistä maidon virtauksen stimuloimiseksi. 2 minuutin kuluttua rintapumppu aktivoi automaattisesti syväpumpppaustilan. Säädä imutason tasoa +/- -painikkeilla, jotta löydät korkeimman imutason, joka on sinulle mukava. Jos maito alkaa virrata rinnasta ennen kuin kaksi minuuttia on kulunut, paina tilanvaihtopainiketta siirtyäksesi manuaalisesti syvään imutilaan.
- Syväpumpppaustila - hitaampi pumpppaus, joka imee maitoa rinnasta hellävaraisesti ja tehokkaasti. Tässä tilassa lisää imua, kunnes tunnet lievää epämukavuutta (ei kipua), ja vähennä imua yhdellä asteella.
- Sekatila - jäljittelee vauvan imemisrefleksiä. Voidaan käyttää pumpppauksen jälkeen auttamaan rintojen tyhjentymistä ja lisäämään imetystä.

07. RINTAPUMPUN LATAAMINEN

Lataa rintapumpun akku täyteen, ennen kuin laitat sen varastoon, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan. Lataa laitteen akku ennen kuin se on täysin tyhjä. Tämä pidentää akun käyttöikää. Jos rintapumpppua on säilytetty kuumassa paikassa, laitteen akku ei ehkä aluksi toimi. Anna rintapumpun jäähtyä tunnin ajan, ennen kuin alat käyttää sitä.

Käyttöaiheet:

LO - näyttää, jos akun varaustaso on alle 20 %. **KUVA D1.**

Viikkuvat pisteet - rintapumppu latautuu. **KUVA D2.**

Kolme pistettä palaa jatkuvasti - akku on ladattu täyteen. **KUVA D3.**

Älä käytä rintapumpppua latauksen aikana.

08. KULUTUSTARVIKKEIDEN VAIHTO

Kuluvat osat kuluvat luonnollisesti rintapumpun käytön aikana, joten valmistajan takuu ei kata niitä.

Rintapumpun kuluneet osat, jotka joutuvat kosketuksiin maidon kanssa, on vaihdettava. Kuluneessa osassa on halkeama, muodonmuutos, hämärtyminen tai selvä värimuutos.

- Kalvo on vaihdettava 8 viikon välein (jos käytät rintapumpppua 1-3 kertaa päivässä) tai 3-4 viikon välein (jos käytät rintapumpppua yli 3 kertaa päivässä).
- Venttiili on vaihdettava 2-3 kuukauden välein (jos käytät rintapumpppua 1-3 kertaa päivässä) tai 4 viikon välein (jos käytät rintapumpppua yli 3 kertaa päivässä).
- Rintasuoja ja liitin on vaihdettava 6 kuukauden välein, jos käytät rintapumpppua yli 3 kertaa päivässä.

09. PITKÄAIKAISÄILYTYS

Rintapumpussa on sisäänrakennettu ladattava akku. Vahingoilta suojautuakseen laite siirtyy varastointitilaan, kun se on pitkään käyttämättömänä. Voit poistaa varastointitilan käytöstä kytkemällä laitteen verkkovirtaan ja lataamalla sitä 2 tunnin ajan. Ennen kuin laitat rintapumpun pois käytöstä pitkäksi aikaa, varmista, että:

- Kaikki rintapumpun osat ovat puhtaita.
- Olet puhdistanut pumppulaitteen.
- Laitteen akku on ladattu täyteen.

10. FAQ

1. **Laite ei käynnisty:** Varmista, että rintapumppu on kytketty toimivaan pistorasiaan. Jos rintapumpussa ei ole virtalähdettä, sen näyttö ei syty eikä virheilmoitusta tule näkyviin.
2. **Ei imua/heikko imu:** varmista, että kaikki rintapumpun osat on asetettu oikein. Ota rintapumppu erilleen ja varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä. Kokoa rintapumppu uudelleen LAKTAATTORIN ASENNUS -kohdan ohjeiden mukaisesti. Varmista pumppauksen aikana, että suppilo on täysin rintaa vasten.
3. **Rinnasta on virrannut enemmän maitoa kuin säiliöön mahtuu:** pyyhi rintapumppu kostealla (ei märällä) liinalla. Pese rintapumpun osat, joihin maito mahtuu, kohdassa PUHDISTUS JA PUHDISTUS annettujen ohjeiden mukaisesti. Kun kaikki koneen osat ovat kuivuneet, asenna ne uudelleen.

11. TEKNISET TIEDOT

Maitosäiliön tilavuus: 210ml

Akun kapasiteetti: 3.7V 1500 mAh Li-Po -akku

Syöttöteho: 110-240V

Lähtöteho: 5V 1A

Toiminta-aika: jopa 150min

Latausaika: noin 150min

Rintapumpun mitat: 9x4,5x6 cm x2

Rintapumpun paino: Paino: 150g x2

Imuteho:

1. Stimulaatitila (8 tasoa): 9-24 kPa
2. Syväpoistotila (8 tasoa): 13-40 kPa
3. Sekatila (8 tasoa): 10-24 kPa

Sallittu vaihtelu ± 5 Kpa.

12. TAKUU/VALITUSKORTTI

Tuotteella on 24 kuukauden takuu. Takuuehdot löytyvät osoitteesta:

<https://nenopl/gwarancja>.

Yksityiskohdat, yhteystiedot ja palveluosoite löytyvät osoitteesta:

<https://nenopl/kontakt>.

Tekniset tiedot ja sisältö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

NO

BRUKERHÅNDBOK

Kjære kunde,

Neno Sole Twin-enheten du har kjøpt, er en dobbel, elektronisk, trefaset brystpumpe som brukes til å pumpe ut brystmelk fra kvinnens bryst etter fødselen. Les bruksanvisningen før bruk.

01. FORHOLDSREGLER

1. Trekk alltid ut støpselet etter lading hvis du ikke trenger å lade batteriet på enheten.
2. Ikke plasser produktet på steder der det er fare for at det kan falle ned i vasker, badekar eller andre beholdere.
3. Brystpumpen og dens komponenter er ikke varmebestandige - hold enheten borte fra varme overflater og åpen ild.
4. Ikke bruk apparatet i nærheten av brennbare materialer.
5. Brystpumpen bør ikke etterlates uten tilsyn når den er koblet til en strømkilde.
6. Bruk aldri enheten hvis den har falt ned eller er skadet på annen måte.
7. Ikke bruk en enhet hvis strømledningen eller støpselet er skadet.
8. Ikke bruk enheten i badekaret eller dusjen.
9. Ikke plasser enheten under vann eller i andre væsker.
10. Ikke vask enheten under rennende vann.
11. Ikke koble enheten til en stikkontakt som har vært i kontakt med vann eller andre væsker.
12. Hvis apparatet har vært utsatt for vann eller andre væsker - ikke ta direkte på apparatet, koble det fra strømforsyningen, slå det av og kontakt produsenten.

13. Dette apparatet er beregnet for bruk av én enkelt bruker. Bruk av brystpumpen av mer enn én person medfører en risiko for skade på brukerne og gjør garantien ugyldig.
14. Ikke reparer eller modifier enheten selv.
15. Bruk brystpumpen kun som beskrevet i bruksanvisningen. Ikke bruk enheten til noe annet formål.
16. Inspiser alle brystpumpens komponenter før hver bruk.
17. Ikke varm utpumpet melk i mikrobølgeovnen. Melk som varmes opp i mikrobølgeovn kan brenne barnets ansikt fordi oppvarming med mikrobølgebølger kan skape bobler med høy temperatur i væsken. I tillegg kan mikrobølger endre sammensetningen av melken.
18. Ikke kok opp melken mens du varmer den opp.
19. Før du bruker brystpumpen for første gang, må du vaske og desinfisere alle deler av maskinen som kommer i direkte kontakt med brystet eller melken din.
20. Etter hver gang du har brukt brystpumpen, må du vaske alle deler av maskinen som kommer i direkte kontakt med brystet eller melken din.
21. Vær spesielt forsiktig når du bruker brystpumpen eller tilbehøret i nærheten av barn.
22. Ikke bruk brystpumpen mens den lades.

02. FØR FØRSTE GANGS BRUK

1. Koble brystpumpen til strømforsyningen. Lad batteriene i 2,5 timer.
2. Fjern brystpumpen.
3. Koble fra de delene av brystpumpen som kommer i direkte kontakt med brystet eller melken: Fjern brystskjoldet fra melkebeholderen, og trekk deretter ventilen ned og membranen opp for å koble den fra kontakten.
4. Rengjør apparatets komponenter (se avsnittet RENGJØRING OG DESINFISERING).

MERK!

Bruk brystpumpen i oppreist stilling. Bruk i en annen stilling (f.eks. liggende) vil føre til at brystpumpen ikke passer ordentlig til brystet og at melk lekker ut.

03. ELEMENTER

FIG. A

1. Pumpeenhet x2
2. Melkebeholder x2
3. Kontakt x2
4. Ventil x4
5. USB-C-ladekabel x2

6. Brystskjold 24 mm x2
7. Membran x4
8. Brystskjoldreduksjon 20 mm x2

04. BESKRIVELSE AV PUMPEENHETEN

FIG. B

1. Ikon for valgt modus (I-punkt - stimuleringsfase, II-punkter - dyp ekstraksjonsfase, III-punkter - blandet fase).
2. Av/på-knapp - Hold knappen inne i 2 sekunder for å slå enheten av eller på. Når enheten er på, trykker du på for å sette brystpumpen på pause.
3. Endre sugestyrken - Trykk på "-" for å redusere sugeeffekten.
4. Ikon for valgt modus (L1-L8)/tidspunkt for brystpumpen.
5. Knapp for modusendring - Trykk på knappen for å endre enhetens driftsmodus.
6. Endre sugestyrken - Trykk på "+" for å øke sugeeffekten.
7. USB-C-ladekontakt

05. RENGJØRING OG DESINFEKSJON

Vasking og desinfisering er to forskjellige operasjoner. De må utføres separat for å beskytte barnet ditt og for å sikre at brystpumpen fungerer som den skal.

Vasking - vasking av overflaten på enheten og fjerning av smuss.

Desinfeksjon - dreping av organismer som bakterier eller virus som kan finnes på overflaten av utstyret.

Brystskjold, membran, ventil, reduksjonsventil, kontakt, melkebeholder:

Vask og desinfiser - før første gangs bruk.

Vask - etter hver bruk.

En gang om dagen og før første gangs bruk - desinfisering.

A. VASKING:

- Demonter alle deler av brystpumpen (unntatt pumpeenheten) og vask den i varmt såpevann i 5 minutter, og skyll deretter. Gjør dette umiddelbart etter at du har brukt maskinen. Dette vil fjerne melkeavleiringer og forhindre bakterievekst.

- Bruk kun drikkevann fra springen til vask. Bruk flaskevann hvis vannet i kranen ikke oppfyller dette kravet.

- Ikke bruk børster ved rengjøring av silikondeler. Vær forsiktig så du ikke stikker hull på dem.

- Bruk et mildt oppvaskmiddel eller såpe.

- La delene tørke naturlig. Oppbevar tørre deler på et kjølig og tørt sted når du ikke bruker dem.

B. DESINFISERING:

Membran, ventil, reduksjonsventil, kobling, brystskjold, melkebeholder:

- Fyll gryten eller sterilisatoren med vann slik at alle komponentene (membran, ventil, reduksjonsventil, kontakt, brystskjold, melkebeholder) er dekket når de plasseres inni. Bring vannet til kokepunktet. Legg brystpumpe-delene i kokende vann i 10 minutter. Ikke kok opp.
- La delene tørke naturlig. Oppbevar tørre deler av settet på et kjølig og tørt sted når du ikke bruker dem.

C. RENGJØRING AV PUMPEENHETEN:

- Tørk av pumpeenheten med en myk, våt klut og et mildt oppvaskmiddel/såpe. Andre rengjøringsmidler eller slipemidler kan skade enheten og displayet.
- Når pumpeenheten ikke er i bruk, skal den oppbevares på et kjølig og tørt sted.

06. MONTERING OG BRUK AV BRYSTPUMPEN

FIG. C

Fest komponentene som vist i fig. C 1-5.

MERK: Vask hendene grundig med såpe og vann før du berører brystpumpen og brystet.

1. Sett membranen inn i kontakten. **FIG. C1.**
2. Koble ventilen til kontakten. **FIG. C2. OBS: Ventilen** skal festes med den lengste delen mot brystskjoldet. For en oversikt: **FIG. C6.**
3. Fest koblingen med membranen og ventilen til melkebeholderen, og begynn med å plassere membranen i sporet. **FIG. C3.**
4. Plasser brystskjoldet i melkebeholderen. **FIG. C4.**
5. Fest pumpeenheten til toppen av melkebeholderen. **FIG. C5.**
6. Plasser brystskjoldet på brystet slik at brystvorten er inne i dreneringskanalen. Trykk brystskjoldet og brystpumpekontakten mot brystet ved hjelp av tommelen og pekefingeren. **FIG. C6.**
7. Sett brystpumpen inn i BH-en/ammekorsettet. **FIG. C7.**
8. Slå på brystpumpen ved å trykke på av/på-knappen og velg den driftsmodusen som passer deg.
9. For å helle melken holder du brystpumpen horisontalt og skruer forsiktig av pumpen **FIG C8.** Hold melkebeholderen med brystskjoldet vendt oppover - legg den flatt på bordplaten (ikke legg den oppover for å hindre at melken renner ut). **FIG C9.** Hell melken forsiktig over i flasken/oppbevaringsbeholderen. **FIG C10.**
10. Fjern og rengjør alle brystpumpens komponenter etter bruk. **FIG C11.**

NOTER:

- a. Kontroller brystpumpens deler for skader før hver bruk. Skift om nødvendig ut skadde deler med nye.
- b. Kontroller alltid at komponentene er rene før du tar enheten i bruk.
- c. Hvis diameteren på brystskjoldet er for stor, kan du bruke den medfølgende reduksjonshetten ved å stikke den inn. **FIG. C12.**

NOTER:

Brystpumpen starter i stimuleringsmodus. Still inn sugestyrkenivået som er behagelig for deg, ved hjelp av +/- knappene:

- Stimuleringsmodus - rask pumping som etterligner barnets naturlige suging av morsmelk for å stimulere melkeflyten. Etter 2 minutter aktiverer brystpumpen automatisk modusen for dyp pumping. Juster sugestyrken ved hjelp av +/- knappene for å finne det høyeste sugestyrkenivået som er behagelig for deg. Hvis det begynner å renne melk fra brystet før det har gått to minutter, kan du trykke på knappen for modusendring for å bytte til dyp utpumpingsmodus manuelt.

- Dyp pumpemodus - langsommere pumping som forsiktig og effektivt suger melk fra brystet. I denne modusen øker du suget til du føler et lett ubehag (ikke smerte), og reduserer deretter suget med én grad.

- Blandet modus - etterligner babyens sugerefleks. Kan brukes etter pumping for å tømme brystet og øke laktasjonen.

07. LADING AV BRYSTPUMPEN

Lad brystpumpens batteri helt opp før du legger den til oppbevaring hvis du har tenkt å ikke bruke enheten over en lengre periode. Lad opp batteriet før det er helt utladet. Dette forlenger batteriets levetid. Hvis brystpumpen har vært oppbevart på et varmt sted, kan det hende at batteriet først ikke fungerer. La brystpumpen kjøle seg ned i én time før du begynner å bruke den.

Indikasjoner:

LO - vises hvis batterinivået er under 20 %. **FIG D1.**

Blinkende prikker - brystpumpe under lading. **FIG D2.**

Tre punkter lyser kontinuerlig - batteriet er fulladet. **FIG D3.**

Ikke bruk brystpumpen mens den lades.

08. UTSKIFTING AV FORBRUKSMATERIELL

Forbrukskomponenter er utsatt for naturlig slitasje under bruk av brystpumpen og dekkes derfor ikke av produsentens garanti.

Slitte komponenter på brystpumpen som kommer i kontakt med melk, bør skiftes ut. En slitt komponent har en sprekk, deformasjon, anløpe eller en tydelig fargeforandring.

- Membranen bør skiftes ut hver 8. uke (hvis du bruker brystpumpen 1-3 ganger om dagen) eller hver 3-4 uke (hvis du bruker brystpumpen mer enn 3 ganger om dagen).
- Ventilen bør skiftes ut hver 2-3 måned (hvis du bruker brystpumpen 1-3 ganger om dagen) eller hver 4. uke (hvis du bruker brystpumpen mer enn 3 ganger om dagen).
- Brystskjoldet og kontakten bør skiftes ut hver 6. måned hvis du bruker brystpumpen mer enn 3 ganger om dagen.

09. LANGTIDSLAGRING

Brystpumpen har et innebygd oppladbart batteri. For å beskytte seg selv mot skade, går enheten inn i lagringsmodus etter en lengre periode med inaktivitet. For å deaktivere lagringsmodusen kobler du enheten til strøm og lader den i 2 timer. Før du legger fra deg brystpumpen over en lengre periode, må du kontrollere at:

- Alle brystpumpens komponenter er rene.
- Du har rengjort pumpeenheten.
- Enhetens batteri er fulladet.

10. VANLIGE SPØRSMÅL

1. **Enheten starter ikke: Kontroller at** brystpumpen er koblet til en stikkontakt som fungerer. Hvis brystpumpen ikke har noen strømkilde, vil ikke displayet slå seg på og ingen feilmelding vises.
2. **Ingen/dårlig sug: Kontroller at** alle brystpumpens deler er plassert riktig. Ta brystpumpen fra hverandre og kontroller at alle delene er rene og uskadde. Sett brystpumpen sammen igjen i henhold til instruksjonene i avsnittet MONTERING AV AKTAKTOR. Når du pumper, må du forsikre deg om at trakten sitter helt inntil brystet.
3. **Det har rent mer melk fra brystet enn det er plass til i beholderen:** Bruk en fuktig (ikke våt) klut til å tørke av brystpumpen. Vask de delene av brystpumpen som inneholder melk, i henhold til instruksjonene i avsnittet RENGJØRING OG DESINFISERING. Når alle maskinens deler er tørre, setter du dem sammen igjen.

11. SPESIFIKASJON

Kapasitet på melkebeholderen: 210 ml

Batterikapasitet: 3,7 V 1500 mAh Li-Po

Inngangseffekt: 110-240V

Utgangseffekt: 5V 1A

Driftstid: opptil 150 minutter

Ladetid: ca. 150 minutter

Dimensjoner på brystpumpen: 9x4,5x6 cm x2

Vekt av brystpumpe: 150 g x2

Sugekraft:

1. Stimuleringsmodus (8 nivåer): 9-24 kPa
2. Dyp uttrekksmodus (8 nivåer): 13-40 kPa
3. Blandet modus (8 nivåer): 10-24 kPa

Tillatt variasjon ± 5 Kpa.

12. GARANTI/REKLAMASJONSKORT

Produktet leveres med 24 måneders garanti. Garantibetingelsene finner du

på: <https://nenopl/gwarancja>

Detaljer, kontaktinformasjon og serviceadresse finner du på:

<https://nenopl/kontakt>

Spesifikasjoner og innhold kan endres uten varsel. Vi beklager eventuelle ulemper.

DK

BRUGERMANUAL

Kære kunde,

Den Neno Sole Twin-enhed, du har købt, er en dobbelt, elektronisk, trefaset brystpumpe, der bruges til at udpumpe brystmælk fra en kvindes bryst efter fødslen. Læs brugsanvisningen før brug.

01. FORHOLDSREGLER

1. Tag altid stikket ud af enheden efter opladning, hvis du ikke har brug for at oplade enhedens batteri.
2. Placer ikke produktet, hvor der er risiko for, at det kan falde ned i håndvaske, badekar eller andre beholdere.
3. Brystpumpen og dens komponenter er ikke varmebestandige - hold enheden væk fra varme overflader og åben ild.
4. Brug ikke enheden i nærheden af brændbare materialer.
5. Brystpumpen må ikke efterlades uden opsyn, når den er tilsluttet en strømkilde.
6. Brug aldrig enheden, hvis den er blevet tabt eller på anden måde beskadiget.

7. Brug ikke en enhed, hvis netledning eller stik er beskadiget.
8. Brug ikke apparatet i badekarret eller under bruseren.
9. Anbring ikke enheden under vand eller i andre væsker.
10. Vask ikke enheden under rindende vand.
11. Tilslut ikke enheden til en stikkontakt, der har været i kontakt med vand eller andre væsker.
12. Hvis enheden har været udsat for vand eller andre væsker - rør ikke direkte ved enheden, afbryd den fra strømforsyningen, sluk den, og kontakt producenten.
13. Dette apparat er beregnet til brug af en enkelt bruger. Hvis brystpumpen bruges af mere end én person, er der risiko for skader på brugerne, og garantien bortfalder.
14. Du må ikke selv reparere eller ændre på enheden.
15. Brug kun brystpumpen som beskrevet i vejledningen. Brug ikke apparatet til andre formål.
16. Efterse alle brystpumpens komponenter før hver brug.
17. Opvarm ikke den udpumpede mælk i mikrobølgeovnen. Mælk opvarmet i en mikrobølgeovn kan brænde barnets ansigt, fordi opvarmning med mikrobølgebølger kan skabe bobler med høj temperatur i væsken. Desuden kan mikrobølgebølger ændre mælkenes sammensætning.
18. Bring ikke mælken i kog, mens du opvarmer den.
19. Før du bruger brystpumpen første gang, skal du vaske og desinficere alle dele af maskinen, der kommer i direkte kontakt med dit bryst eller din mælk.
20. Efter hver brug af brystpumpen skal du vaske alle dele af maskinen, der kommer i direkte kontakt med dit bryst eller din mælk.
21. Vær særlig forsigtig, når du bruger brystpumpen eller dens tilbehør i nærheden af børn.
22. Brug ikke brystpumpen, mens den oplades.

02. FØR FØRSTE BRUG

1. Slut brystpumpen til strømforsyningen. Oplad batterierne i 2,5 timer.
2. Fjern brystpumpen.
3. Frakobl de dele af brystpumpen, der kommer i direkte kontakt med brystet eller mælken: Fjern brystskjoldet fra mælkebeholderen, og træk derefter ventilen ned og membranen op for at frakoble den fra stikket.
4. Rengør apparatets komponenter (se afsnittet RENGØRING OG DESINFEKTION).

BEMÆRK!

Brug brystpumpen i opretstående stilling. Hvis du bruger den i en anden stilling (f.eks. liggende), vil brystpumpen ikke sidde ordentligt fast på brystet, og mælken vil løbe ud.

03. ELEMENTER

FIG. A

1. Pumpeenhed x2
2. Mælkebeholder x2
3. Stik x2
4. Ventil x4
5. USB-C-opladerkabel x2
6. Brystskjold 24 mm x2
7. Membran x4
8. Reduktion af brystskjold 20mm x2

04. BESKRIVELSE AF PUMPEANORDNINGEN

FIG. B

1. Ikon for den valgte tilstand (I-prik - stimuleringsfase, II-prik - dyb ekstraktionsfase, III-prik - blandet fase).
2. Tænd/sluk-knap - Hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke for enheden. Når enheden er tændt, skal du trykke på den for at sætte brystpumpen på pause.
3. Ændring af sugestyrken - Tryk på «-» for at reducere sugestyrken.
4. Ikon for den valgte tilstand (L1-L8)/tidspunkt for brystpumpen.
5. Knap til tilstandsændring - Tryk på knappen for at ændre enhedens driftstilstand.
6. Ændring af sugestyrken - Tryk på «+» for at øge sugestyrken.
7. USB-C-opladningsstik

05. RENGØRING OG DESINFEKTION

Vask og desinfektion er to forskellige operationer. De skal udføres separat for at beskytte dit barn og for at sikre, at brystpumpen fungerer korrekt.

Vask - vask af enhedens overflade og fjernelse af snavs.

Desinfektion - dræber organismer som bakterier eller vira, der kan være til stede på udstyrets overflade.

Brystskjold, membran, ventil, reducer, konektor, mælkebeholder:

Vask og desinficer - før første brug.

Vask - efter hver brug.

En gang om dagen og før første brug - desinfektion.

A. VASKNING:

- Skil alle dele af brystpumpen ad (undtagen pumpeenheden), og vask den i varmt sæbevand i 5 minutter, og skyl den derefter. Gør dette umiddelbart efter brug af maskinen. Det vil fjerne mælkeaflejringer og forhindre bakterievækst.
- Brug kun drikkevand fra hanen til vask. Brug vand på flaske, hvis vandet i din vandhane ikke opfylder dette krav.
- Brug ikke børster til rengøring af silikonedele. Pas på ikke at stikke dem igennem.
- Brug et mildt opvaskemiddel eller sæbe.
- Lad delene tørre naturligt. Opbevar tørre apparatdele på et køligt, tørt sted, når du ikke bruger dem.

B. DESINFEKTION:

Membran, ventil, reducer, konektor, brystskjold, mælkebeholder:

- Fyld gryden eller sterilisatoren med vand, så alle komponenterne indeni (membran, ventil, reducer, connector, brystskjold, mælkebeholder) er dækket, når de placeres indeni. Bring det i kog. Læg brystpumpens dele i det kogende vand i 10 minutter. Må ikke koges.
- Lad delene tørre naturligt. Opbevar tørre sæt på et køligt, tørt sted, når du ikke bruger dem.

C. RENGØRING AF PUMPEENHEDEN:

- Tør pumpeenheden af med en blød, våd klud og et mildt opvaskemiddel/sæbe. Andre rengøringsmidler eller slibemidler kan beskadige enheden og dens display.
- Når du ikke bruger pumpeenheden, skal du opbevare den på et køligt og tørt sted.

06. SAMLING OG BRUG AF BRYSTPUMPEN

FIG. C

Fastgør komponenterne som vist i FIGUR C 1-5.

BEMÆRK: Vask dine hænder grundigt med vand og sæbe, før du rører ved brystpumpen og brystet.

1. Sæt membranen ind i stikket. **FIG. C1.**
2. Tilslut ventilen til stikket. **FIG. C2. OBS: Ventilen** skal fastgøres med den længste del mod brystskjoldet. For at få et overblik: **FIG. C6.**
3. Sæt forbindelsen med membranen og ventilen på mælkebeholderen, og start med at placere membranen i rillen. **FIG. C3.**
4. Placer brystskjoldet i mælkebeholderen. **FIG. C4.**
5. Sæt pumpeanordningen fast på toppen af mælkebeholderen. **FIG. C5.**
6. Placer brystskjoldet på brystet, så brystvorten er inde i dræningsskanalen. Tryk brystskjoldet og brystpumpens stik mod brystet med

tommel- og pegefinger. **FIG. C6.**

7. Sæt brystpumpen ind i bh'en/laktationskorsettet. **FIG. C7.**
8. Tænd for brystpumpen ved at trykke på tænd/sluk-knappen, og vælg den driftstilstand, der passer dig.
9. For at hælde mælken ud skal du holde brystpumpen vandret og forsigtigt skruer pumpen af **FIG C8.** Hold mælkebeholderen med brystskjoldet opad - læg den fladt på bordpladen (læg den ikke opad for at undgå, at mælken løber ud). **FIG C9.** Hæld forsigtigt mælken i flasken/opbevaringsbeholderen. **FIG C10.**
10. Fjern og rengør alle brystpumpens komponenter efter brug. **FIG C11.**

NOTER:

- a. Før hver brug skal brystpumpens dele kontrolleres for skader. Udskift om nødvendigt beskadigede dele med nye.
- b. Kontrollér altid, at komponenterne er rene, før du bruger enheden.
- c. Hvis brystskjoldets diameter er for stor, skal du bruge den medfølgende reducere ved at sætte den ind. **FIG. C12.**

NOTER:

Brystpumpen starter i stimuleringstilstand. Indstil den sugestyrke, der er behagelig for dig, ved hjælp af +/- knapperne:

- Stimuleringstilstand - hurtig pumpning, der efterligner dit barns naturlige sugning af brystmælk for at stimulere mælkeflowet. Efter 2 minutter aktiverer brystpumpen automatisk den dybe pumpetilstand. Juster sugestyrken ved hjælp af +/- knapperne for at finde den højeste sugestyrke, der er behagelig for dig. Hvis mælken begynder at løbe fra brystet, før der er gået to minutter, skal du trykke på knappen til ændring af tilstand for manuelt at skifte til tilstanden dyb udpumpning.
- Dyb pumpetilstand - langsommere pumpning, der forsigtigt og effektivt suger mælk ud af brystet. I denne tilstand øges sugningen, indtil du føler let ubehag (ikke smerte), og sugningen reduceres med en grad.
- Blandet tilstand - efterligner barnets sutte-refleks. Kan bruges efter pumpning for at hjælpe med at tømme brystet og øge laktationen.

07. OPLADNING AF BRYSTPUMPEN

Oplad brystpumpens batteri helt, før du lægger den til opbevaring, hvis du ikke har tænkt dig at bruge den i længere tid. Oplad enhedens batteri, før det er helt opbrugt. Det forlænger batteriets levetid. Hvis brystpumpen har været opbevaret et varmt sted, virker enhedens batteri måske ikke i starten. Lad brystpumpen køle af i en time, før du begynder at bruge den.

Indikationer:

LO - vises, hvis batteriniveauet er under 20 %. **FIG D1.**

Blinkende prikker - brystpumpe under opladning. **FIG D2.**

Tre prikker lyser konstant - batteriet er fuldt opladet. **FIG D3.**

Brug ikke brystpumpen, mens den oplades.

08. UDSKIFTNING AF FORBRUGSVARER

Forbrugsdele er udsat for naturlig slidage under brug af brystpumpen og er derfor ikke dækket af producentens garanti.

Slidte dele af brystpumpen, som kommer i kontakt med mælk, skal udskiftes. En slidt komponent har en revne, deformation, anløbning eller en tydelig farveændring.

- Membranen skal udskiftes hver 8. uge (hvis du bruger brystpumpen 1-3 gange om dagen) eller hver 3-4 uge (hvis du bruger brystpumpen mere end 3 gange om dagen).
- Ventilen skal udskiftes hver 2-3 måned (hvis du bruger brystpumpen 1-3 gange om dagen) eller hver 4. uge (hvis du bruger brystpumpen mere end 3 gange om dagen).
- Brystskjoldet og forbindelsen skal udskiftes hver 6. måned, hvis du bruger brystpumpen mere end 3 gange om dagen.

09. LANGTIDSOPBEVARING

Brystpumpen har et indbygget genopladeligt batteri. For at beskytte sig selv mod skader går enheden i lagringstilstand efter en lang periode med inaktivitet. For at deaktivere lagringstilstanden skal du slutte enheden til strøm og oplade den i 2 timer. Før du lægger brystpumpen væk i længere tid, skal du sørge for, at:

- Alle brystpumpens komponenter er rene.
- Du har rengjort pumpeenheten.
- Enhedens batteri er fuldt opladet.

10. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. **Enheden starter ikke:** Sørg for, at brystpumpen er tilsluttet en fungerende stikkontakt. Hvis brystpumpen ikke har nogen strømkilde, tændes displayet ikke, og der vises ingen fejlmeddelelse.
2. **Intet/dårligt sug:** Sørg for, at alle brystpumpens dele er placeret korrekt. Tag brystpumpen fra hinanden, og sørg for, at alle dele er rene og ubeskadigede. Saml brystpumpen igen i henhold til instruktionerne i afsnittet MONTERING AF LACTATOR. Når du pumper, skal du sørge for, at tragten sidder helt ind mod brystet.

- 3. Der er løbet mere mælk ud af brystet, end beholderen kan rumme:**
Brug en fugtig (ikke våd) klud til at tørre brystpumpen af. Vask de dele af brystpumpen, der indeholder mælk, i henhold til anvisningerne i afsnittet RENGØRING OG DESINFEKTERING. Når alle dele af maskinen er tørre, samles de igen.

11. SPECIFIKATION

Mælkebeholderens kapacitet: 210 ml

Batterikapacitet: 3,7V 1500 mAh Li-Po

Indgangseffekt: 110-240V

Udgangseffekt: 5V 1A

Driftstid: op til 150 minutter

Opladningstid: ca. 150 minutter

Mål på brystpumpen: 9x4,5x6 cm x2

Vægt af brystpumpe: 150 g x2

Sugestyrke:

1. Stimuleringstilstand (8 niveauer): 9-24 kPa
2. Dyb udsugningstilstand (8 niveauer): 13-40 kPa
3. Blandet tilstand (8 niveauer): 10-24 kPa

Tilladt variation ± 5 Kpa.

12. GARANTI-/REKLAMATIONSKORT

Produktet leveres med 24 måneders garanti. Garantibetingelserne kan findes på: <https://nenopl/gwarancja>

Detaljer, kontakt og serviceadresse kan findes på: <https://nenopl/kontakt>
Specifikationer og indhold kan ændres uden varsel. Vi undskylder for eventuelle gener.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Geachte klant,

Het Neno Sole Twin apparaat dat je hebt gekocht is een dubbele, elektronische, driefasige borstkolf die wordt gebruikt om moedermelk af te kolven uit de borst van een vrouw na de bevalling. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

01. VOORZORGSMAATREGELEN

1. Haal na het opladen altijd de stekker uit het stopcontact als u de batterij van het apparaat niet hoeft op te laden.
2. Plaats het product niet op een plek waar het in gootstenen, badkuipen of andere containers kan vallen.
3. De borstkolf en de onderdelen ervan zijn niet hittebestendig - houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen.
5. De borstkolf mag niet onbeheerd worden achtergelaten als deze op een stroombron is aangesloten.
6. Gebruik het apparaat nooit als het gevallen of anderszins beschadigd is.
7. Gebruik geen apparaat waarvan het netsnoer of de stekker beschadigd is.
8. Gebruik het apparaat niet in bad of onder de douche.
9. Plaats het apparaat niet onder water of in andere vloeistoffen.
10. Was het apparaat niet onder stromend water.
11. Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat in contact is geweest met water of andere vloeistoffen.
12. Als het apparaat is blootgesteld aan water of andere vloeistoffen - raak het apparaat dan niet rechtstreeks aan, koppel het los van de voeding, schakel het uit en neem contact op met de fabrikant.
13. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door één gebruiker. Gebruik van de borstkolf door meer dan één persoon brengt het risico van schade voor de gebruikers met zich mee en maakt de garantie ongeldig.
14. Repareer of modificeer het apparaat niet zelf.
15. Gebruik de borstkolf alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.
16. Inspecteer alle onderdelen van de borstkolf voor elk gebruik.

17. Verwarm de afgegoten melk niet in de magnetron. Melk die in een magnetron wordt verhit, kan het gezicht van de baby verbranden omdat verhitting met microgolven bubbels van hoge temperatuur in de vloeistof kan veroorzaken. Bovendien kunnen microgolven de samenstelling van de melk veranderen.
18. Breng de melk niet aan de kook tijdens het verwarmen.
19. Voordat je de borstkolf voor de eerste keer gebruikt, was en desinfecteer je alle onderdelen van het apparaat die in direct contact komen met je borst of melk.
20. Was na elk gebruik van de borstkolf alle onderdelen van het apparaat die in direct contact komen met je borst of melk.
21. Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de borstkolf of de accessoires in de buurt van kinderen.
22. Gebruik de borstkolf niet tijdens het opladen.

02. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Sluit de borstkolf aan op de voeding. Laad de batterijen 2,5 uur op.
2. Verwijder de borstkolf.
3. Koppel de onderdelen van de borstkolf los die in direct contact komen met de borst of melk: verwijder het borstschild van de melkcontainer, trek vervolgens de klep omlaag en het membraan omhoog om los te koppelen van de connector.
4. Reinig de onderdelen van het apparaat (zie het hoofdstuk REINIGING EN DISINFECTIE).

LET OP!

Gebruik de borstkolf rechtop. Gebruik in een andere positie (bijvoorbeeld liggend) zal ertoe leiden dat de borstkolf niet goed aansluit op de borst en dat er melk uit lekt.

03. ELEMENTEN

FIG. A

1. Pompapparaat x2
2. Melkcontainer x2
3. Aansluiting x2
4. Ventiel x4
5. USB-C oplaadkabel x2
6. Borstschild 24mm x2
7. Membraan x4
8. Borstschild verkleiner 20mm x2

04. BESCHRIJVING VAN HET POMPAPPARAAT

FIG. B

1. Pictogram van de geselecteerde modus (I punt - stimulatiefase, II punt - fase van diepe extractie, III punt - gemengde fase).
2. Aan/uit-knop - Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan of uit te zetten. Als het apparaat aan staat, druk je op de knop om de borstkolf te pauzeren.
3. Het zuigniveau wijzigen - Druk op “-” om de zuigkracht te vermindern.
4. Pictogram van de geselecteerde modus (L1-L8)/tijd van de borstkolf.
5. Moduswijzigingstoets - Druk op de toets om de bedrijfsmodus van het toestel te wijzigen.
6. Het zuigniveau wijzigen - Druk op “+” om de zuigkracht te verhogen.
7. USB-C oplaadaansluiting

05. REINIGING EN DESINFECTIE

Wassen en desinfecteren zijn twee verschillende handelingen. Ze moeten apart worden uitgevoerd om je baby te beschermen en ervoor te zorgen dat de borstkolf goed werkt.

Wassen - het oppervlak van de unit wassen en vuil verwijderen.

Desinfectie - het doden van organismen zoals bacteriën of virussen die aanwezig kunnen zijn op het oppervlak van de apparatuur.

Borstschild, membraan, ventiel, verloopstuk, connector, melkhouder:

Wassen en desinfecteren - voor het eerste gebruik.

Wassen - na elk gebruik.

Eenmaal per dag en voor het eerste gebruik - desinfectie.

A. WASSEN:

- Haal alle onderdelen van de borstkolf (behalve het kolfapparaat) uit elkaar en was ze 5 minuten in een warm sopje en spoel ze daarna af. Doe dit onmiddellijk na gebruik van het apparaat. Dit verwijdert melkafzetting en voorkomt bacteriegroei.

- Gebruik alleen drinkbaar kraanwater om je te wassen. Gebruik water uit flessen als het water in je kraan niet aan deze eis voldoet.

- Gebruik bij het reinigen van siliconen onderdelen geen borstels. Pas op dat u ze niet doorboort.

- Gebruik een mild afwasmiddel of een milde zeep.

- Laat de onderdelen op natuurlijke wijze drogen. Bewaar droge onderdelen op een koele, droge plaats wanneer u ze niet gebruikt.

B. DISINFECTIE:

Membraan, ventiel, verloopstuk, connector, borstschild, melkhouder:

- Vul de pot of sterilisator met water zodat alle onderdelen binnenin (membraan, klep, verloopstuk, connector, borstschild, melkhouder) bedekt zijn

wanneer je ze erin plaatst. Breng aan de kook. Leg de borstkolfonderdelen 10 minuten in het kokende water. Niet koken.

- Laat de onderdelen op natuurlijke wijze drogen. Bewaar droge kitonderdelen op een koele, droge plek als je ze niet gebruikt.

C. HET REINIGEN VAN HET POMPAPPARAAT:

- Veeg de pompeenheid af met een zachte, natte doek en een mild afwasmiddel/zeep. Andere reinigingsmiddelen of schuurmiddelen kunnen de eenheid en het display beschadigen.
- Bewaar de pompeenheid op een koele, droge plaats als u deze niet gebruikt.

06. MONTAGE EN GEBRUIK VAN DE BORSTKOLF

FIG. C

Bevestig de onderdelen zoals getoond in FIGS. C 1-5.

OPMERKING: Was je handen grondig met water en zeep voordat je de borstkolf en de borst aanraakt.

1. Plaats het membraan in de connector. **FIG. C1.**
2. Sluit de klep aan op de connector. **FIG. C2. ATTENTIE:** Het ventiel moet met het lange deel naar het borstschild worden bevestigd. Voor een overzicht: **FIG. C6.**
3. Bevestig de connector met het membraan en de klep aan de melkhouder, te beginnen met het membraan in de groef te plaatsen. **FIG. C3.**
4. Plaats het borstschild in de melkhouder. **FIG. C4.**
5. Bevestig het kolfapparaat aan de bovenkant van de melkcontainer. **AFB. C5.**
6. Plaats het borstschild op je borst zodat de tepel in het afvoerkanaal zit. Druk het borstschild en de borstkolfaansluiting tegen uw borst met uw duim en wijsvinger. **FIG. C6.**
7. Plaats de borstkolf in de beha/lactatiecorset. **FIG. C7.**
8. Zet de borstkolf aan door op de aan/uit-knop te drukken en selecteer de bedieningsmodus die bij jou past.
9. Om de melk af te tappen, houd je de borstkolf horizontaal en schroef je voorzichtig de **FIG C8** los. Houd het melkreservoir vast met het borstschild naar boven - leg het plat op het tafelblad (niet naar boven leggen om te voorkomen dat de melk eruit loopt). **FIG C9.** Giet de melk voorzichtig in de fles/het opslagreservoir. **FIG C10.**
10. Verwijder en reinig alle borstkolfonderdelen na gebruik. **FIG C11.**

OPMERKINGEN:

- a. Controleer voor elk gebruik de onderdelen van de borstkolf op

beschadigingen. Vervang indien nodig beschadigde onderdelen door nieuwe.

- b. Controleer altijd of de onderdelen schoon zijn voordat u het apparaat gebruikt.
- c. Als de diameter van het borstschild te groot is, gebruik dan het meegeleverde verloopstuk door het erin te steken. **AFB. C12.**

OPMERKINGEN:

De borstkolf start in de stimulatiestand. Stel met de +/- knoppen de zuigkracht in die voor jou comfortabel is:

- Stimulatiestand - snel afkolven dat het natuurlijke zuigen van moedermelk door je baby nabootst om de melkstroom te stimuleren. Na 2 minuten activeert de borstkolf automatisch de diepe afkolfstand. Pas het afkolfniveau aan met de +/- knoppen om het hoogste afkolfniveau te vinden dat voor jou comfortabel is. Als er melk uit je borst begint te stromen voordat er twee minuten zijn verstreken, druk dan op de knop voor het wijzigen van de modus om handmatig over te schakelen naar de modus voor diep afkolven.
- Diepkolfmodus - langzamer afkolven waarbij de melk voorzichtig en efficiënt uit de borst wordt gezogen. In deze modus verhoog je de zuigkracht tot je een licht ongemak voelt (geen pijn) en verminder je de zuigkracht met één graad.
- Gemengde modus - bootst de zuigreflex van de baby na. Kan worden gebruikt na het afkolven om de borst te helpen legen en de borstvoeding te stimuleren.

07. DE BORSTKOLF OPLADEN

Laad de batterij van de borstkolf volledig op voordat je hem opbergt als je van plan bent het apparaat langere tijd niet te gebruiken. Laad de batterij van het apparaat op voordat deze helemaal leeg is. Dit verlengt de levensduur van de batterij. Als de borstkolf op een warme plaats is opgeborgen, kan het zijn dat de batterij van het apparaat in het begin niet werkt. Laat de borstkolf een uur afkoelen voordat je hem gaat gebruiken.

Indicaties:

LO - wordt weergegeven als het batterijniveau lager is dan 20%. **FIG D1.**

Knipperende stippen - borstkolf wordt opgeladen. **FIG D2.**

Drie puntjes branden continu - batterij volledig opgeladen. **FIG D3.**

Gebruik de borstkolf niet tijdens het opladen.

08. VERVANGING VAN VERBRUIKSARTIKELEN

Verbruiksonderdelen zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage tijdens het gebruik van de borstkolf en vallen daarom niet onder de garantie van de

fabrikant.

Versleten onderdelen van de borstkolf die in contact komen met melk moeten worden vervangen. Een versleten onderdeel heeft een barst, vervorming, aanslag of een duidelijke kleurverandering.

- Het membraan moet elke 8 weken (als je de borstkolf 1-3 keer per dag gebruikt) of elke 3-4 weken (als je de borstkolf meer dan 3 keer per dag gebruikt) worden vervangen.
- Het ventiel moet elke 2-3 maanden (als je de borstkolf 1-3 keer per dag gebruikt) of elke 4 weken (als je de borstkolf meer dan 3 keer per dag gebruikt) worden vervangen.
- Het borstschild en de connector moeten elke 6 maanden worden vervangen als je de borstkolf meer dan 3 keer per dag gebruikt.

09. LANGETERMIJNOPSLAG

De borstkolf heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Om zichzelf tegen beschadiging te beschermen, schakelt het apparaat over naar de opslagmodus na een lange periode van inactiviteit. Om de opslagmodus uit te schakelen, sluit je het apparaat aan op de netvoeding en laad je het gedurende 2 uur op. Controleer voordat je de borstkolf voor langere tijd opbergt of:

- Alle onderdelen van de borstkolf zijn schoon.
- Je hebt het pompapparaat gereinigd.
- De batterij van het apparaat is volledig opgeladen.

10. FAQ

1. **Het apparaat start niet: controleer of** de borstkolf is aangesloten op een werkend stopcontact. Als de borstkolf geen stroom krijgt, gaat het display niet aan en verschijnt er geen foutmelding.
2. **Geen/slechte zuigkracht: controleer of** alle onderdelen van de borstkolf goed geplaatst zijn. Haal de borstkolf uit elkaar en controleer of alle onderdelen schoon en onbeschadigd zijn. Zet de borstkolf weer in elkaar volgens de instructies in het hoofdstuk LACTATORMONTAGE. Zorg er bij het afkolven voor dat de trechter volledig tegen de borst zit.
3. **Er is meer melk uit de borst gestroomd dan het reservoir kan bevatten:** gebruik een vochtige (niet natte) doek om de borstkolf af te vegen. Was de onderdelen van de borstkolf die melk bevatten volgens de instructies in het hoofdstuk REINIGEN EN DISINFECTEREN. Zet het apparaat weer in elkaar als alle onderdelen droog zijn.

11. SPECIFICATIE

Inhoud melkreservoir: 210 ml

Batterijcapaciteit: 3,7V 1500 mAh Li-Po

Ingangsvermogen: 110-240V
Uitgangsvermogen: 5V 1A
Bedrijfstijd: tot 150min
Oplaadtijd: ca. 150min
Afmetingen van borstkolf: 9x4,5x6 cm x2
Gewicht van borstkolf: 150g x2

Zuigkracht:

1. Stimulatiemodus (8 niveaus): 9-24 kPa
2. Diepe afzuigmodus (8 niveaus): 13-40 kPa
3. Gemengde modus (8 niveaus): 10-24 kPa
Toelaatbare variatie ± 5 Kpa.

12. GARANTIE-/KLACHTENKAART

Het product wordt geleverd met 24 maanden garantie. De garantievoorwaarden zijn te vinden op: <https://neno.pl/gwarancja>

Details, contact- en serviceadressen zijn te vinden op:

<https://neno.pl/kontakt>

Specificaties en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onze excuses voor enig ongemak.

ES

MANUAL DEL USUARIO

Estimado cliente,

El dispositivo Neno Sole Twin que ha adquirido es un extractor de leche doble, electrónico y trifásico que se utiliza para extraer leche materna del pecho de una mujer después del parto. Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo.

01. PRECAUCIONES

1. Desenchufe siempre el aparato después de cargarlo si no necesita cargar la batería del aparato.
2. No coloque el producto donde corra peligro de caer en fregaderos, bañeras u otros recipientes.
3. El sacaleches y sus componentes no son resistentes al calor - mantenga el aparato alejado de superficies calientes y llamas abiertas.

4. No utilice el aparato cerca de materiales inflamables.
5. El extractor de leche no debe dejarse desatendido cuando esté conectado a una fuente de alimentación.
6. No utilices nunca el aparato si se ha caído o dañado de cualquier otra forma.
7. No utilice un aparato cuyo cable de alimentación o enchufe estén dañados.
8. No utilice el aparato en la bañera ni en la ducha.
9. No coloque el aparato bajo el agua ni en otros líquidos.
10. No lave la unidad con agua corriente.
11. No conecte el aparato a una toma de corriente que haya estado en contacto con agua u otros líquidos.
12. Si el aparato ha estado expuesto al agua u otros líquidos, no lo toque directamente, desconéctelo de la red eléctrica, apáguelo y póngase en contacto con el fabricante.
13. Este aparato está destinado a ser utilizado por una sola usuaria. El uso del extractor de leche por más de una persona conlleva un riesgo de daños para las usuarias y anula la garantía.
14. No repare ni modifique la unidad usted mismo.
15. Utilice el extractor de leche únicamente como se describe en las instrucciones. No utilice el aparato para ningún otro fin.
16. Inspeccione todos los componentes del sacaleches antes de cada uso.
17. No calientes la leche descargada en el microondas. La leche calentada en el microondas puede quemar la cara del bebé porque el calentamiento con ondas de microondas puede crear burbujas de alta temperatura en el líquido. Además, las ondas de microondas pueden cambiar la composición de la leche.
18. No llevar la leche a ebullición mientras se calienta.
19. Antes de utilizar el sacaleches por primera vez, lava y desinfecta todas las piezas del aparato que vayan a entrar en contacto directo con el pecho o la leche.
20. Después de cada uso del sacaleches, lave todas las partes de la máquina que entren en contacto directo con el pecho o la leche.
21. Tenga especial cuidado cuando utilice el extractor de leche o sus accesorios cerca de niños.
22. No utilice el extractor de leche mientras se esté cargando.

02. ANTES DEL PRIMER USO

1. Conecte el extractor de leche a la red eléctrica. Carga las pilas durante 2,5 horas.
2. Retire el sacaleches.

3. Desconecta las partes del sacaleches que vayan a entrar en contacto directo con el pecho o la leche: retira el protector mamario del recipiente de la leche y, a continuación, tira de la válvula hacia abajo y de la membrana hacia arriba para desconectarlo del conector.
4. Limpie los componentes del aparato (consulte la sección LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

NOTA:

Utilice el extractor de leche en posición vertical. Si lo utiliza en cualquier otra posición (por ejemplo, tumbado), el sacaleches no se adaptará correctamente al pecho y se producirá una salida de leche.

03. ELEMENTOS

FIG. A

1. Dispositivo de bombeo x2
2. Recipiente de leche x2
3. Conector x2
4. Válvula x4
5. Cable de carga USB-C x2
6. Breast shield 24mm x2
7. Membrana x4
8. Escudo reductor 20mm x2

04. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE BOMBEO

FIG. B

1. Icono del modo seleccionado (I punto - fase de estimulación, II puntos - fase de extracción profunda, III puntos - fase mixta).
2. Botón de encendido - Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para encender o apagar el dispositivo. Cuando el dispositivo esté encendido, púlselo para poner en pausa el extractor de leche.
3. Modificación del nivel de aspiración - Pulse “-” para reducir la potencia de aspiración.
4. Icono del modo seleccionado (L1-L8)/tiempo del sacaleches.
5. Botón de cambio de modo - Pulse el botón para cambiar el modo de funcionamiento de la unidad.
6. Modificación del nivel de aspiración - Pulse “+” para aumentar la potencia de aspiración.
7. Toma de carga USB-C

05. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El lavado y la desinfección son dos operaciones diferentes. Deben realizarse por separado para proteger al bebé y garantizar el correcto funcionamiento

del sacaleches.

Lavado: lavar la superficie de la unidad y eliminar la suciedad.

Desinfección: eliminación de organismos como bacterias o virus que puedan estar presentes en la superficie del equipo.

Protector mamario, membrana, válvula, reductor, conector, recipiente de leche:

Lavar y desinfectar - antes del primer uso.

Lavar - después de cada uso.

Una vez al día y antes del primer uso - desinfección.

A. LAVADO:

- Desmonte todas las piezas del extractor de leche (excepto el dispositivo de extracción) y lávelas en agua jabonosa tibia durante 5 minutos, después aclárelas. Hágalo inmediatamente después de utilizar el aparato. Esto eliminará los depósitos de leche y evitará la proliferación de bacterias.
- Utilice sólo agua potable del grifo para lavarse. Utilice agua embotellada si el agua de su grifo no cumple este requisito.
- Cuando limpie piezas de silicona, no utilice cepillos. Tenga cuidado de no perforarlas.
- Utilice un jabón o líquido lavavajillas suave.
- Deje que las piezas se sequen de forma natural. Guarde las piezas secas del aparato en un lugar fresco y seco cuando no las utilice.

B. DESINFECCIÓN:

Membrana, válvula, reductor, conector, protector mamario, recipiente de leche:

- Llene la olla o el esterilizador con agua de forma que todos los componentes del interior (membrana, válvula, reductor, conector, protector mamario, recipiente de leche) queden cubiertos al colocarlos dentro. Llevar a ebullición. Colocar las piezas del sacaleches en el agua hirviendo durante 10 minutos. No hervir.
- Deje que las piezas se sequen de forma natural. Guarde las piezas secas del kit en un lugar fresco y seco cuando no las utilice.

C. LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO DE BOMBEO:

- Limpie la unidad de bombeo con un paño suave y húmedo y un líquido/jabón lavavajillas suave. Otros productos de limpieza o abrasivos pueden dañar la unidad y su pantalla.
- Cuando no utilice la unidad de bombeo, guárdela en un lugar fresco y seco.

06. MONTAJE Y USO DEL EXTRACTOR DE LECHE

FIG. C

Fije los componentes como se muestra en las FIGS. C 1-5.

NOTA: Lávese bien las manos con agua y jabón antes de tocar el sacaleches y el pecho.

1. Inserte la membrana en el conector. **FIG. C1.**
2. Conecte la válvula al conector. **FIG. C2. ATENCIÓN:** La válvula debe fijarse con su parte más larga hacia el escudo del pecho. Para una visión general: **FIG. C6.**
3. Fije el conector con la membrana y la válvula al recipiente de leche, comenzando por colocar la membrana en la ranura. **FIG. C3.**
4. Coloque el protector mamario en el recipiente de leche. **FIG. C4.**
5. Fije el dispositivo de bombeo a la parte superior del recipiente de leche. **FIG. C5.**
6. Coloque el protector sobre el pecho de forma que el pezón quede dentro del canal de drenaje. Presione el protector mamario y el conector del sacaleches contra el pecho con los dedos pulgar e índice. **FIG. C6.**
7. Introduzca el sacaleches en el sujetador/corsé de lactancia. **FIG. C7.**
8. Encienda el extractor de leche pulsando el botón de encendido y seleccione el modo de funcionamiento que más le convenga.
9. Para verter la leche, sujete el sacaleches en posición horizontal y desenrosque con cuidado la bomba **FIG C8.** Sujete el recipiente de la leche con el protector mamario hacia arriba - colóquelo plano sobre la mesa (no lo coloque hacia arriba para evitar que la leche salga). **FIG C9.** Vierta cuidadosamente la leche en el biberón/recipiente. **FIG C10.**
10. Retire y limpie todos los componentes del sacaleches después de su uso. **FIG C11.**

NOTAS:

- a. Antes de cada uso, compruebe que las piezas del extractor de leche no estén dañadas. Si es necesario, sustituya las piezas dañadas por otras nuevas.
- b. Compruebe siempre la limpieza de los componentes antes de utilizar la unidad.
- c. Si el diámetro del protector de pecho es demasiado grande, utilice el reductor suministrado introduciéndolo en su interior. **FIG. C12.**

NOTAS:

El extractor de leche se pone en marcha en modo de estimulación. Ajuste el nivel de succión que le resulte más cómodo con los botones +/-:

- Modo de estimulación: bombeo rápido que imita la succión natural de la leche materna por parte del bebé para estimular el flujo de leche. Transcurridos 2 minutos, el extractor activará automáticamente el modo de extracción

profunda. Ajuste el nivel de succión con los botones +/- hasta encontrar el nivel más alto que le resulte cómodo. Si empieza a salir leche del pecho antes de que transcurran dos minutos, pulsa el botón de cambio de modo para pasar manualmente al modo de extracción profunda.

- Modo de bombeo profundo: bombeo más lento que succiona la leche del pecho con suavidad y eficacia. En este modo aumente la succión hasta que sienta una ligera molestia (no dolor) y reduzca la succión un grado.

- Modo mixto: imita el reflejo de succión del bebé. Puede utilizarse después de la extracción para ayudar a vaciar el pecho y aumentar la lactancia.

07. CARGAR EL EXTRACTOR DE LECHE

Cargue completamente la batería del extractor de leche antes de guardarlo si tiene intención de no utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo. Cargue la batería del dispositivo antes de que se agote por completo. Esto prolonga la vida útil de la batería. Si el extractor de leche se ha guardado en un lugar caliente, es posible que la batería del aparato no funcione al principio. Deje que el extractor de leche se enfríe durante una hora antes de empezar a utilizarlo.

Indicaciones:

LO - se muestra si el nivel de la batería está por debajo del 20%. **FIG D1.**

Puntos intermitentes - sacaleches en carga. **FIG D2.**

Tres puntos brillando continuamente - batería completamente cargada. **FIG D3.**

No utilice el extractor de leche mientras se esté cargando.

08. SUSTITUCIÓN DE CONSUMIBLES

Los componentes consumibles están sujetos al desgaste natural durante el funcionamiento del extractor de leche y, por lo tanto, no están cubiertos por la garantía del fabricante.

Los componentes desgastados del sacaleches que entran en contacto con la leche deben sustituirse. Un componente desgastado presenta una grieta, una deformación, un deslustre o un cambio de color evidente.

- La membrana debe sustituirse cada 8 semanas (si utiliza el sacaleches de 1 a 3 veces al día) o cada 3 ó 4 semanas (si utiliza el sacaleches más de 3 veces al día).
- La válvula debe sustituirse cada 2-3 meses (si utiliza el sacaleches de 1 a 3 veces al día) o cada 4 semanas (si utiliza el sacaleches más de 3 veces al día).
- El protector mamario y el conector deben sustituirse cada 6 meses si utiliza el sacaleches más de 3 veces al día.

09. ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

El extractor de leche lleva incorporada una batería recargable. Para protegerse de posibles daños, el aparato entra en modo de almacenamiento tras un largo periodo de inactividad. Para desactivar el modo de almacenamiento, conecte el aparato a la corriente y cárguelo durante 2 horas.

Antes de guardar el extractor de leche durante un largo periodo de tiempo, asegúrese de que:

- Todos los componentes del sacaleches están limpios.
- Ha limpiado el dispositivo de bombeo.
- La batería del dispositivo está completamente cargada.

10. PREGUNTAS FRECUENTES

1. **El aparato no se pone en marcha:** asegúrese de que el sacaleches está enchufado a una toma de corriente que funcione. Si el extractor de leche no tiene fuente de alimentación, su pantalla no se encenderá y no aparecerá ningún mensaje de error.
2. **Falta de succión o succión deficiente:** asegúrate de que todas las piezas del sacaleches están colocadas correctamente. Desmonte el sacaleches y asegúrese de que todas las piezas están limpias y sin daños. Vuelva a montar el sacaleches siguiendo las instrucciones de la sección MONTAJE DEL LACTOR. Cuando extraiga leche, asegúrese de que el embudo esté completamente asentado contra el pecho.
3. **Ha salido más leche del pecho de la que puede contener el recipiente:** utilice un paño húmedo (no mojado) para limpiar el sacaleches. Lave las partes del sacaleches que contienen leche siguiendo las instrucciones de la sección LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. Cuando todas las piezas del aparato estén secas, vuelva a montarlas.

11. ESPECIFICACIÓN

Capacidad del recipiente de leche: 210 ml

Capacidad de la batería: 3,7 V 1500 mAh Li-Po

Potencia de entrada: 110-240V

Potencia de salida: 5V 1A

Tiempo de funcionamiento: hasta 150 minutos

Tiempo de carga: 150 min aprox.

Dimensiones del sacaleches: 9x4,5x6 cm x2

Peso del sacaleches: 150g x2

Potencia de succión:

1. Modo de estimulación (8 niveles): 9-24 kPa
2. Modo de extracción profunda (8 niveles): 13-40 kPa
3. Modo mixto (8 niveles): 10-24 kPa

Variación admisible ± 5 kPa.

12. TARJETA DE GARANTÍA/RECLAMACIONES

El producto tiene una garantía de 24 meses. Las condiciones de la garantía pueden consultarse en: <https://nenopl/gwarancja>

Los detalles, el contacto y la dirección del servicio pueden consultarse en: <https://nenopl/kontakt>

Las especificaciones y el contenido están sujetos a cambios sin previo aviso.

Rogamos disculpen las molestias.

IT

MANUALE UTENTE

Gentile cliente,

Il dispositivo Neno Sole Twin che avete acquistato è un tiralatte doppio, elettronico e trifase, utilizzato per esprimere il latte materno dal seno della donna dopo il parto. Prima dell'uso, leggere le istruzioni per l'uso.

01. PRECAUZIONI

1. Scollegare sempre il dispositivo dopo la ricarica se non è necessario ricaricare la batteria del dispositivo.
2. Non collocare il prodotto in un punto in cui rischia di cadere in lavandini, vasche da bagno o altri contenitori.
3. Il tiralatte e i suoi componenti non sono resistenti al calore: tenere il dispositivo lontano da superfici calde e fiamme libere.
4. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di materiali infiammabili.
5. Il tiralatte non deve essere lasciato incustodito quando è collegato a una fonte di alimentazione.
6. Non utilizzare mai il dispositivo se è caduto o è stato danneggiato in altro modo.
7. Non utilizzare un dispositivo il cui cavo di alimentazione o la cui spina siano danneggiati.
8. Non utilizzare il dispositivo nella vasca da bagno o nella doccia.
9. Non collocare il dispositivo sotto l'acqua o in altri liquidi.
10. Non lavare l'unità sotto l'acqua corrente.
11. Non collegare il dispositivo a una presa di corrente che sia stata a contatto con acqua o altri liquidi.
12. Se il dispositivo è stato esposto all'acqua o ad altri liquidi, non toccarlo direttamente, scollegarlo dall'alimentazione, spegnerlo e contattare il produttore.

13. Questo apparecchio è destinato all'uso da parte di una sola persona. L'uso del tiralatte da parte di più persone comporta il rischio di danni per gli utenti e annulla la garanzia.
14. Non riparare o modificare l'unità da soli.
15. Utilizzare il tiralatte solo come descritto nelle istruzioni. Non utilizzare il dispositivo per altri scopi.
16. Ispezionare tutti i componenti del tiralatte prima di ogni utilizzo.
17. Non riscaldare il latte scaricato nel microonde. Il latte riscaldato nel microonde può bruciare il viso del bambino perché il riscaldamento con le onde del microonde può creare bolle ad alta temperatura nel liquido. Inoltre, le onde a microonde possono modificare la composizione del latte.
18. Non portare il latte a ebollizione durante il riscaldamento.
19. Prima di utilizzare il tiralatte per la prima volta, lavare e disinfettare tutte le parti dell'apparecchio che entreranno in contatto diretto con il seno o il latte.
20. Dopo ogni utilizzo del tiralatte, lavare tutte le parti dell'apparecchio che entrano in contatto diretto con il seno o il latte.
21. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il tiralatte o i suoi accessori in prossimità di bambini.
22. Non utilizzare il tiralatte durante la carica.

02. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Collegare il tiralatte all'alimentazione. Caricare le batterie per 2,5 ore.
2. Rimuovere il tiralatte.
3. Scollegare le parti del tiralatte che entrano in contatto diretto con il seno o con il latte: rimuovere la protezione del seno dal contenitore del latte, quindi tirare la valvola verso il basso e la membrana verso l'alto per scollegarla dal connettore.
4. Pulire i componenti dell'apparecchio (consultare la sezione PULIZIA E DISINFEZIONE).

NOTA!

Utilizzare il tiralatte in posizione verticale. L'uso in qualsiasi altra posizione (ad esempio, sdraiata) può causare il mancato adattamento del tiralatte al seno e la fuoriuscita del latte.

03. ELEMENTI

FIG. A

1. Dispositivo di pompaggio x2
2. Contenitore del latte x2
3. Connettore x2
4. Valvola x4

5. Cavo di ricarica USB-C x2
6. Scudo mammario 24 mm x2
7. Membrana x4
8. Riduzione dello scudo mammario 20 mm x2

04. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO DI POMPAGGIO

FIG. B

1. Icona della modalità selezionata (I punto - fase di stimolazione, II punto - fase di estrazione profonda, III punto - fase mista).
2. Pulsante di accensione - Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. Quando il dispositivo è acceso, premere per mettere in pausa il tiralatte.
3. Modifica del livello di aspirazione - Premere “-” per ridurre la potenza di aspirazione.
4. Icona della modalità (L1-L8)/ora selezionata del tiralatte.
5. Pulsante di cambio modalità - Premere il pulsante per cambiare la modalità operativa dell'unità.
6. Modifica del livello di aspirazione - Premere “+” per aumentare la potenza di aspirazione.
7. Presa di ricarica USB-C

05. PULIZIA E DISINFEZIONE

Il lavaggio e la disinfezione sono due operazioni diverse. Devono essere eseguite separatamente per proteggere il bambino e garantire il corretto funzionamento del tiralatte.

Lavaggio - lavaggio della superficie dell'unità e rimozione dello sporco.

Disinfezione - eliminazione di organismi come batteri o virus che possono essere presenti sulla superficie dell'apparecchiatura.

Schermo mammario, membrana, valvola, riduttore, connettore, contenitore per il latte:

Lavare e disinfettare - prima del primo utilizzo.

Lavare - dopo ogni utilizzo.

Una volta al giorno e prima del primo utilizzo - disinfezione.

A. LAVAGGIO:

- Smontare tutte le parti del tiralatte (tranne il dispositivo di pompaggio) e lavarle in acqua calda e sapone per 5 minuti, quindi risciacquarle. Eseguire questa operazione subito dopo l'uso dell'apparecchio. In questo modo si rimuovono i depositi di latte e si previene la formazione di batteri.

- Per lavarsi utilizzare solo acqua potabile del rubinetto. Se l'acqua del rubinetto non soddisfa questo requisito, utilizzate acqua in bottiglia.

- Per la pulizia delle parti in silicone, non utilizzare spazzole. Fare attenzione a non perforarle.
- Utilizzare un detersivo per piatti o un sapone delicato.
- Lasciare che le parti si asciughino naturalmente. Conservare le parti asciutte dell'apparecchio in un luogo fresco e asciutto quando non vengono utilizzate.

B. DISINFEZIONE:

Membrana, valvola, riduttore, connettore, schermo per il seno, contenitore per il latte:

- Riempire la pentola o lo sterilizzatore con acqua in modo che tutti i componenti all'interno (membrana, valvola, riduttore, connettore, schermo per il seno, contenitore per il latte) siano coperti quando vengono inseriti. Portare a ebollizione. Mettere le parti del tiralatte nell'acqua bollente per 10 minuti. Non bollire.
- Lasciare che i pezzi si asciughino naturalmente. Conservare gli articoli del kit asciutti in un luogo fresco e asciutto quando non li si usa.

C. PULIZIA DEL DISPOSITIVO DI POMPAGGIO:

- Pulire l'unità della pompa con un panno morbido e umido e un detergente/ sapone per piatti delicato. Altri detersivi o abrasivi possono danneggiare il gruppo e il display.
- Quando non si utilizza il gruppo, conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

06. MONTAGGIO E UTILIZZO DEL TIRALATTE

FIG. C

Fissare i componenti come mostrato nelle FIG. C 1-5.

NOTA: lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di toccare il tiralatte e il seno.

1. Inserire la membrana nel connettore. **FIG. C1.**
2. Collegare la valvola al connettore. **FIG. C2. ATTENZIONE:** la valvola deve essere fissata con la parte più lunga rivolta verso lo scudo mammario. Per una visione d'insieme: **FIG. C6.**
3. Collegare il connettore con la membrana e la valvola al contenitore del latte, iniziando a posizionare la membrana nella scanalatura. **FIG. C3.**
4. Collocare lo scudo mammario nel contenitore del latte. **FIG. C4.**
5. Collegare il dispositivo di pompaggio alla parte superiore del contenitore del latte. **FIG. C5.**
6. Posizionare la protezione sul seno in modo che il capezzolo si trovi all'interno del canale di drenaggio. Premere la mascherina e il connettore del tiralatte contro il seno con il pollice e l'indice. **FIG. C6.**

7. Inserire il tiralatte nel corsetto del reggiseno/allattamento. **FIG. C7.**
8. Accendere il tiralatte premendo il pulsante di accensione e selezionare la modalità di funzionamento più adatta alle proprie esigenze.
9. Per versare il latte, tenere il tiralatte in posizione orizzontale e svitare con cautela la pompa **FIG C8.** Tenere il contenitore del latte con lo scudo mammario rivolto verso l'alto - appoggiarlo in piano sul tavolo (non appoggiarlo verso l'alto per evitare che il latte fuoriesca). **FIG C9.** Versare con cautela il latte nel biberon/contenitore. **FIG C10.**
10. Dopo l'uso, rimuovere e pulire tutti i componenti del tiralatte. **FIG C11.**

NOTE:

- a. Prima di ogni utilizzo, controllare che le parti del tiralatte non siano danneggiate. Se necessario, sostituire le parti danneggiate con altre nuove.
- b. Controllare sempre la pulizia dei componenti prima di utilizzare l'unità.
- c. Se il diametro dello scudo mammario è troppo grande, utilizzare il riduttore in dotazione inserendolo all'interno. **FIG. C12.**

NOTE:

Il tiralatte si avvia in modalità di stimolazione. Impostare il livello di forza di aspirazione più comodo per voi utilizzando i pulsanti +/-:

- Modalità di stimolazione - pompaggio veloce che imita la suzione naturale del latte materno da parte del bambino per stimolare il flusso di latte. Dopo 2 minuti, il tiralatte attiva automaticamente la modalità di pompaggio profondo. Regolare il livello di aspirazione utilizzando i pulsanti +/- per trovare il livello di aspirazione più confortevole per voi. Se il latte inizia a fuoriuscire dal seno prima che siano trascorsi due minuti, premere il pulsante di cambio modalità per passare manualmente alla modalità di estrazione profonda.
- Modalità di pompaggio profondo - pompaggio più lento che aspira delicatamente ed efficacemente il latte dal seno. In questa modalità, aumentare l'aspirazione fino a quando si avverte un leggero fastidio (non dolore) e ridurre l'aspirazione di un grado.
- Modalità mista: imita il riflesso di suzione del bambino. Può essere utilizzato dopo il pompaggio per favorire lo svuotamento del seno e aumentare la lattazione.

07. RICARICA DEL TIRALATTE

Caricare completamente la batteria del tiralatte prima di riporlo se si intende non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo. Caricare la batteria del dispositivo prima che sia completamente esaurita. In questo modo si

prolunga la durata della batteria. Se il tiralatte è stato conservato in un luogo caldo, all'inizio la batteria del dispositivo potrebbe non funzionare. Lasciare raffreddare il tiralatte per un'ora prima di iniziare a usarlo.

Indicazioni:

LO - visualizza se il livello della batteria è inferiore al 20%. **FIG D1.**

Punti lampeggianti - tiralatte in carica. **FIG D2.**

Tre punti che si illuminano continuamente: la batteria è completamente carica. **FIG D3.**

Non utilizzare il tiralatte durante la carica.

08. SOSTITUZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO

I componenti consumabili sono soggetti alla naturale usura durante il funzionamento del tiralatte e non sono pertanto coperti dalla garanzia del produttore.

I componenti usurati del tiralatte che entrano in contatto con il latte devono essere sostituiti. Un componente usurato presenta una crepa, una deformazione, un appannamento o un netto cambiamento di colore.

- La membrana deve essere sostituita ogni 8 settimane (se si usa il tiralatte 1-3 volte al giorno) o ogni 3-4 settimane (se si usa il tiralatte più di 3 volte al giorno).
- La valvola deve essere sostituita ogni 2-3 mesi (se si usa il tiralatte 1-3 volte al giorno) o ogni 4 settimane (se si usa il tiralatte più di 3 volte al giorno).
- Lo scudo e il connettore devono essere sostituiti ogni 6 mesi se si utilizza il tiralatte più di 3 volte al giorno.

09. STOCCAGGIO A LUNGO TERMINE

Il tiralatte è dotato di una batteria ricaricabile integrata. Per proteggersi dai danni, il dispositivo entra in modalità di conservazione dopo un lungo periodo di inattività. Per disattivare la modalità di conservazione, collegare il dispositivo all'alimentazione e caricarlo per 2 ore. Prima di riporre il tiralatte per un lungo periodo di tempo, accertarsi che:

- Tutti i componenti del tiralatte sono puliti.
- Il dispositivo di pompaggio è stato pulito.
- La batteria del dispositivo è completamente carica.

10. FAQ

1. **Il dispositivo non si avvia:** accertarsi che il tiralatte sia collegato a una presa elettrica funzionante. Se il tiralatte è privo di alimentazione, il display non si accende e non compare alcun messaggio di errore.

2. **Mancata/scarsa aspirazione:** verificare che tutte le parti del tiralatte siano posizionate correttamente. Smontare il tiralatte e verificare che tutte le parti siano pulite e non danneggiate. Rimontare il tiralatte seguendo le istruzioni riportate nella sezione ASSEMBLAGGIO DEL LATTATOIO. Durante il pompaggio, accertarsi che l'imbuto sia completamente appoggiato al seno.
3. **Dal seno è uscito più latte di quanto il contenitore ne possa contenere:** utilizzare un panno umido (non bagnato) per pulire il tiralatte. Lavare le parti del tiralatte che contengono il latte seguendo le istruzioni riportate nella sezione PULIZIA E DISINFETTATURA. Quando tutte le parti dell'apparecchio sono asciutte, rimontarle.

11. SPECIFICA

Capacità del contenitore del latte: 210 ml

Capacità della batteria: 3,7V 1500 mAh Li-Po

Potenza in ingresso: 110-240V

Potenza di uscita: 5V 1A

Tempo di funzionamento: fino a 150 minuti

Tempo di ricarica: circa 150 minuti

Dimensioni del tiralatte: 9x4,5x6 cm x2

Peso del tiralatte: 150g x2

Potenza di aspirazione:

1. Modalità di stimolazione (8 livelli): 9-24 kPa
2. Modalità di estrazione profonda (8 livelli): 13-40 kPa
3. Modalità mista (8 livelli): 10-24 kPa

Variazione ammessa ± 5 Kpa.

12. SCHEDA DI GARANZIA/ RECLAMI

Il prodotto viene fornito con una garanzia di 24 mesi. Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: <https://nenopl/gwarancja>

I dettagli, i contatti e l'indirizzo del servizio sono disponibili all'indirizzo:

<https://nenopl/kontakt>

Le specifiche e i contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Cher client,

Le dispositif Neno Sole Twin que vous avez acheté est un tire-lait électronique triphasé double utilisé pour extraire le lait du sein d'une femme après l'accouchement. Lisez le mode d'emploi avant de l'utiliser.

01. PRÉCAUTIONS

1. Débranchez toujours l'appareil après l'avoir chargé si vous n'avez pas besoin de recharger la batterie de l'appareil.
2. Ne placez pas le produit dans un endroit où il risque de tomber dans un évier, une baignoire ou d'autres récipients.
3. Le tire-lait et ses composants ne sont pas résistants à la chaleur - tenez l'appareil éloigné des surfaces chaudes et des flammes nues.
4. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
5. Le tire-lait ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation.
6. N'utilisez jamais l'appareil s'il est tombé ou s'il a été endommagé.
7. N'utilisez pas un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
8. Ne pas utiliser l'appareil dans le bain ou la douche.
9. Ne pas placer l'appareil sous l'eau ou dans d'autres liquides.
10. Ne pas laver l'appareil à l'eau courante.
11. Ne pas brancher l'appareil sur une prise de courant qui a été en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
12. Si l'appareil a été exposé à l'eau ou à d'autres liquides - ne pas toucher directement l'appareil, le débrancher, l'éteindre et contacter le fabricant.
13. Cet appareil est destiné à être utilisé par une seule personne.
L'utilisation du tire-lait par plus d'une personne comporte un risque de préjudice pour les utilisateurs et annule la garantie.
14. Ne réparez pas ou ne modifiez pas l'appareil vous-même.
15. N'utilisez le tire-lait que de la manière décrite dans les instructions.
N'utilisez pas le dispositif à d'autres fins.
16. Inspectez tous les composants du tire-lait avant chaque utilisation.
17. Ne chauffez pas le lait déchargé au micro-ondes. Le lait chauffé au micro-ondes peut brûler le visage du bébé car le chauffage par mi-

cro-ondes peut créer des bulles à haute température dans le liquide. En outre, les micro-ondes peuvent modifier la composition du lait.

18. Ne pas porter le lait à ébullition pendant le chauffage.
19. Avant d'utiliser le tire-lait pour la première fois, lavez et désinfectez toutes les parties de l'appareil qui entreront en contact direct avec le sein ou le lait.
20. Après chaque utilisation du tire-lait, lavez toutes les parties de l'appareil qui entrent en contact direct avec le sein ou le lait.
21. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez le tire-lait ou ses accessoires à proximité d'enfants.
22. N'utilisez pas le tire-lait pendant qu'il est en charge.

02. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Branchez le tire-lait sur l'alimentation électrique. Chargez les batteries pendant 2,5 heures.
2. Retirer le tire-lait.
3. Débranchez les parties du tire-lait qui seront en contact direct avec le sein ou le lait: retirez la tétérrelle du récipient à lait, puis tirez la valve vers le bas et la membrane vers le haut pour la débrancher du connecteur.
4. Nettoyez les composants de l'appareil (voir la section NETTOYAGE ET DÉSINFECTION).

REMARQUE !

Utilisez le tire-lait en position verticale. Dans toute autre position (par exemple en position couchée), le tire-lait ne s'adaptera pas correctement au sein et le lait s'écoulera.

03. ÉLÉMENTS

FIG. A

1. Dispositif de pompage x2
2. Récipient à lait x2
3. Connecteur x2
4. Valve x4
5. Câble de charge USB-C x2
6. Bouclier mammaire 24mm x2
7. Membrane x4
8. Réducteur de bouclier mammaire 20mm x2

04. DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE POMPAGE

FIG. B

1. Icône du mode sélectionné (point I - phase de stimulation, points II - phase d'extraction profonde, points III - phase mixte).

2. Bouton d'alimentation - Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur ce bouton pour mettre le tire-lait en pause.
3. Modification du niveau d'aspiration - Appuyez sur "-" pour réduire la puissance d'aspiration.
4. Icône du mode sélectionné (L1-L8)/de l'heure du tire-lait.
5. Touche de changement de mode - Appuyez sur cette touche pour changer le mode de fonctionnement de l'appareil.
6. Modification du niveau d'aspiration - Appuyez sur "+" pour augmenter la puissance d'aspiration.
7. Prise de charge USB-C

05. LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION

Le lavage et la désinfection sont deux opérations différentes. Elles doivent être effectuées séparément pour protéger votre bébé et assurer le bon fonctionnement du tire-lait.

Lavage - lavage de la surface de l'appareil et élimination des salissures.

Désinfection - élimination des organismes tels que les bactéries ou les virus qui peuvent être présents à la surface de l'équipement.

Bouclier mammaire, membrane, valve, réducteur, connecteur, récipient à lait :

Laver et désinfecter - avant la première utilisation.

Laver - après chaque utilisation.

Une fois par jour et avant la première utilisation - désinfection.

A. LAVAGE:

- Démontez toutes les pièces du tire-lait (à l'exception du dispositif de pompage) et lavez-les dans de l'eau chaude savonneuse pendant 5 minutes, puis rincez-les. Faites-le immédiatement après avoir utilisé l'appareil. Cette opération permet d'éliminer les dépôts de lait et d'empêcher la prolifération des bactéries.

- N'utilisez que de l'eau potable du robinet pour vous laver. Utilisez de l'eau en bouteille si l'eau du robinet ne répond pas à cette exigence.

- Pour nettoyer les pièces en silicone, n'utilisez pas de brosse. Veillez à ne pas les percer.

- Utilisez un liquide vaisselle ou un savon doux.

- Laissez les pièces sécher naturellement. Conservez les pièces sèches de l'appareil dans un endroit frais et sec lorsque vous ne les utilisez pas.

B. DISINFECTION:

Membrane, valve, réducteur, connecteur, tétérrelle, récipient à lait:

- Remplir la casserole ou le stérilisateur d'eau de manière à ce que tous les

composants à l'intérieur (membrane, valve, réducteur, connecteur, bouclier mammaire, récipient à lait) soient couverts lorsqu'ils sont placés à l'intérieur. Portez à ébullition. Placer les pièces du tire-lait dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. Ne pas faire bouillir.

- Laissez les pièces sécher naturellement. Conservez les articles secs dans un endroit frais et sec lorsque vous ne les utilisez pas.

C. LE NETTOYAGE DU DISPOSITIF DE POMPAGE:

- Essuyez la pompe à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un liquide vaisselle ou d'un savon doux. D'autres produits nettoyants ou abrasifs risquent d'endommager l'unité et son affichage.

- Lorsque la pompe n'est pas utilisée, elle doit être conservée dans un endroit frais et sec.

06. MONTAGE ET UTILISATION DU TIRE-LAIT

FIG. C

Fixez les composants comme indiqué dans les FIGS. C 1-5.

REMARQUE: Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de toucher le tire-lait et le sein.

1. Insérer la membrane dans le connecteur. **FIG. C1.**
2. Connecter la valve au connecteur. **FIG. C2. ATTENTION:** La valve doit être fixée avec sa partie la plus longue vers la prothèse mammaire. Pour une vue d'ensemble: **FIG. C6.**
3. Fixer le connecteur avec la membrane et la valve au récipient à lait, en commençant par placer la membrane dans la rainure. **FIG. C3.**
4. Placer la tétérèlle dans le récipient à lait. **FIG. C4.**
5. Fixez le dispositif de pompage au sommet du récipient à lait. **FIG. C5.**
6. Placez la tétérèlle sur votre sein de manière à ce que le mamelon se trouve à l'intérieur du canal de drainage. Pressez le bouclier et le connecteur du tire-lait contre votre sein à l'aide de votre pouce et de votre index. **FIG. C6.**
7. Insérez le tire-lait dans le soutien-gorge/corset de lactation. **FIG. C7.**
8. Mettez le tire-lait en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation et sélectionnez le mode de fonctionnement qui vous convient.
9. Pour verser le lait, tenez le tire-lait horizontalement et dévissez soigneusement le tire-lait **FIG C8.** Tenez le récipient à lait avec la protection du sein vers le haut - posez-le à plat sur la table (ne le posez pas vers le haut pour éviter que le lait ne s'écoule). **FIG C9.** Versez soigneusement le lait dans le biberon/récipient de stockage. **FIG C10.**
10. Retirez et nettoyez tous les composants du tire-lait après utilisation. **FIG C11.**

NOTES:

- a. Avant chaque utilisation, vérifiez que les pièces du tire-lait ne sont pas endommagées. Si nécessaire, remplacez les pièces endommagées par des neuves.
- b. Vérifiez toujours la propreté des composants avant d'utiliser l'appareil.
- c. Si le diamètre du bouclier mammaire est trop grand, utiliser le réducteur fourni en l'insérant à l'intérieur. **FIG. C12.**

NOTES:

Le tire-lait démarre en mode stimulation. Réglez le niveau de puissance de succion qui vous convient à l'aide des boutons +/-:

- Mode stimulation - pompage rapide qui imite la succion naturelle du lait maternel par votre bébé pour stimuler l'écoulement du lait. Après 2 minutes, le tire-lait active automatiquement le mode de pompage profond. Réglez le niveau d'aspiration à l'aide des boutons +/- pour trouver le niveau d'aspiration le plus élevé qui vous convient. Si le lait commence à s'écouler de votre sein avant que deux minutes ne se soient écoulées, appuyez sur le bouton de changement de mode pour passer manuellement au mode d'extraction en profondeur.

- Mode de pompage profond - pompage plus lent qui aspire doucement et efficacement le lait du sein. Dans ce mode, augmentez la succion jusqu'à ce que vous ressentiez une légère gêne (pas de douleur) et réduisez la succion d'un degré.

- Mode mixte - imite le réflexe de succion du bébé. Peut être utilisé après le tirage au sort pour aider à vider le sein et augmenter la lactation.

07. CHARGEMENT DU TIRE-LAIT

Chargez complètement la batterie du tire-lait avant de le ranger si vous avez l'intention de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période. Chargez la batterie de l'appareil avant qu'elle ne soit complètement épuisée. Cela prolonge la durée de vie de la batterie. Si le tire-lait a été stocké dans un endroit chaud, la batterie de l'appareil peut ne pas fonctionner au début. Laissez le tire-lait refroidir pendant une heure avant de l'utiliser.

Indications:

LO - s'affiche si le niveau de la batterie est inférieur à 20 %. **FIG D1.**

Points clignotants - tire-lait en cours de chargement. **FIG D2.**

Trois points allumés en continu - batterie entièrement chargée. **FIG D3.**

N'utilisez pas le tire-lait pendant qu'il est en charge.

08. REMPLACEMENT DES CONSOMMABLES

Les composants consommables sont soumis à une usure naturelle pendant le fonctionnement du tire-lait et ne sont donc pas couverts par la garantie du fabricant.

Les composants usés du tire-lait qui entrent en contact avec le lait doivent être remplacés. Un composant usé présente une fissure, une déformation, un ternissement ou un changement de couleur marqué.

- La membrane doit être remplacée toutes les 8 semaines (si vous utilisez le tire-lait 1 à 3 fois par jour) ou toutes les 3 à 4 semaines (si vous utilisez le tire-lait plus de 3 fois par jour).
- La valve doit être remplacée tous les 2 à 3 mois (si vous utilisez le tire-lait 1 à 3 fois par jour) ou toutes les 4 semaines (si vous utilisez le tire-lait plus de 3 fois par jour).
- La tétérrelle et le connecteur doivent être remplacés tous les 6 mois si vous utilisez le tire-lait plus de 3 fois par jour.

09. STOCKAGE À LONG TERME

Le tire-lait est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Pour se protéger des dommages, l'appareil passe en mode de stockage après une longue période d'inactivité. Pour désactiver le mode de stockage, branchez l'appareil sur le secteur et chargez-le pendant 2 heures. Avant de ranger le tire-lait pour une longue période, assurez-vous que :

- Tous les composants du tire-lait sont propres.
- Vous avez nettoyé le dispositif de pompage.
- La batterie de l'appareil est complètement chargée.

10. FAQ

1. **L'appareil ne démarre pas:** assurez-vous que le tire-lait est branché sur une prise électrique en état de marche. Si le tire-lait n'a pas de source d'alimentation, son écran ne s'allume pas et aucun message d'erreur n'apparaît.
2. **Pas/peu d'aspiration:** vérifiez que toutes les pièces du tire-lait sont correctement positionnées. Démontez le tire-lait et assurez-vous que toutes les pièces sont propres et intactes. Remontez le tire-lait en suivant les instructions de la section ASSEMBLAGE DU LACTANT. Lorsque vous tirez le lait, assurez-vous que l'entonnoir est bien en place contre le sein.
3. **La quantité de lait qui s'est écoulée du sein est supérieure à la capacité du récipient:** utilisez un chiffon humide (pas mouillé) pour essuyer le tire-lait. Lavez les parties du tire-lait qui contiennent du lait en suivant les instructions de la section NETTOYAGE ET

DÉSINFECTION. Lorsque toutes les parties de l'appareil sont sèches, remontez-les.

11. SPECIFICATION

Capacité du récipient à lait: 210 ml

Capacité de la batterie: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Puissance d'entrée: 110-240V

Puissance de sortie: 5V 1A

Durée de fonctionnement: jusqu'à 150 minutes

Temps de charge: environ 150 minutes

Dimensions du tire-lait: 9x4,5x6 cm x2

Poids du tire-lait: 150g x2

Puissance d'aspiration:

1. Mode de stimulation (8 niveaux): 9-24 kPa
2. Mode d'extraction en profondeur (8 niveaux): 13-40 kPa
3. Mode mixte (8 niveaux): 10-24 kPa

Variation admissible ± 5 Kpa.

12. CARTE DE GARANTIE/RÉCLAMATIONS

Le produit est assorti d'une garantie de 24 mois. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse **suivante:** <https://nenopl/gwarancja>

Les détails, le contact et l'adresse du service sont disponibles à l'adresse **suivante:** <https://nenopl/kontakt>

Les spécifications et le contenu peuvent être modifiés sans préavis. Nous nous excusons pour tout inconvénient.

RO

MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client,

Dispozitivul Neno Sole Twin pe care l-ați achiziționat este o pompă de sân dublă, electronică, trifazată, utilizată pentru a extrage laptele matern din sânul unei femei după naștere. Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

01. PRECAUȚII

1. Scoateți întotdeauna dispozitivul din priză după încărcare dacă nu aveți nevoie să încărcati bateria dispozitivului.
2. Nu așezați produsul într-un loc în care este în pericol să cadă în chiuvete, căzi de baie sau alte recipiente.
3. Pompa de sân și componentele acesteia nu sunt rezistente la căldură - țineți dispozitivul departe de suprafețe fierbinți și flăcări deschise.
4. Nu utilizați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile.
5. Pompa de sân nu trebuie lăsată nesupravegheată atunci când este conectată la o sursă de alimentare.
6. Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă acesta a fost scăpat sau deteriorat în alt mod.
7. Nu utilizați un dispozitiv al cărui cablu de alimentare sau fișă este deteriorat.
8. Nu utilizați dispozitivul în cadă sau la duș.
9. Nu plasați dispozitivul sub apă sau în alte lichide.
10. Nu spălați unitatea sub jet de apă.
11. Nu conectați dispozitivul la o priză care a fost în contact cu apă sau alte lichide.
12. Dacă dispozitivul a fost expus la apă sau alte lichide - nu atingeți dispozitivul direct, deconectați-l de la sursa de alimentare, opriți-l și contactați producătorul.
13. Acest aparat este destinat utilizării de către un singur utilizator. Utilizarea pompei de sân de către mai mult de o persoană prezintă un risc de vătămare a utilizatorilor și anulează garanția.
14. Nu reparați sau modificați singur unitatea.
15. Utilizați pompa de sân numai așa cum este descris în instrucțiuni. Nu utilizați dispozitivul în niciun alt scop.
16. Inspectați toate componentele pompei de sân înainte de fiecare utilizare.
17. Nu încălziți laptele descărcat în cuptorul cu microunde. Laptele încălzit în cuptorul cu microunde poate arde fața bebelușului deoarece încălzirea cu unde de microunde poate crea bule la temperaturi ridicate în lichid. În plus, undele de microunde pot schimba compoziția laptelui.
18. Nu aduceți laptele la punctul de fierbere în timp ce îl încălziți.
19. Înainte de a utiliza pompa de sân pentru prima dată, spălați și dezinfectați toate părțile aparatului care vor intra în contact direct cu sânul sau laptele dumneavoastră.
20. După fiecare utilizare a pompei de sân, spălați toate părțile aparatului care vin în contact direct cu sânul sau laptele.
21. Aveți grijă deosebită atunci când utilizați pompa de sân sau accese-

- riile acestora în apropierea copiilor.
- 22. Nu utilizați pompa de sân în timpul încărcării.**

02. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Conectați pompa de sân la sursa de alimentare. Încărcați bateriile timp de 2,5 ore.
2. Scoateți pompa de sân.
3. Deconectați părțile pompei de sân care vor intra în contact direct cu sânul sau cu laptele: scoateți scutul pentru sân din recipientul pentru lapte, apoi trageți supapa în jos și membrana în sus pentru a o deconecta de la conector.
4. Curățați componentele aparatului (consultați secțiunea Curățare și dezinfectare).

NOTĂ!

Utilizați pompa de sân în poziție verticală. Utilizarea în orice altă poziție (de ex. culcat) va duce la neadaptarea corectă a pompei de sân la sân și la scurgerea laptelui.

03. ELEMENTE

FIG. A

1. Dispozitiv de pompare x2
2. Recipient pentru lapte x2
3. Conector x2
4. Valvă x4
5. Cablu de încărcare USB-C x2
6. Scut mamar 24mm x2
7. Membrană x4
8. Reductor pentru scutul mamar 20mm x2

04. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI DE POMPARE

FIG. B

1. Pictograma modului selectat (I punct - faza de stimulare, II puncte - faza de extracție profundă, III puncte - faza mixtă).
2. Butonul de alimentare - Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul. Când dispozitivul este pornit, apăsați pentru a întrerupe pompa de sân.
3. Modificarea nivelului de aspirare - Apăsați “-” pentru a reduce puterea de aspirare.
4. Pictograma modului selectat (L1-L8)/timpul pompei de sân.
5. Butonul de schimbare a modului - Apăsați butonul pentru a schimba modul de funcționare al unității.
6. Modificarea nivelului de aspirare - Apăsați “+” pentru a crește

puterea de aspirare.

7. Priză de încărcare USB-C

05. CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

Spălarea și dezinfectarea sunt două operațiuni diferite. Acestea trebuie efectuate separat pentru a vă proteja copilul și pentru a vă asigura că pompa de sân funcționează corect.

Spălare - spălarea suprafeței unității și îndepărtarea murdăriei.

Dezinfecție - uciderea organismelor precum bacteriile sau virușii care pot fi prezente pe suprafața echipamentului.

Scut pentru sân, membrană, supapă, reductor, conector, recipient pentru lapte:

Spălați și dezinfectați - înainte de prima utilizare.

Spălați - după fiecare utilizare.

O dată pe zi și înainte de prima utilizare - dezinfecție.

A. SPĂLARE:

- Demontați toate părțile pompei de sân (cu excepția dispozitivului de pompare) și spălați în apă caldă cu săpun timp de 5 minute, apoi clătiți. Faceți acest lucru imediat după utilizarea aparatului. Acest lucru va elimina depunerile de lapte și va preveni dezvoltarea bacteriilor.

- Utilizați numai apă potabilă de la robinet pentru spălare. Folosiți apă îmbuteliată dacă apa de la robinet nu îndeplinește această cerință.

- Atunci când curățați piesele din silicon, nu folosiți perii. Aveți grijă să nu le străpungeți.

- Utilizați un detergent sau un săpun delicat pentru vase.

- Lăsați piesele să se usuce în mod natural. Depozitați piesele uscate ale aparatului într-un loc răcoros și uscat atunci când nu le utilizați.

B. DISINFECȚIE:

Membrană, supapă, reductor, conector, scut pentru sân, recipient pentru lapte:

- Umpleți vasul sau sterilizatorul cu apă astfel încât toate componentele din interior (membrană, supapă, reductor, conector, scut pentru sân, recipient pentru lapte) să fie acoperite atunci când sunt plasate în interior. Aduceți la fierbere. Puneți componentele pompei de sân în apă clocotită timp de 10 minute. Nu fierbeți.

- Lăsați piesele să se usuce în mod natural. Păstrați articolele de trusă uscate într-un loc răcoros și uscat atunci când nu le folosiți.

C. CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI DE POMPARE:

- Ștergeți unitatea de pompare cu o cârpă moale, umedă și cu un lichid/săpun blând pentru spălarea vaselor. Alte detergenți sau substanțe abrazive pot deteriora unitatea și afișajul acesteia.
- Atunci când nu utilizați unitatea de pompare, depozitați-o într-un loc răcoros și uscat.

06. ASAMBLAREA ȘI UTILIZAREA POMPEI DE SÂN

FIG. C

Atașați componentele după cum se arată în FIGURILE C 1-5.

NOTĂ: Spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun înainte de a atinge pompa de sân și sânul.

1. Introduceți membrana în conector. **FIG. C1.**
2. Conectați supapa la conector. **FIG. C2. ATENȚIE:** Supapa trebuie fixată cu partea sa mai lungă spre scutul mamar. Pentru o prezentare generală: **FIG. C6.**
3. Atașați conectorul cu membrană și supapă la recipientul pentru lapte, începând prin a plasa membrana în canelură. **FIG. C3.**
4. Așezați scutul mamar în recipientul pentru lapte. **FIG. C4.**
5. Atașați dispozitivul de pompare la partea superioară a recipientului pentru lapte. **FIG. C5.**
6. Așezați scutul mamar pe sân astfel încât mamelonul să fie în interiorul canalului de drenaj. Apăsăți scutul mamar și conectorul pompei de sân împotriva sânului dvs. cu degetul mare și arătător. **FIG. C6.**
7. Introduceți pompa de sân în corsetul pentru sutien/lactație. **FIG. C7.**
8. Porniți pompa de sân apăsând butonul de pornire și selectați modul de funcționare care vi se potrivește.
9. Pentru a turna laptele, țineți pompa de sân orizontal și deșurubați cu grijă pompa **FIG C8.** Țineți recipientul pentru lapte cu scutul pentru sâni orientat în sus - așezați-l pe suprafața mesei (nu îl așezați în sus pentru a preveni scurgerea laptelui). **FIG C9.** Turnați cu grijă laptele în sticlă/recipientul de depozitare. **FIG C10.**
10. Scoateți și curățați toate componentele pompei de sân după utilizare. **FIG C11.**

OBSERVAȚII:

- a. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă piesele pompei de sân sunt deteriorate. Dacă este necesar, înlocuiți piesele deteriorate cu unele noi.
- b. Verificați întotdeauna curățenia componentelor înainte de a utiliza unitatea.

- c. Dacă diametrul scutului mamar este prea mare, utilizați reductorul furnizat, introducându-l în interior. **FIG. C12.**

OBSERVAȚII:

Pompa de sân pornește în modul de stimulare. Setați nivelul de putere a aspirației confortabil pentru dvs. utilizând butoanele +/-:

- Modul de stimulare - pompare rapidă care imită suptul natural al bebelușului dvs. de lapte matern pentru a stimula fluxul de lapte. După 2 minute, pompa de sân va activa automat modul de pompare profundă. Reglați nivelul de aspirație folosind butoanele +/- pentru a găsi cel mai înalt nivel de aspirație care este confortabil pentru dvs. Dacă laptele începe să curgă din sân înainte de expirarea a două minute, apăsați butonul de schimbare a modului pentru a trece manual la modul de extracție profundă.

- Modul de pompare profundă - pompare mai lentă care aspiră ușor și eficient laptele din sân. În acest mod, creșteți aspirația până când simțiți un ușor disconfort (nu durere) și reduceți aspirația cu un grad.

- Mod mixt - imită reflexul de supt al bebelușului. Poate fi utilizat după pompare pentru a ajuta la golirea sânelor și la creșterea lactației.

07. ÎNCĂRCAREA POMPEI DE SÂN

Încărcați complet bateria pompei de sân înainte de a o depozita dacă intenționați să nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp. Încărcați bateria dispozitivului înainte ca aceasta să fie complet epuizată. Acest lucru prelungește durata de viață a bateriei. Dacă pompa de sân a fost depozitată într-un loc cald, este posibil ca bateria dispozitivului să nu funcționeze la început. Lăsați pompa de sân să se răcească timp de o oră înainte de a începe să o utilizați.

Indicații:

LO - se afișează dacă nivelul bateriei este sub 20%. **FIG D1.**

Puncte intermitente - pompa de sân în curs de încărcare. **FIG D2.**

Trei puncte luminează continuu - baterie complet încărcată. **FIG D3.**
Nu utilizați pompa de sân în timpul încărcării.

08. ÎNLOCUIREA CONSUMABILELOR

Componentele consumabile sunt supuse uzurii naturale în timpul funcționării pompei de sân și, prin urmare, nu sunt acoperite de garanția producătorului.

Componentele uzate ale pompei de sân care vin în contact cu laptele trebuie înlocuite. O componentă uzată prezintă o fisură, o deformare, o ternire sau o schimbare distinctă a culorii.

- Membrana trebuie înlocuită la fiecare 8 săptămâni (dacă utilizați pompa de sân de 1-3 ori pe zi) sau la fiecare 3-4 săptămâni (dacă utilizați pompa de sân de mai mult de 3 ori pe zi).
- Supapa trebuie înlocuită la fiecare 2-3 luni (dacă utilizați pompa de sân de 1-3 ori pe zi) sau la fiecare 4 săptămâni (dacă utilizați pompa de sân de mai mult de 3 ori pe zi).
- Protectorul de sân și conectorul trebuie înlocuite la fiecare 6 luni dacă utilizați pompa de sân de mai mult de 3 ori pe zi.

09. DEPOZITARE PE TERMEN LUNG

Pompa de sân are o baterie reîncărcabilă încorporată. Pentru a se proteja de deteriorări, dispozitivul intră în modul de stocare după o perioadă lungă de inactivitate. Pentru a dezactiva modul de stocare, conectați dispozitivul la rețea și încărcăți-l timp de 2 ore. Înainte de a pune pompa de sân deoparte pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că:

- Toate componentele pompei de sân sunt curate.
- Ați curățat dispozitivul de pompare.
- Bateria dispozitivului este complet încărcată.

10. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. **Dispozitivul nu pornește: asigurați-vă că pompa de sân este conectată la o priză electrică funcțională.** Dacă pompa de sân nu are sursă de alimentare, afișajul acesteia nu se aprinde și nu apare niciun mesaj de eroare.
2. **Aspirație slabă sau inexistentă: asigurați-vă că toate piesele pompei de sân sunt poziționate corect.** Demontați pompa de sân și asigurați-vă că toate piesele sunt curate și nevătămate. Reasamblați pompa de sân în conformitate cu instrucțiunile din secțiunea ASEMBLAJ LACTATOR. Când pompați, asigurați-vă că pâlnia este complet așezată pe sân.
3. **Din sân a curs mai mult lapte decât poate reține recipientul: utilizați o cârpă umedă (nu udă) pentru a șterge pompa de sân.** Spălați părțile pompei de sân care conțin lapte în conformitate cu instrucțiunile din secțiunea CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIONARE. Când toate părțile aparatului sunt uscate, remontați.

11. SPECIFICAȚII

Capacitatea recipientului pentru lapte: 210ml

Capacitatea bateriei: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Putere de intrare: 110-240V

Putere de ieșire: 5V 1A

Timp de funcționare: până la 150min

Timp de încărcare: aprox. 150min
Dimensiunile pompei de sân: 9x4,5x6 cm x2
Greutatea pompei de sân: 150g x2

Putere de aspirație:

1. Mod de stimulare (8 niveluri): 9-24 kPa
2. Mod de extracție profundă (8 niveluri): 13-40 kPa
3. Mod mixt (8 niveluri): 10-24 kPa

Variație admisă ± 5 Kpa.

12. GARANȚIE/CARTE DE RECLAMAȚII

Produsul vine cu o garanție de 24 de luni. Condițiile de garanție pot fi găsite la: <https://neno.pl/gwarancja>

Detalii, adresa de contact și de serviciu pot fi găsite la:

<https://neno.pl/kontakt>

Specificațiile și conținutul se pot modifica fără notificare prealabilă. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente.

HR/BA

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Poštovani kupče,

Neno Sole Twin uređaj koji ste kupili je dvostruka, elektronička, trofazna pumpa za dojke koja se koristi za izdavanje majčinog mlijeka iz ženske dojke nakon poroda. Prije upotrebe pročitajte upute za uporabu.

01. MJERE OPREZA

1. Uvijek isključite uređaj iz utičnice nakon punjenja ako ne trebate puniti bateriju uređaja.
2. Ne stavljajte proizvod tamo gdje postoji opasnost od pada u sudopere, kade ili druge posude.
3. Pumpa za izdavanje i njezini dijelovi nisu otporni na toplinu – držite uređaj podalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
4. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
5. Pumpu za izdavanje ne smije se ostavljati bez nadzora kada je spojena na izvor napajanja.
6. Nikada nemojte koristiti uređaj ako je pao ili je na drugi način oštećen.

7. Nemojte koristiti uređaj čiji su kabel za napajanje ili utikač oštećeni.
8. Nemojte koristiti uređaj u kadi ili pod tušem.
9. Ne stavljajte uređaj pod vodu ili druge tekućine.
10. Ne perite jedinicu pod tekućom vodom.
11. Ne spajajte uređaj u utičnicu koja je bila u kontaktu s vodom ili drugim tekućinama.
12. Ako je uređaj bio izložen vodi ili drugim tekućinama - ne dodirujte uređaj izravno, isključite ga iz napajanja, isključite i obratite se proizvođaču.
13. Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje od strane jednog korisnika. Korištenje pumpe za grudi od strane više osoba nosi rizik od ozljede korisnika i poništava jamstvo.
14. Nemojte sami popravljati ili modificirati jedinicu.
15. Pumpu za izdavanje koristite samo kako je opisano u uputama. Nemojte koristiti uređaj u bilo koju drugu svrhu.
16. Pregledajte sve komponente pumpe prije svake uporabe.
17. Ne zagrijavajte ispušteno mlijeko u mikrovalnoj pećnici. Mlijeko zagrijano u mikrovalnoj pećnici može izgorjeti bebino lice jer zagrijavanje mikrovalnim valovima može stvoriti mjehuriće visoke temperature u tekućini. Osim toga, mikrovalni valovi mogu promijeniti sastav mlijeka.
18. Ne dovodite mlijeko do vrenja dok ga zagrijavate.
19. Prije prve upotrebe pumpe za izdavanje operite i dezinficirajte sve dijelove stroja koji će doći u izravan kontakt s dojkom ili mlijekom.
20. Nakon svake upotrebe pumpe za dojke, operite sve dijelove stroja koji dolaze u izravan kontakt s dojkom ili mlijekom.
21. Budite posebno oprezni kada koristite pumpu za izdavanje ili njezin pribor u blizini djece.
22. Nemojte koristiti pumpu za izdavanje tijekom punjenja.

02. PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Spojite pumpu za dojke na napajanje. Punite baterije 2,5 sata.
2. Uklonite pumpu za dojke.
3. Odvojite dijelove pumpe za dojke koji će doći u izravan kontakt s dojkom ili mlijekom: izvadite štitnik za dojke iz spremnika za mlijeko, a zatim povucite ventil prema dolje i membranu prema gore kako biste se odvojili od konektora.
4. Očistite dijelove uređaja (pogledajte odjeljak ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA).

BILJEŠKA!

Pumpu za izdavanje koristite u uspravnom položaju. Korištenje u bilo kojem

drugom položaju (npr. u ležećem položaju) rezultat će time da pumpa za izdavanje ne pristaje pravilno na dojkę i mlijeko iscuri.

03. ELEMENATA

SLIKA A

1. Crpni uređaj x2
2. Spremnik za mlijeko x2
3. Priključak x2
4. Ventil x4
5. USB-C kabel za punjenje x2
6. Štitnik za grudi 24mm x2
7. Membrana x4
8. Reduktor štitnika za grudi 20mm x2

04. OPIS CRPNOG UREĐAJA

SLIKA B

1. Ikona odabranog načina rada (I točka - faza stimulacije, II točke - faza duboke ekstrakcije, III točke - mješovita faza).
2. Gumb za uključivanje - Držite tipku 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje uređaja. Kada je uređaj uključen, pritisnite za pauziranje pumpe za dojke.
3. Promjena razine usisavanja - Pritisnite „-“ za smanjenje snage usisavanja.
4. Ikona odabranog načina rada (L1-L8)/vremena pumpe za izdavanje.
5. Gumb za promjenu načina rada - Pritisnite gumb za promjenu načina rada jedinice.
6. Promjena razine usisavanja - Pritisnite „+“ za povećanje snage usisavanja.
7. USB-C utičnica za punjenje

05. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Pranje i dezinfekcija dvije su različite operacije. Moraju se provoditi odvojeno kako bi zaštitili vašu bebu i osigurali ispravan rad pumpe za dojke.

Pranje - pranje površine jedinice i uklanjanje prljavštine.

Dezinfekcija - ubijanje organizama kao što su bakterije ili virusi koji mogu biti prisutni na površini opreme.

Štitnik za dojke, membrana, ventil, reduktor, konektor, spremnik za mlijeko:

Operite i dezinficirajte - prije prve upotrebe.

Pranje - nakon svake upotrebe.

Jednom dnevno i prije prve upotrebe - dezinfekcija.

A. PRANJE:

- Rastavite sve dijelove pumpe za izdavanje (osim uređaja za pumpanje) i operite u toploj vodi sa sapunom 5 minuta, a zatim isperite. Učinite to odmah nakon upotrebe stroja. To će ukloniti naslage mlijeka i spriječiti rast bakterija.
- Za pranje koristite samo pitku vodu iz slavine. Koristite flaširanu vodu ako voda u vašoj slavini ne ispunjava ovaj zahtjev.
- Prilikom čišćenja silikonskih dijelova nemojte koristiti četke. Pazite da ih ne probušite.
- Koristite blagu tekućinu ili sapun za pranje posuđa.
- Ostavite dijelove da se prirodno osuše. Suhe dijelove uređaja čuvajte na hladnom i suhom mjestu kada ih ne koristite.

B. DEZINFEKCIJA:

Membrana, ventil, reduktor, konektor, štitnik za dojke, spremnik za mlijeko:

- Napunite lonac ili sterilizator vodom tako da sve komponente iznutra (membrana, ventil, reduktor, konektor, štitnik za dojke, spremnik za mlijeko) budu pokrivene kada se stave unutra. Pustite da zavrije. Stavite dijelove pumpe za dojke u kipuću vodu na 10 minuta. Nemojte kuhati.
- Ostavite komade da se prirodno osuše. Suhe predmete kompleta čuvajte na hladnom i suhom mjestu kada ih ne koristite.

C. ČIŠĆENJE CRPNOG UREĐAJA:

- Obrišite pumpnu jedinicu mekom, mokrom krpom i blagom tekućinom/sapunom za pranje posuđa. Druga sredstva za čišćenje ili abrazivna sredstva mogu oštetiti jedinicu i njezin zaslon.
- Kada ne koristite crpnu jedinicu, čuvajte je na hladnom i suhom mjestu.

06. MONTAŽA I UPORABA PUMPE ZA DOJKE

SLIKA C

Pričvrstite komponente kao što je prikazano na SL. C 1-5.

NAPOMENA: Temeljito operite ruke sapunom i vodom prije nego što dodirnete pumpu za izdavanje i dojku.

1. Umetnite membranu u konektor. **SLIKA C1.**
2. Spojite ventil na priključak. **SLIKA C2. PAŽNJA:** Ventil treba učvrstiti svojim dužim dijelom prema štitniku za dojke. Za pregled: **SLIKA C6.**
3. Pričvrstite konektor s membranom i ventilom na spremnik za mlijeko, počevši od postavljanja membrane u utor. **SLIKA C3.**
4. Stavite štitnik za grudi u posudu za mlijeko. **SLIKA C4.**
5. Pričvrstite uređaj za pumpanje na vrh posude za mlijeko. **SLIKA C5.**
6. Stavite štitnik za grudi na dojku tako da bradavica bude unutar odvod-

nog kanala. Palcem i kažiprstom pritisnite štitnik za grudi i konektor pumpe za dojke. **SLIKA C6.**

7. Umetnite pumpu za dojenje u grudnjak/steznik za dojenje. **SLIKA C7.**
8. Uključite pumpu za dojke pritiskom na tipku za uključivanje i odaberite način rada koji vam odgovara.
9. Da biste natočili mlijeko, držite pumpu za izdavanje vodoravno i pažljivo odvrnite pumpu **FIG C8.** Držite spremnik za mlijeko tako da štitnik za dojke bude okrenut prema gore - položite ga ravno na ploču stola (nemojte ga postavljati prema gore kako biste spriječili istjecanje mlijeka). **SLIKA C9.** Pažljivo ulijte mlijeko u bocu/spremnik. **SLIKA C10.**
10. Uklonite i očistite sve komponente pumpe nakon upotrebe. **SLIKA C11.**

BILJEŠKE:

- a. Prije svake uporabe provjerite jesu li dijelovi pumpe za dojke oštećeni. Ako je potrebno, oštećene dijelove zamijenite novim.
- b. Uvijek provjerite čistoću komponenti prije uporabe jedinice.
- c. Ako je promjer štitnika za dojke prevelik, upotrijebite isporučeni reduktor tako da ga umetnete unutra. **SLIKA C12.**

BILJEŠKE:

Pumpa za izdavanje pokreće se u načinu stimulacije. Postavite razinu usisne snage koja vam je ugodna pomoću tipki +/-:

- Način stimulacije - brzo pumpanje koje oponaša prirodno sisanje majčinog mlijeka vaše bebe kako bi potaknulo protok mlijeka. Nakon 2 minute, pumpa za izdavanje automatski će aktivirati način dubokog pumpanja. Podesite razinu usisavanja pomoću tipki +/- kako biste pronašli najvišu razinu usisavanja koja vam odgovara. Ako mlijeko počne teći iz dojke prije isteka dvije minute, pritisnite gumb za promjenu načina rada za ručno prebacivanje u način duboke ekstrakcije.

- Način dubokog pumpanja - sporije pumpanje koje nježno i učinkovito usisava mlijeko iz dojke. U ovom načinu rada povećajte usisavanje dok ne osjetite laganu nelagodu (ne bol) i smanjite usisavanje za jedan stupanj.

- Mješoviti način rada - oponaša djetetov refleks sisanja. Može se koristiti nakon pumpanja kako bi se ispraznila dojka i povećala laktacija.

07. PUNJENJE PUMPE ZA DOJKE

Potpuno napunite bateriju pumpe za dojke prije nego što je stavite u skladište ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme. Napunite bateriju uređaja prije nego što se potpuno isprazni. To produljuje vijek trajanja baterije. Ako je pumpa za izdavanje pohranjena na vrućem mjestu, baterija uređaja

možda neće raditi u početku. Ostavite pumpu da se ohladi jedan sat prije nego što je počnete koristiti.

Indikacije:

LO - prikazuje se ako je razina baterije ispod 20%. **SLIKA D1.**

Trepereće točkice - pumpa za dojke se puni. **SLIKA D2.**

Tri točke neprekidno svijetle - baterija je potpuno napunjena. **SLIKA D3.**

Nemojte koristiti pumpu za izdavanje tijekom punjenja.

08. ZAMJENA POTROŠNOG MATERIJALA

Potrošni dijelovi podložni su prirodnom trošenju tijekom rada pumpe za izdavanje i stoga nisu pokriveni jamstvom proizvođača.

Istrošene dijelove pumpe za dojke koji dolaze u dodir s mlijekom treba zamijeniti. Istrošena komponenta ima pukotinu, deformaciju, potamnjenje ili izrazitu promjenu boje.

- Membranu treba mijenjati svakih 8 tjedana (ako pumpu za dojke koristite 1-3 puta dnevno) ili svaka 3-4 tjedna (ako pumpu za dojke koristite više od 3 puta dnevno).
- Ventil treba mijenjati svaka 2-3 mjeseca (ako pumpu za dojke koristite 1-3 puta dnevno) ili svaka 4 tjedna (ako pumpu za dojke koristite više od 3 puta dnevno).
- Štitnik za grudi i konektor treba mijenjati svakih 6 mjeseci ako pumpu za dojke koristite više od 3 puta dnevno.

09. DUGOTRAJNO SKLADIŠTENJE

Pumpa za izdavanje ima ugrađenu punjivu bateriju. Kako bi se zaštitio od oštećenja, uređaj prelazi u način pohrane nakon dužeg razdoblja neaktivnosti. Da biste deaktivirali način pohrane, priključite uređaj na napajanje i punit ga 2 sata. Prije nego što odložite pumpu za dojke na dulje vrijeme, provjerite da:

- Sve komponente pumpe za dojke su čiste.
- Očistili ste crpni uređaj.
- Baterija uređaja je potpuno napunjena.

10. FAQ

1. **Uređaj se ne pokreće:** provjerite je li pumpa za dojke uključena u ispravnu električnu utičnicu. Ako pumpa za izdavanje nema izvor napajanja, njezin se zaslon neće uključiti i ne pojavljuje se poruka o pogrešci.
2. **Ne/loše usisavanje:** provjerite jesu li svi dijelovi pumpe za dojke pravilno postavljeni. Rastavite pumpu za izdavanje i provjerite jesu li svi dijelovi čisti i neoštećeni. Ponovno sastavite pumpu za dojke

prema uputama u odjeljku MONTAŽA LAKTATORA. Prilikom pumpanja provjerite je li lijevak potpuno postavljen uz dojku.

- Iz dojke je poteklo više mlijeka nego što spremnik može primiti:** vlačnom (ne mokrom) krpom obrišite pumpu za dojke. Operite dijelove pumpe za dojke koji drže mlijeko prema uputama u odjeljku ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA. Kad se svi dijelovi stroja osuše, ponovno sastavite.

11. SPECIFIKACIJA

Kapacitet spremnika za mlijeko: 210ml

Kapacitet baterije: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Ulazna snaga: 110-240V

Izlazna snaga: 5V 1A

Vrijeme rada: do 150min

Vrijeme punjenja: cca 150min

Dimenzije pumpe za dojenje: 9x4,5x6 cm x2

Težina pumpe za dojke: 150g x2

Snaga usisavanja:

- Način stimulacije (8 razina): 9-24 kPa
- Način duboke ekstrakcije (8 razina): 13-40 kPa
- Mješoviti način rada (8 razina): 10-24 kPa

Dopuštena varijacija ± 5 Kpa.

12. JAMSTVEN/REKLAMACIJSKI LIST

Proizvod dolazi s jamstvom od 24 mjeseca. Jamstveni uvjeti mogu se pronaći na: <https://nenopl/gwarancja>

Detalje, kontakt i adresu servisa možete pronaći na: <https://nenopl/kontakt>
Specifikacije i sadržaj podložni su promjenama bez prethodne najave. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

RS/ME

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Poštovani kupče,

Neno Sole Tvin uređaj koji ste kupili je dvostruka, elektronska, trofazna pumpa za dojke koja se koristi za izmlazanje majčinog mlijeka nakon porođaja. Pročitajte uputstvo za upotrebu prije upotrebe.

01. PREVENTIVNE MJERE

1. Uvijek isključite uređaj nakon punjenja ako ne morate da punitе bateriju uređaja.
2. Ne postavljajte proizvod na mjesta gdje postoji opasnost od pada u sudopere, kade ili druge posude.
3. Pumpa za dojke i njene komponente nisu otporne na toplotu – držite uređaj dalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
4. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
5. Pumpa za dojke ne treba da se ostavlja bez nadzora kada je priključena na izvor napajanja.
6. Nikada nemojte koristiti uređaj ako je pao ili na neki drugi način oštećen.
7. Nemojte koristiti uređaj čiji su kabl za napajanje ili utikač oštećeni.
8. Nemojte koristiti uređaj u kadi ili pod tušem.
9. Ne stavljajte uređaj pod vodu ili u druge tečnosti.
10. Nemojte prati jedinicu pod tekućom vodom.
11. Ne priključujte uređaj na utičnicu koja je bila u kontaktu sa vodom ili drugim tečnostima.
12. Ako je uređaj bio izložen vodi ili drugim tečnostima - nemojte direktno dodirivati uređaj, isključite ga iz napajanja, isključite ga i kontaktirajte proizvođača.
13. Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu od strane jednog korisnika. Upotreba pumpe za grudi od strane više osoba nosi rizik od povrede korisnika i poništava garanciju.
14. Nemojte sami popravljati ili modifikovati jedinicu.
15. Koristite pumpu za grudi samo onako kako je opisano u uputstvima. Nemojte koristiti uređaj u bilo koju drugu svrhu.
16. Pregledajte sve komponente pumpe za dojke prije svake upotrebe.
17. Ne zagrijavajte ispušteno mlijeko u mikrotalasnoj pećnici. Mlijeko zagrijano u mikrotalasnoj pećnici može da opeče bebino lice jer zagrijavanjem mikrotalasnim talasima može stvoriti mjehuriće visoke temperature u tečnosti. Pored toga, mikrotalasni talasi mogu promijeniti sastav mlijeka.
18. Ne dovodite mlijeko do ključanja dok ga zagrijavate.
19. Prije prve upotrebe pumpe za dojke, operite i dezinfikujte sve dijelove mašine koji će doći u direktan kontakt sa vašom dojkom ili mlijekom.
20. Nakon svake upotrebe pumpe za dojke, operite sve dijelove mašine koji dolaze u direktan kontakt sa vašom dojkom ili mlijekom.
21. Budite posebno oprezni kada koristite pumpu za dojke ili njenu dodatnu opremu u blizini djece.
22. Nemojte koristiti pumpu za dojke tokom punjenja.

02. PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Povežite pumpu za dojke na napajanje. Punite baterije 2,5 sata.
2. Uklonite pumpu za grudi.
3. Odvojite djelove pumpe za dojke koji će doći u direktan kontakt sa dojkom ili mlijekom: uklonite štitnik za dojke sa posude za mlijeko, zatim povucite ventil nadolje i membranu nagore da biste odvojili od konektora.
4. Očistite komponente uređaja (pogledajte odeljak ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA).

NAPOMENA!

Koristite pumpu za grudi u uspravnom položaju. Upotreba u bilo kom drugom položaju (npr. u ležećem položaju) će dovesti do toga da pumpa za grudi ne pristaje pravilno na dojku i da mlijeko curi.

03. ELEMENTI

SLIKA A

1. Uređaj za pumpanje x2
2. Kontejner za mlijeko x2
3. Konektor x2
4. Ventil x4
5. USB-C kabl za punjenje x2
6. Štitnik za grudi 24mm x2
7. Membrane x4
8. Reduktor štitnika za grudi 20mm x2

04. OPIS UREĐAJA ZA PUMPANJE

SLIKA B

1. Ikona izabranog režima (I tačka - faza stimulacije, II tačke - faza duboke ekstrakcije, III tačke - mešana faza).
2. Dugme za napajanje - Držite dugme 2 sekunde da biste uključili ili isključili uređaj. Kada je uređaj uključen, pritisnite da pauzirate pumpu za dojke.
3. Promena nivoa usisavanja - Pritisnite "-" da smanjite snagu usisavanja.
4. Ikona izabranog režima (L1-L8)/vremena pumpe za dojke.
5. Dugme za promenu režima - Pritisnite dugme da promenite režim rada jedinice.
6. Promena nivoa usisavanja - Pritisnite "+" da povećate snagu usisavanja.
7. USB-C utičnica za punjenje

05. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Pranje i dezinfekcija su dvije različite operacije. Moraju se izvoditi odvojeno kako bi se zaštitila vaša beba i osiguralo da pumpa za dojke radi ispravno.

Pranje - pranje površine jedinice i uklanjanje prljavštine.

Dezinfekcija – ubijanje organizama kao što su bakterije ili virusi koji mogu biti prisutni na površini opreme.

Štitnik za dojke, membrana, ventil, reduktor, konektor, kontejner za mlijeko:

Operite i dezinficirajte - prije prve upotrebe.

Operite - nakon svake upotrebe.

Jednom dnevno i prije prve upotrebe - dezinfekcija.

A. PRANJE:

- Rastavite sve dijelove pumpe za dojke (osim uređaja za pumpanje) i operite u toploj vodi sa sapunom 5 minuta, a zatim isperite. Uradite to odmah nakon upotrebe mašine. Ovo će ukloniti naslage mlijeka i spriječiti rast bakterija.

- Za pranje koristite samo pitku vodu iz slavine. Koristite flaširanu vodu ako voda u vašoj slavini ne ispunjava ovaj zahtev.

- Prilikom čišćenja silikonskih dijelova nemojte koristiti četke. Pazite da ih ne probušite.

- Koristite blagu tečnost za pranje sudova ili sapun.

- Ostavite dijelove da se prirodno osuše. Čuvajte suve delove uređaja na hladnom i suvom mjestu kada ih ne koristite.

B. DEZINFEKCIJA:

Membrana, ventil, reduktor, konektor, štitnik za dojke, kontejner za mlijeko:

- Napunite lonac ili sterilizator vodom tako da sve komponente unutar (membrana, ventil, reduktor, konektor, štitnik za dojke, posuda za mlijeko) budu pokrivene kada se stavljaju unutra. Dovedi do ključanja. Stavite dijelove pumpe za dojke u kipuću vodu na 10 minuta. Ne kuvati.

- Ostavite komade da se prirodno osuše. Stavke suvog pribora čuvajte na hladnom i suvom mjestu kada ih ne koristite.

C. ČIŠĆENJE UREĐAJA ZA PUMPANJE:

- Obrišite jedinicu pumpe mekom, mokrom krpom i blagim sredstvom za pranje sudova/sapunom. Druga sredstva za čišćenje ili abrazivi mogu oštetiti jedinicu i njen ekran.

- Kada ne koristite pumpnu jedinicu, čuvajte je na hladnom i suvom mestu.

06. MONTAŽA I UPOTREBA PUMPE ZA DOJKE

SLIKA C

Pričvrstite komponente kao što je prikazano na SLIKA. C 1-5.

NAPOMENA: Dobro operite ruke sapunom i vodom prije nego što dodirnete pumpu za dojke i dojke.

1. Umetnite membranu u konektor. **SLIKA C1.**
2. Priključite ventil na konektor. **SLIKA C2. PAŽNJA:** Zalistak treba fiksirati svojim dužim dijelom prema štitniku dojke. Za pregled: **SLIKA C6.**
3. Pričvrstite konektor sa membranom i ventilom na posudu za mlijeko, počevši od postavljanja membrane u žlijeb. **SLIKA C3.**
4. Stavite štitnik za dojke u posudu za mlijeko. **SLIKA C4 .**
5. Pričvrstite uređaj za pumpanje na vrh posude za mlijeko. **SLIKA C5.**
6. Postavite štitnik za grudi na dojku tako da bradavica bude unutar odvodnog kanala. Palcem i kažiprstom pritisnite štitnik za grudi i konektor pumpe za grudi na dojku. **SLIKA C6.**
7. Umetnite pumpicu za grudi u grudnjak/korzet za laktaciju. **SLIKA C7.**
8. Uključite pumpu za dojke pritiskom na dugme za napajanje i izaberite režim rada koji vam odgovara.
9. Da biste sipali mlijeko, držite pumpu za dojke horizontalno i pažljivo odvrnite pumpu **SLIKA C8.** Držite posudu za mlijeko tako da štitnik za grudi bude okrenut nagore - položite je ravno na sto (ne postavljajte je nagore da sprečite da mlijeko iscuri). **SLIKA C9.** Pažljivo sipajte mlijeko u flašu/skladištenje. **SLIKA C10.**
10. Uklonite i očistite sve komponente pumpe za dojke nakon upotrebe. **SLIKA C11.**

NAPOMENE:

- a. Uvek provjerite čistoću komponenti prije upotrebe uređaja.
- b. Ako je prečnik štitnika za grudi prevelik, koristite isporučeni reduktor tako što ćete ga umetnuti unutra. **SLIKA C12.**

NAPOMENE:

Pumpa za grudi se pokreće u režimu stimulacije. Podesite nivo snage usisavanja koji vam odgovara pomoću +/- dugmadi:

- Režim stimulacije - brzo pumpanje koje imitira prirodno sisanje majčinog mlijeka vaše bebe da bi stimuliralo protok mlijeka. Nakon 2 minuta, pumpa za grudi će automatski aktivirati režim dubokog pumpanja. Podesite nivo usisavanja pomoću dugmadi +/- da biste pronašli najviši nivo usisavanja koji vam odgovara. Ako mlijeko počne da teče iz dojke prije nego što prođu dva minuta, pritisnite dugme za promjenu režima da biste ručno prešli na režim duboke ekstrakcije.
- Režim dubokog ispušavanja - sporije pumpanje koje nježno i efikasno siše mlijeko iz dojke. U ovom režimu povećavajte usis sve dok ne osjetite blagu nelagodnost (ne bol) i smanjite usis za jedan stepen.
- Mješoviti režim - oponaša refleks sisanja bebe. Može se koristiti nakon ispušavanja da pomogne pražnjenju dojke i povećanju laktacije.

07. PUNJENJE PUMPE

Potpuno napunite bateriju pumpe za dojke prije nego što je odložite u skla-

dište ako ne namjeravate da koristite uređaj duži vremenski period. Napunite bateriju uređaja prije nego što se potpuno isprazni. Ovo produžava životni vijek baterije. Ako je pumpa za grudi čuvana na toplom mjestu, baterija uređaja u početku možda neće raditi. Pustite da se pumpa za grudi ohladi jedan sat prije nego što počnete da je koristite.

Indikacije:

LO - prikazuje se ako je nivo baterije ispod 20%. **SLIKA D1.**

Trepćuće tačke - pumpa za dojke pod punjenjem. **SLIKA D2.**

Tri tačke svijetle neprekidno - baterija je potpuno napunjena. **SLIKA D3.**

Nemojte koristiti pumpu za dojke tokom punjenja.

08. ZAMJENA POTROŠNOG MATERIJALA

Potrošni dijelovi su podložni prirodnom habanju tokom rada pumpe za dojke i stoga nisu pokriveni garancijom proizvođača.

Istrošene komponente pumpe za dojke koje dolaze u kontakt sa mlijekom treba zamijeniti. Istrošena komponenta ima pukotinu, deformaciju, tamnjenje ili izrazitu promjenu boje.

- Membranu treba mijenjati svakih 8 nedjelja (ako koristite pumpu za dojke 1-3 puta dnevno) ili svake 3-4 nedjelje (ako pumpu za dojke koristite više od 3 puta dnevno).
- Ventil treba zamijeniti svaka 2-3 meseca (ako koristite pumpu za dojke 1-3 puta dnevno) ili svake 4 nedjelje (ako pumpu za dojke koristite više od 3 puta dnevno).
- Štitnik za dojke i konektor treba mijenjati svakih 6 mjeseci ako pumpu za grudi koristite više od 3 puta dnevno.

09. DUGOTRAJNO SKLADIŠTENJE

Pumpa za dojke ima ugrađenu punjivu bateriju. Da bi se zaštitilo od oštećenja, uređaj ulazi u režim skladištenja nakon dužeg perioda neaktivnosti. Da biste deaktivirali režim skladištenja, priključite uređaj na napajanje i punit ga 2 sata. Prije nego što odložite pumpu za grudi na duži vremenski period, uverite se da:

- Sve komponente pumpe za dojke su čiste.
- Očistili ste uređaj za pumpanje.
- Baterija uređaja je potpuno napunjena.

10. FAK

1. **Uređaj se ne pokreće:** provjerite da li je pumpa za dojke uključena u ispravnu električnu utičnicu. Ako pumpa za dojke nema izvor napajanja, njen ekran se neće uključiti i neće se pojaviti poruka o grešci.
2. **Nema/loše usisavanje:** uverite se da su svi dijelovi pumpe za dojke pravilno postavljeni. Rastavite pumpu za dojke i uverite se da su svi delovi čisti i neoštećeni. Ponovo sastavite pumpu za dojke prema

uputstvima u odeljku SASTAVLJANJE LAKTATORA. Kada pumpate, uvjerite se da je lijevak u potpunosti prislonjen na dojku.

- 3. Iz dojke je isteklo više mlijeka nego što posuda može da primi:**
koristite vlažnu (ne mokru) krpu da obrišete pumpicu za grudi .
Operite djelove pumpe za mlijeko koji drže mlijeko prema uputstvima u odeljku ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA. Kada su svi djelovi mašine suvi, ponovo sastavite.

11. SPECIFIKACIJA

Kapacitet posude za mlijeko: 210 ml

Kapacitet baterije: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Ulazna snaga: 110-240V

Izlazna snaga: 5V 1A

Vrijeme rada: do 150 min

Vrijeme punjenja: pribl. 150min

Dimenzije pumpe za grudi: 9x4,5x6 cm x2

Težina pumpe za grudi: 150 g k2

Snaga usisavanja:

1. Režim stimulacije (8 nivoa): 9-24 kPa
2. Režim duboke ekstrakcije (8 nivoa): 13-40 kPa
3. Mješoviti režim (8 nivoa): 10-24 kPa

Dozvoljena varijacija ± 5 Kpa.

12. GARANCIJSKA/ŽALBAMNA KARTICA

Proizvod dolazi sa garancijom od 24 mjeseca. Uslove garancije možete pronaći na: <https://neno.pl/gvarancja>

Detalje, kontakt i adresu servisa možete pronaći na: <https://neno.pl/kontakt>
Specifikacije i sadržaj su podložni promjeni bez prethodne najave. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti.

SI

UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Spoštovana stranka,

Naprava Neno Sole Twin, ki ste jo kupili, je dvojna, elektronska, trifazna črpalka za dojke, ki se uporablja za odvajanje materinega mleka iz ženskih dojk po porodu. Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

01. VARNOSTNI UKREPI

1. Po polnjenju napravo vedno odklopите, če baterije naprave ni treba polniti.
2. Izdelka ne postavljajte na mesto, kjer obstaja nevarnost, da pade v umivalnike, kadi ali druge posode.
3. Črpalka za dojke in njeni sestavni deli niso odporni na toploto – napravo hranite stran od vročih površin in odprtega ognja.
4. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.
5. Črpalke za dojke ne smete pustiti brez nadzora, ko je priključena na vir napajanja.
6. Nikoli ne uporabljajte naprave, če je padla ali je kako drugače poškodovana.
7. Ne uporabljajte naprave, katere napajalni kabel ali vtič je poškodovan.
8. Naprave ne uporabljajte v kadi ali pod tušem.
9. Naprave ne postavljajte pod vodo ali druge tekočine.
10. Enote ne umivajte pod tekočo vodo.
11. Naprave ne priključujte v električno vtičnico, ki je bila v stiku z vodo ali drugimi tekočinami.
12. Če je bila naprava izpostavljena vodi ali drugim tekočinam - ne dotikajte se je neposredno, jo odklopите iz napajanja, izklopите in se obrnite na proizvajalca.
13. Ta naprava je namenjena za uporabo s strani enega uporabnika. Uporaba črpalke za dojke s strani več kot ene osebe pomeni tveganje za poškodbe uporabnikov in razveljavi garancijo.
14. Enote ne popravljajte ali spreminjajte sami.
15. Črpalko za dojke uporabljajte samo, kot je opisano v navodilih. Naprave ne uporabljajte za noben drug namen.
16. Pred vsako uporabo preglejte vse sestavne dele črpalke.
17. Izpuščenega mleka ne segrevajte v mikrovalovni pečici. Mleko, segreto v mikrovalovni pečici, lahko opeče otrokov obraz, ker lahko ogrevanje z mikrovalovnimi valovi ustvari visokotemperaturne mehurčke v tekočini. Poleg tega lahko mikrovalovni valovi spremenijo sestavo mleka.
18. Med segrevanjem mleka ne zavrite.
19. Pred prvo uporabo črpalke za dojke operite in razkužite vse dele stroja, ki bodo prišli v neposreden stik z vašo dojko ali mlekom.
20. Po vsaki uporabi črpalke za dojke operite vse dele stroja, ki pridejo v neposreden stik z dojko ali mlekom.
21. Bodite še posebej previdni pri uporabi črpalke za dojke ali njenih dodatkov v bližini otrok.
22. Med polnjenjem ne uporabljajte črpalke za dojke.

02. PRED PRVO UPORABO

1. Priključite črpalko za dojke na napajalnik. Baterije polnite 2,5 ure.
2. Odstranite črpalko za dojke.
3. Odklopite dele črpalke za dojke, ki bodo prišli v neposreden stik z dojko ali mlekom: odstranite ščitnik za dojke iz posode za mleko, nato povlecite ventil navzdol in membrano navzgor, da se odklopite od priključka.
4. Očistite sestavne dele aparata (glejte poglavje ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE).

OPOMBA!

Črpalko za dojke uporabljajte v pokončnem položaju. Uporaba v katerem koli drugem položaju (npr. v ležečem položaju) bo povzročila, da se črpalka za dojke ne bo pravilno prilegala dojkam in bo mleko iztekalo.

03. ELEMENTOV

SLIKA A

1. Črpalna naprava x2
2. Posoda za mleko x2
3. Priključek x2
4. Ventil x4
5. Polnilni kabel USB-C x2
6. Ščitnik za prsi 24mm x2
7. Membrana x4
8. Reduktor za prsni ščitnik 20mm x2

04. OPIS ČRPALNE NAPRAVE

SLIKA B

1. Ikona izbranega načina (I pika - stimulacijska faza, II pike - faza globoke ekstrakcije, III pike - mešana faza).
2. Gumb za vklop - Držite gumb 2 sekundi, da vklopite ali izklopite napravo. Ko je naprava vklopljena, pritisnite za zaustavitev črpalke za dojke.
3. Spreminjanje nivoja sesanja - Pritisnite „-“, da zmanjšate sesalno moč.
4. Ikona izbranega načina (L1-L8)/čas črpalke.
5. Gumb za spremembo načina - Pritisnite gumb, da spremenite način delovanja naprave.
6. Spreminjanje ravni sesanja - Pritisnite „+“, da povečate sesalno moč.
7. Polnilna vtičnica USB-C

05. ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

Pranje in razkuževanje sta dve različni operaciji. Izvajati jih je treba ločeno, da

zaščitite svojega otroka in zagotovite, da črpalka za dojke deluje pravilno.

Pranje - pranje površine enote in odstranjevanje umazanije.

Dezinfekcija - ubijanje organizmov, kot so bakterije ali virusi, ki so lahko prisotni na površini opreme.

Ščitnik za dojke, membrana, ventil, reduktor, priključek, posoda za mleko:

Operite in razkužite - pred prvo uporabo.

Pranje - po vsaki uporabi.

Enkrat na dan in pred prvo uporabo - dezinfekcija.

A. PRANJE:

- Razstavite vse dele črpalke (razen črpalke) in jih 5 minut operite v topli milnici, nato sperite. To storite takoj po uporabi naprave. To bo odstranilo mlečne usedline in preprečilo rast bakterij.

- Za pranje uporabljajte samo pitno vodo iz pipe. Uporabite ustekleničeno vodo, če voda v pipi ne izpolnjuje te zahteve.

- Pri čiščenju silikonskih delov ne uporabljajte ščetk. Pazite, da jih ne prebodete.

- Uporabite blago sredstvo za pomivanje posode ali milo.

- Pustite, da se deli naravno posušijo. Suhe dele aparata shranjujte na hladnem in suhem mestu, ko jih ne uporabljate.

B. DEZINFEKCIJA:

Membrana, ventil, reduktor, priključek, ščitnik za dojke, posoda za mleko:

- Napolnite lonec ali sterilizator z vodo, tako da so vse komponente v notranjosti (membrana, ventil, reduktor, priključek, zaščitnik za dojke, posoda za mleko) prekrите, ko so nameščene v notranjosti. Segrejemo do vrenja.

Dele črpalke za dojke postavite v vrelo vodo za 10 minut. Ne kuhajte.

- Pustite, da se kosi naravno posušijo. Suhe izdelke shranjujte na hladnem in suhem mestu, ko jih ne uporabljate.

C. ČIŠČENJE ČRPALNE NAPRAVE:

- Črpalko obrišite z mehko, mokro krpo in blagim sredstvom za pomivanje posode/milom. Druga čistila ali abrazivna sredstva lahko poškodujejo enoto in njen zaslon.

- Če črpalke ne uporabljate, jo shranite na hladnem in suhem mestu.

06. MONTAŽA IN UPORABA ČRPALKE ZA DOJKE

SLIKA C

Pritrdite komponente, kot je prikazano na slikah C 1-5.

OPOMBA: Preden se dotaknete črpalke in dojke, temeljito si umijte roke z milom in vodo.

1. Vstavite membrano v priključek. **SLIKA C1.**
2. Priključite ventil na priključek. **SLIKA C2. POZOR:** Ventil je treba pritrditi z daljšim delom proti prsnemu ščitniku. Za pregled: **SLIKA C6.**
3. Priključek z membrano in ventilom pritrdite na posodo za mleko, začeniši z namestitvijo membrane v utor. **SLIKA C3.**
4. Postavite ščitnik za dojke v posodo za mleko. **SLIKA C4.**
5. Črpalno napravo pritrdite na vrh posode za mleko. **SLIKA C5.**
6. Prsni ščitnik položite na prsi tako, da je bradavica znotraj drenažnega kanala. S palcem in kazalcem pritisnite ščitnik za dojke in priključek črpalke za dojke. **SLIKA C6.**
7. Vstavite črpalno za dojke v nedrček / steznik za dojenje. **SLIKA C7.**
8. Vključite črpalno za dojke s pritiskom na gumb za vklop in izberite način delovanja, ki vam ustreza.
9. Če želite naliti mleko, držite črpalno za dojke vodoravno in previdno odvijte črpalno **SLIKA C8.** Posodo za mleko držite tako, da je prsni ščitnik obrnjen navzgor - položite jo ravno na mizo (ne položite navzgor, da preprečite iztekanje mleka). **SLIKA C9.** Previdno nalijte mleko v steklenico/posodo za shranjevanje. **SLIKA C10.**
10. Po uporabi odstranite in očistite vse sestavne dele črpalke za dojke. **SLIKA C11.**

OPOMBE:

- a. Pred vsako uporabo preverite, ali so deli črpalke za dojke poškodovani. Po potrebi zamenjajte poškodovane dele z novimi.
- b. Pred uporabo enote vedno preverite čistočo komponent.
- c. Če je premer prsnega ščitnika prevelik, uporabite priloženi reductor tako, da ga vstavite v notranjost. **SLIKA C12.**

OPOMBE:

Črpalna za dojke se zažene v načinu stimulacije. Nastavite stopnjo sesalne moči, ki vam ustreza z gumbi +/-:

- Način stimulacije - hitro črpanje, ki posnema naravno sesanje materinega mleka vašega otroka, da spodbudi pretok mleka. Po 2 minutah bo črpalna za dojke samodejno aktivirala način globokega črpanja. Prilagodite raven sesanja z gumbi +/-, da poiščete najvišjo stopnjo sesanja, ki vam ustreza. Če mleko začne teči iz dojke pred pretekom dveh minut, pritisnite gumb za spremembo načina, da ročno preklopite v način globoke ekstrakcije.
- Način globokega črpanja - počasnejše črpanje, ki nežno in učinkovito sesa mleko iz dojk. V tem načinu povečajte sesanje, dokler ne začutite rahlega nelagodja (ne bolečine) in zmanjšajte sesanje za eno stopinjo.
- Mešani način - posnema otrokov sesalni refleks. Lahko se uporablja po črpanju za pomoč pri praznjenju dojk in povečanju laktacije.

07. POLNJENJE ČRPALKE ZA DOJKE

Baterijo črpalke za dojke popolnoma napolnite, preden jo shranite, če naprave ne nameravate uporabljati dlje časa. Napolnite baterijo naprave, preden se popolnoma izprazni. To podaljša življenjsko dobo baterije. Če je bila črpalka za dojke shranjena na vročem mestu, baterija naprave morda sprva ne bo delovala. Pustite, da se črpalka ohladi eno uro, preden jo začnete uporabljati.

Označbe:

LO - prikaže, če je raven napolnjenosti baterije nižja od 20%. **SLIKA D1.**

Utripajoče pike - črpalka za dojke pod polnjenjem. **SLIKA D2.**

Tri pike neprekinjeno svetijo - baterija je popolnoma napolnjena. **SLIKA D3.**

Med polnjenjem ne uporabljajte črpalke za dojke.

08. ZAMENJAVA POTROŠNEGA MATERIALA

Potrošni sestavni deli so med delovanjem črpalke podvrženi naravni obrabi in zato niso zajeti v garanciji proizvajalca.

Obrabljene sestavne dele črpalke za dojke, ki pridejo v stik z mlekom, je treba zamenjati. Obrabljena komponenta ima razpoko, deformacijo, potemnitev ali izrazito spremembo barve.

- Membrano je treba zamenjati vsakih 8 tednov (če črpalko uporabljate 1-3 krat na dan) ali vsake 3-4 tedne (če črpalko uporabljate več kot 3-krat na dan).
- Ventil je treba zamenjati vsake 2-3 mesece (če črpalko uporabljate 1-3 krat na dan) ali vsake 4 tedne (če črpalko uporabljate več kot 3-krat na dan).
- Ščitnik za dojke in priključek je treba zamenjati vsakih 6 mesecev, če črpalko uporabljate več kot 3-krat na dan.

09. DOLGOROČNO SKLADIŠČENJE

Črpalka za dojke ima vgrajeno baterijo za polnjenje. Da bi se zaščitila pred poškodbami, naprava po dolgem obdobju nedejavnosti preide v način shranjevanja. Če želite deaktivirati način shranjevanja, priključite napravo na napajanje in jo polnite 2 uri. Preden črpalko za daljše časovno obdobje odložite, se prepričajte, da:

- Vse komponente črpalke za dojke so čiste.
- Očistili ste črpalno napravo.
- Baterija naprave je popolnoma napolnjena.

10. FAQ

1. **Naprava se ne zažene:** prepričajte se, da je črpalka za dojke priključena na delujočo električno vtičnico. Če črpalka za dojke nima

vira napajanja, se njen zaslon ne bo vklopil in se ne prikaže nobeno sporočilo o napaki.

2. **Ne/slabo sesanje:** prepričajte se, da so vsi deli črpalke pravilno nameščeni. Črpalke za dojke razstavite in se prepričajte, da so vsi deli čisti in nepoškodovani. Ponovno sestavite črpalke za dojke v skladu z navodili v razdelku MONTAŽA LAKTATORJEV. Pri črpanju se prepričajte, da je lijak popolnoma pritrjen na prsi.
3. **Iz dojke je priteklo več mleka, kot ga lahko sprejme posoda:** uporabite vlažno (ne mokro) krpo, da obrišete črpalke za dojke. Operite dele črpalke, ki vsebujejo mleko, v skladu z navodili v poglavju ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE. Ko so vsi deli stroja suhi, jih ponovno sestavite.

11. SPECIFIKACIJA

Prostornina posode za mleko: 210ml

Zmogljivost baterije: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Vhodna moč: 110-240V

Izhodna moč: 5V 1A

Čas delovanja: do 150min

Čas polnjenja: približno 150 min

Dimenzije črpalke: 9x4,5x6 cm x2

Teža črpalke: 150g x2

Sesalna moč:

1. Način stimulacije (8 stopenj): 9-24 kPa
2. Način globoke ekstrakcije (8 stopenj): 13-40 kPa
3. Mešani način (8 stopenj): 10-24 kPa

Dovoljeno odstopanje ± 5 Kpa.

12. GARANCIJA/REKLAMACIJSKI LIST

Izdelek ima 24-mesečno garancijo. Garancijske pogoje najdete na:

<https://nen.pl/gwarancja>

Podrobnosti, kontaktni in servisni naslov najdete na:

<https://nen.pl/kontakt>

Specifikacije in vsebina se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Opravičujemo se za morebitne nevednosti.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,

Η συσκευή Neno Sole Twin που έχετε αγοράσει είναι ένα διπλό, ηλεκτρονικό, τριφασικό θήλαστρο που χρησιμοποιείται για την άντληση μητρικού γάλακτος από το στήθος μιας γυναίκας μετά τον τοκετό. Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

01. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά τη φόρτιση, εάν δεν χρειάζεται να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής.
2. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημείο που κινδυνεύει να πέσει σε νεροχύτες, μπανιέρες ή άλλα δοχεία.
3. Το θήλαστρο και τα εξαρτήματά του δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα – κρατήστε τη συσκευή μακριά από θερμές επιφάνειες και ανοιχτές φλόγες.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
5. Το θήλαστρο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν συνδέεται με πηγή τροφοδοσίας.
6. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή καταστραφεί με άλλο τρόπο.
7. Μην χρησιμοποιείτε συσκευή της οποίας το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή το ντους.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από το νερό ή σε άλλα υγρά.
10. Μην πλένετε τη μονάδα με τρεχούμενο νερό.
11. Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα που έχει έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
12. Εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε νερό ή άλλα υγρά - μην αγγίζετε απευθείας τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος, απενεργοποιήστε την και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
13. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από έναν μόνο χρήστη. Η χρήση του θήλαστρου από περισσότερα από ένα άτομα ενέχει κίνδυνο βλάβης στους χρήστες και ακυρώνει την εγγύηση.
14. Μην επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη μονάδα μόνοι σας.
15. Χρησιμοποιείτε το θήλαστρο μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

16. Επιθεωρήστε όλα τα εξαρτήματα του θήλαστρου πριν από κάθε χρήση.
17. Μην θερμαίνετε το εκκενωμένο γάλα στο φούρνο μικροκυμάτων. Το γάλα που θερμαίνεται σε φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να κάψει το πρόσωπο του μωρού, επειδή η θέρμανση με κύματα μικροκυμάτων μπορεί να δημιουργήσει φυσαλίδες υψηλής θερμοκρασίας στο υγρό. Επιπλέον, τα κύματα μικροκυμάτων μπορούν να αλλάξουν τη σύνθεση του γάλακτος.
18. Μην φέρνετε το γάλα σε βρασμό ενώ το θερμαίνετε.
19. Πριν χρησιμοποιήσετε το θήλαστρο για πρώτη φορά, πλύνετε και απολυμάνετε όλα τα μέρη του μηχανήματος που θα έρθουν σε άμεση επαφή με το στήθος ή το γάλα σας.
20. Μετά από κάθε χρήση του θήλαστρου, πλύνετε όλα τα μέρη του μηχανήματος που έρχονται σε άμεση επαφή με το στήθος ή το γάλα σας.
21. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε το θήλαστρο ή τα αξεσουάρ του κοντά σε παιδιά.
22. Μην χρησιμοποιείτε το θήλαστρο κατά τη φόρτιση.

02. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Συνδέστε το θήλαστρο στο τροφοδοτικό. Φορτίστε τις μπαταρίες για 2,5 ώρες.
2. Αφαιρέστε το θήλαστρο.
3. Αποσυνδέστε τα μέρη του θήλαστρου που θα έρθουν σε άμεση επαφή με το στήθος ή το γάλα: αφαιρέστε το προστατευτικό στήθους από το δοχείο γάλακτος και, στη συνέχεια, τραβήξτε τη βαλβίδα προς τα κάτω και τη μεμβράνη προς τα πάνω για να αποσυνδεθείτε από τον σύνδεσμο.
4. Καθαρίστε τα εξαρτήματα της συσκευής (ανατρέξτε στην ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Χρησιμοποιήστε το θήλαστρο σε όρθια θέση. Η χρήση σε οποιαδήποτε άλλη θέση (π.χ. ξαπλωμένη) θα έχει ως αποτέλεσμα το θήλαστρο να μην εφαρμόζει σωστά στο στήθος και να διαρρέει γάλα.

03. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΧΗΜΑ Α

1. Συσκευή άντλησης x2
2. Δοχείο γάλακτος x2
3. Συνδετήρας x2

4. Βαλβίδα x4
5. Καλώδιο φόρτισης USB-C x2
6. Ασπίδα στήθους 24mm x2
7. Μembrάνη x4
8. Μειωτής ασπίδας στήθους 20mm x2

04. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΆΝΤΛΗΣΗΣ

ΣΧΗΜΑ Β

1. Εικονίδιο της επιλεγμένης λειτουργίας (I dot - φάση διέγερσης, II κουκκίδες - βαθιά φάση εξαγωγής, III κουκκίδες - μικτή φάση).
2. Κουμπί λειτουργίας - Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε για παύση του θήλαστρου.
3. Αλλαγή του επιπέδου αναρρόφησης - Πατήστε «-» για να μειώσετε την ισχύ αναρρόφησης.
4. Εικονίδιο της επιλεγμένης λειτουργίας (L1-L8)/ώρα του θήλαστρου.
5. Κουμπί αλλαγής λειτουργίας - Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας.
6. Αλλαγή του επιπέδου αναρρόφησης - Πατήστε «+» για να αυξήσετε την ισχύ αναρρόφησης.
7. Υποδοχή φόρτισης USB-C

05. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Το πλύσιμο και η απολύμανση είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες. Πρέπει να πραγματοποιούνται ξεχωριστά για την προστασία του μωρού σας και για να διασφαλιστεί ότι το θήλαστρο λειτουργεί σωστά.

Πλύσιμο - πλύσιμο της επιφάνειας της μονάδας και αφαίρεση βρωμιάς.

Απολύμανση - θανάτωση οργανισμών όπως βακτήρια ή ιοί που μπορεί να υπάρχουν στην επιφάνεια του εξοπλισμού.

Ασπίδα στήθους, μεμβράνη, βαλβίδα, μειωτήρας, σύνδεσμος, δοχείο γάλακτος:

Πλύνετε και απολυμάνετε - πριν από την πρώτη χρήση.

Πλύνετε - μετά από κάθε χρήση.

Μία φορά την ημέρα και πριν από την πρώτη χρήση - απολύμανση.

A. ΜΠΟΥΓΑΔΑ:

- Αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη του θήλαστρου (εκτός από τη συσκευή άντλησης) και πλύνετε με ζεστό σαπουνόνερο για 5 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλύνετε. Κάντε αυτό αμέσως μετά τη χρήση του μηχανήματος. Αυτό θα αφαιρέσει τις εναποθέσεις γάλακτος και θα αποτρέψει την ανάπτυξη βακτηρίων.

- Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό βρύσης για πλύσιμο. Χρησιμοποιήστε εμφιαλωμένο νερό εάν το νερό στη βρύση σας δεν πληροί αυτήν την απαίτηση.
- Όταν καθαρίζετε μέρη σιλικόνης, μην χρησιμοποιείτε βούρτσες. Προσέξτε να μην τα τρυπήσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο υγρό πιάτων ή σαπούνι.
- Αφήστε τα μέρη να στεγνώσουν φυσικά. Αποθηκεύστε τα στεγνά μέρη της συσκευής σε δροσερό, ξηρό μέρος όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

B. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

Μεμβράνη, βαλβίδα, μειωτήρας, σύνδεσμος, ασπίδα στήθους, δοχείο γάλακτος:

- Γεμίστε την κατασρόλα ή τον αποστειρωτή με νερό έτσι ώστε όλα τα εξαρτήματα στο εσωτερικό (μεμβράνη, βαλβίδα, μειωτήρας, σύνδεσμος, ασπίδα στήθους, δοχείο γάλακτος) να καλύπτονται όταν τοποθετούνται μέσα. Φέρτε σε βρασμό. Τοποθετήστε τα μέρη του θήλαστρου σε βραστό νερό για 10 λεπτά. Μην βράζετε.
- Αφήστε τα κομμάτια να στεγνώσουν φυσικά. Αποθηκεύστε τα στεγνά αντικείμενα του κιτ σε δροσερό, ξηρό μέρος όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

C. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΆΝΤΛΗΣΗΣ:

- Σκουπίστε τη μονάδα αντλίας με ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα ήπιο υγρό/σαπούνι πιάτων. Άλλα καθαριστικά ή λειαντικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα και την οθόνη της.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μονάδα αντλίας, αποθηκεύστε την σε δροσερό, ξηρό μέρος.

06. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ

ΣΧΗΜΑ Γ

Συνδέστε τα εξαρτήματα όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ C 1-5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό πριν αγγίξετε το θήλαστρο και το στήθος.

1. Τοποθετήστε τη μεμβράνη στο βύσμα. **ΣΧΗΜΑ Γ1.**
2. Συνδέστε τη βαλβίδα στο βύσμα. **ΣΧΗΜΑ Γ2. ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η βαλβίδα πρέπει να στερεώνεται με το μακρύτερο τμήμα της προς την ασπίδα στήθους. Για μια επισκόπηση: **ΣΧΗΜΑ C6.**
3. Συνδέστε το βύσμα με τη μεμβράνη και τη βαλβίδα στο δοχείο γάλακτος, ξεκινώντας τοποθετώντας τη μεμβράνη στην αυλάκωση. **ΣΧΗΜΑ Γ3.**
4. Τοποθετήστε το προστατευτικό στήθους στο δοχείο γάλακτος. **ΣΧΗΜΑ Γ4.**

5. Συνδέστε τη συσκευή άντλησης στην κορυφή του δοχείου γάλακτος. **ΣΧΗΜΑ Γ5.**
6. Τοποθετήστε την ασπίδα στήθους στο στήθος σας έτσι ώστε η θηλή να βρίσκεται μέσα στο κανάλι αποστράγγισης. Πιέστε την ασπίδα στήθους και τον σύνδεσμο θήλαστρου στο στήθος σας χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα και τον δείκτη. **ΣΧΗΜΑ Γ6.**
7. Τοποθετήστε το θήλαστρο στον κορσέ στηθόδεσμο/γαλουχία. **ΣΧΗΜΑ Γ7.**
8. Ενεργοποιήστε το θήλαστρο πατώντας το κουμπί λειτουργίας και επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας που σας ταιριάζει.
9. Για να χύσετε το γάλα, κρατήστε το θήλαστρο οριζόντια και ξεβιδώστε προσεκτικά την αντλία **ΣΧΗΜΑ C8.** Κρατήστε το δοχείο γάλακτος με το προστατευτικό στήθους στραμμένο προς τα πάνω - τοποθετήστε το επίπεδο στην επιφάνεια του τραπέζιού (μην το βάζετε προς τα πάνω για να αποτρέψετε τη ροή του γάλακτος). **ΣΧΗΜΑ C9.** Ρίξτε προσεκτικά το γάλα στη φιάλη/δοχείο αποθήκευσης. **ΣΧΗΜΑ C10.**
10. Αφαιρέστε και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα του θήλαστρου μετά τη χρήση. **ΣΧΗΜΑ C11.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- a. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τα μέρη του θήλαστρου για ζημιές. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα με καινούργια.
- b. Ελέγχετε πάντα την καθαριότητα των εξαρτημάτων πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
- c. Εάν η διάμετρος του προστατευτικού στήθους είναι πολύ μεγάλη, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο μειωτήρα εισάγοντάς τον μέσα. **ΣΧΗΜΑ Γ12.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Το θήλαστρο ξεκινά σε λειτουργία διέγερσης. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος αναρρόφησης άνετα για εσάς χρησιμοποιώντας τα κουμπιά +/-:

- Λειτουργία διέγερσης - γρήγορη άντληση που μιμείται το φυσικό πιπίλισμα του μητρικού γάλακτος του μωρού σας για την τόνωση της ροής του γάλακτος. Μετά από 2 λεπτά, το θήλαστρο θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία βαθιάς άντλησης. Ρυθμίστε το επίπεδο αναρρόφησης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά +/- για να βρείτε το υψηλότερο επίπεδο αναρρόφησης που είναι άνετο για εσάς. Εάν το γάλα αρχίσει να ρέει από το στήθος σας πριν περάσουν δύο λεπτά, πατήστε το κουμπί αλλαγής λειτουργίας για να μεταβείτε χειροκίνητα στη λειτουργία βαθιάς εξαγωγής.
- Λειτουργία βαθιάς άντλησης - πιο αργή άντληση που απορροφά απαλά

και αποτελεσματικά το γάλα από το στήθος. Σε αυτή τη λειτουργία, αυξήστε την αναρρόφηση μέχρι να αισθανθείτε ελαφρά δυσφορία (όχι πόνο) και μειώστε την αναρρόφηση κατά ένα βαθμό.

- Μικτή λειτουργία - μιμείται το αντανακλαστικό πιπίλισμα του μωρού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την άντληση για να βοηθήσει στην εκκένωση του μαστού και στην αύξηση της γαλουχίας.

07. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ

Φορτίστε πλήρως την μπαταρία του θήλαστρου πριν την αποθηκεύσετε εάν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε την μπαταρία της συσκευής πριν εξαντληθεί εντελώς. Αυτό επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Εάν το θήλαστρο έχει αποθηκευτεί σε ζεστό μέρος, η μπαταρία της συσκευής ενδέχεται να μην λειτουργεί αρχικά. Αφήστε το θήλαστρο να κρυώσει για μία ώρα πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

Ενδείξεις:

LO - εμφανίζει εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι κάτω από 20%. **ΣΧΗΜΑ Δ1.**

Αναβοσβήνει κουκκίδες - θήλαστρο υπό φόρτιση. **ΣΧΗΜΑ Δ2.**

Τρεις κουκκίδες λάμπουν συνεχώς - μπαταρία πλήρως φορτισμένη.

ΣΧΗΜΑ Δ3.

Μην χρησιμοποιείτε το θήλαστρο κατά τη φόρτιση.

08. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Τα αναλώσιμα εξαρτήματα υπόκεινται σε φυσική φθορά κατά τη λειτουργία του θήλαστρου και επομένως δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

Τα φθαρμένα εξαρτήματα του θήλαστρου που έρχονται σε επαφή με το γάλα πρέπει να αντικατασταθούν. Ένα φθαρμένο εξάρτημα έχει ρωγμή, παραμόρφωση, αμαύρωση ή σαφή αλλαγή χρώματος.

- Η μεμβράνη πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 8 εβδομάδες (εάν χρησιμοποιείτε το θήλαστρο 1-3 φορές την ημέρα) ή κάθε 3-4 εβδομάδες (εάν χρησιμοποιείτε το θήλαστρο περισσότερες από 3 φορές την ημέρα).
- Η βαλβίδα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2-3 μήνες (εάν χρησιμοποιείτε το θήλαστρο 1-3 φορές την ημέρα) ή κάθε 4 εβδομάδες (εάν χρησιμοποιείτε το θήλαστρο περισσότερες από 3 φορές την ημέρα).
- Η ασπίδα στήθους και ο σύνδεσμος πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 6 μήνες εάν χρησιμοποιείτε το θήλαστρο περισσότερες από 3 φορές την ημέρα.

09. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το θήλαστρο διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για να προστατευθεί από ζημιές, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία αποθήκευσης μετά από μακρά περίοδο αδράνειας. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης, συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία και φορτίστε την για 2 ώρες. Πριν αφήσετε το θήλαστρο μακριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι:

- Όλα τα εξαρτήματα του θήλαστρου είναι καθαρά.
- Έχετε καθαρίσει τη συσκευή άντλησης.
- Η μπαταρία της συσκευής είναι πλήρως φορτισμένη.

10. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. **Η συσκευή δεν ξεκινά:** βεβαιωθείτε ότι το θήλαστρο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που λειτουργεί. Εάν το θήλαστρο δεν έχει πηγή τροφοδοσίας, η οθόνη του δεν θα ενεργοποιηθεί και δεν θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.
2. **Όχι/κακή αναρρόφηση:** βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του θήλαστρου έχουν τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε το θήλαστρο και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και άθικτα. Επανασυναρμολογήστε το θήλαστρο σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα LACTATOR ASSEMBLY. Κατά την άντληση, βεβαιωθείτε ότι η χοάνη είναι πλήρως τοποθετημένη στο στήθος.
3. **Περισσότερο γάλα έχει ρέει από το στήθος από ό, τι μπορεί να χωρέσει το δοχείο:** χρησιμοποιήστε ένα υγρό (όχι υγρό) πανί για να σκουπίσετε το θήλαστρο. Πλύνετε τα μέρη του θήλαστρου που συγκρατούν το γάλα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ. Όταν όλα τα μέρη του μηχανήματος είναι στεγνά, επανασυναρμολογήστε.

11. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος: 210ml

Χωρητικότητα μπαταρίας: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Δύναμη εισαγωγής: 110-240V

Δύναμη παραγωγής: 5V 1A

Χρόνος λειτουργίας: έως 150min

Χρόνος φόρτισης: περίπου 150 λεπτά

Διαστάσεις θήλαστρου: 9x4,5x6 cm x2

Βάρος θήλαστρου: 150g x2

ΙΣΧΗΜΑΨ αναρρόφησης:

1. Λειτουργία διέγερσης (8 επίπεδα): 9-24 kPa

2. Λειτουργία βαθιάς εξαγωγής (8 επίπεδα): 13-40 kPa

3. Μικτή λειτουργία (8 επίπεδα): 10-24 kPa

Επιτρεπόμενη διακύμανση ± 5 Kpa.

12. ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση 24 μηνών. Μπορείτε να βρείτε τους

όρους εγγύησης στη διεύθυνση: <https://neno.pl/gwarancja>

Λεπτομέρειες, διεύθυνση επικοινωνίας και εξυπηρέτησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: <https://neno.pl/kontakt>

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία.

LV

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Cienījamie klienti,

Jūsu iegādātā Neno Sole Twin ierīce ir divfāžu elektronisks, trīsfāžu krūts sūknis, ko izmanto, lai pēc dzemdībām izvadītu mātes pienu no sievietes krūts. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

01. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Pēc uzlādes vienmēr atvienojiet ierīci, ja nav nepieciešams uzlādēt ierīces akumulatoru.
2. Nenovietojiet produktu vietās, kur tam draud iekrist izlietnēs, vannās vai citos traukos.
3. Krūts sūknis un tā sastāvdaļas nav karstumizturīgas – turiet ierīci prom no karstām virsmām un atklātām liesmām.
4. Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošo materiālu tuvumā.
5. Krūts sūknī nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tas ir pievienots strāvas avotam.
6. Nekad nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi vai citādi bojāta.
7. Nelietojiet ierīci, kuras strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta.
8. Nelietojiet ierīci vannā vai dušā.
9. Nenovietojiet ierīci zem ūdens vai citos šķidrumos.
10. Nemazgājiet ierīci zem tekoša ūdens.
11. Nepievienojiet ierīci strāvas kontaktlīdžai, kas ir bijusi saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.

12. Ja ierīce ir bijusi pakļauta ūdenim vai citiem šķidrumiem - nepieskarieties ierīcei tieši, atvienojiet to no strāvas avota, izslēdziet to un sazinieties ar ražotāju.
13. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai vienam lietotājam. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi.
14. Neremontējiet un nemodificējiet ierīci pats.
15. Izmantojiet krūts sūkni tikai tā, kā aprakstīts instrukcijās. Nelietojiet ierīci citiem mērķiem.
16. Pārbaudiet visas krūts sūkņa sastāvdaļas pirms katras lietošanas.
17. Nekarsējiet izplūdušo pienu mikroviļņu krāsnī. Mikroviļņu krāsnī sildīts piens var sadedzināt mazuļa seju, jo sildīšana ar mikroviļņu viļņiem šķidrumā var radīt augstas temperatūras burbulus. Turklāt mikroviļņu viļņi var mainīt piena sastāvu.
18. Karsējot neuzkarsējiet pienu.
19. Pirms krūts sūkņa lietošanas pirmo reizi nomazgājiet un dezinficējiet visas mašīnas daļas, kas nonāks tiešā saskarē ar krūti vai pienu.
20. Pēc katras krūts sūkņa lietošanas mazgājiet visas mašīnas daļas, kas nonāk tiešā saskarē ar krūti vai pienu.
21. Esiet īpaši piesardzīgs, lietojot krūts sūkni vai tā piederumus bērnu tuvumā.
22. Uzlādes laikā nelietojiet krūts sūkni.

02. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

1. Pievienojiet krūts sūkni barošanas avotam. Uzlādējiet baterijas 2,5 stundas.
2. Noņemiet krūts sūkni.
3. Atvienojiet krūts sūkņa daļas, kas nonāks tiešā saskarē ar krūti vai pienu: noņemiet krūšu vairogu no piena trauka, pēc tam velciet vārstu uz leju un membrānu uz augšu, lai atvienotu no savienotāja.
4. Notīriet ierīces sastāvdaļas (skatīt sadaļu TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA).

PIEZĪME!

Izmantojiet krūts sūkni vertikālā stāvoklī. Lietojot jebkurā citā stāvoklī (piemēram, guļus), krūts sūknis nepieguļ krūtīm un izplūst piens.

03. ELEMENTI

ATTĒLS A

1. Sūkņēšanas ierīce x2
2. Piena trauks x2
3. Savienotājs x2
4. Vārsts x4
5. USB-C uzlādes kabelis x2

6. Krūšu vairogs 24mm x2
7. Membrāna x4
8. Krūšu vairoga reduktors 20mm x2

04. SŪKNĒŠANAS IERĪCES APRAKSTS

ATTĒLS B

1. Izvēlētā režīma ikona (I punkts - stimulācijas fāze, II punkti - dziļās ekstrakcijas fāze, III punkti - jauktā fāze).
2. Barošanas poga - turiet pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet, lai apturētu krūts sūkni.
3. Sūkšanas līmeņa maiņa - nospiediet „-“, lai samazinātu sūkšanas jaudu.
4. Izvēlētā režīma ikona (L1-L8)/krūts sūkņa laiks.
5. Režīma maiņas poga - nospiediet pogu, lai mainītu ierīces darbības režīmu.
6. Sūkšanas līmeņa maiņa - nospiediet „+“, lai palielinātu sūkšanas jaudu.
7. USB-C uzlādes ligzda

05. TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA

Mazgāšana un dezinfekcija ir divas dažādas darbības. Tie jāveic atsevišķi, lai aizsargātu jūsu bērnu un nodrošinātu krūts sūkņa pareizu darbību. Mazgāšana - ierīces virsmas mazgāšana un netīrumu noņemšana. Dezinfekcija - nogalina organismus, piemēram, baktērijas vai vīrusus, kas var būt uz iekārtas virsmas.

Krūšu vairogs, membrāna, vārsts, reduktors, savienotājs, piena trauks:

Nomazgājiet un dezinficējiet - pirms pirmās lietošanas.

Mazgājiet - pēc katras lietošanas reizes.

Reizi dienā un pirms pirmās lietošanas - dezinfekcija.

A. MAZGĀJOT:

- Izjauciet visas krūts sūkņa daļas (izņemot sūkņēšanas ierīci) un 5 minūtes nomazgājiet siltā ziepjūdenī, pēc tam noskalojiet. Dariet to tūlīt pēc mašīnas lietošanas. Tas novērsīs piena nogulsnes un novērsīs baktēriju augšanu.
- Mazgāšanai izmantojiet tikai dzeramo krāna ūdeni. Izmantojiet pudelēs pildītu ūdeni, ja ūdens krānā neatbilst šai prasībai.
- Tīrot silikona detaļas, nelietojiet suku. Esiet uzmanīgi, lai tos necaurdurta.
- Izmantojiet maigu trauku mazgāšanas līdzekli vai ziepes.
- Ļaujiet detaļām dabiski nožūt. Uzglabājiet sausas ierīces detaļas vēsā, sausā vietā, kad tās nelietojat.

B. DEZINFEKCIJAS:

Membrāna, vārsts, reduktors, savienotājs, krūšu vairogs, piena trauks:

- Piepildiet katlu vai sterilizatoru ar ūdeni tā, lai visas iekšpusē esošās sastāvdaļas (membrāna, vārsts, reduktors, savienotājs, krūšu vairogs, piena trauks) būtu nosegtas, ievietojot iekšā. Uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai. Ievietojiet krūts sūkņa daļas verdošā ūdenī uz 10 minūtēm. Nevāriet.
- Ļaujiet gabaliem dabiski nožūt. Uzglabājiet sausos komplekta priekšmetus vēsā, sausā vietā, kad tos neizmantojat.

C. SŪKNĒŠANAS IERĪCES TĪRĪŠANA:

- Noslaukiet sūkņa bloku ar mikstu, mitru drānu un maigu trauku mazgāšanas līdzekli/ziepēm. Citi tīrīšanas līdzekļi vai abrazīvi var sabojāt ierīci un tā displeju.
- Nelietojot sūkņa bloku, uzglabājiet to vēsā, sausā vietā.

06. KRŪTS SŪKŅA MONTĀŽA UN LIETOŠANA

C ATTĒLS

Pievienojiet sastāvdaļas, kā parādīts C 1-5. attēlā.

PIEZĪME: Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni pirms pieskaršanās krūts sūknim un krūtīm.

1. Ievietojiet membrānu savienotājā. **C1. ATTĒLS.**
2. Pievienojiet vārstu savienotājam. **C2. ATTĒLS. UZMANĪBU:** Vārsts jāpiestiprina ar garāko daļu pret krūšu vairogu. Pārskats: **C6. ATTĒLS.**
3. Piestipriniet savienotāju ar membrānu un vārstu piena traukam, sākot ar membrānas ievietošanu rievā. **C3. ATTĒLS.**
4. Ievietojiet krūšu vairogu piena traukā. **C4. ATTĒLS.**
5. Pievienojiet sūknēšanas ierīci piena tvertnes augšdaļai. **C5. ATTĒLS.**
6. Novietojiet krūšu vairogu uz krūts tā, lai krūtsgals būtu drenāžas kanālā. Nospiediet krūšu vairogu un krūts sūkņa savienotāju pret krūti, izmantojot īkšķi un rādītājpirkstu. **C6. ATTĒLS.**
7. Ievietojiet krūts sūkni krūštūrī/zīdīšanas korsetē. **C7. ATTĒLS.**
8. Ieslēdziet krūts sūkni, nospiežot barošanas pogu, un izvēlieties sev piemērotāko darbības režīmu.
9. Lai ieliētu pienu, turiet piensūkni horizontāli un uzmanīgi atskrūvējiet sūkni **C8 attēls**. Turiet piena trauku ar krūšu vairogu uz augšu - novietojiet to uz galda virsmas (nenovietojiet to uz augšu, lai novērstu piena izplūsti). **C9. ATTĒLS.** Uzmanīgi ielejiet pienu pudelē/uzglabāšanas traukā. **C10. ATTĒLS.**
10. Pēc lietošanas noņemiet un notīriet visas krūts sūkņa sastāvdaļas. **C11. ATTĒLS.**

PIEZĪMES:

- a. Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai krūts sūkņa daļas nav bojātas. Ja nepieciešams, nomainiet bojātās detaļas ar jaunām.
- b. Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet komponentu tīrību.
- c. Ja krūšu vairoga diametrs ir pārāk liels, izmantojiet piegādāto reduktoru, ievietojot to iekšā. **C12. ATTĒLS.**

PIEZĪMES:

Krūts sūknis sākas stimulācijas režīmā. Iestatiet sev ērtu sūkšanas stiprības līmeni, izmantojot +/- pogas:

- Stimulācijas režīms - ātra sūknēšana, kas atdarina jūsu mazuļa dabisko mātes piena sūkšanu, lai stimulētu piena plūsmu. Pēc 2 minūtēm krūts sūknis automātiski aktivizēs dzijās sūknēšanas režīmu. Pielāgojiet sūkšanas līmeni, izmantojot +/- pogas, lai atrastu visaugstāko sev ērtu sūkšanas līmeni. Ja piens sāk plūst no krūts pirms divām minūtēm, nospiediet režīma maiņas pogu, lai manuāli pārslēgtos uz dzijās ekstrakcijas režīmu.

- Dzijās sūknēšanas režīms - lēnāka sūknēšana, kas maigi un efektīvi sūc pienu no krūts. Šajā režīmā palieliniet sūkšanu, līdz jūtat nelielu diskomfortu (nevis sāpes) un samaziniet sūkšanu par vienu grādu.

- Jauktais režīms - atdarina mazuļa nepieredzēšanas refleksu. Var lietot pēc sūknēšanas, lai palīdzētu iztukšot krūti un palielinātu laktāciju.

07. KRŪTS SŪKŅA UZLĀDE

Pilnībā uzlādējiet krūts sūkņa akumulatoru pirms uzglabāšanas, ja plānojat nelielot ierīci ilgu laiku. Uzlādējiet ierīces akumulatoru, pirms tas ir pilnībā izsmelts. Tas pagarina akumulatora kalpošanas laiku. Ja krūts sūknis ir uzglabāts karstā vietā, ierīces akumulators sākamā var nedarboties. Pirms sākat to lietot, ļaujiet krūts sūknim vienu stundu atdzist.

Norādes:

LO - parāda, vai akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 20%. **D1. ATTĒLS.**

Mirgojoši punkti - krūts sūknis uzlādē. **D2. ATTĒLS.**

Trīs punkti, kas nepārtraukti spīd - akumulators pilnībā uzlādēts. **D3. ATTĒLS.** Uzlādes laikā nelielotiet krūts sūkni.

08. PALĪGMATERIĀLU NOMAIŅA

Palīgmateriālu sastāvdaļas krūts sūkņa darbības laikā ir pakļautas dabiskam nodilumam, tāpēc uz tām neattiecas ražotāja garantija.

Jānomaina nelielotās krūts sūkņa sastāvdaļas, kas nonāk saskarē ar pienu. Nelielotai sastāvdaļai ir plaša, deformācija, aptraipīšana vai izteikta krāsas maiņa.

- Membrāna jānomaina ik pēc 8 nedēļām (ja lietojat krūts sūkni 1-3

reizes dienā) vai ik pēc 3-4 nedēļām (ja lietojat krūts sūkni vairāk nekā 3 reizes dienā).

- Vārsts jānomaina ik pēc 2-3 mēnešiem (ja lietojat krūts sūkni 1-3 reizes dienā) vai ik pēc 4 nedēļām (ja lietojat krūts sūkni vairāk nekā 3 reizes dienā).
- Krūšu vairogs un savienotājs jānomaina ik pēc 6 mēnešiem, ja krūts sūkni lietojat vairāk nekā 3 reizes dienā.

09. ILGSTOŠA UZGLABĀŠANA

Krūts sūknim ir iebūvēts uzlādējams akumulators. Lai pasargātu sevi no bojājumiem, ierīce pēc ilgstošas neaktivitātes pāriet uzglabāšanas režīmā. Lai deaktivizētu atmiņas režīmu, pievienojiet ierīci strāvai un uzlādējiet to 2 stundas. Pirms novietošanas krūts sūkni uz ilgu laiku, pārliedzieties, ka:

- Visas krūts sūkņa sastāvdaļas ir tīras.
- Jūs esat iztīrījis sūknēšanas ierīci.
- Ierīces akumulators ir pilnībā uzlādēts.

10. FAQ

1. **Ierīce neiedarbinās:** pārliedzieties, vai krūts sūknis ir pievienots darba kontaktligzdai. Ja krūts sūknim nav strāvas avota, tā displejs neieslēdzas un neparādās kļūdas ziņojums.
2. **Nē/slikta sūkšana:** pārliedzieties, ka visas krūts sūkņa daļas ir pareizi novietotas. Izjauciet krūts sūkni un pārliedzieties, ka visas daļas ir tīras un nebojātas. Atkārtoti samontējiet krūts sūkni saskaņā ar instrukcijām sadaļā LACTATOR ASSEMBLY. Sūknējot pārliedzieties, ka piltuve ir pilnībā novietota pret krūti.
3. **No krūts ir izplūdis vairāk piena, nekā konteiners var turēt:** izmanojiet mitru (ne mitru) drānu, lai noslaucītu krūts sūkni. Nomazgājiet piensūkņa daļas, kas satur pienu saskaņā ar norādījumiem sadaļā TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA. Kad visas mašīnas daļas ir sausas, samontējiet atkārtoti.

11. SPECIFIKĀCIJU

Piena trauka ietilpība: 210ml

Akumulatora ietilpība: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Ieejas jauda: 110-240V

Izejas jauda: 5V 1A

Darbības laiks: līdz 150min

Uzlādes laiks: aptuveni 150 minūtes

Krūts sūkņa izmēri: 9x4,5x6 cm x2

Krūts sūkņa svars: 150g x2

Sūkšanas jauda:

1. Stimulācijas režīms (8 līmeņi): 9-24 kPa
2. Dzīlās ekstrakcijas režīms (8 līmeņi): 13-40 kPa
3. Jauktais režīms (8 līmeņi): 10-24 kPa

Pieļaujamās izmaiņas ± 5 Kpa.

12. GARANTIJAS/ SŪDZĪBU KARTE

Produktam ir 24 mēnešu garantija. Garantijas nosacījumus var atrast:

<https://neno.pl/gwarancja>

Sīkāka informācija, kontaktinformācija un pakalpojumu adrese ir atrodama šeit: **<https://neno.pl/kontakt>**

Specifikācijas un saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs atvairināmies par jebkādam neērtībām.

LT

VARTOTOJO VADOVAS

Gerbiamas Kliente,

Jūs esat ieguvusi „Neno Sole Twin” priekšmetu, kas ir dvigubas, elektroniskas, trīsfāzīgas krūtes sūcēja, ko var izmantot, lai izsūktu pienu no krūtes po. Pirms lietošanas, lūgums iepazīties ar lietošanas instrukciju.

01. ATSARGUMO PRIEMONĒS

1. Pēc iekraušanas visādu atjūniet iekārtu no elektros tīklo, ja nēreikia iekrauti iekārtas akumulātorius.
2. Nedēkite gaminio ten, kur jam gresia pavojus patekti j kriaukles, vonias ar kitus indus.
3. Krūties siurblys ir jo komponentai nēra atsparūs karščiui – priekšmetu laikykite atokiau nuo karštų paviršių ir atviro liepsnos.
4. Nenaudokite priekšmetu šalia degių medžiagų.
5. Krūties pompos negalima palikti be priežiūros, kai ji prijungta prie maitinimo šaltinio.
6. Niekada nenaudokite iekārtas, ja ji buvo numestas ar kitaip sugadintas.
7. Nenaudokite priekšmetu, kurio maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas.

8. Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.
9. Nedėkite prietaiso po vandeniu ar kitais skysčiais.
10. Neplaukite įrenginio po tekančiu vandeniu.
11. Neįjunkite prietaiso prie maitinimo lizdo, kuris lietsi su vandeniu ar kitais skysčiais.
12. Jei prietaisas buvo veikiamas vandens ar kitų skysčių - nelieskite prietaiso tiesiogiai, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio, išjunkite ir susisiekite su gamintoju.
13. Šis prietaisas skirtas naudoti vienam vartotojui. Krūties pumpo naudojimas daugiau nei vienam asmeniui kelia pavojų pakenkti vartotojams ir panaikina garantiją.
14. Neremontuokite ir nemodifikuokite įrenginio patys.
15. Krūties pumpą naudokite tik taip, kaip aprašyta instrukcijose. Nenaudokite prietaiso jokiame kitame tikslui.
16. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite visus krūties pumpo komponentus.
17. Nešildykite išleisto pieno mikrobangų krosnelėje. Mikrobangų krosnelėje šildomas pienas gali sudeginti kūdikio veidą, nes kaitinant mikrobangų bangomis skystyje gali susidaryti aukštos temperatūros burbuliukai. Be to, mikrobangų bangos gali pakeisti pieno sudėtį.
18. Kaitindami pieną neužvirkite.
19. Prieš naudodami krūties pumpą pirmą kartą, nuplaukite ir dezinfekuokite visas mašinos dalis, kurios tiesiogiai liečiasi su jūsų krūtimi ar pienu.
20. Po kiekvieno krūties pumpo naudojimo nuplaukite visas mašinos dalis, kurios tiesiogiai liečiasi su krūtimi ar pienu.
21. Būkite ypač atsargūs, kai naudojate krūties pumpą ar jos priedus šalia vaikų.
22. Įkrovimo metu nenaudokite krūties pumpo.

02. PRIEŠ PIRMĄJ NAUDOJIMĄ

1. Prijunkite krūties siurbį prie maitinimo šaltinio. Kraukite baterijas 2,5 valandas.
2. Nuimkite krūties pumpą.
3. Atjunkite krūties siurblio dalis, kurios tiesiogiai liečiasi su krūtimi ar pienu: nuimkite krūties skydą nuo pieno indo, tada patraukite vožtuvą žemyn ir membraną aukštyn, kad atsijungtumėte nuo jungties.
4. Išvalykite prietaiso komponentus (žr. skyrių VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS).

NATA!

Krūties pumpą naudokite vertikalioje padėtyje. Naudojant bet kioje kitoje

padėtyje (pvz., gulint), krūties pompa nebus tinkamai priglidusi prie krūties ir pienas ištekės.

03. ELEMENTAI

PAV. A

1. Siurbimo įtaisas x2
2. Pieno indas x2
3. Jungtis x2
4. Vožtuvas x4
5. USB-C įkrovimo laidas x2
6. Krūtinės skydas 24mm x2
7. Membrana x4
8. Krūtinės skydo reduktorius 20mm x2

04. SIURBIMO ĮRENGINIO APRAŠYMAS

PAV. B

1. Pasirinkto režimo piktograma (I taškas - stimuliacijos fazė, II taškai - gilaus ekstrahavimo fazė, III taškai - mišri fazė).
2. Maitinimo mygtukas - Palaikykite mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį. Kai prietaisas įjungtas, paspauskite, kad pristabdytumėte krūties pompą.
3. Siurbimo lygio keitimas - paspauskite „-“, kad sumažintumėte siurbimo galią.
4. Pasirinkto krūties pompos režimo (L1-L8)/laiko piktograma.
5. Režimo keitimo mygtukas - paspauskite mygtuką, kad pakeistumėte įrenginio darbo režimą.
6. Siurbimo lygio keitimas - paspauskite „+“, kad padidintumėte siurbimo galią.
7. USB-C įkrovimo laidas

05. VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS

Plovimas ir dezinfekavimas yra dvi skirtingos operacijos. Jie turi būti atliekami atskirai, kad apsaugotumėte savo kūdikį ir įsitikintumėte, kad krūties siurblys veikia tinkamai.

Skalbimas - įrenginio paviršiaus plovimas ir nešvarumų pašalinimas.

Dezinfekcija - organizmų, tokių kaip bakterijos ar virusai, kurie gali būti ant įrangos paviršiaus, žudymas.

Krūties skydas, membrana, vožtuvas, reduktorius, jungtis, pieno indas:

Nuplaukite ir dezinfekuokite - prieš pirmąjį naudojimą.

Nuplaukite - po kiekvieno naudojimo.

Kartą per dieną ir prieš pirmąjį naudojimą - dezinfekcija.

A. SKALBIMO:

- Išardykite visas krūties pompas dalis (išskyrus siurbimo įtaisą) ir 5 minutes nuplaukite šiltu muiluotu vandeniu, tada nuplaukite. Padarykite tai iškart po mašinos naudojimo. Tai pašalins pieno nuosėdas ir užkirs kelią bakterijų dauginimuisi.
- Skalbinimui naudokite tik geriamą vandentiekio vandenį. Naudokite vandenį buteliuose, jei vanduo jūsų čiauve neatitinka šio reikalavimo.
- Valydami silikonines dalis, nenaudokite šepetėlių. Būkite atsargūs, kad jų nepradurtumėte.
- Naudokite švelnų indų plovimo skystį ar muilą.
- Leiskite dalims natūraliai išdžiūti. Sausas prietaiso dalis laikykite vėsioje, sausoje vietoje, kai jų nenaudojate.

B. DEZINFEKCIJA:

Membrana, vožtuvas, reduktorius, jungtis, krūties skydas, pieno indas:

- Užpildykite puodą ar sterilizatorių vandeniu taip, kad visi viduje esantys komponentai (membrana, vožtuvas, reduktorius, jungtis, krūties skydas, pieno indas) būtų uždengti. Užvirkite. Įdėkite krūties siurblio dalis į verdantį vandenį 10 minučių. Negalima virti.
- Leiskite gabalėliams natūraliai išdžiūti. Sausus rinkinio daiktus laikykite vėsioje, sausoje vietoje, kai jų nenaudojate.

C. SIURBIMO ĮRENGINIO VALYMAS:

- Nuvalykite siurblio bloką minkšta, šlapia šluoste ir švelniu indų plovimo skysčiu/muilu. Kiti valikliai ar abrazyvai gali sugadinti įrenginį ir jo ekraną.
- Nenaudodami siurblio bloko, laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.

06. KRŪTIES SIURBLIO SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS

C PAV.

Pritvirtinkite komponentus, kaip parodyta PAV. C 1-5.

PASTABA: Prieš liesdami krūties pompą ir krūtį, kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu.

1. Įkiškite membraną į jungtį. **C1 PAV.**
2. Prijunkite vožtuvą prie jungties. **C2 PAV. DĖMESIO:** Vožtuvas turi būti pritvirtintas ilgesne dalimi link krūties skydo. Apžvalga: **PAV. C6.**
3. Pritvirtinkite jungtį su membrana ir vožtuvu prie pieno talpyklos, pradėdant nuo membranos įdėjimo į griovelį. **C3 PAV.**
4. Įdėkite krūties skydą į pieno indą. **C4 PAV.**
5. Pritvirtinkite siurbimo įrenginį prie pieno talpyklos viršaus. **C5 PAV.**
6. Uždėkite krūties skydą ant krūties taip, kad spenelis būtų drenažo kanalo viduje. Nykščiu ir rodomuoju pirštu prispauskite krūties skydą

ir krūties pompos jungtį prie krūties. **C6 PAV.**

7. Įkiškite krūties pompą į liemenėlės/laktacijos korsetą. **C7 PAV.**
8. Įjunkite krūties siurblių paspausdami maitinimo mygtuką ir pasirinkite jums tinkamą veikimo režimą.
9. Norėdami supilti pieną, laikykite krūties siurblių horizontaliai ir atsargiai atsukite siurblių **FIG C8**. Laikykite pieno indą krūties skydu į viršų - padėkite jį plokščiai ant stalviršio (nedėkite jo į viršų, kad pienas neištekėtų). **C9 PAV.** Atsargiai supilkite pieną į buteliuką / laikymo indą. **C10 PAV.**
10. Po naudojimo pašalinkite ir išvalykite visus krūties siurblio komponentus. **C11 PAV.**

PASTABOS:

- a. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistos krūties pompos dalys. Jei reikia, pažeistas dalis pakeiskite naujomis.
- b. Prieš naudodami įrenginį, visada patikrinkite komponentų švarumą.
- c. Jei krūtinės skydo skersmuo yra per didelis, naudokite pridedamą reduktorių, įkišdami jį į vidų. **C12 PAV.**

PASTABOS:

Krūties pompa prasideda stimuliacijos režimu. Nustatykite jums patogų siurbimo stiprumo lygį naudodami +/- mygtukus:

- Stimuliavimo režimas – greitas siurbimas, imituojantis natūralų kūdikio čiulpimą motinos piene, skatinantis pieno tekėjimą. Po 2 minučių krūties siurblys automatiškai įjungs gilaus siurbimo režimą. Sureguliuokite siurbimo lygį naudodami +/- mygtukus, kad rastumėte aukščiausią jums patogų siurbimo lygį. Jei pienas pradeda tekėti iš krūties nepaėjus dviem minutėms, paspauskite režimo keitimo mygtuką, kad rankiniu būdu perjungtumėte į gilaus ekstrakavimo režimą.

- Gilaus siurbimo režimas – lėtesnis siurbimas, kuris švelniai ir efektyviai siurbia pieną iš krūties. Šiuo režimu padidinkite siurbimą, kol pajusite nedidelį diskomfortą (ne skausmą) ir sumažinkite siurbimą vienu laipsniu.

- Mišrus režimas – imituoja kūdikio čiulpimo refleksą. Gali būti naudojamas po siurbimo, kad padėtų ištuštinti krūtį ir padidinti laktaciją.

07. KRŪTIES SIURBLIO ĮKROVIMAS

Visiškai įkraukite krūties siurblio akumuliatorių prieš įdėdami jį į saugyklą, jei ketinate ilgą laiką nenaudoti prietaiso. Įkraukite įrenginio akumuliatorių, kol jis visiškai neišsekęs. Tai prailgina akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Jei krūties pompa buvo laikoma karštoje vietoje, prietaiso baterija iš pradžių gali neveikti. Prieš pradėdami naudoti krūties pompą, leiskite jai atvėsti vieną valandą.

Nuorodų:

LO - rodo, jei akumulatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 20%. **D1 PAV.**

Mirksintys taškai - krūties siurblys įkraunamas. **D2 PAV.**

Trys taškai nuolat šviečia- baterija visiškai įkrauta. **D3 PAV.**

Įkrovimo metu nenaudokite krūties pompos.

08. VARTOJIMO REIKMENŲ PAKEITIMAS

Sunaudojamiems komponentams krūties siurblio veikimo metu jie natūraliai nusidėvi, todėl jiems netaikoma gamintojo garantija.

Susidėvėję krūties siurblio komponentai, kurie liečiasi su pienu, turėtų būti pakeisti. Susidėvėjęs komponentas yra įtrūkęs, deformuotas, suteptas arba aiškiai pasikeitusi spalva.

- Membraną reikia keisti kas 8 savaites (jei krūties pompą naudojate 1-3 kartus per dieną) arba kas 3-4 savaites (jei krūties pompą naudojate daugiau nei 3 kartus per dieną).
- Vožtuvą reikia keisti kas 2-3 mėnesius (jei krūties pompą naudojate 1-3 kartus per dieną) arba kas 4 savaites (jei krūties pompą naudojate daugiau nei 3 kartus per dieną).
- Krūties skydą ir jungtį reikia keisti kas 6 mėnesius, jei krūties pompą naudojate daugiau nei 3 kartus per dieną.

09. ILGALAIKIS SAUGOJIMAS

Krūties pompoje yra įmontuota įkraunama baterija. Norėdami apsisaugoti nuo pažeidimų, įrenginys persijungia į saugojimo režimą po ilgo neveiklumo. Norėdami išjungti saugojimo režimą, prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio ir įkraukite 2 valandas. Prieš ilgą laiką atidėdami krūties pompą, įsitikinkite, kad:

- Visi krūties siurblio komponentai yra švarūs.
- Jūs išvalėte siurbimo įrenginį.
- Įrenginio akumuliatorius visiškai įkrautas.

10. DUK

1. **Prietaisas neįsijungia:** įsitikinkite, kad krūties siurblys yra prijungtas prie veikiančio elektros lizdo. Jei krūties siurblys neturi maitinimo šaltinio, jo ekranas neįsijungs ir nepasirodys klaidos pranešimas.
2. **Netinkamas / prastas siurbimas:** įsitikinkite, kad visos krūties siurblio dalys yra tinkamai išdėstytos. Nuimkite krūties pompą ir įsitikinkite, kad visos dalys yra švarios ir nepažeistos. Surinkite krūties pompą pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje LACTATOR ASSEMBLY. Siurbdami įsitikinkite, kad piltuvai yra visiškai priglodę prie krūties.
3. **Iš krūties tekėjo daugiau pieno, nei gali tilpti inde:** nuvalykite krūties pompą drėgna (ne šlapia) šluoste. Nuplaukite krūties siurblio dalis,

kuriuose yra pieno, pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS. Kai visos mašinos dalys yra sausas, surinkite iš naujo.

11. SPECIFIKACIJOS

Pieno talpyklos talpa: 210ml

Baterijos talpa: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Jėjimo galia: 110-240V

Išėjimo galia: 5V 1A

Veikimo laikas: iki 150min

Įkrovimo laikas: apie 150min

Krūties siurblio matmenys: 9x4,5x6 cm x2

Krūties siurblio svoris: 150g x2

Siurbimo galia:

1. Stimuliavimo režimas (8 lygiai): 9-24 kPa
2. Gilaus ištraukimo režimas (8 lygiai): 13-40 kPa
3. Mišrus režimas (8 lygiai): 10-24 kPa

Leistinas pokytis ± 5 Kpa.

12. GARANTIJOS / SKUNDŲ KORTELĖ

Gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantijos sąlygas galite rasti:

<https://nenoplgwarancja>

Išsamią informaciją, kontaktinį ir aptarnavimo adresą galite rasti:

<https://nenoplgkontakt>

Specifikacijos ir turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Atsiprašome už nepatogumus.

ET

KASUTUSJUHEND

Lugupeetud klient,

Tėie osetud Neno Sole Twin seade on kahekordne elektroonline kolmefasiline rinnapump, mida kasutatakse rinnapiima vāljutamiseks naise rinnast pārst sūnnitust. Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.

01. ETTEVAATUSABINŌUD

1. Eemaldage seade pārst laadimist alati vooluvōrgust, kui te ei pea

- seadme akut laadima.
2. Ärge asetage toodet kohta, kus see võib kukkuda kraanikaussi, vanni või muudesse anumatesse.
 3. Rinnapump ja selle komponendid ei ole kuumakindlad – hoidke seadet eemal kuumadest pindadest ja lahtisest leegist.
 4. Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide läheduses.
 5. Rinnapumpa ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud toiteallikaga.
 6. Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on maha kukkunud või muul viisil kahjustatud.
 7. Ärge kasutage seadet, mille toitejuhe või pistik on kahjustatud.
 8. Ärge kasutage seadet vannis ega duši all.
 9. Ärge asetage seadet vee ega muude vedelike alla.
 10. Ärge peske seadet voolava vee all.
 11. Ärge ühendage seadet pistikupessa, mis on kokku puutunud vee või muude vedelikega.
 12. Kui seade on kokku puutunud vee või muude vedelikega - ärge puudutage seadet otse, ühendage see vooluvõrgust lahti, lülitage see välja ja võtke ühendust tootjaga.
 13. See seade on mõeldud kasutamiseks ühele kasutajale. Rinnapumba kasutamisega rohkem kui ühe inimese poolt kaasneb kasutajate kahjustamise oht ja garantii tühistamine.
 14. Ärge parandage ega muutke seadet ise.
 15. Kasutage rinnapumpa ainult juhistes kirjeldatud viisil. Ärge kasutage seadet ühelgi muul otstarbel.
 16. Enne iga kasutamist kontrollige kõiki rinnapumba komponente.
 17. Ärge kuumutage tühjenenud piima mikrolaineahjus. Mikrolaineahjus kuumutatud piim võib lapse nägu põletada, sest mikrolaineahjus kuumutamine võib tekitada vedelikus kõrge temperatuuriga mulle. Lisaks võivad mikrolainelained muuta piima koostist.
 18. Ärge viige piima kuumutamise ajal keemiseni.
 19. Enne rinnapumba esmakordset kasutamist peske ja desinfitseerige kõik masina osad, mis puutuvad otseselt kokku teie rinna või piimaga.
 20. Pärast iga rinnapumba kasutamist peske kõik masina osad, mis puutuvad otseselt kokku rinna või piimaga.
 21. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate rinnapumpa või selle tarvikuid laste läheduses.
 22. Ärge kasutage rinnapumpa laadimise ajal.

02. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Ühendage rinnapump vooluvõrku. Laadige akusid 2,5 tundi.
2. Eemaldage rinnapump.

3. Ühendage lahti rinnapumba osad, mis puutuvad otseselt kokku rinna või piimaga: eemaldage rinnakaitse piimamahutist, seejärel tõmmake klapp alla ja membraan üles, et pistikust lahti ühendada.
4. Puhastage seadme komponendid (vt jaotist PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE).

MÄRKUS!

Kasutage rinnapumpa püstises asendis. Kasutamine mis tahes muus asendis (nt lamades) põhjustab selle, et rinnapump ei sobi korralikult rinnaga ja piim lekib välja.

03. ELEMENTE

JOONIS A

1. Pumbaseade x2
2. Piimamahuti x2
3. Pistik x2
4. Ventii x4
5. USB-C laadimiskaabel x2
6. Rinnakaitse 24mm x2
7. Membraan x4
8. Rinnakaitse reductor 20mm x2

04. PUMBASEADME KIRJELDUS

JOONIS B

1. Valitud režiimi ikoon (I punkt - stimulatsioonifaas, II punkti - sügav ekstraheerimisfaas, III punkt - segafaas).
2. Toitenupp - Seadme sisse- või väljalülitamiseks hoidke nuppu 2 sekundit all. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage rinnapumba peatamiseks.
3. Imemisvõimsuse muutmine - Imemisvõimsuse vähendamiseks vajutage „-“.
4. Valitud režiimi ikoon (L1-L8)/rinnapumba kellaaeg.
5. Režiimi muutmise nupp - Vajutage nuppu seadme töörežiimi muutmiseks.
6. Imemistaseme muutmine - Imemisvõimsuse suurendamiseks vajutage „+“.
7. USB-C laadimispesa

05. PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE

Pesemine ja desinfitseerimine on kaks erinevat toimingut. Need tuleb läbi viia eraldi, et kaitsta teie last ja tagada rinnapumba nõuetekohane töö.

Pesemine - seadme pinna pesemine ja mustuse eemaldamine.

Desinfitseerimine - organismide, näiteks bakterite või viiruste tapmine, mis

võivad esineda seadme pinnal.

Rinnakaitse, membraan, ventiil, reduktor, pistik, piimaanum:

Peske ja desinfitseerige - enne esmakordset kasutamist.

Pese - pärast iga kasutuskorda.

Üks kord päevas ja enne esmakordset kasutamist - desinfitseerimine.

A. PESEMINE:

- Võtke lahti kõik rinnapumba osad (välja arvatud pumpamiseseade) ja peske soojas seebivees 5 minutit, seejärel loputage. Tehke seda kohe pärast masina kasutamist. See eemaldab piimaladestused ja takistab bakterite kasvu.

- Pesemiseks kasutage ainult joogikõlblikku kraanivett. Kasutage pudelivett, kui kraanis olev vesi ei vasta sellele nõudele.

- Silikoonosade puhastamisel ärge kasutage harju. Olge ettevaatlik, et te neid läbi ei torgaks.

- Kasutage pehmet nõudepesuvahendit või seepi.

- Laske osadel loomulikult kuivada. Hoidke seadme kuivi osi jahedas ja kuivas kohas, kui te neid ei kasuta.

B. DESINFITSEERIMINE:

Membraan, ventiil, reduktor, pistik, rinnakaitse, piimaanum:

- Täitke pott või sterilisaator veega nii, et kõik sees olevad komponendid (membraan, ventiil, reduktor, pistik, rinnakaitse, piimaanum) oleksid sisse asetades kaetud. Lase keema tõusta. Asetage rinnapumba osad 10 minutiks keevasse vette. Ärge keetke.

- Laske tükidel loomulikult kuivada. Hoidke kuiva komplekti esemeid jahedas ja kuivas kohas, kui te neid ei kasuta.

C. PUMPAMISSEADME PUHASTAMINE:

- Pühkige pumbaseadet pehme märja lapi ja pehme nõudepesuvahendi/seebiga. Muud puhastusvahendid või abrasiivsed ained võivad seadet ja selle ekraani kahjustada.

- Kui pumbaseadet ei kasutata, hoidke seda jahedas ja kuivas kohas.

06. RINNAPUMBA KOKKUPANEK JA KASUTAMINE

JOONIS C

Kinnitage komponendid, nagu on näidatud joonisel C 1-5.

MÄRKUS: Enne rinnapumba ja rinna puudutamist peske käsi põhjalikult seebi ja veega.

1. Sisestage membraan pistikusse. **JOONIS C1.**

2. Ühendage klapp pistikuga. **JOONIS C2. TÄHELEPANU:** Klapp tuleb kinnitada pikema osaga rinnakaitse poole. Ülevaate saamiseks:

JOONIS C6.

3. Kinnitage ühendus koos membraani ja ventiiliga piimamahuti külge, alustades membraani asetamisest soonde. **JOONIS C3.**
4. Asetage rinnakaitse piimaanumasse. **JOONIS C4.**
5. Kinnitage pumpamiseseade piimamahuti ülaosale. **JOONIS C5.**
6. Asetage rinnakaitse rinnale nii, et nibu oleks drenaažikanali sees. Suruge rinnakaitse ja rinnapumba pistik pöidla ja nimetissõrmega vastu rinda. **JOONIS C6.**
7. Sisestage rinnapump rinnahoidja/imetamiskorsetti. **JOONIS C7.**
8. Lülitage rinnapump sisse, vajutades toitenuppu ja valige endale sobiv töörežiim.
9. Piima valamiseks hoidke rinnapumba horisontaalselt ja keerake pump FIG C8 ettevaatlikult lahti. Hoidke piimaanumat rinnakildiga ülespoole - asetage see lauaplaadile (ärge asetage seda ülespoole, et vältida piima väljavoolamist). **JOONIS C9.** Valage piim ettevaatlikult pudelisse/säilitusnõusse. **JOONIS C10.**
10. Pärast kasutamist eemaldage ja puhastage kõik rinnapumba komponendid. **JOONIS C11.**

MÄRKMED:

- a. Enne iga kasutamist kontrollige rinnapumba osi kahjustuste suhtes. Vajadusel asendage kahjustatud osad uutega.
- b. Enne seadme kasutamist kontrollige alati komponentide puhtust.
- c. Kui rinnakilbi läbimõõt on liiga suur, kasutage kaasasolevat reduktorit, sisestades selle sisse. **JOONIS C12.**

MÄRKMED:

Rinnapump käivitub stimulatsioonirežiimis. Seadistage imemistugevuse tase teile mugavaks, kasutades +/- nuppe:

- Stimulatsioonirežiim - kiire pumpamine, mis jälgendab teie lapse loomulikku rinnapiima imemist, et stimuleerida piimavoolu. 2 minuti pärast aktiveerib rinnapump automaatselt sügava pumpamise režiimi. Reguleerige imemistaset nuppude +/- abil, et leida teile sobiv kõrgeim imemistase. Kui piim hakkab rinnast voolama enne kahe minuti möödumist, vajutage režiimi muutmise nuppu, et lülituda käsitsi sügavale ekstraheerimisrežiimile.
- Sügav pumpamisrežiim - aeglasem pumpamine, mis imeb õrnalt ja tõhusalt piima rinnast. Selles režiimis suurendage imemist, kuni tunnete kerget ebamugavust (mitte valu), ja vähendage imemist ühe kraadi võrra.
- Segarežiim - jälgendab beebi imemisrefleksi. Võib kasutada pärast pumpamist rindade tühjendamiseks ja imetamise suurendamiseks.

07. RINNAPUMBA LAADIMINE

Laadige rinnapumba aku enne hoiule panemist täielikult, kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada. Laadige seadme akut enne, kui see on täielikult tühjenenud. See pikendab aku eluiga. Kui rinnapumpa on hoitud kuumas kohas, ei pruugi seadme aku alguses töötada. Enne kasutamist laske rinnapumbal tund aega jahtuda.

Tähiste:

LO - kuvab, kui aku laetuse tase on alla 20%. **JOONIS D1.**

Vilkuvad punktid - rinnapump laadimise all. **JOONIS D2.**

Kolm punkti hõõguvad pidevalt – aku on täielikult laetud. **JOONIS D3.**

Ärge kasutage rinnapumpa laadimise ajal.

08. KULUMATERJALIDE VAHETAMINE

Kuluosad kuluvad rinnapumba töötamise ajal loomulikul teel ja seetõttu ei kehti neile tootja garantiit.

Rinnapumba kulunud komponendid, mis puutuvad kokku piimaga, tuleb välja vahetada. Kulunud komponendil on, deformatsioon, tuhmumine või selge värvimuutus.

- Membraani tuleks vahetada iga 8 nädala tagant (kui kasutate rinnapumpa 1-3 korda päevas) või iga 3-4 nädala tagant (kui kasutate rinnapumpa rohkem kui 3 korda päevas).
- Klappi tuleb vahetada iga 2-3 kuu tagant (kui kasutate rinnapumpa 1-3 korda päevas) või iga 4 nädala järel (kui kasutate rinnapumpa rohkem kui 3 korda päevas).
- Rinnakaitset ja pistikut tuleb vahetada iga 6 kuu tagant, kui kasutate rinnapumpa rohkem kui 3 korda päevas.

09. PIKAAJALINE LADUSTAMINE

Rinnapumbal on sisseehitatud laetav aku. Kahjustuste eest kaitsmiseks lülitub seade pärast pikka tegevusetust salvestusrežiimi. Salvestusrežiimi väljalülitamiseks ühendage seade vooluvõrku ja laadige seda 2 tundi. Enne rinnapumba pikaks ajaks ära panemist veenduge, et:

- Kõik rinnapumba komponendid on puhtad.
- Olete pumpamisseadme puhastanud.
- Seadme aku on täielikult laetud.

10. KKK

1. **Seade ei käivitu:** veenduge, et rinnapump on ühendatud töötavasse pistikupesasse. Kui rinnapumbal pole toiteallikat, ei lülitu selle ekraan sisse ja veateadet ei kuvata.
2. **Puudub/halb imemine:** veenduge, et kõik rinnapumba osad on

õigesti paigutatud. Võtke rinnapump lahti ja veenduge, et kõik osad on puhtad ja kahjustamata. Pange rinnapump uuesti kokku vastavalt jaotises LACTATOR ASSEMBLY toodud juhiste. Pumpamisel veenduge, et lehter oleks täielikult vastu rinda.

- 3. Rinnast on voolanud rohkem piima, kui anum mahutab:** kasutage rinnapumba pühkimiseks niisket (mitte märga) lappi. Peske rinnapumba piima hoidvaid osi vastavalt jaotises PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE toodud juhistele. Kui kõik masina osad on kuivanud, pange uuesti kokku.

11. SPETSIFIKATSIOON

Piimamahuti maht: 210ml

Aku mahutavus: 3,7 V 1500 mAh Li-Po

Sisendvõimsus: 110-240V

Väljundvõimsus: 5V 1A

Tööaeg: kuni 150min

Laadimisaeg: umbes 150 min

Rinnapumba mõõdud: 9x4,5x6 cm x2

Rinnapumba kaal: 150g x2

Imemisvõimsus:

1. Stimulatsioonirežiim (8 taset): 9-24 kPa
2. Sügav ekstraheerimisrežiim (8 taset): 13-40 kPa
3. Segarežiim (8 taset): 10-24 kPa

Lubatud variatsioon ± 5 Kpa.

12. GARANTII/ KAEBUSTE KAART

Tootel on 24-kuuline garantii. Garantiitingimused leiate aadressilt:

<https://nenopl/gwarancja>

Üksikasjad, kontaktandmed ja teenindusaadress leiate aadressilt:

<https://nenopl/kontakt>

Tehnilisi andmeid ja sisu võidakse ette teatamata muuta. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Шановний клієнт,
Пристрій Neno Sole Twin, який ви придбали, - це подвійний, електронний, трифазний молоковідсмоктувач, що використовується для зціджування грудного молока з грудей жінки після пологів. Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.

01. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Завжди відключайте пристрій від мережі після заряджання, якщо вам не потрібно заряджати його акумулятор.
2. Не кладіть виріб у місця, де він може впасти в раковини, ванни або інші ємності.
3. Молоковідсмоктувач і його компоненти не є термостійкими - тримайте пристрій подалі від гарячих поверхонь і відкритого вогню.
4. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
5. Підключений до джерела живлення молоковідсмоктувач не слід залишати без нагляду.
6. Ніколи не використовуйте пристрій, якщо він впав або був пошкоджений іншим чином.
7. Не використовуйте пристрій з пошкодженням шнуром живлення або вилкою.
8. Не використовуйте пристрій у ванні або під душем.
9. Не кладіть пристрій під воду або в інші рідини.
10. Не мийте пристрій під проточною водою.
11. Не підключайте пристрій до розетки, яка контактувала з водою або іншими рідинами.
12. Якщо пристрій потрапив у воду або іншу рідину - не торкайтеся безпосередньо пристрою, від'єднайте його від джерела живлення, вимкніть і зверніться до виробника.
13. Цей прилад призначений для використання одним користувачем. Використання молоковідсмоктувача кількома особами може призвести до ризику нанесення шкоди користувачам та анулювання гарантії.
14. Не ремонтуйте та не модифікуйте пристрій самостійно.

15. Використовуйте молоковідсмоктувач тільки так, як описано в інструкції. Не використовуйте пристрій для будь-яких інших цілей.
16. Перед кожним використанням перевіряйте всі компоненти молоковідсмоктувача.
17. Не підігрівайте зціджене молоко в мікрохвильовій печі. Молоко, підігріте в мікрохвильовій печі, може обпекти обличчя дитини, оскільки нагрівання мікрохвильовими хвилями може призвести до утворення бульбашок високої температури в рідині. Крім того, мікрохвильові хвилі можуть змінити склад молока.
18. Під час підігрівання молока не доводьте його до кипіння.
19. Перед першим використанням молоковідсмоктувача вимийте та продезінфікуйте всі частини апарату, які будуть безпосередньо контактувати з грудьми або молоком.
20. Після кожного використання молоковідсмоктувача мийте всі частини апарату, які безпосередньо контактують з грудьми або молоком.
21. Будьте особливо обережні при використанні молоковідсмоктувача або аксесуарів до нього поблизу дітей.
22. Не використовуйте молоковідсмоктувач під час заряджання.

02. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Підключіть молоковідсмоктувач до електромережі. Заряджайте батареї протягом 2,5 годин.
2. Зніміть молоковідсмоктувач.
3. Від'єднайте частини молоковідсмоктувача, які будуть безпосередньо контактувати з грудьми або молоком: зніміть захисний екран молоковідсмоктувача з контейнера для молока, потім потягніть клапан вниз, а мембрану вгору, щоб від'єднати від роз'єму.
4. Очистіть компоненти приладу (див. розділ «ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ»).

УВАГА!

Використовуйте молоковідсмоктувач у вертикальному положенні. Використання в будь-якому іншому положенні (наприклад, лежачи) призведе до того, що молоковідсмоктувач не буде належним чином прилягати до грудей і молоко буде витікати.

03. ЕЛЕМЕНТИ

РИС. А

1. Насосний пристрій x2
2. Контейнер для молока
3. Роз'єм x2

4. Клапан х4
5. Зарядний кабель USB-C х2
6. Нагрудний щиток 24мм х2
7. Мембрана х4
8. Перехідник нагрудного щита 20мм х2

04. ОПИС НАСОСНОГО ПРИСТРОЮ

РИС. Б

1. Піктограма обраного режиму (I крапка - фаза стимуляції, II крапка - фаза глибокої екстракції, III крапка - змішана фаза).
2. Кнопка живлення - утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. Коли пристрій увімкнено, натисніть, щоб призупинити роботу молоковідсмоктувача.
3. Зміна рівня всмоктування - Натисніть “-”, щоб зменшити потужність всмоктування.
4. Піктограма обраного режиму (L1-L8)/часу роботи молоковідсмоктувача.
5. Кнопка зміни режиму - натисніть цю кнопку, щоб змінити режим роботи пристрою.
6. Зміна рівня всмоктування - Натисніть “+”, щоб збільшити потужність всмоктування.
7. Роз'єм для зарядки USB-C

05. ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Миття та дезінфекція - це дві різні операції. Вони повинні виконуватися окремо, щоб захистити дитину і забезпечити належну роботу молоковідсмоктувача.

Миття - миття поверхні пристрою та видалення бруду.

Дезінфекція - знищення організмів, таких як бактерії або віруси, які можуть бути присутніми на поверхні обладнання.

Захисний екран для грудей, мембрана, клапан, редуктор, з'єднувач, контейнер для молока:

Вимити - продезінфікувати - перед першим використанням.

Мити - після кожного використання.

Один раз на день і перед першим використанням - дезінфекція.

А. МИЙКА:

- Розберіть всі частини молоковідсмоктувача (крім молоковідсмоктувального пристрою) і промийте в теплій мильній воді протягом 5 хвилин, потім сполосніть. Робіть це відразу після використання апарату. Це дозволить видалити відкладення молока і запобігти розмноженню бактерій.

- Для миття використовуйте лише питну водопровідну воду. Якщо вода у вашому крані не відповідає цій вимозі, використовуйте бутільовану воду.
- Під час чищення силіконових деталей не використовуйте щітки. Будьте обережні, щоб не проткнути їх наскрізь.
- Використовуйте м'який засіб для миття посуду або мило.
- Дайте деталям висохнути природним шляхом. Зберігайте сухі деталі приладу в сухому прохолодному місці, коли ви ними не користуєтесь.

В. ДЕЗІНФЕКЦІЯ:

Мембрана, клапан, редуктор, з'єднувач, захисний екран для грудей, контейнер для молока:

- Наповніть каструлю або стерилізатор водою так, щоб усі компоненти всередині (мембрана, клапан, редуктор, з'єднувач, молоковідсмоктувач, контейнер для молока) були покриті, коли вони розміщені всередині. Доведіть до кипіння. Помістіть деталі молоковідсмоктувача в киплячу воду на 10 хвилин. Не кип'ятіть.
- Дайте деталям висохнути природним чином. Зберігайте сухі елементи набору в сухому прохолодному місці, коли не використовуєте їх.

С. ОЧИЩЕННЯ НАСОСНОГО ПРИСТРОЮ:

- Протирайте насосний блок м'якою вологою ганчіркою з м'яким засобом для миття посуду/милом. Інші чистячі або абразивні засоби можуть пошкодити пристрій та його дисплей.
- Коли насосний агрегат не використовується, зберігайте його в сухому прохолодному місці.

06. ЗБІРКА ТА ВИКОРИСТАННЯ МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧА

РИС. С

Приєднайте компоненти, як показано на РИС. С 1-5.

ПРИМІТКА: Ретельно вимийте руки з милом перед тим, як торкатися молоковідсмоктувача та грудей.

1. Вставте мембрану в роз'єм. **РИС. С1.**
2. Підключіть клапан до з'єднувача. **РИС. С2. УВАГА:** Клапан повинен бути закріплений довшою частиною до нагрудного щитка. Для огляду: **РИС. С6.**
3. Приєднайте з'єднувач з мембраною та клапаном до контейнера для молока, вставивши мембрану в паз. **РИС. С3.**
4. Помістіть захисний екран для грудей у контейнер для молока. **РИС. С4.**
5. Прикріпіть насосний пристрій до верхньої частини контейнера для молока. **РИС. С5.**

6. Покладіть насадку на груди так, щоб сосок знаходився всередині дренажного каналу. Великим і вказівним пальцями притисніть захисний екран молочної залози та з'єднайте молоковідсмоктувача до грудей. **РИС. С6.**
7. Вставте молоковідсмоктувач у бюстгальтер/корсет для лактації. **РИС. С7.**
8. Увімкніть молоковідсмоктувач, натиснувши кнопку живлення, і виберіть режим роботи, який вам підходить.
9. Щоб зцідити молоко, тримайте молоковідсмоктувач горизонтально і обережно відкрутіть помпу **РИС. С8.** Тримайте контейнер для молока захисним екраном догори - покладіть його плазом на стільницю (не кладіть його догори, щоб молоко не витікало). **РИС. 9.** Обережно злийте молоко у пляшечку/контейнер для зберігання. **РИС. С10.**
10. Зніміть і очистіть усі компоненти молоковідсмоктувача після використання. **РИС. С11.**

ПРИМІТКИ:

- a. Перед кожним використанням перевіряйте деталі молоковідсмоктувача на наявність пошкоджень. За необхідності замініть пошкоджені деталі новими.
- b. Завжди перевіряйте чистоту компонентів перед використанням пристрою.
- c. Якщо діаметр нагрудного екрана занадто великий, використовуйте перехідник з комплекту постачання, вставивши його всередину. **РИС. С12.**

ПРИМІТКИ:

Молоковідсмоктувач запускається в режимі стимуляції. За допомогою кнопок +/- встановіть комфортний для вас рівень сили зціджування - Режим стимуляції - швидке зціджування, що імітує природне смоктання дитиною грудного молока, щоб стимулювати приплив молока. Через 2 хвилини молоковідсмоктувач автоматично активує режим глибокого зціджування. Відрегулюйте рівень зціджування за допомогою кнопок +/-, щоб знайти найвищий рівень зціджування, комфортний для вас. Якщо молоко почне витікати з грудей до закінчення двох хвилин, натисніть кнопку зміни режиму, щоб вручну переключитися в режим глибокого зціджування.

- Режим глибокого зціджування - повільне зціджування, яке м'яко та ефективно висмоктує молоко з грудей. У цьому режимі збільшуйте швидкість зціджування, поки не відчуєте легкий дискомфорт (не біль), і зменшуйте швидкість на один градус.

- Змішаний режим - імітує смоктальний рефлекс дитини. Можна використовувати після зціджування, щоб допомогти спорожнити груди і збільшити лактацію.

07. ЗАРЯДЖАННЯ МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧА

Повністю зарядіть акумулятор молоковідсмоктувача перед тим, як покласти його на зберігання, якщо ви не збираєтеся користуватися пристроєм протягом тривалого періоду часу. Заряджайте акумулятор пристрою до того, як він повністю розрядиться. Це продовжить термін служби акумулятора. Якщо молоковідсмоктувач зберігався у спекотному місці, акумулятор пристрою може спочатку не працювати. Дайте молоковідсмоктувачу охолонути протягом однієї години, перш ніж використовувати його.

Показання:

LO - відображається, якщо рівень заряду батареї нижче 20%. **РИС. D1.**

Миготливі точки - молоковідсмоктувач заряджається. **РИС. D2.**

Три точки світяться безперервно - батарея повністю заряджена. **РИС. D3.**

Не використовуйте молоковідсмоктувач під час заряджання.

08. ЗАМІНА ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Витратні компоненти піддаються природному зносу під час експлуатації молоковідсмоктувача, тому на них не поширюється гарантія виробника. Зношені компоненти молоковідсмоктувача, які контактують з молоком, слід замінити. Зношений компонент має тріщини, деформацію, потемніння або помітну зміну кольору.

- Мембрану слід замінювати кожні 8 тижнів (якщо ви використовуєте молоковідсмоктувач 1-3 рази на день) або кожні 3-4 тижні (якщо ви використовуєте молоковідсмоктувач більше 3 разів на день).
- Клапан слід замінювати кожні 2-3 місяці (якщо ви використовуєте молоковідсмоктувач 1-3 рази на день) або кожні 4 тижні (якщо ви використовуєте молоковідсмоктувач більше 3 разів на день).
- Якщо ви використовуєте молоковідсмоктувач частіше, ніж 3 рази на день, захисний екран молочної залози та з'єднувач слід замінювати кожні 6 місяців.

09. ТРИВАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ

Молоковідсмоктувач має вбудований акумулятор. Щоб захистити себе від пошкодження, пристрій переходить в режим зберігання після

тривалого періоду бездіяльності. Щоб вимкнути режим зберігання, підключіть пристрій до електромережі та заряджайте його протягом 2 годин. Перед тим, як прибрати молоковідсмоктувач на тривалий період часу, переконайтеся, що:

- Всі компоненти молоковідсмоктувача чисті.
- Ви очистили насосний пристрій.
- Акумулятор пристрою повністю заряджений.

10. ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

1. **Пристрій не запускається:** переконайтеся, що молоковідсмоктувач підключений до працюючої електричної розетки. Якщо молоковідсмоктувач не має джерела живлення, його дисплей не увімкнеться і не з'явиться жодного повідомлення про помилку.
2. **Відсутність/погане зіджджування:** переконайтеся, що всі частини молоковідсмоктувача розташовані правильно. Розберіть молоковідсмоктувач і переконайтеся, що всі деталі чисті та неушкоджені. Зберіть молоковідсмоктувач відповідно до інструкцій у розділі «ЗБОРКА МОЛОКОВІДСОСУВАЛЬНИКА». Під час зіджджування переконайтеся, що молоковідсмоктувач повністю прилягає до грудей.
3. **З грудей витекло більше молока, ніж може вмістити контейнер:** протріть молоковідсмоктувач вологою (не мокрою) ганчіркою. Вимийте частини молоковідсмоктувача, які утримують молоко, відповідно до інструкцій, наведених у розділі «ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ». Коли всі частини молоковідсмоктувача висохнуть, зберіть його знову.

11. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Ємність контейнера для молока: 210 мл

Ємність акумулятора: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Вхідна напруга: 110-240В

Вихідна потужність: 5В 1А

Час роботи: до 150 хв

Час заряджання: приблизно 150 хв

Розміри молоковідсмоктувача: 9х4,5х6 см х2

Вага молоковідсмоктувача: 150 г х2

Потужність всмоктування:

1. Режим стимуляції (8 рівнів): 9-24 кПа

2. Режим глибокої екстракції (8 рівнів): 13-40 кПа

3. Змішаний режим (8 рівнів): 10-24 кПа

Допустиме відхилення ± 5 кПа.

12. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН/КАРТКА РЕКЛАМАЦІЇ

На виріб надається гарантія 24 місяці. Умови гарантії можна знайти за посиланням: <https://nenopl/gwarancja>

Детальну інформацію, контактну та сервісну адресу можна знайти на сайті: <https://nenopl/kontakt>

Технічні характеристики та зміст можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Просимо вибачення за можливі незручності.

BG

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уважаеми клиенти,

Устройството Neno Sole Twin, което сте закупили, е двойна, електронна, трифазна помпа за кърма, използвана за изцеждане на кърма от гърдата на жената след раждането. Прочетете ръководството за употреба преди употреба.

01. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Винаги изключвайте устройството от контакта след зареждане, ако не е необходимо да зареждате батерията на устройството.
2. Не поставяйте продукта там, където има опасност да падне в мивки, вани или други съдове.
3. Помпата за кърма и нейните компоненти не са устойчиви на топлина – дръжте устройството далеч от горещи повърхности и открит пламък.
4. Не използвайте устройството в близост до запалими материали.
5. Помпата за кърма не трябва да се оставя без надзор, когато е свързана към източник на хранване.
6. Никога не използвайте устройството, ако е изпуснато или повредено по друг начин.
7. Не използвайте устройство, чийто хранващ кабел или щепсел са повредени.
8. Не използвайте устройството във ваната или душа.

9. Не поставяйте устройството под вода или в други течности.
10. Не мийте уреда под течаща вода.
11. Не свързвайте устройството към електрически контакт, който е бил в контакт с вода или други течности.
12. Ако устройството е било изложено на вода или други течности - не докосвайте устройството директно, изключете го от захранването, изключете го и се свържете с производителя.
13. Този уред е предназначен за използване от един потребител. Използването на помпата за кърма от повече от един човек носи риск от увреждане на потребителите и анулира гаранцията.
14. Не ремонтирайте и не модифицирайте уреда сами.
15. Използвайте помпата за кърма само както е описано в инструкциите. Не използвайте устройството за други цели.
16. Проверявайте всички компоненти на помпата за кърма преди всяка употреба.
17. Не загрявайте изхвърленото мляко в микровълновата. Млякото, загрята в микровълнова фурна, може да изгори лицето на бебето, тъй като нагряването с микровълнови вълни може да създаде мехурчета с висока температура в течността. Освен това микровълновите вълни могат да променят състава на млякото.
18. Не довеждайте млякото до кипене, докато го загрявате.
19. Преди да използвате помпата за кърма за първи път, измийте и дезинфекцирайте всички части на машината, които ще влязат в пряк контакт с кърмата или млякото ви.
20. След всяко използване на помпата за кърма измивайте всички части на машината, които влизат в пряк контакт с кърмата или млякото ви.
21. Бъдете особено внимателни, когато използвате помпата за кърма или нейните аксесоари в близост до деца.
22. Не използвайте помпата за кърма по време на зареждане.

02. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

1. Свържете помпата за кърма към захранването. Зареждайте батериите за 2,5 часа.
2. Извадете помпата за кърма.
3. Изключете частите на помпата за кърма, които ще влязат в пряк контакт с кърмата или млякото: извадете предпазителя за гърди от контейнера за мляко, след това издърпайте клапана надолу и мембраната нагоре, за да се изключите от конектора.
4. Почистете компонентите на уреда (вижте раздела ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ).

БЕЛЕЖКА!

Използвайте помпата за кърма в изправено положение. Използването във всяка друга позиция (напр. легнало) ще доведе до неправилно прилягане на помпата за кърма и изтичане на мляко.

03. ЕЛЕМЕНТИ

РИС. А

1. Помпено устройство x2
2. Контейнер за мляко x2
3. Конектор x2
4. Клапан x4
5. USB-C кабел за зареждане x2
6. Щит за гърди 24mm x2
7. Мембрана x4
8. Редуктор на щита за гърди 20mm x2

04. ОПИСАНИЕ НА ПОМПЕНОТО УСТРОЙСТВО

РИС. В

1. Икона на избрания режим (I точка - фаза на стимулация, II точки - фаза на дълбока екстракция, III точки - смесена фаза).
2. Бутон за захранване - Задръжте бутона за 2 секунди, за да включите или изключите устройството. Когато устройството е включено, натиснете, за да поставите помпата за кърма на пауза.
3. Промяна на нивото на засмукване - Натиснете «-», за да намалите мощността на засмукване.
4. Икона на избрания режим (L1-L8)/време на помпата за кърма.
5. Бутон за промяна на режима - Натиснете бутона, за да промените режима на работа на уреда.
6. Промяна на нивото на засмукване - Натиснете «+», за да увеличите мощността на засмукване.
7. USB-C гнездо за зареждане

05. ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Измиването и дезинфекцията са две различни операции. Те трябва да се извършват отделно, за да се защити вашето бебе и да се гарантира, че помпата за кърма работи правилно.

Измиване - измиване на повърхността на уреда и отстраняване на мръсотия.

Дезинфекция - убива организми като бактерии или вируси, които могат да присъстват на повърхността на оборудването.

Щит за гърди, мембрана, клапан, редуктор, съединител, контейнер за мляко:

Измийте и дезинфекцирайте - преди първа употреба.
Измийте - след всяка употреба.
Веднъж дневно и преди първа употреба - дезинфекция.

A. ИЗМИВАНЕ:

- Разглобете всички части на помпата за кърма (с изключение на помпеното устройство) и измийте в топла сапунена вода за 5 минути, след което изплакнете. Направете това веднага след използване на машината. Това ще премахне млечните отлагания и ще предотврати растежа на бактерии.
- Използвайте само питейна чешмяна вода за измиване. Използвайте бутилирана вода, ако водата в чешмата ви не отговаря на това изискване.
- Когато почиствате силиконови части, не използвайте четки. Внимавайте да не ги пробие.
- Използвайте мека течност за миене на съдове или сапун.
- Оставете частите да изсъхнат естествено. Съхранявайте сухите части на уреда на хладно и сухо място, когато не ги използвате.

B. ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

Мембрана, клапан, редуктор, съединител, щит за гърди, контейнер за мляко:

- Напълнете тенджерата или стерилизатора, така че всички компоненти вътре (мембрана, клапан, редуктор, конектор, щит за гърди, контейнер за мляко) да бъдат покрити, когато се поставят вътре. Оставете да заври. Поставете частите на помпата за кърма във вряща вода за 10 минути. Да не се вари.
- Оставете парчетата да изсъхнат естествено. Съхранявайте сухите комплекти на хладно и сухо място, когато не ги използвате.

C. ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМПЕНОТО УСТРОЙСТВО:

- Избършете помпения агрегат с мека, мокра кърпа и мека течност за миене на съдове. Други почистващи препарати или абразиви могат да повредят уреда и неговия дисплей.
- Когато не използвате помпения агрегат, съхранявайте го на хладно и сухо място.

06. СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМПАТА ЗА КЪРМА

РИС. С

Прикрепете компонентите, както е показано на РИС. С 1-5.

ЗАБЕЛЕЖКА: Измийте добре ръцете си със сапун и вода, преди да докоснете помпата за кърма и гърдата.

1. Поставете мембраната в конектора. **РИС. В1.**
2. Свържете клапана към конектора. **РИС. В2. ВНИМАНИЕ:** Клапанът трябва да бъде фиксиран с по-дългата си част към предпазителя на гърдите. За общ преглед: **РИС. С6**
3. Прикрепете съединителя с мембраната и клапана към контейнера за мляко, като започнете с поставяне на мембраната в жлеба. **РИС. В3.**
4. Поставете щита за гърди в контейнера за мляко. **РИС. В4.**
5. Прикрепете помпеното устройство към горната част на контейнера за мляко. **РИС. С5**
6. Поставете предпазителя за гърди върху гърдите си, така че зърното да е вътре в дренажния канал. Натиснете предпазителя за гърди и конектора на помпата за кърма към гърдата си с помощта на палеца и показалеца. **РИС. В6.**
7. Поставете помпата за кърма в корсета за сутиен/кърмене. **РИС. С7.**
8. Включете помпата за кърма, като натиснете бутона за захранване и изберете режима на работа, който ви подхожда.
9. За да налеее млякото, дръжте помпата за кърма хоризонтално и внимателно развийте помпата **РИС.** Дръжте контейнера за мляко с предпазителя за гърдите нагоре - поставете го плоско върху плота на масата (не го поставяйте нагоре, за да предотвратите изтичането на млякото). **РИС. С9.** Внимателно изсипете млякото в бутилката/контейнера за съхранение. **РИС. С10.**
10. Отстранете и почистете всички компоненти на помпата за кърма след употреба. **РИС. С11.**

БЕЛЕЖКИ:

- a. Преди всяка употреба проверявайте частите на помпата за кърма за повреди. Ако е необходимо, сменете повредените части с нови.
- b. Винаги проверявайте чистотата на компонентите, преди да използвате уреда.
- c. Ако диаметърът на предпазителя за гърди е твърде голям, използвайте предоставения редуктор, като го поставите вътре. **РИС. С12.**

БЕЛЕЖКИ:

Помпата за кърма стартира в режим на стимулация. Задайте удобното за вас ниво на сила на засмукване с помощта на бутоните +/-:

- Режим на стимулация - бързо изцеждане, което имитира естественото

смучене на кърмата от вашето бебе, за да стимулира притока на млякото. След 2 минути помпата за кърма автоматично ще активира режима на дълбоко изцеждане. Регулирайте нивото на засмукване с помощта на бутоните +/-, за да намерите най-високото ниво на засмукване, което е удобно за вас. Ако млякото започне да тече от гърдата ви преди да са изминали две минути, натиснете бутона за смяна на режима, за да превключите ръчно в режим на дълбока екстракция.

- Режим на дълбоко изцеждане - по-бавно изцеждане, което нежно и ефективно изсмуква млякото от гърдата. В този режим увеличете засмукването, докато почувствате лек дискомфорт (не болка) и намалете засмукването с един градус.

- Смесен режим - имитира сукателния рефлекс на бебето. Може да се използва след изцеждане, за да помогне за изпразване на гърдата и увеличаване на лактацията.

07. ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОМПАТА ЗА КЪРМА

Заредете напълно батерията на помпата за кърма, преди да я поставите на съхранение, ако възнамерявате да не използвате устройството за дълъг период от време. Заредете батерията на устройството, преди да се изтощи напълно. Това удължава живота на батерията. Ако помпата за кърма е била съхранявана на горещо място, батерията на устройството може да не работи в началото. Оставете помпата за кърма да се охлади за един час, преди да започнете да я използвате.

Указания:

LO - показва дали нивото на батерията е под 20%. **РИС. D1.**

Мигащи точки - помпа за кърма при зареждане. **РИС. D2.**

Три точки светят непрекъснато - батерията е напълно заредена. **РИС. D3.**

Не използвайте помпата за кърма по време на зареждане.

08. ПОДМЯНА НА КОНСУМАТИВИ

Консумативите са обект на естествено износване по време на работа на помпата за кърма и следователно не се покриват от гаранцията на производителя.

Износените компоненти на помпата за кърма, които влизат в контакт с млякото, трябва да бъдат заменени. Износеният компонент има пукнатина, деформация, потъмняване или отчетлива промяна в цвета.

- Мембраната трябва да се сменя на всеки 8 седмици (ако използвате помпата за кърма 1-3 пъти на ден) или на всеки 3-4 седмици (ако използвате помпата за кърма повече от 3 пъти на ден).

- Клапанът трябва да се сменя на всеки 2-3 месеца (ако използвате помпата за кърма 1-3 пъти на ден) или на всеки 4 седмици (ако използвате помпата за кърма повече от 3 пъти на ден).
- Предпазителът за гърди и конекторът трябва да се сменят на всеки 6 месеца, ако използвате помпата за кърма повече от 3 пъти на ден.

09. ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ

Помпата за кърма има вградена акумулаторна батерия. За да се предпази от повреда, устройството влиза в режим на съхранение след дълъг период на бездействие. За да деактивирате режима на съхранение, свържете устройството към захранване и го заредете за 2 часа. Преди да оставите помпата за кърма за дълъг период от време, уверете се, че:

- Всички компоненти на помпата за кърма са чисти.
- Почистили сте помпеното устройство.
- Батерията на устройството е напълно заредена.

10. ЧЗВ

1. **Устройството не стартира:** уверете се, че помпата за кърма е включена в работещ електрически контакт. Ако помпата за кърма няма източник на захранване, дисплеят ѝ няма да се включи и не се появява съобщение за грешка.
2. **Не/лошо засмукване:** уверете се, че всички части на помпата за кърма са разположени правилно. Разгледете помпата за кърма и се уверете, че всички части са чисти и неповредени. Сглобете отново помпата за кърма според инструкциите в раздела МОНТАЖ НА КЪРМАТА. Когато изцеждате, уверете се, че фунията е напълно прилепнала към гърдата.
3. **От гърдата е изтекло повече мляко, отколкото контейнерът може да побере:** използвайте влажна (не мокра) кърпа, за да избършете помпата за кърма. Измийте частите на помпата за кърма, които държат млякото, съгласно инструкциите в раздела ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ. Когато всички части на машината изсъхнат, сглобете отново.

11. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимост на контейнера за мляко: 210мл

Капацитет на батерията: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Входна мощност: 110-240V

Изходна мощност: 5V 1A

Време за работа: до 150 минути

Време за зареждане: приблизително 150 минути

Размери на помпата за кърма: 9x4,5x6 см x2

Тегло на помпата за кърма: 150g x2

Мощност на засмукване:

1. Режим на стимулация (8 нива): 9-24 kPa
2. Режим на дълбока екстракция (8 нива): 13-40 kPa
3. Смесен режим (8 нива): 10-24 kPa

Допустима промяна ± 5 Кра.

12. ГАРАНЦИОННА/ОПЛАКВАЩА КАРТА

Продуктът се предлага с 24-месечна гаранция. Гаранционните условия могат да бъдат намерени на: <https://nenop.pl/gwarancja>

Подробности, адрес за контакт и обслужване можете да намерите на: <https://nenop.pl/kontakt>

Спецификациите и съдържанието подлежат на промяна без предизвестие. Извиняваме се за причиненото неудобство.

МК

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Драги клиенти,
Уредот Neno Sole Twin што сте го купиле е двојна, електронска, трифазна пумпа за дојка која се користи за изцедување на мајчиното млеко од градите на жената по породувањето. Прочитајте го упатството пред употреба.

01. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

1. Секогаш го исклучувајте уредот по полнење ако не треба да ја полните батеријата на уредот.
2. Не го ставајте производот каде што е во опасност да падне во лавабо, кади или други контејнери.
3. Пумпата за дојка и нејзините компоненти не се отпорни на

топлина - чувајте го уредот подалеку од топли површини и отворен пламен.

4. Не го користете уредот во близина на запаливи материјали.
5. Пумпата за доење не треба да се остава без надзор кога е поврзана со извор на енергија.
6. Никогаш не го користете уредот ако е исфрлен или на друг начин оштетен.
7. Не користете уред чиј кабел за напојување или приклучок е оштетен.
8. Не го користете уредот во бања или туш.
9. Не ставајте уред под вода или во други течности.
10. Не мијте уредот под течаща вода.
11. Не го поврзувајте уредот со приклучок кој бил во контакт со вода или други течности.
12. Ако уредот е изложен на вода или други течности - не го допирајте уредот директно, исклучете го од напојувањето, исклучете го и контактирајте го производителот.
13. Овој уред е наменет за употреба од страна на еден корисник. Употребата на пумпата за дојка од страна на повеќе од едно лице носи ризик од повреда на корисниците и ја поништува гаранцијата.
14. Не ја поправајте или менувајте уредот сами.
15. Користете пумпа за дојка само како што е опишано во инструкциите. Не го користете уредот за други цели.
16. Прегледајте ги сите компоненти на пумпата за дојка пред секоја употреба.
17. Не загревајте испуштеното млеко во микробранова печка. Млекото загреано во микробранова печка може да го изгори лицето на бебето, бидејќи загревањето со микробранови може да создаде меурчиња на висока температура во течноста. Покрај тоа, микробрановите можат да го променат составот на млекото.
18. Не го доведувајте млекото да врие додека го загревате.
19. Пред да ја употребите пумпата за доење за прв пат, измијте и дезинфицирајте сите делови на машината кои ќе дојдат во директен контакт со вашата дојка или млеко.
20. По секоја употреба на пумпата за дојка, ги перете сите делови на машината кои доаѓаат во директен контакт со вашата дојка или млеко.
21. Посебно внимавајте кога ја користите пумпата за дојка или нејзините додатоци во близина на деца.
22. Не ја користете пумпата за дојка додека се полни.

02. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

1. Поврзете пумпа за дојка со напојување. Наполнете батериите за 2,5 часа.
2. Отстранете ја пумпата за дојка.
3. Исклучете делови од пумпата за дојка кои ќе дојдат во директен контакт со градите или млекото: отстранете го штитникот за гради од садот за млеко, потоа го повлечете вентилот надолу и мембраната нагоре за да се исклучи од конекторот.
4. Почистете ги компонентите на апаратот (погледнете во делот за чистење и дезинфекција).

ЗАБЕЛЕШКА!

Користете пумпа за дојка во исправена положба. Употребата во било која друга положба (на пример, во лежечка положба) ќе резултира со пумпа за дојка која не одговара правилно на градите и млекото ќе истекува.

03. ЕЛЕМЕНТИ

СЛИКА А

1. Уред за пумпање x2
2. Контејнер за млеко x2
3. Конектор x2
4. Вентил x4
5. USB-C кабел за полнење x2
6. Граден штит 24mm x2
7. Мембрана x4
8. Редуктор на градниот штит 20mm x2

04. ОПИС НА УРЕДОТ ЗА ПУМПАЊЕ

СЛИКА В

1. Икона на избраниот режим (I точка - фаза на стимулација, II точки - фаза на длабока екстракција, III точки - мешана фаза).
2. Копче за напојување - Задржете го копчето 2 секунди за да го вклучите или исклучите уредот. Кога уредот е вклучен, притиснете за да ја паузирате пумпата за дојка.
3. Промена на нивото на вшмукување - Притиснете «-» за да ја намалите моќта на вшмукување.
4. Икона на избраниот режим (L1-L8)/времето на пумпата за дојка.
5. Копче за промена на режимот - Притиснете го копчето за да го смените режимот на работа на уредот.
6. Промена на нивото на вшмукување - Притиснете «+» за да ја зголемите моќта на вшмукување.
7. USB-C приклучок за полнење

05. ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Миене и дезинфекција се две различни операции. Тие мора да се изведуваат одделно за да се заштити бебето и да се осигура дека пумпата за доење работи правилно.

Миене - миене на површината на уредот и отстранување на нечистотија.

Дезинфекција - убивање на организми како што се бактерии или вируси кои можат да бидат присутни на површината на опремата.

Штит за гради, мембрана, вентил, редуктор, конектор, контејнер за млеко:

Измијте и дезинфицирајте - пред прва употреба.

Миене - по секоја употреба.

Еднаш дневно и пред прва употреба - дезинфекција.

A. МИЕЊЕ:

- Ги расклопете сите делови на пумпата за доење (освен уредот за пумпање) и измијте во топла вода со сапун 5 минути, а потоа исплакнете. Направете го ова веднаш по користењето на машината. Ова ќе ги отстрани млечните наслаги и ќе го спречи растот на бактериите.
- Користете само вода од чешма за миене. Користете флаширана вода ако водата во чешмата не го исполнува ова барање.
- Кога чистите силиконски делови, не користете четки. Внимавајте да не ги пробие.
- Користите блага течност за миене садови или сапун.
- Оставете деловите да се исушат природно. Чувајте суви делови од апаратот на ладно и суво место кога не ги користите.

B. ДЕЗИНФЕКЦИЈА:

Мембрана, вентил, редуктор, конектор, штит за гради, сад за млеко:

- Наполнете тенџере со вода така што сите компоненти внатре (мембрана, вентил, редуктор, конектор, штитник за гради, сад за млеко) се покриени кога се ставени внатре. Доведете до вриење. Ставете делови од пумпата за дојка во врела вода на 10 минути. Не вривајте.
- Оставете парчињата да се исушат природно. Чувајте суви предмети на ладно и суво место кога не ги користите.

C. ЧИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ ЗА ПУМПАЊЕ:

- Избришете пумпата со мека, влажна крпа и блага течност за миене садови. Други чистачи или абразиви може да го оштетат уредот и неговиот екран.
- Кога не ја користите пумпата, чувајте ја на ладно и суво место.

06. МОНТАЖА И УПОТРЕБА НА ПУМПАТА ЗА ДОЈКА

СЛИКА С

Прикачете ги компонентите како што е прикажано на сликата С 1-5.

Забелешка: Темелно ги измијте рацете со сапун и вода пред да ја допрете пумпата за дојка и градите.

1. Вметнете мембрана во конекторот. **СЛИКА С1.**
2. Поврзете го вентилот со конекторот. **СЛИКА С2. ВНИМАНИЕ:** Вентилот треба да биде фиксиран со подолгиот дел кон градниот штитник. За преглед: **СЛИКА С6.**
3. Прикачете конектор со мембраната и вентилот на контејнерот за млеко, почнувајќи со поставување на мембраната во жлебот. **СЛИКА С3.**
4. Ставете штитник за гради во садот за млеко. **СЛИКА С4.**
5. Прикачете уред за пумпање на врвот на садот за млеко. **СЛИКА С5.**
6. Ставете штитник за гради на градите така што брадавицата е во каналот за одводнување. Притиснете штитникот за гради и конекторот на пумпата за гради со палецот и показалецот. **СЛИКА С6.**
7. Вметнете пумпа за дојка во градникот. **СЛИКА С7.**
8. Вклучете пумпа за дојка со притискање на копчето за напојување и изберете режим на работа кој ви одговара.
9. За да се истури млекото, држете пумпата за дојка хоризонтално и внимателно ја одвртете пумпата. Држете го контејнерот за млеко со градниот штит свртен нагоре - поставете го рамно на врвот на масата (не го поставувајте нагоре за да спречите млекото да истекува). **СЛИКА С9.** Внимателно истурете млеко во шишето / контејнер за складирање. **СЛИКА С10.**
10. Отстранете и исчистете сите компоненти на пумпата за дојка по употребата. **СЛИКА С11.**

БЕЛЕШКИ:

- а. Пред секоја употреба, проверете деловите на пумпата за доење дали има оштетување. Ако е потребно, заменете оштетени делови со нови.
- б. Секогаш ја проверувајте чистотата на компонентите пред употреба на уредот.
- в. Ако дијаметарот на градниот штит е премногу голем, користете го доставениот редуктор со вметнување внатре. **СЛИКА С12.**

БЕЛЕШКИ:

Пумпата за доење започнува во режим на стимулација. Поставете го нивото на сила на вшмукување удобно за вас со помош на +/- копчињата:

- Режим на стимулација - брзо пумпање кое го имитира природното цицање на мајчиното млеко од страна на бебето за да го стимулира протокот на млеко. По 2 минути, пумпата за дојка автоматски ќе го активира режимот на длабоко пумпање. Подесете го нивото на вшмукување со помош на копчињата +/- за да го најдете највисокото ниво на вшмукување кое е удобно за вас. Ако млекото почне да тече од градите пред да поминат две минути, притиснете копче за промена на режимот за рачно да се префрлите во режим на длабока екстракција.
- Режим на длабоко пумпање - побавно пумпање кое нежно и ефикасно го цица млекото од градите. Во овој режим го зголемете вшмукувањето додека не почувствувате мала непријатност (не болка) и го намалете вшмукувањето за еден степен.
- Мешан режим - го имитира рефлексот на цицање на бебето. Може да се користи по пумпање за да помогне во празнењето на градите и да ја зголеми лактацијата.

07. ПОЛНЕЊЕ НА ПУМПАТА ЗА ДОЈКА

Целосно ја наполнете батеријата на пумпата за дојка пред да ја ставите во складирање, ако немате намера да го користите уредот подолго време. Наполнете батеријата на уредот пред да биде целосно исцрпена. Ова го продолжува животот на батеријата. Ако пумпата за дојка се чува на топло место, батеријата на уредот може да не работи. Оставете пумпата за дојка да се олади еден час пред да почнете да ја користите.

Индикации:

LO - покажува дали нивото на батеријата е под 20%. **СЛИКА D1.**

Трепкачки точки - пумпа за дојка под полнење. **СЛИКА D2.**

Три точки светат континуирано - батеријата е целосно наполнета.

СЛИКА D3.

Не ја користете пумпата за дојка додека се полни.

08. ЗАМЕНА НА ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ

Потрошните компоненти се предмет на природна абeње за време на работа на пумпата за дојка и затоа не се покриени со гаранција на производителот.

Истрошените компоненти на пумпата за дојка кои доаѓаат во контакт со млекото треба да се заменат. Истрошената компонента има пукнатина, деформација, оцрнување или посебна промена на бојата.

- Мембраната треба да се менува на секои 8 недели (ако ја користите пумпата за доење 1-3 пати дневно) или на секои 3-4 недели (ако ја користите пумпата за доење повеќе од 3 пати дневно).
- Валвулата треба да се менува на секои 2-3 месеци (ако ја користите пумпата за доење 1-3 пати дневно) или на секои 4 недели (ако ја користите пумпата повеќе од 3 пати дневно).
- Штитникот за гради и конекторот треба да се менуваат на секои 6 месеци ако ја користите пумпата за дојка повеќе од 3 пати дневно.

09. ДОЛГОРОЧНО СКЛАДИРАЊЕ

Пумпата за доење има вградена батерија за полнење. За да се заштити од оштетување, уредот влегува во режим на складирање по долг период на неактивност. За да го деактивирате режимот за складирање, поврзете го уредот со напојување и го полнете за 2 часа. Пред да ја ставите пумпата за доење на подолг временски период, уверете се дека:

- Сите компоненти на пумпата за дојка се чисти.
- Вие го исчистихте уредот за пумпање.
- Батеријата на уредот е целосно наполнета.

10. ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

1. **Уредот не се стартува:** уверете се дека пумпата за дојка е приклучена во електричен контакт. Ако пумпата за доење нема извор на енергија, нејзиниот екран нема да се вклучи и нема да се појави порака за грешка.
2. **Не/слабо вшмукување:** уверете се дека сите делови на пумпата за дојка се поставени правилно. Отстранете пумпата за дојка и се уверете дека сите делови се чисти и неоштетени. Повторно ја монтирајте пумпата за дојка според упатствата во делот ЛАКТАТОРСКА МОНТАЖА. Кога пумпате, уверете се дека инката е целосно сместена на градите.
3. **Од градите потекло повеќе млеко отколку што може да издржи садот:** използвайте влажна (не влажна) крпа за да ја избришете пумпата за доење. Измијте делови од пумпата за дојка кои содржат млеко според упатствата во делот за чистење и дезинфекција. Кога сите делови на машината се суви, повторно се монтираат.

11. СПЕЦИФИКАЦИЈА

Капацитет на контејнер за млеко: 210ml

Капацитет на батеријата: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Влезна моќност: 110-240V

Излезна моќност: 5V 1A

Работно време: до 150 минути

Време на полнење: околу 150 минути

Димензии на пумпата за дојка: 9x4,5x6 cm x2

Тежина на пумпата за дојка: 150g x2

Моќ на вшмукување:

1. Режим на стимулација (8 нивоа): 9-24 kPa
2. Режим на длабока екстракција (8 нивоа): 13-40 kPa
3. Мешан режим (8 нивоа): 10-24 kPa

Дозволена варијација ± 5 Кра.

12. ГАРАНЦИЈА / КАРТИЧКА ЗА ЖАЛБИ

Производот доаѓа со 24-месечна гаранција. Условите за гаранција може да се најдат на: <https://neno.pl/gwarancja>

Детали, контакт и сервисна адреса може да се најдат на:

<https://neno.pl/kontakt>

Спецификациите и содржината се предмет на промена без известување. Се извинуваме за непријатностите.

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

Caro Cliente,

O dispositivo Neno Sole Twin que comprou é um extrator de leite duplo, eletrônico e trifásico utilizado para extrair o leite materno do peito de uma mulher após o parto. Leia o manual de instruções antes de usar.

01. PRECAUÇÕES

1. Desligue sempre o dispositivo depois de carregar se não precisar de carregar a bateria do dispositivo.
2. Não coloque o produto onde corra o risco de cair em pias, banheiras ou outros recipientes.

3. A bomba tira leite e os seus componentes não são resistentes ao calor – mantenha o dispositivo longe de superfícies quentes e chamas abertas.
4. Não utilize o dispositivo perto de materiais inflamáveis.
5. O extrator de leite não deve ser deixado sem vigilância quando ligado a uma fonte de alimentação.
6. Nunca utilize o dispositivo se este tiver caído ou danificado.
7. Não utilize um dispositivo cujo cabo de alimentação ou ficha esteja danificado.
8. Não utilize o dispositivo na banheira ou chuveiro.
9. Não coloque o dispositivo debaixo de água ou noutros líquidos.
10. Não lavar a unidade em água corrente.
11. Não ligue o dispositivo a uma tomada que tenha estado em contacto com água ou outros líquidos.
12. Se o dispositivo tiver sido exposto a água ou outros líquidos - não toque diretamente no dispositivo, desligue-o da fonte de alimentação, desligue-o e contacte o fabricante.
13. Este aparelho destina-se a ser utilizado por um único utilizador. A utilização do extrator de leite por mais do que uma pessoa acarreta um risco de danos para as utilizadoras e anula a garantia.
14. Não repare ou modifique a unidade por conta própria.
15. Utilize o extrator de leite apenas conforme descrito nas instruções. Não utilize o dispositivo para qualquer outra finalidade.
16. Inspeccione todos os componentes da bomba tira leite antes de cada utilização.
17. Não aqueça o leite descarregado no micro-ondas. O leite aquecido no micro-ondas pode queimar o rosto do bebé porque o aquecimento com ondas de micro-ondas pode criar bolhas de alta temperatura no líquido. Além disso, as ondas de micro-ondas podem alterar a composição do leite.
18. Não leve o leite à ebulição enquanto o aquece.
19. Antes de utilizar o extrator de leite pela primeira vez, lave e desinfete todas as partes da máquina que entrem em contacto direto com o seu peito ou leite.
20. Após cada utilização do extrator de leite, lave todas as partes da máquina que entrem em contacto direto com o seu peito ou leite.
21. Tome especial cuidado ao utilizar o extrator de leite ou os seus acessórios perto de crianças.
22. Não utilize o extrator de leite durante o carregamento.

02. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Ligue o extrator de leite à fonte de alimentação. Carregue as baterias durante 2,5 horas.
2. Retire o extrator de leite.
3. Desligue as partes do extrator de leite que entrarão em contacto direto com o peito ou o leite: retire a proteção mamária do recipiente de leite e, em seguida, puxe a válvula para baixo e a membrana para cima para se desligar do conector.
4. Limpe os componentes do aparelho (consulte a secção LIMPEZA E DESINFECÇÃO).

ATENÇÃO!

Utilize o extrator de leite na posição vertical. A utilização em qualquer outra posição (por exemplo, deitada) resultará na não adequação adequada do extrator de leite ao peito e na fuga de leite.

03. ELEMENTOS

FIG. A

1. Dispositivo de bombeamento x2
2. Recipiente de leite x2
3. Conector x2
4. Válvula x4
5. Cabo de carregamento USB-C x2
6. Protetor mamário 24mm x2
7. Membrana x4
8. Redutor de proteção mamária 20mm x2

04. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO DE BOMBAGEM

FIG. B

1. Ícone do modo selecionado (I dot - fase de estimulação, II dots - fase de extração profunda, III dots - fase mista).
2. Botão liga/desliga - Mantenha o botão pressionado por 2 segundos para ligar ou desligar o dispositivo. Quando o dispositivo estiver ligado, pressione para pausar o extrator de leite.
3. Alterar o nível de sucção - Pressione „-“ para reduzir o poder de sucção.
4. Ícone do modo selecionado (L1-L8)/hora do extrator de leite.
5. Botão de mudança de modo - Pressione o botão para alterar o modo de operação da unidade.
6. Alterar o nível de sucção - Pressione „+“ para aumentar o poder de sucção.
7. Tomada de carregamento USB-C.

05. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

A lavagem e a desinfecção são duas operações diferentes. Devem ser realizadas separadamente para proteger o seu bebê e para garantir que o extrator de leite funciona corretamente.

Lavagem - lavar a superfície da unidade e remover a sujeira.

Desinfecção - matando organismos como bactérias ou vírus que podem estar presentes na superfície do equipamento.

Protetor mamário, membrana, válvula, redutor, conector, recipiente de leite:

Lave e desinfete - antes da primeira utilização.

Lavar - após cada utilização.

Uma vez por dia e antes do primeiro uso - desinfecção.

A. LAVAGEM:

- Desmonte todas as partes da bomba tira leite (exceto o dispositivo de bombeamento) e lave com água morna e sabão por 5 minutos, depois enxágue.

Faça isso imediatamente após usar a máquina. Isto irá remover os depósitos de leite e prevenir o crescimento bacteriano.

- Utilize apenas água potável da torneira para lavar. Utilize água engarrafada se a água da torneira não cumprir este requisito.

- Ao limpar peças de silicone, não utilize escovas. Tenha cuidado para não perfurá-las.

- Use um líquido ou sabonete suave para lavar louça.

- Deixe as peças secarem naturalmente. Guarde as peças secas do aparelho num local fresco e seco quando não as estiver a utilizar.

B. DESINFECÇÃO:

Membrana, válvula, redutor, conector, proteção mamária, recipiente para leite:

- Encha o pote ou esterilizador com água para que todos os componentes dentro (membrana, válvula, redutor, conector, protetor de mama, recipiente de leite) sejam cobertos quando colocados dentro. Leve à ebulição. Coloque as partes da bomba tira leite em água a ferver durante 10 minutos. Não ferva.

- Deixe as peças secar naturalmente. Guarde os artigos do kit seco num local fresco e seco quando não os estiver a utilizar.

C. LIMPEZA DO DISPOSITIVO DE BOMBEAMENTO:

- Limpe a unidade da bomba com um pano macio e molhado e um líquido/sabão de lavagem suave da louça. Outros produtos de limpeza ou abrasivos podem danificar a unidade e o seu ecrã.

- Quando não estiver a utilizar a unidade de bomba, guarde-a num local fresco e seco.

06. MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DO EXTRATOR DE LEITE

FIG. C

Encaixe os componentes como mostrado nas FIGS. C 1-5.

NOTA: Lave bem as mãos com água e sabão antes de tocar no extrator de leite e no peito.

1. Insira a membrana no conector. **FIG. C1.**
2. Conecte a válvula ao conector. **FIG. C2. ATENÇÃO:** A válvula deve ser fixada com a sua parte mais comprida em direção ao escudo mamário. Para uma visão geral: **FIG. C6.**
3. Fixar o conector com a membrana e a válvula ao recipiente de leite, começando por colocar a membrana na ranhura. **FIG. C3.**
4. Coloque a proteção mamária no recipiente de leite. **FIG. C4.**
5. Encaixe o dispositivo de bombeamento na parte superior do recipiente de leite. **FIG. C5.**
6. Coloque o protetor mamário no peito para que o mamilo fique dentro do canal de drenagem. Pressione o protetor mamário e o conector da bomba de leite contra o peito usando o polegar e o indicador. **FIG. C6.**
7. Insira a bomba tira leite no espartilho do sutiã/lactação. **FIG. C7.**
8. Ligue o extrator de leite premindo o botão liga/desliga e selecione o modo de funcionamento que mais lhe convém.
9. Para deitar o leite, segure na bomba tira leite na horizontal e desenrosque cuidadosamente a bomba **FIG C8**. Segure o recipiente de leite com a proteção do peito virada para cima - coloque-o sobre o tampo da mesa (não o coloque para cima para evitar que o leite saia). **FIG C9**. Deite cuidadosamente o leite no frasco/recipiente de armazenamento. **FIG C10**.
10. Retire e limpe todos os componentes da bomba tira leite após a utilização. **FIG C11**.

OBSERVAÇÕES:

- a. Antes de cada utilização, verifique se as partes do extrator de leite estão danificadas. Se necessário, substitua as peças danificadas por novas.
- b. Verifique sempre a limpeza dos componentes antes de utilizar a unidade.
- c. Se o diâmetro do escudo mamário for demasiado grande, utilize o redutor fornecido, inserindo-o no interior. **FIG. C12.**

OBSERVAÇÕES:

O extrator de leite começa em modo de estimulação. Defina o nível de força de sucção confortável para você usando os botões +/-:

- Modo de estimulação - bombeamento rápido que imita a sucção natural do leite materno do seu bebê para estimular o fluxo de leite. Após 2 minutos, o extrator de leite ativará automaticamente o modo de bombeamento profundo. Ajuste o nível de sucção usando os botões +/- para encontrar o nível mais alto de sucção que seja confortável para você. Se o leite começar a fluir do peito antes de decorridos dois minutos, pressione o botão de mudança de modo para mudar manualmente para o modo de extração profunda.
- Modo de bombeamento profundo - bombeamento mais lento que suga suave e eficientemente o leite do peito. Neste modo, aumente a sucção até sentir um ligeiro desconforto (não dor) e reduza a sucção em um grau.
- Modo misto - imita o reflexo de sucção do bebê. Pode ser usado após o bombeamento para ajudar a esvaziar a mama e aumentar a lactação.

07. CARREGAR O EXTRATOR DE LEITE

Carregue totalmente a bateria do extrator de leite antes de a colocar em armazenamento, se pretender não utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo. Carregue a bateria do dispositivo antes que ela se esgote completamente. Isto prolonga a vida útil da bateria. Se a bomba tira leite tiver sido armazenada num local quente, a bateria do dispositivo pode não funcionar inicialmente. Deixe o extrator de leite arrefecer durante uma hora antes de começar a utilizá-lo.

Indicações:

LO - exibe se o nível da bateria estiver abaixo de 20%. **FIG D1.**

Pontos intermitentes - bomba tira leite sob carregamento. **FIG D2.**

Três pontos brilhando continuamente - bateria totalmente carregada. **FIG D3.**

Não utilize o extrator de leite durante o carregamento.

08. SUBSTITUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS

Os componentes consumíveis estão sujeitos a desgaste natural durante o funcionamento do extrator de leite e, portanto, não são cobertos pela garantia do fabricante.

Os componentes desgastados da bomba tira leite que entrem em contacto com o leite devem ser substituídos. Um componente desgastado tem uma fissura, deformação, mancha ou uma mudança distinta de cor.

- A membrana deve ser substituída a cada 8 semanas (se utilizar o extrator de leite 1-3 vezes por dia) ou a cada 3-4 semanas (se utilizar o extrator de leite mais de 3 vezes por dia).

- A válvula deve ser substituída a cada 2-3 meses (se utilizar o extrator de leite 1-3 vezes por dia) ou a cada 4 semanas (se utilizar o extrator de leite mais de 3 vezes por dia).
- O protetor mamário e o conector devem ser substituídos a cada 6 meses se utilizar o extrator de leite mais de 3 vezes por dia.

09. ARMAZENAMENTO A LONGO PRAZO

O extrator de leite tem uma bateria recarregável incorporada. Para se proteger de danos, o dispositivo entra no modo de armazenamento após um longo período de inatividade. Para desativar o modo de armazenamento, conecte o dispositivo à alimentação e carregue-o por 2 horas. Antes de guardar o extrator de leite durante um longo período de tempo, certifique-se de que:

- Todos os componentes da bomba tira leite estão limpos.
- Você limpou o dispositivo de bombeamento.
- A bateria do dispositivo está totalmente carregada.

10. PERGUNTAS FREQUENTES

1. **O dispositivo não arranca:** certifique-se de que o extrator de leite está ligado a uma tomada elétrica em funcionamento. Se o extrator de leite não tiver fonte de alimentação, o ecrã não ligará e não será apresentada qualquer mensagem de erro.
2. **Não/sucção deficiente:** certifique-se de que todas as peças da bomba tira leite estão posicionadas corretamente. Desmonte o extrator de leite e certifique-se de que todas as peças estão limpas e sem danos. Remonte o extrator de leite de acordo com as instruções na secção LACTATOR ASSEMBLY. Ao bombear, certifique-se de que o funil está totalmente assente contra o peito.
3. **Da mama saiu mais leite do que o recipiente pode reter:** utilize um pano húmido (não molhado) para limpar o extrator de leite. Lave as partes do extrator de leite que contêm leite de acordo com as instruções na secção LIMPEZA E DESINFEÇÃO. Quando todas as peças da máquina estiverem secas, remonte.

11. ESPECIFICAÇÃO

Capacidade do recipiente de leite: 210ml

Capacidade da bateria: 3.7V 1500 mAh Li-Po

Potência de entrada: 110-240V

Potência de saída: 5V 1A

Tempo de funcionamento: até 150min

Tempo de carregamento: aprox. 150min

Dimensões da bomba tira leite: 9x4,5x6 cm x2

Peso da bomba tira leite: 150g x2

Poder de sucção:

1. Modo de estimulação (8 níveis): 9-24 kPa
2. Modo de extração profunda (8 níveis): 13-40 kPa
3. Modo misto (8 níveis): 10-24 kPa

Variação admissível ± 5 Kpa.

12. GARANTIA/CARTÃO DE RECLAMAÇÕES

O produto vem com uma garantia de 24 meses. As condições de garantia podem ser encontradas em: **<https://nenopl/gwarancja>**

Detalhes, contato e endereço de serviço podem ser encontrados em:

<https://nenopl/kontakt>

As especificações e conteúdos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Pedimos desculpa pelo inconveniente.

PL



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, ich akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

EN



The crossed out trash can symbol indicates that unusable electrical or electronic devices, its accessories (such as power supplies, cords) or components (for example batteries, if included) cannot be disposed of alongside with household waste. In order to dispose of the devices or its components (for example, batteries) deliver the device to the collection point, where it will be accepted free of charge. Disposal is subject to the recast version of the WEEE Directive (2012/19/ EU) and the Directive on batteries and accumulators (2006/66 / EC). Proper disposal of the device prevents degradation of the natural environment. Information about the collection points of the facilities is issued by the competent local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for by the law in force in the given area.

DE



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass unbrauchbare elektrische oder elektronische Geräte, deren Zubehör (z.B. Netzteile, Kabel) oder Bestandteile (z.B. Batterien, falls vorhanden) nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden können. Um die Geräte oder ihre Bestandteile (z. B. Batterien) zu entsorgen, geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle ab, wo es kostenlos angenommen wird. Die Entsorgung unterliegt der Neufassung der WEEE-Richtlinie (2012/19/ EU) und der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren (2006/66 / EG). Die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts verhindert eine Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt. Informationen über die Sammelstellen der Einrichtungen werden von den zuständigen lokalen Behörden herausgegeben. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird durch die in dem jeweiligen Gebiet geltenden Gesetze geahndet.

CZ



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že nepoužitelná elektrická nebo elektronická zařízení, jejich příslušenství (jako jsou napájecí zdroje, kabely) nebo součásti (například baterie, pokud jsou součástí balení) nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Za účelem likvidace zařízení nebo jeho součástí (například baterií) odevzdejte zařízení na sběrné místo, kde bude přijato zdarma. Likvidace podléhá přepracovanému znění směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) a směrnici o bateriích a akumulátorech (2006/66/ES). Správná likvidace zařízení zabraňuje znehodnocování přírodního prostředí. Informace o sběrných místech zařízení vydávají příslušné místní úřady. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným zákonem platným v dané oblasti.

HU



Az áthúzott kukaszimbólum azt jelzi, hogy a használatatlan elektromos vagy elektronikus eszközök, azok tartozékai (például tápegységek, kábelek) vagy alkatrészei (például akkumulátorok, ha vannak benne) nem helyezhetők el a háztartási hulladékkal együtt. A készülékek vagy alkatrészeik (pl. akkumulátorok) ártalmatlanításához szállítsa a készüléket a gyűjtőhelyre, ahol azt ingyenesen átveszik. Az ártalmatlanításra az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló irányelv (2012/19/ EU) és az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv (2006/66/EK) átdolgozott változata vonatkozik. A készülék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza a természeti környezetet károsodását. A létesítmények gyűjtőhelyeiről az illetékes helyi hatóságok adnak tájékoztatást. A hulladék helytelen ártalmatlanítása az adott területen hatályos törvények által előírt szankciókkal jár.

SK



Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že nepoužiteľné elektrické alebo elektronické zariadenia, ich príslušenstvo (napríklad napájacie zdroje, káble) alebo komponenty (napríklad batérie, ak sú súčasťou balenia) nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak chcete zlikvidovať zariadenia alebo ich súčasti (napríklad batérie), odovzdajte zariadenie na zbernom mieste, kde bude prijaté bezplatne. Likvidácia podlieha prepracovanej verzii smernice o OEEZ (2012/19/EU) a smernici o batériách a akumulátoroch (2006/66/ES). Správna likvidácia zariadenia zabraňuje znehodnocovaniu prírodného prostredia. Informácie o zberných miestach zariadení vydávajú príslušné miestne orgány. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám stanoveným v zákone platnom v danej oblasti.

SE



Symbolen med den överstrukna soptunnan visar att oavvändbara elektriska eller elektroniska apparater, deras tillbehör (t.ex. nätaggregat, sladdar) eller komponenter (t.ex. batterier, om de ingår) inte kan kastas tillsammans med hushållsavfallet. Om du vill göra dig av med apparaterna eller deras komponenter (t.ex. batterier) ska du lämna apparaten till ett insamlingsställe, där den tas emot utan kostnad. Bortskaffandet omfattas av den omarbeteade versionen av WEEE-direktivet (2012/19/ EU) och direktivet om batterier och ackumulatörer (2006/66/ EG). Korrekt bortskaffande av enheten förhindrar försämring av den naturliga miljön. Information om anläggningarnas insamlingsställen utfärdas av de behöriga lokala myndigheterna. Felaktigt bortskaffande av avfall är föremål för påföljder som föreskrivs i den lag som gäller inom det aktuella området.

FI



Yliviiivattu roskakorisympoli osoittaa, että käyttökelvottomia sähkö- tai elektroniikkalaitteita, niiden lisävarusteita (kuten virtalähteitä, johtoja) tai komponentteja (esimerkiksi paristoja, jos ne ovat mukana) ei voi hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävittäaksesi laitteen tai niiden osat (esimerkiksi paristot) toimita ne keräyspisteeseen, jossa ne otetaan vastaan maksutta. Hävittämiseen sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromodirektiivin uudelleenlaadittua versiota (2012/19/EU) sekä paristoja ja akkuja koskevaa direktiiviä (2006/66/EY). Laitteen asianmukainen hävittäminen estää luonnonympäristön pilaantumisen. Tiedot laitojen keräyspisteistä antavat toimivaltaiset paikallisviranomaiset. Virheellisestä jätteiden hävittämisestä määrätään rangaistus, josta säädetään kyseisellä alueella voimassa olevassa laissa.

NO



Symbolet med en overkrysset søppelbøtte betyr at ubrugelige elektriske eller elektroniske apparater, tilbehør (som strømforsyninger, ledninger) eller komponenter (for eksempel batterier, hvis de følger med) ikke kan kastes sammen med husholdningsavfallet. For å avhende enhetene eller komponentene (for eksempel batterier) må du levere enheten til innsamlingsstedet, der den vil bli akseptert gratis. Avhending er underlagt den omarbeidede versjonen av WEEE-direktivet (2012/19/EU) og direktivet om batterier og akkumulatorer (2006/66/EF). Riktig avhending av enheten forhindrer forringelse av det naturlige miljøet. Informasjon om innsamlingsstedene for anleggene utstedes av de kompetente lokale myndighetene. Feil avhending av avfall er underlagt straffer i henhold til gjeldende lov i det gitte området.

DK



Symbolet med den overstreget skraldespand angiver, at ubrugelige elektriske eller elektroniske apparater, tilbehør (f.eks. strømforsyninger, ledninger) eller komponenter (f.eks. batterier, hvis de medfølger) ikke kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. For at bortskaffe apparatet eller dets komponenter (f.eks. batterier) skal du aflevere apparatet på et indsamlingssted, hvor det vil blive modtaget gratis. Bortskaffelse er underlagt den omarbejdede udgave af WEEE-direktivet (2012/19/ EU) og direktivet om batterier og akkumulatorer (2006/66 / EF). Korrekt bortskaffelse af enheden forhindrer nedbrydning af det naturlige miljø. Oplysninger om indsamlingsstederne for anlæggene udleveres af de kompetente lokale myndigheder. Ukorrekt bortskaffelse af affald er underlagt sanktioner, der er fastsat i den gældende lovgivning i det pågældende område.

NL



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat onbruikbare elektrische of elektronische apparaten, hun toebehoren (zoals voedingen, snoeren) of onderdelen (bijvoorbeeld batterijen, indien meegeleverd) niet samen met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Voor de verwijdering van de apparaten of onderdelen ervan (bijvoorbeeld batterijen) moet u het apparaat naar het inzamelpunt brengen, waar het gratis wordt geaccepteerd. De verwijdering is onderworpen aan de herschikking van de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de richtlijn inzake batterijen en accu's (2006/66/EG). Een correcte verwijdering van het apparaat voorkomt aantasting van de natuurlijke omgeving. Informatie over de inzamelpunten van de voorzieningen wordt verstrekt door de bevoegde lokale autoriteiten. Op onjuiste verwijdering van afval staan sancties waarin de in het betreffende gebied geldende wetgeving voorziet.

ES



El símbolo del cubo de basura tachado indica que los aparatos eléctricos o electrónicos inservibles, sus accesorios (como fuentes de alimentación, cables) o componentes (por ejemplo, pilas, si se incluyen) no pueden eliminarse junto con la basura doméstica. Para deshacerse de los aparatos o sus componentes (por ejemplo, pilas) entregue el aparato en el punto de recogida, donde será aceptado gratuitamente. La eliminación está sujeta a la versión refundida de la Directiva RAEE (2012/19/UE) y a la Directiva sobre pilas y acumuladores (2006/66 / CE). La eliminación adecuada del dispositivo evita la degradación del medio ambiente natural. La información sobre los puntos de recogida de las instalaciones es emitida por las autoridades locales competentes. La eliminación incorrecta de los residuos está sujeta a las sanciones previstas por la legislación vigente en la zona determinada.

IT



Il simbolo del cestino barrato indica che i dispositivi elettrici o elettronici inutilizzabili, i loro accessori (come alimentatori, cavi) o componenti (ad esempio le batterie, se incluse) non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per smaltire i dispositivi o i loro componenti (ad esempio, le batterie) consegnare il dispositivo al punto di raccolta, dove sarà accettato gratuitamente. Lo smaltimento è soggetto alla versione rivista della Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla Direttiva su pile e accumulatori (2006/66/CE). Lo smaltimento corretto del dispositivo previene il degrado dell'ambiente naturale. Le informazioni sui punti di raccolta degli impianti sono fornite dalle autorità locali competenti. Lo smaltimento non corretto dei rifiuti è soggetto alle sanzioni previste dalla legge in vigore nella zona in questione.

FR



Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques ou électroniques inutilisables, leurs accessoires (tels que les blocs d'alimentation, les cordons) ou leurs composants (par exemple les piles, si elles sont incluses) ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour se débarrasser des appareils ou de leurs composants (par exemple, les piles), il faut déposer l'appareil au point de collecte, où il sera accepté gratuitement. L'élimination est soumise à la version remaniée de la directive DEEE (2012/19/UE) et à la directive sur les piles et accumulateurs (2006/66/CE). L'élimination correcte de l'appareil permet d'éviter la dégradation de l'environnement naturel. Les informations sur les points de collecte des installations sont délivrées par les autorités locales compétentes. L'élimination incorrecte des déchets est passible des sanctions prévues par la loi en vigueur dans la région concernée.

RO



Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice inutilizabile, accesoriile acestora (cum ar fi sursele de alimentare, cablurile) sau componentele (de exemplu, bateriile, dacă sunt incluse) nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Pentru a elimina dispozitivele sau componentele acestora (de exemplu, bateriile), livrați dispozitivul la punctul de colectare, unde va fi acceptat gratuit. Eliminarea este supusă versiunii reformulate a Directivei DEEE (2012/19/UE) și a Directivei privind bateriile și acumulatorii (2006/66/CE). Eliminarea corectă a dispozitivului previne degradarea mediului natural. Informațiile privind punctele de colectare a instalațiilor sunt emise de către autoritățile locale competente. Eliminarea incorectă a deșeurilor este supusă sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare în zona respectivă.

HR/BA



Prekriženi simbol kante označava da se neupotrebljivi električni ili elektronički uređaji, njihovi pribor (poput napajanja, kabela) ili komponente (poput baterija, ako su uključeni) ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Za odlaganje uređaja ili njegovih komponenti (poput baterija) odnesite uređaj na sabirno mjesto gdje će biti prihvaćen besplatno. Zbrinjavanje se vrši u skladu s revidiranom verzijom Direktive o baterijama i baterijama (2012/19/AUD) i Direktive o baterijama (2006/66/AUD). Pravilno odlaganje uređaja sprječava propadanje okoliša. Informacije o mjestima sakupljanja otpada pružaju nadležne lokalne vlasti. Nepravilno odlaganje otpada podrazumijeva kazne predviđene važećim zakonodavstvom na tom području.

LT



Perbrauktas šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad netinkamu naudoti elektros ar elektroninių prietaisų, jų priedų (pvz., maitinimo šaltinių, laidų) ar sudedamųjų dalių (pvz., baterijų, jei yra) negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Noredami išmesti prietaisus ar jų sudedamąsias dalis (pavyzdžiui, baterijas), pristatykite prietaisą į surinkimo punktą, kur jis bus priimtas nemokamai. Šalinimui taikoma nauja EEJ atliekų direktyvos (2012/19/ES) ir Baterijų ir akumuliatorių direktyvos (2006/66/EB) redakcija. Tinkamas prietaiso šalinimas užkerta kelią gamtinės aplinkos blogėjimui. Informacija apie įrenginių surinkimo vietas išduoda kompetentingos vietos valdžios institucijos. Už netinkamą atliekų šalinimą taikomos sankcijos, numatytos konkrečioje vietovėje galiojančiuose įstatymuose.

ET



Lābi kriipsutad prūgikasti sūmbol nāibat, et kasutuskōlbmatuid elektrivōi elektroonikaseadmeid, nende lisaseadmeid (nāiteks toiteallikad, juhtmed) vōi komponente (nāiteks patareid, kui need on kaasas) ei tohi koos olmejāātmetega āra visata. Seadmete vōi nende komponentide (nāiteks patareide) kōrvaldamiseks toimetage seade kogumispunkti, kus see vōetakse tasuta vastu. Kōrvaldamine toimub vastavalt elektroonikaromude direktiivi uuesti sōnastatud versioonile (2012/19/EL) ning patareide ja akude direktiivile (2006/66/EL). Seadme nōuetekohane kōrvaldamine hoiab āra looduskeskkonna kahjustamise. Teavet seadmete kogumispunktidde kohta annavad vālja pādevad kohalikud asutused. Jāātmete ebaōige kōrvaldamise eest kehtivad karistused, mis on ette nāhtud antud piirkonnas kehtiva seadusega.

UA



Символ перекресленого смітєвого бака означає, що непридатні електричні або електронні пристрої, їхні аксесуари (наприклад, блоки живлення, шнури) або компоненти (наприклад, батареї, якщо вони входять до комплекту) не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Для того, щоб утилізувати пристрій або його компоненти (наприклад, батареї), доставте його в пункт прийому, де його приймуть безкоштовно. Утилізація підпадає під дію нової редакції Директиви про відходи електричного та електронного обладнання (2012/19/ЄС) та Директиви про батареї та акумулятори (2006/66/ЄС). Правильна утилізація пристрою запобігає погіршенню стану навколишнього середовища. Інформація про пункти збору відпрацьованих пристроїв надається компетентними місцевими органами влади. Неправильна утилізація відходів тягне за собою штрафні санкції, передбачені законодавством, чинним на відповідній території.

BG



Символът на зачеркнатата кофа за боклук показва, че негодните за употреба електрически или електронни устройства, техните принадлежности (като захранващи устройства, кабели) или компоненти (например батерии, ако са включени в комплекта) не могат да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. За да изхвърлите устройствата или техните компоненти (например батерии), предайте устройството в пункт за събиране, където ще бъде прието безплатно. Изхвърлянето е предмет на преработената версия на Директивата за ОЕО (2012/19/ЕС) и на Директивата за батериите и акумулаторите (2006/66/ЕС). Правилното изхвърляне на устройството предотвратява влошаването на състоянието на природната среда. Информация за пунктовете за събиране на съоръженията се издава от компетентните местни органи. Неправилното изхвърляне на отпадъците подлежи на санкции, предвидени в действащото в съответния район законодателство.

МК



Прецртаниот симбол на корпата за отпадоци покажува дека неупотребливите електрични или електронски уреди, неговите додатоци (како што се напојувања, кабли) или компоненти (на пример батерии, доколку се вклучени) не можат да се отстранат заедно со отпадот од домаќинството. Со цел да се отстранат уредите или неговите компоненти (на пример, батерии), доставете го уредот до местото за собирање, каде што ќе биде прифатен бесплатно. Отстранувањето е предмет на преработената верзија На Директивата НА ОЕЕ (2012/19/ ЕУ) и Директивата за батерии и акумулатори (2006/66 / ЕЗ). Правилното отстранување на уредот спречува деградација на природната средина. Информациите за местата за собирање на објектите ги издаваат надлежните локални власти. Неправилното отстранување на отпадот подлежи на казни предвидени со законот што важи во дадената област.

PT



O símbolo do caixote do lixo riscado indica que os aparelhos eléctricos ou electrónicos inutilizáveis, os seus acessórios (como fontes de alimentação, cabos) ou componentes (por exemplo, pilhas, se incluídas) não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Para eliminar os aparelhos ou os seus componentes (por exemplo, pilhas), entregue o aparelho no ponto de recolha, onde será aceite gratuitamente. A eliminação está sujeita à versão reformulada da Diretiva REEE (2012/19/UE) e à Diretiva relativa a pilhas e acumuladores (2006/66/CE). A eliminação correta do dispositivo evita a degradação do ambiente natural. As informações sobre os pontos de recolha das instalações são emitidas pelas autoridades locais competentes. A eliminação incorrecta dos resíduos está sujeita às sanções previstas na legislação em vigor na zona em questão.

nenor[®]

Producent:

KGK TREND Sp. z o.o.
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków, Polska.
Wyprodukowano w PRC

Producer:

KGK TREND Sp. z o. o.
Ujastek 5b, 31-752 Cracow, Poland.
Made in PRC

